



---

# Monteringsvejledning (DK)

Montering af fodstøtte adaptor på Cougar

# Mounting instruction (GB)

Mounting adaptor for foot support on the Cougar

# Montageanleitung (D)

Montage der Fußstütze für den Cougar




# Monteringsvejledning

## Montering af fodstøtte adaptor på Cougar

R82®

Cougar kan udstyres med forskellige typer fodstøtter og fodstøttestænger. Følg nedenstående beskrivelse for korrekt montering:

- 1) Beslagene (B) monteres under sædet, foran eller bagved den tværgående stang (A). Alt efter hvor der er plads.
- 2) Placér fodstøttebeslaget i rørene (C) på beslagene (B).
- 3) Montér den enkle/delte fodstøttestang og montér den ønskede fodstøtte/fodplade og Cougar er nu klar til brug.

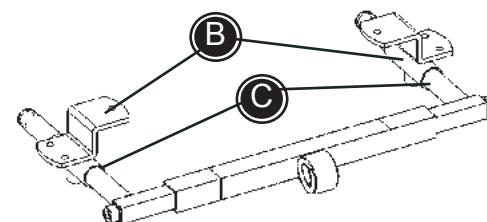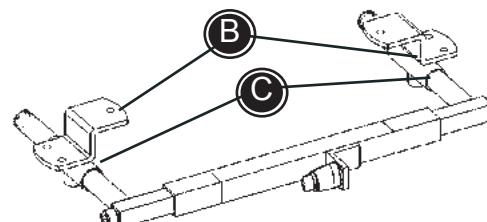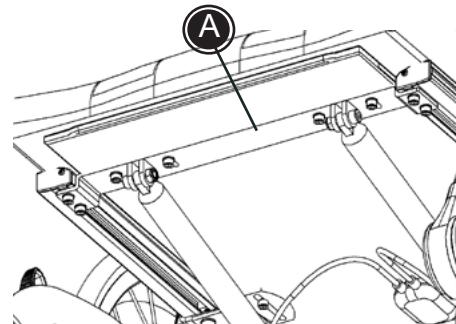




# Mounting instruction

R82<sup>®</sup> C

## Mounting foot support adaptor on the Cougar

The Cougar can be equipped with various foot supports and foot support bars. Follow the description below for correct mounting:

- 1) Dismount the fittings (A) under the seat og mount the new fittings (B).
- 2) Place the footrest mounting i the pipes on the fittings (B).
- 3) Mount the desired foot support bar and foot supports/foot-plate, and the Cougar is ready for use.

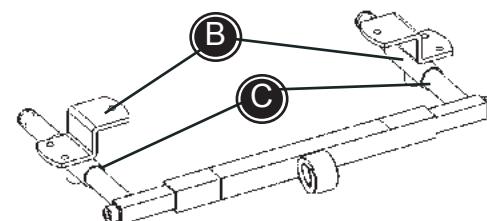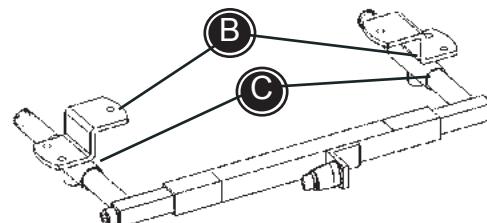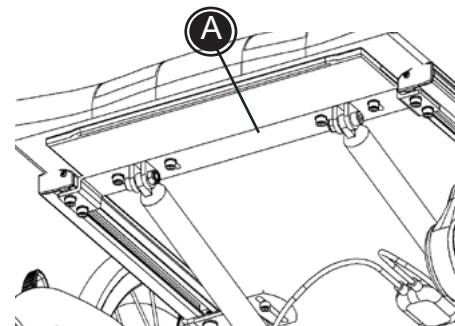

# Montageanleitung

R82®

## Montage der Fußstütze adaptor für den Cougar

Das Cougar kann mit verschiedenen Fußstützen und Halterungen ausgestattet werden. Folgen Sie der Anleitung um diese korrekt zu montieren:

- 1) Demontieren Sie die Beschläge (A) unter dem Sitz und montieren die neuen Beschläge (B).
- 2) Plazieren Sie die Fußstützen Halterung in die Rohre am Beschlag (B).
- 3) Montieren Sie die benötigte Haltestange und Fußstütze und das Cougar ist fertig für den Gebrauch.

