


# Short Instruction

IMM1010\_SI.VER16.2020-09-29

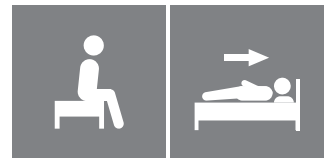

	Article no.	Description	Size (mm)
Nylon Sheet	IM150/200N	TwinSheet4Glide - long	W1470xL2000
	IM150/140N	TwinSheet4Glide - down	W1470xL1400
	IM150/75N	TwinSheet4Glide - top	W1470xL850
	IM85/200	4WayGlide NylonSheet	W850xL2050
	M85/200NS	4WayGlide NylonSheet	W850xL2050
	IM85/200LPL	4WayGlide NylonSheet LPL w/lock	W850xL2050
	IM85/200LPLNS	4WayGlide NylonSheet LPL w/lock	W850xL2050
	IM85/2002LPL	4WayGlide NylonSheet LPL w/2x lock	W850xL2000
	IM85/2003LPL	4WayGlide NylonSheet LPL w/3x lock	W850xL2000
	IM90/200NS	4WayGlide NylonSheet	W900xL2050
IM120/200	4WayGlide NylonSheet	W1200xL2050	
Accessories	IMLWS50	Loop Washing Strap	W50xL500
Set	IM4312	TwinSheet4Glide w/lock. Incl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/200LPLNS	
	IM4314	TwinSheet4Glide w/3x lock. Incl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/2003LPLNS	
	IM4315	TwinSheet4Glide. Incl. IM150/75N + IM150/140N	
	IM4316	TwinSheet4Glide - long w/3x lock. Incl. IM150/200N + IM85/2003LPL	
	IM4317	TwinSheet4Glide - long w/lock. Incl. IM150/200N + IM85/200LPLNS	

# TwinSheet4Glide

**immedia**  
by Etac



**GB:**

**Material:**

Microfibre top side: Polyester  
Middle layer: 80% polyester/20% viscose  
Barrier: Polyurethane Back side: Nylon  
Handles: Polyester Assembling system: Hook & loop.  
**NylonSheet:** Nylon, polyester, polyurethane.

**Never try to repair a product yourself.  
Never use a defective product.**

**Washing instructions:**

Recommended to wash the product before use.  
During washing and drying the Velcro must be assembled or use the "Loop Washing Strap". Shrinks 5%. Do not add fabric conditioner.  
This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

**SV:**

**Material:**

Ovansida i mikrofiber: Polyester  
Mellanlager: 80 % polyester / 20 % viskos  
Barriär: Polyuretan Baksida: Nylon  
Handtag: Polyester Fäste: kardborre.  
**NylonSheet:** Nylon, polyester, polyuretan.

**Försök aldrig reparera en produkt själv.  
Använd aldrig en defekt produkt.**

**Tvättinstruktioner:**

Tvätt rekommenderas före användning.  
Vid tvätt och torkning måste kardborrebandet stängas. Alternativt kan tvättremsan Loop Washing Strap användas.  
Krymper 5 %. Använd inte sköljmedel.  
Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70 % tvättsprit

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

**NO:**

**Materiale:**

Mikrofiber overside: Polyester  
Midtre lag: 80 % polyester / 20 % viskose  
Barriere: Polyuretan Baksida: Nylon  
Håndtak: Polyester Fester: Borrelås.  
**NylonSheet:** Nylon, polyester, polyuretan.

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.  
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

**Vaskeinstruks:**

Det anbefales og vaske produktet før bruk.  
Under vask og tørk må borrelåsen være festet eller Loop Washing Strap brukes. Krymper 5 %. Ikke bruk tøymykner.  
Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 of 9, eller desinfiseres med 70 % konsentrasjon.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

**DA:**

**Materiale:**

Mikrofiberoverside: Polyester  
Mellemlag: 80 % polyester/20 % viskose  
Barriere: Polyurethan Bagside: Nylon  
Håndtag: Polyester Samling: Velcro.  
**NylonSheet:** Nylon, polyester, polyurethan.

**Reparér aldrig selv et produkt.  
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

**Vaskeinstruktion:**

Anbefales, at vaske produktet før brug.  
Under vask og tørring skal velcrodelene være samlet, eller anvend "Loop Washing Strap". Krymper med 5 %. Anvend ikke skyllemiddel.  
Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH niveau mellem 5-9 eller med 70 % desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug.  
Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

**FI:**

**Materiaali:**

Mikrokuitu, päällys: Polyesteriä.  
Keskikerros: 80 % polyesteriä / 20 % viskoosia.  
Sulku: Polyuretaani Alapuoli: Nylonia  
Lenkit: Polyesteriä Kokoamisjärjestelmä: Koukku ja silmukka.

**NylonSheet:** Nylonia, polyesteri, polyuretaani.

**Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.  
Viallista tuotetta ei saa käyttää.**

**Pesuohjeet:**

Tuotteen pesu ennen käyttöä on suositeltavaa.  
Pesun ja kuivatuksen aikana on tarrauhanan oltava kiinni tai on käytettävä Loop Washing Strap -pesusilmukkaa. Kutistuu 5 %. Älä käytä huuhteluainetta.  
Tuote voidaan puhdistaa pesuaineella, joka ei sisällä liuottimia ja jonka pH on 5-9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.  
Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään ja erityisesti pesun jälkeen.  
Tarkista, ettei saumoissa tai kankaassa ole vaurioita.



**DE:**

**Material:**

Oberseite Mikrofaser: Polyester  
Mittelschicht: 80 % polyester/20 % Viskose  
Barrierschicht: Polyurethan  
Griffe: Polyester

Rückseite: Nylon  
Befestigung: Klettverschluss.

**NylonSheet:** Nylon, Polyester, Polyurethan.

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.  
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

**Waschanleitung:**

Das Waschen des Produktes vor der Anwendung wird empfohlen. Zum Waschen und Trocknen muss der Klettverschluss stets geschlossen werden oder benutzen Sie die Loop Washing Strap. Lläuft 5 % ein. Keinen Weichspüler verwenden. Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70%igen Desinfektionslösung gereinigt werden. Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

**NL:**

**Materiaal:**

Microvezel bovenzijde: Polyester  
Binnenmateriaal: 80% polyester/20% viscose  
Barrière: Polyurethaan  
Handvatten: Polyester

Achterzijde: Nylon  
Befestigingssysteem: Haak en lus.

**NylonSheet:** Nylon, polyester, polyurethaan.

**Probeer een product nooit zelf te repareren.  
Gebruik nooit een defect product.**

**Wasinstructies:**

We adviseren om het product voor gebruik te wassen. Tijdens het wassen en drogen dient het klittenband gesloten te zijn of gebruik de Loop Washing Strap. Krimpt 5%. Gebruik geen wasverzachter. Dit product kan worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken. Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen. Controleer op schade aan de naden en de stof.

**FR:**

**Matériaux :**

Côté supérieur en microfibre : Polyester  
Couche du milieu : 80 % polyester/20 % viscose  
Barrière : Polyuréthane  
Poignées : Polyester

Dos : Nylon  
Système d'assemblage : Sangle et boucle.

**NylonSheet :** Nylon, polyester, polyurethane.

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.  
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

**Instructions de lavage :**

Il est recommandé de laver le produit avant la première utilisation. Le Velcro doit être attaché pendant le lavage et le séchage, ou utilisez la sangle « Loop Washing Strap ». Rétrécissement 5 %. N'utilisez pas d'adoucissant. Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %. Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

**IT:**

**Materiale:**

Lato superiore in microfibra: Poliestere  
Strato centrale: 80% poliestere/20% viscosa  
Barriera: Poliuretano  
Impugnatura: Poliestere

Lato posteriore: Nylon  
Sistema di assemblaggio: Gancio e passante.

**NylonSheet:** Nylon, poliestere, polyurethanica.

**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.  
Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

**Istruzioni di lavaggio:**

Si consiglia di lavare il prodotto prima dell'uso. Durante il lavaggio e l'asciugatura, il Velcro deve essere attaccato oppure utilizzare la Loop Washing Strap. Si ritira del 5%. Non usare ammorbidente. Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%. Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio. Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

**ES:**

**Material:**

Parte superior de microfibra: Poliéster  
Capa media: 80 % poliéster / 20 % viscosa  
Barrera: Poliuretano  
Asas: Poliéster

Reverso: Nylon  
Junta: Velcro.

**NylonSheet:** Nailon, poliéster, poliuretano.

**No intente reparar usted mismo el producto.  
No utilice nunca un producto defectuoso.**


**Instrucciones de lavado:**

Se recomienda lavar el producto antes de usarlo. Durante el lavado y secado, el velcro debe estar montado, o use la «Loop Washing Strap» Se encoge un 5 %. No utilizar suavizante. El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70%.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

# Illustrations

## TwinSheet4Glide

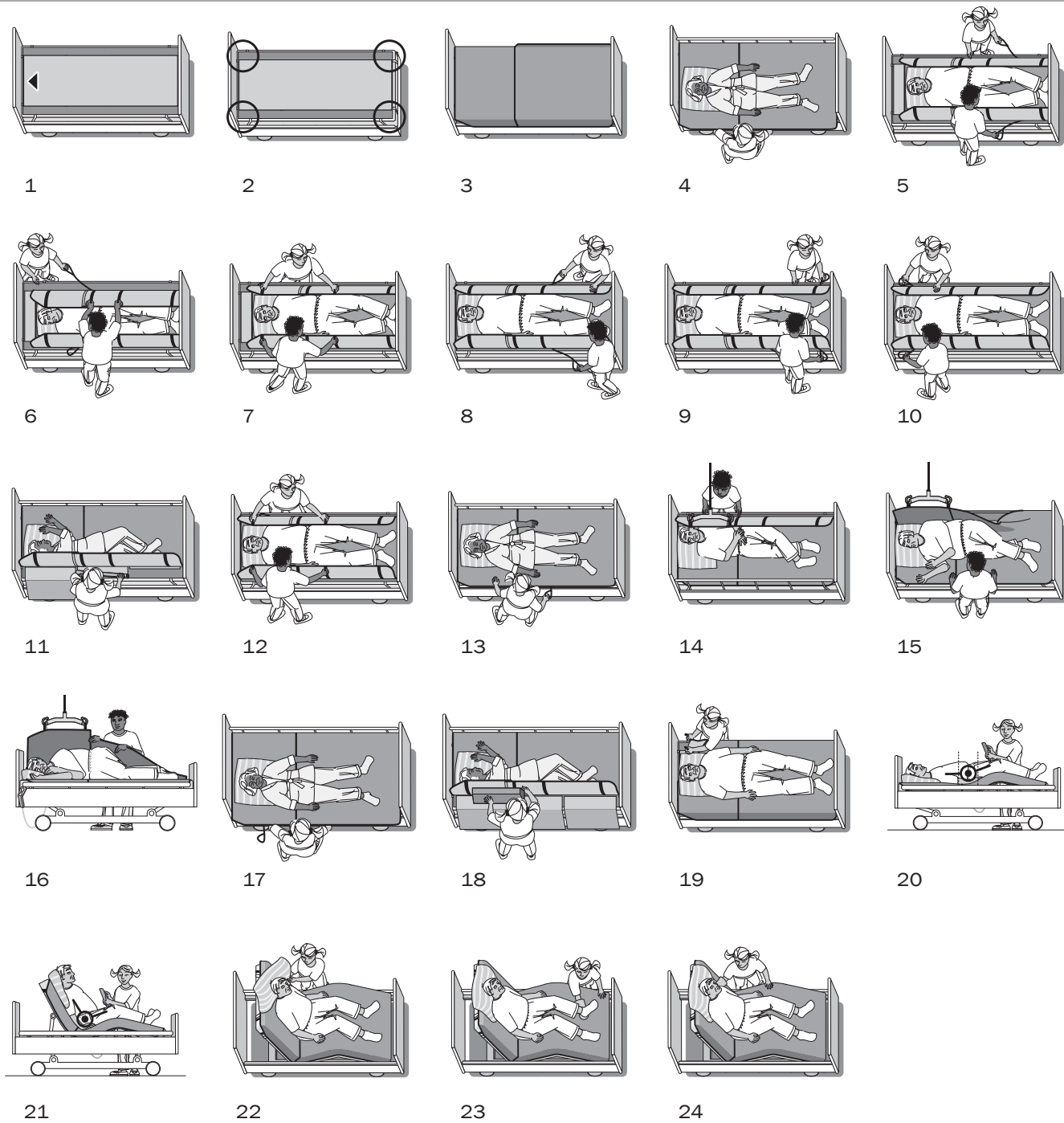

## Check

