



Molift Extension Arm is made for safe and easy mounting of Molift Nomad to the trolley in a rail system. Molift Extension Arm are delivered in two parts: Hook with securing ring (1) and handle (2)

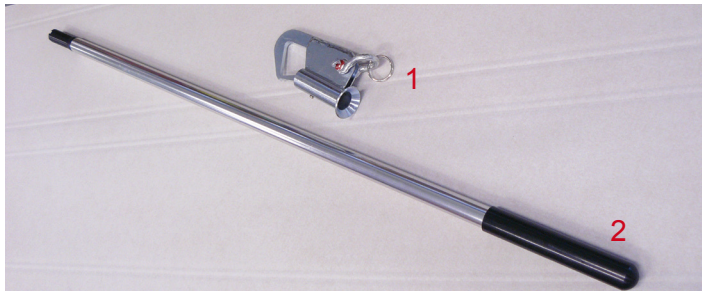

The extension arm can be attached to the lifter in two possible ways. The Molift Nomad can be attached directly on the extension arm hook with the carabine hook (3). The lifter will lose some lifting height.

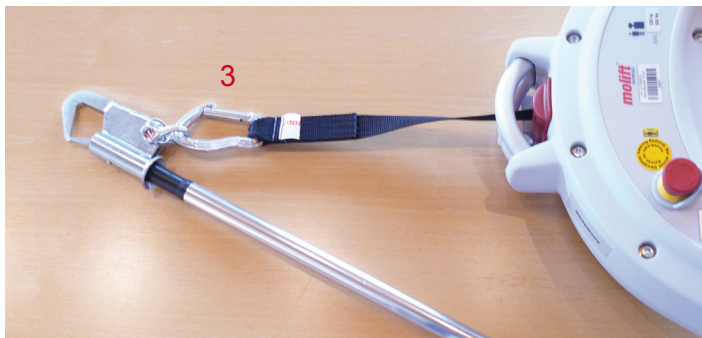

NOTE! The securing ring must be fixed in the hole in the screw head, to secure the screw(7). It is recommended to remove the carabine hook from the belt (4) and attach the lifting belt directly on the attachment hook. In this way the lifter will not lose lifting height.




Remove the lower hook on the extension hook (5).



Thread the lower hook on the lifting belt and place the securing ring (6) on the hook, replace the screw.

The screw is secured by pushing the securing ring (7) through the hole in the screw head.

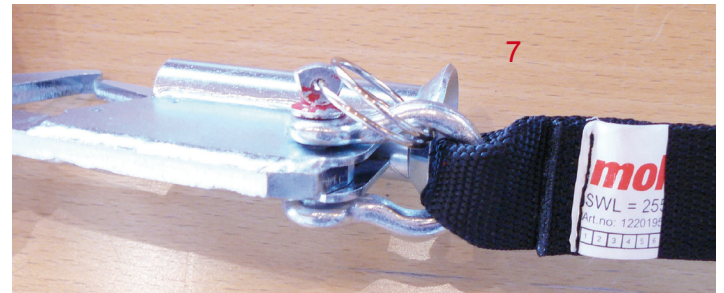

When the screw is secured, the lifter and extension arm are ready for use.



Attach the extension arm handle on the hook and the lifter is now ready to be attached to the rail trolley. Use the handle to open the attachment hook. When the lifter is attached to the trolley, the handle can be removed and stored on a suitable place (i.e. on Molift Cart).



Technical data

Molift Extension Arm

Art.no: 1200004

Weight:

Total: 0,78 kg / 1.72 lbs

Handle: 0,42 kg/0,92 lbs

Length:

900 mm / 35.4 in

Safe working load (SWL)

255 kg / 562 lbs

Art.no: 1200006

Weight:

Total: 0,82 kg / 1.8 lbs

Handle: 0,46 kg/1.01 lbs

Length:

1050 mm / 41.3 in

Safe working load (SWL)


255 kg / 562 lbs

Molift Extension Arm er en forlengelsesarm som er laget spesielt for enkel og trygg montering av Molift Nomad på løpevognen i et skinnesystem.

Molift Extension Arm kommer i to deler: Krok med sikringsring (1) og håndtak (2)



Molift Nomad kan festes på to forskjellige måter. Den kan festes direkte på kroken på armen med karabinkroken (3) som er i løftestroppen på løfteren.

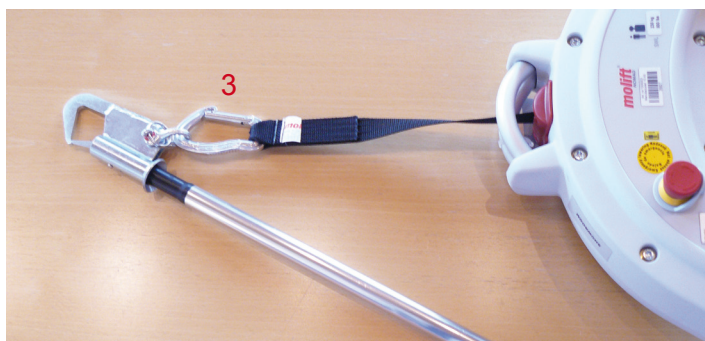


NB! Sikringsringen må festes i hullet på skruen i kroken, slik at denne ikke løsner (7).

Anbefalt festemåte er å fjerne karabinkroken (4) og deretter feste løftebåndet direkte på kroken. Dette gjør at løfteren ikke taper løftehøyde.



Løsne den nederste kroken (5) på krodelen slik at løftebåndet kan festes på den nedre kroken.

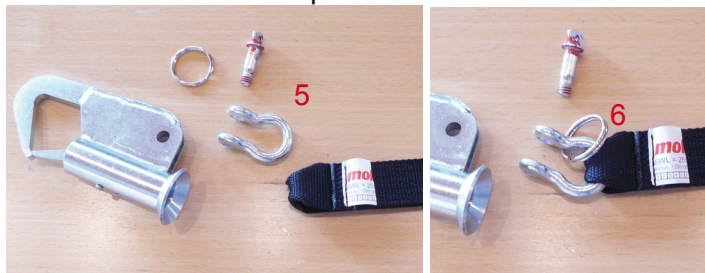

Tre løftebåndet på kroken og sett på sikringsringen (6), og skru på plass skruen.

Skruen sikres ved å tre sikringsringen (7) gjennom hullet i toppen på skruen.



Når skruen er sikret er løfteren og forlengelsesarmen klar til bruk.



Sett på plass håndtaket på forlengelsesarmen, og løfter er nå klar til å festes i løpevogn på skinne.

Bruk håndtaket til å åpne kroken som skal festes i løpevogna. Når løfteren er festet i løpevogna kan håndtaket dras ut fra kroken og lagres på egnet sted (f.eks i Molift Cart) til det er bruk for den neste gang.



Tekniske data

Molift Extension Arm

Art.no: 1200004

Vekt:

Total: 0,78 kg

Handle: 0,42 kg

Lengde:

900 mm

Maks last (SWL)

255 kg

Art.no: 1200006

Vekt:

Total: 0,82 kg

Handle: 0,46 kg

Lengde:

1050 mm

Maks last (SWL)

255 kg