

# Short Instruction

IMM1024c\_SI.VER19.2023-12-05



	Article no.	Description	Size (mm)
	IM4167S	SatinSheet 2Direction Corner midi - small	W900xL1730 (satin W670xL1730)
	IM4126S	SatinSheet 2Direction Corner mini	W850xL2000 (satin W650xL1050)
	IM4157S	SatinSheet 2Direction Corner midi	W850xL2000 (satin W650xL1400)
	IM4158S	Satinsheet 2Direction Corner midi - wide	W1050xL2000 (satin W800xL1400)
	IM4187S	Satinsheet 2Direction Corner midi - double	W1200xL2000 mm (satin W900xL1400)
	IM4107S	SatinSheet 2Direction Corner	W850xL2000 (satin W650xL2000)
	IM4147S	SatinSheet 2Direction Corner wide	W1050xL2000 (satin W800xL2000)
	IM4137S	SatinSheet 2Direction Corner double	W1200xL2000 (satin W900xL2000)
	IM4197S	SatinSheet 2Direction Corner maxi - double	W1800xL2000 (satin W1550xL2000)
<b>Combination:</b>	IM4116S	SatinSheet DrawSheet - mini	W2000xL1000
	IM4118S	SatinSheet DrawSheet - midi	W2000xL1400
	IM4115S	SatinSheet 4Direction - midi	W2000xL1400 (satin W1470xL1400)
	IM4115SH	SatinSheet 4Direction w/handles - midi	W2000xL1400 (satin W1470xL1400)
	IM4121S	SatinSheet 4Direction - maxi	W2000xL2000 (satin W1470xL2000)
	IM4121SH	SatinSheet 4Direction w/handles - maxi	W2000xL2000 (satin W1470xL2000)
	IM4110S	In2Sheet 4Direction w/wings - mini	W850xL900
	IM4110SH	In2Sheet 4Direction w/wings + handles - mini	W850xL900
	IM4140S	In2Sheet 4Direction w/wings - midi	W1200xL1400
	IM4140SH	In2Sheet 4Direction w/wings + handles - midi	W1200xL1400
	IM4117S	SatinSheet 2Direction PillowCase	W700xL600 (satin W700xL600)

**Set:** Combinations, PLEASE see Instruction For Use , catalogue or web.

# SatinSheet 2Direction BaseSheet Corner

**immedia**  
by Etac



**GB:**

**Material:**

Polycotton: 50% cotton/50% polyester  
Satin: 100 % Polyester.

**Never try to repair a product yourself.  
Never use a defective product.**

**Washing instructions:**

Ironing improves the glide effect. Do not use fabric softener. Recommended to wash the product before use. This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution. The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

**SV:**

**Material:**

Poly/bomull: 50% bomull / 50% polyester  
Satin: 100 % Polyester.

**Försök aldrig reparera en produkt själv.  
Använd aldrig en defekt produkt.**

**Tvättinstruktioner:**

Strykning förbättrar glideeffekten. Använd inte sköljmedel. Det rekommenderas att produkten tvättas före användning. Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70 % tvättsprit.

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

**NO:**

**Materiale:**

Polybomull: 50 % bomull, 50 % polyester  
Sateng: 100 % Polyester.

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.  
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

**Vaskeinstruks:**

Stryking gir bedre glideeffekt. Ikke bruk tøymykner. Det anbefales å vaske produktet før bruk. Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 og 9, eller desinfiseres med 70 % konsentrasjon.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

**DA:**

**Materiale:**

Polycotton: 50 % bomuld/50 % polyester  
Satin: 100 % Polyester.

**Reparér aldrig selv et produkt.  
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

**Vaskeinstruktion:**

Strygning forbedrer glideevnen. Tilsæt ikke skyllemiddel. Det anbefales at vaske produktet før brug. Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH-niveau mellem 5-9 eller med 70 % desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

**FI:**

**Materiaali:**

Polypuuvilla: 50 % puuvillaa / 50 % polyesteriä  
Satiini: 100 % Polyesteriä.

**Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.  
Viallista tuotetta ei saa käyttää.**

**Pesuohjeet:**

Silitäminen parantaa liukuominaisuuksia. Älä käytä huuhteluainetta. Tuotteen pesu ennen käyttöä on suositeltavaa. Tuote voidaan puhdistaa pesuaineella, joka ei sisällä liuottimia ja jonka pH on 5-9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.

Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään ja erityisesti pesun jälkeen. Tarkista, ettei saumoissa tai kankaassa ole vaurioita.



**DE:**

**Material:**

Poly-Baumwolle: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester  
Satin: 100 % Polyester.

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.  
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

**Waschanleitung:**

Bügeln verstärkt den Gleiteffekt. Keinen Weichspüler verwenden.  
Es ist empfehlenswert, dass Produkt vor der ersten Nutzung zu waschen.  
Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70%igen Desinfektionslösung gereinigt werden.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

**NL:**

**Material:**

Polykatoen: 50% katoen/50% polyester  
Satin: 100 % Polyester.

**Probeer een product nooit zelf te repareren.  
Gebruik nooit een defect product.**

**Wasinstructies:**

Strijken verbetert het glijeffect. Geen wasverzachter toevoegen.  
We adviseren om het product voor gebruik te wassen.  
Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen. Controleer op schade aan de naden en de stof.

**FR:**

**Matériaux :**

Polycoton : 50 % coton / 50 % polyester  
Satin : 100 % Polyester.

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.  
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

**Instructions de lavage :**

Repasser améliore l'effet de glisse. Ne pas ajouter d'adoucissant.  
Il est conseillé de laver le produit avant son utilisation.  
Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

**IT:**

**Materiale:**

Policotone: 50% cotone, 50% poliestere  
Raso: 100 % Poliestere.

**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.  
Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

**Istruzioni di lavaggio:**

La stiratura migliora l'effetto di scorrimento. Non aggiungere ammorbidente. Si consiglia di lavare il prodotto prima dell'uso.  
Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio. Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

**ES:**

**Material:**

Polialgodón: 50 % algodón / 50 % poliéster.  
Raso: 100 % poliéster.

**No intente reparar usted mismo el producto.  
No utilice nunca un producto defectuoso.**


**Instrucciones de lavado:**

El planchado mejora el efecto deslizante. No utilizar suavizante.  
Se recomienda lavar el producto antes de usarlo.  
El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70 %.


El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

# Illustrations


## Positioning different sizes of SatinSheet BaseSheet 2Direction on a mattress

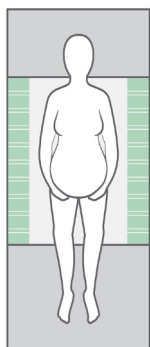


100 x 200 cm

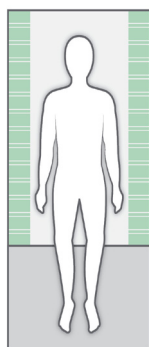


140 x 200 cm

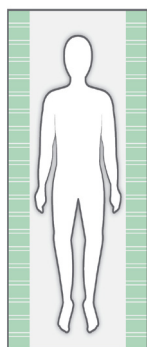

200 x 200 cm

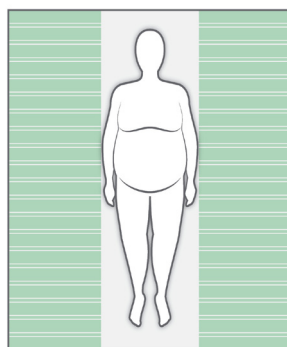


230 x 200 cm

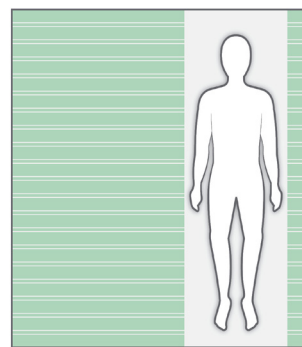

280 x 200 cm

## Positioning different sizes of SatinSheet DrawSheet placed correct on top of SatinSheet 2Direction

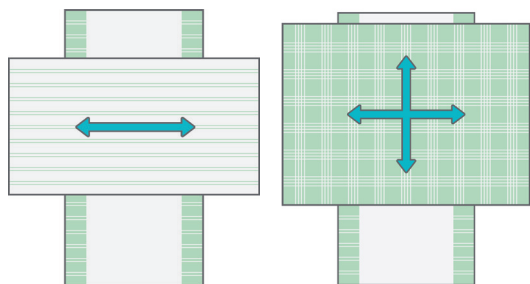


1

2

3

4

## Check

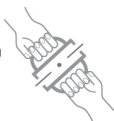

Etac Immedia A/S  
 Parallevej 3  
 DK-8751 Gedved  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

UK responsible person:  
 Etac Ltd, Unit 60  
 Hartlebury Trading Estate  
 Hartlebury Kidderminster DY10 4JD



2Direction  
 BaseSheet

**etac**<sup>®</sup>  
 Creating Possibilities