

Short Instruction


IMM1025B SI.VER15.2023-01-23



	Article no.	Description	Size (mm)
	IM4110S	In2Sheet 4Direction w/wings - mini	W850xL900
	IM4110SH	In2Sheet 4Direction w/wings + handles - mini	W850xL900
	IM4140S	In2Sheet 4Direction w/wings - midi	W1200xL1400
	IM4140SH	In2Sheet 4Direction w/wings + handles - midi	W1200xL1400
Combinations:	IM4133S	SatinSheet 2Direction mini - small	W1950xL1050 (satin W600xL1050)
	IM4108S	SatinSheet 2Direction mini	W1950xL1050 (satin W700xL1050)
	IM4175S	SatinSheet 2Direction mini - wide	W2300xL1050 (satin W850xL1050)
	IM4178S	SatinSheet 2Direction mini - double	W2300xL1050 (satin W960xL1050)
	IM4119S	SatinSheet 2Direction midi - small	W2000xL1400 (satin W600xL1400)
	IM4113S	SatinSheet 2Direction midi	W2000xL1400 (satin W700xL1400)
	IM4176S	SatinSheet 2Direction midi - wide	W2300xL1400 (satin W850xL1400)
	IM4179S	SatinSheet 2Direction midi - double	W2300xL1400 (satin W960xL1400)
	IM4181S	SatinSheet 2Direction maxi - small	W2000xL2000 (satin W600xL2000)
	IM4114S	SatinSheet 2Direction maxi	W2000xL2000 (satin W700xL2000)
	IM4177S	SatinSheet 2Direction maxi - wide	W2300xL2000 (satin W850xL2000)
	IM4180S	SatinSheet 2Direction maxi - double	W2300xL2000 (satin W960xL2000)
	IM4122S	SatinSheet 2Direction 180 cm bed	W2800xL2000 (satin W600xL2000)
	IM4112S	SatinSheet 2Direction Fit	W900xL2000 (satin W700xL2000)
	IM4142S	SatinSheet 2Direction Elastic Fit	W900xL2000 (satin W700xL2000)
	IM4157S	SatinSheet 2Direction Corner - midi	W850xL2000 (satin W650xL1400)
	IM4107S	SatinSheet 2Direction Corner	W850xL2000 (satin W650xL2000)
	IM4147S	SatinSheet 2Direction Corner - wide	W1050xL2000 (satin W800xL2000)
	IM4137S	SatinSheet 2Direction Corner - double	W1200xL2000 (satin W900xL2000)
Set:	IM4210S	SatinSheet In2Sheet mini set	Incl. IM4108S + IM4110S
	IM4209S	SatinSheet In2Sheet midi mini set	Incl. IM4119S + IM4110S

SatinSheet In2Sheet 4Direction

immedia
by Etac

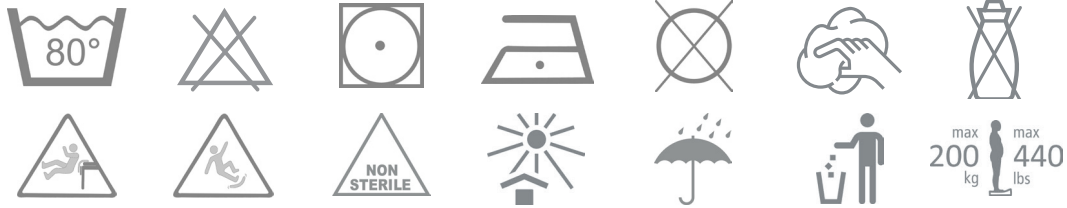

GB:

Material:

Microfibre top side: Polyester
Middle layer: 65% polyester/35% viscose
Wings: 50% cotton/50% polyester

Barrier: Polyurethane
Glide area: Polyester
Handles: Nylon.

Washing instructions:

Ironing improves the glide effect. Do not use fabric softener.
Recommended to wash the product before use.
This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.
The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

**Never try to repair a product yourself.
Never use a defective product.**

SV:

Material:

Ovansida i mikrofiber: Polyester
Mellanlager: 65 % polyester/35 % viskos
Vingar: 50 % bomull/50 % polyester

Barriär: Polyuretan
Glideområde: Polyester
Handtag: Nylon.

Tvättinstruktioner:

Strykning förbättrar glideeffekten. Använd inte sköljmedel.
Det rekommenderas att produkten tvättas före användning.
Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70 % tvättsprit.

**Försök aldrig reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt.**

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

NO:

Materiale:

Mikrofiber overside: Polyester
Mellomlag: 65 % polyester/35 % viskose
Vinger: 50 % bomull/50 % polyester

Barriere: Polyuretan
Glideområde: Polyester
Håndtak: Nylon.

Vaskeinstruks:

Stryking gir bedre glideeffekt.
Ikke bruk tøyemykner.
Det anbefales å vaske produktet før bruk.
Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 og 9, eller desinfiseres med 70 % konsentrasjon.

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

DA:

Materiale:

Mikrofiberoverside: Polyester
Mellemlag: 65% polyester/35% viskose
Vinger: 50% bomull/50% polyester

Barriere: Polyurethan
Glideområde: Polyester
Håndtag: Nylon.

Vaskeinstruktion:

Strykning forbedrer glideevnen. Tilsæt ikke skyllemiddel.
Det anbefales at vaske produktet før brug.
Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH-niveau mellem 5-9 eller med 70 % desinfektionsopløsning.

**Reparér aldrig selv et produkt.
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug.
Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

FI:

Materiaali:

Mikrokuitu, päällyks: Polyesteriä
Keskikerros: 65% polyesteriä/35% viskoosia
Siivet: 50% puuvillaa/50% polyesteriä

Sulku: Polyuretaania
Liukualue: Polyesteriä
Lenkit: Nylonia.

Pesuohteet:

Siilitäminen parantaa liukuominaisuuksia. Älä käytä huuhteluainetta
Tuotteen pesu ennen käyttöä on suositeltavaa.
Tuote voidaan puhdistaa pesuaineella, joka ei sisällä liuottimia ja jonka pH on 5-9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.

**Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.
Viallista tuotetta ei saa käyttää.**

Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään ja erityisesti pesun jälkeen. Tarkista, ettei saumoissa tai kankaassa ole vaurioita.



DE:

Material:

Oberseite Mikrofaser: Polyester
Mittlere Schicht: 65% Polyester, 35% Viskose
Flügel: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Barriere: Polyurethan
Gleitbereich: Polyester
Griffe: Nylon.

Waschanleitung:

Bügeln verstärkt den Gleiteffekt. Keinen Weichspüler verwenden.
Es ist empfehlenswert, dass Produkt vor der ersten Nutzung zu waschen.
Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70%igen Desinfektionslösung gereinigt werden.

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

NL:

Materiaal:

Microvezel bovenzijde: Polyester
Binnenmateriaal: 65% polyester, 35% viscose
Vleugels: 50% katoen, 50% polyester

Barrière: Polyurethaan
Glijdeel: Polyester
Handvatten: Nylon.

Wasinstructies:

Strijken verbetert het glijeffect. Geen wasverzachter toevoegen.
We adviseren om het product voor gebruik te wassen.
Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.

**Probeer een product nooit zelf te repareren.
Gebruik nooit een defect product.**

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen. Controleer op schade aan de naden en de stof.

FR:

Matériaux :

Côté supérieur en microfibre : Polyester
Couche du milieu : 65 % polyester, 35 % viscose
Ailles : 50 % coton, 50 % polyester

Barrière : Polyuréthane
Zone de glissement :
Polyester
Poignées : Nylon.

Instructions de lavage :

Repasser améliore l'effet de glisse. Ne pas ajouter d'adoucissant.
Il est conseillé de laver le produit avant son utilisation.
Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

IT:

Materiale:

Lato superiore in microfibra: Poliester
Strato centrale: 65% poliester, 35% viscosa
Lembi: 50% cotone, 50% poliester

Barriera: Poliuretano
Area scorrevole:
Poliester
Impugnatura: Nylon.

Istruzioni di lavaggio:

La stiratura migliora l'effetto di scorrimento. Non aggiungere ammorbidente. Si consiglia di lavare il prodotto prima dell'uso.
Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.
Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio. Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

ES:

Material:

Parte superior de microfibra: Poliéster
Capa intermedia: 65 % poliéster, 35 % viscosa
Alas: 50 % algodón, 50 % poliéster

Barrera: Poliuretano
Área deslizante:
Poliéster
Asas: Nailon.

Instrucciones de lavado:


El planchado mejora el efecto deslizante. No utilizar suavizante.
Se recomienda lavar el producto antes de usarlo.
El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70 %.

**No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.**


El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

Illustrations


Positioning different sizes of SatinSheet BaseSheet 2Direction on a mattress

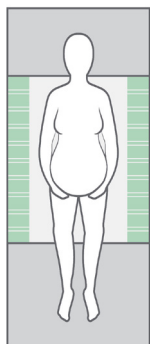


100 x 200 cm

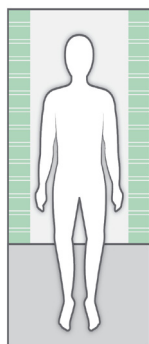


140 x 200 cm

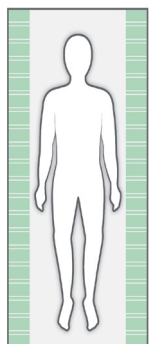

200 x 200 cm


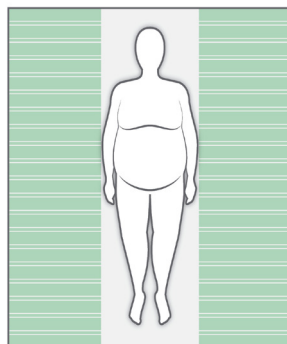


230 x 200 cm

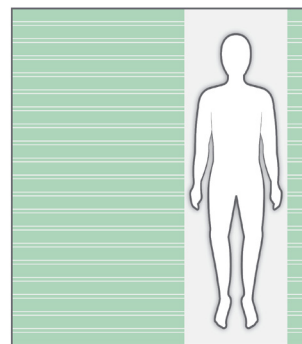

280 x 200 cm

Positioning different sizes of SatinSheet DrawSheet placed correct on top of SatinSheet 2Direction

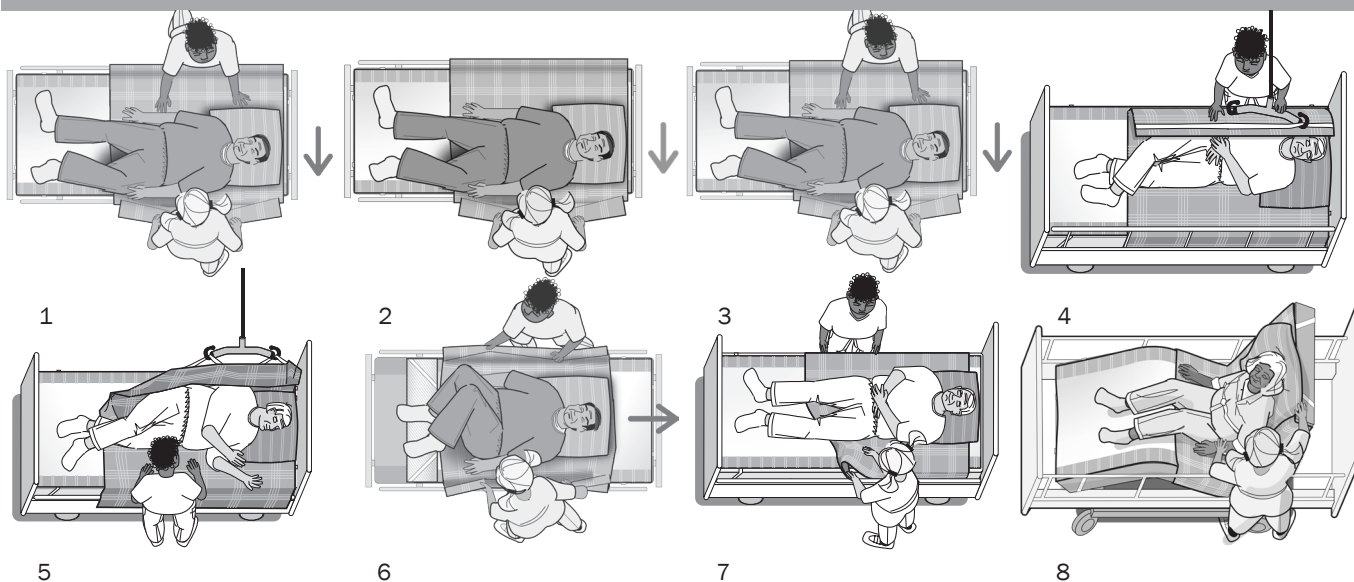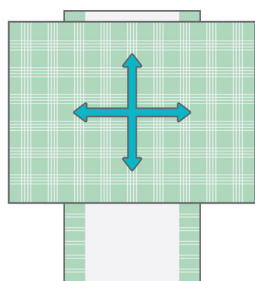

Check



Etac Immedia A/S
 Parallevej 3
 DK-8751 Gedved
www.etac.com

UK responsible person:
 Etac Ltd, Unit 60
 Hartlebury Trading Estate
 Hartlebury Kidderminster DY10 4JD



In2Sheet
 4Direction

etac[®]
 Creating Possibilities