

Short Instruction


IMM1065_SI.VER14.2023-09-27



Article no.	Description	Size (mm)	Quantity
IM300	MultiGlide Single Patient Use lateral XXXL	W730xL1900	5 boxes of 10 pieces
IM301	MultiGlide Single Patient Use lateral XXL	W730xL1450	5 boxes of 10 pieces
IM302	MultiGlide Single Patient Use vertical XXL	W1300xL900	5 boxes of 10 pieces
IM303	MultiGlide Single Patient Use vertical L	W1200xL730	5 boxes of 10 pieces
IM304	MultiGlide Single Patient Use open L	W2000xL850	5 boxes of 20 pieces
IM305	MultiGlide Single Patient Use open M	W1450xL1000	5 boxes of 20 pieces
IM306	MultiGlide Single Patient Use open S (2 pcs. in a bag)	W1000xL1000	5 boxes of 10 pieces
IM321	MultiGlide Single Patient Use Dispenser	W310xL400	1 box of 10 pieces
IM1933	MultiGlide SPU-Roll	W1470xL10000	1 roll

MultiGlide Single Patient Use

immedia
by Etac

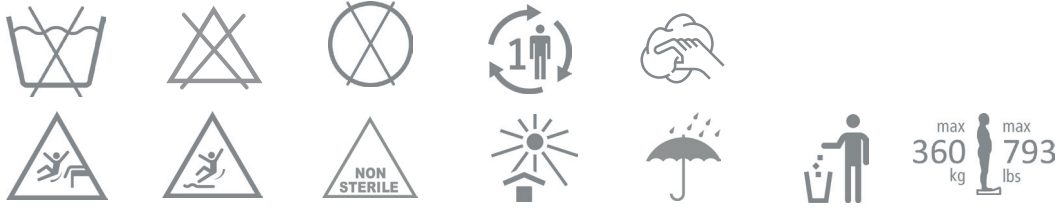

GB:

Material:
Nylon.

Low friction on both inner and outer surfaces.

**Never try to repair a product yourself.
Never use a defective product.**

Washing instructions:

Cannot be washed.
This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5 and 9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

SV:

Material:
Nylon.

Låg friktion på både in- och utsidan.

**Försök aldrig reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt.**

Tvättinstruktioner:

Går inte att tvätta.
Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5–9 eller med 70 % tvättspirit.

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

NO:

Materiale:
Nylon.

Lav friksjon på både ytre og indre overflate.

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

Vaskeinstruks:

Kan ikke vaskes.
Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5 og 9, eller desinfiseres med 70 % konsentrasjon.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

DA:

Materiale:
Nylon.

Lav friktion på både yder- og inderside.

**Reparér aldrig selv et produkt.
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

Vaskeinstruktion:

Kan ikke vaskes.
Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH-niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

FI:

Materiaali:
Nylonia.


Alhainen kitka sekä sisä- että ulkopinnalla.

**Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.
Viallista tuotetta ei saa käyttää.**

Pesuohjeet:

Ei voi pestä.
Tuote voidaan puhdistaa pesuaineella, joka ei sisällä liuottimia ja jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.

Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään. Tarkista, ettei saumoissa tai kankaassa ole vaurioita.

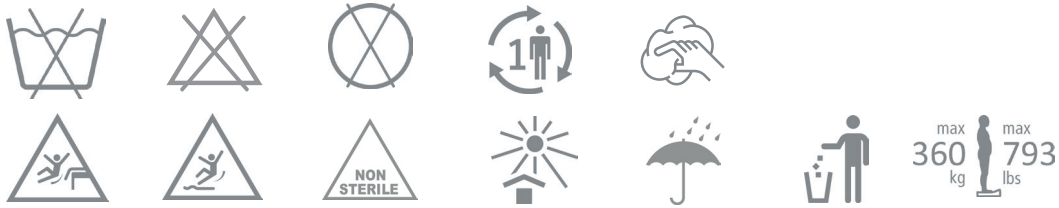

DE:

Material:
Nylon.

Dann ist die Reibung innen und außen gering.

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

Waschanleitung:

Das Produkt kann nicht gewaschen werden.
Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70% - Desinfektionslösung gereinigt werden.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

NL:

Material:
Nylon.

Lage wrijving op de binnen- en buitenoppervlakken.

**Probeer een product nooit zelf te repareren.
Gebruik nooit een defect product.**

Wasinstructies:

Kan niet worden gewassen.
Dit product kan worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik. Controleer de naden en de stof op schade.

FR:

Matériaux :
Nylon.

Faible friction sur les deux surfaces intérieure et extérieure.

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

Instructions de lavage :

Ne peut pas être lavé.
Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

IT:

Materiale:
Nylon.

Attrito basso sia sulle superfici interne che su quelle esterne.

**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.
Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

Istruzioni di lavaggio:

Non può essere lavato.
Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato. Controllare che le cuciture e il tessuto non siano danneggiati.

ES:

Materiales:
Nailon.

Fricción baja en las superficies interior y exterior.


**No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.**

Instrucciones de limpieza:


No puede lavarse.
El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70 %.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

Illustrations

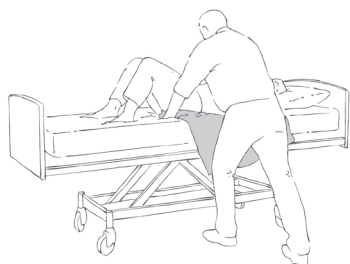


1

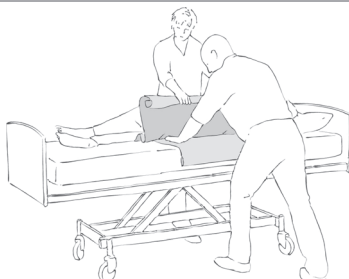

2



3

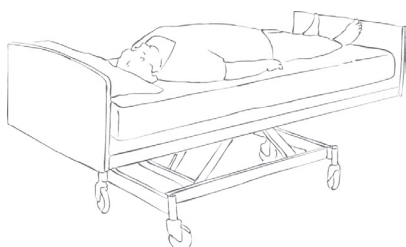


4




5



6

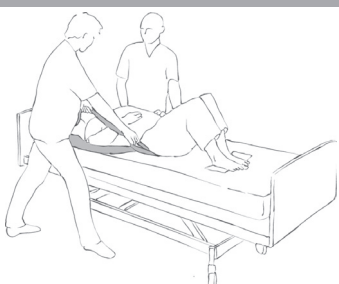


7

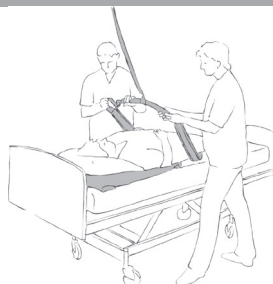


8




9

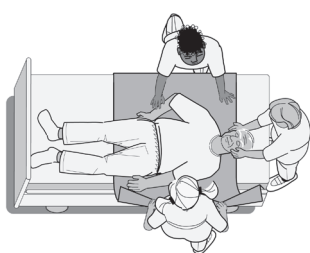


10

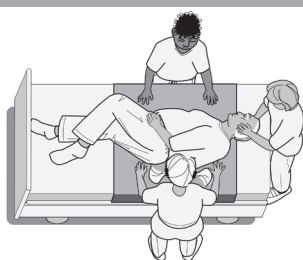

11

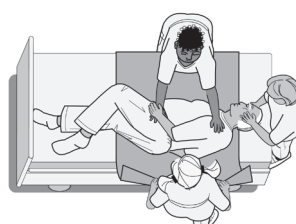

12

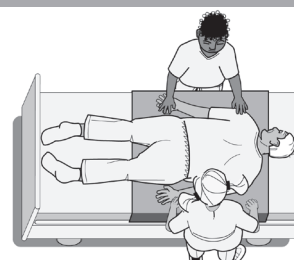

13

Check



Etac Immedia A/S
 Parallevej 3
 DK-8751 Gedved
www.etac.com

UK responsible person:
 Etac Ltd, Unit 60
 Hartlebury Trading Estate
 Hartlebury Kidderminster DY10 4JD



MultiGlide SPU

etac[®]
 Creating Possibilities