

Short Instruction




IMM1067_SI.VER6 2023-07-28

| Article no. | Description | Size (mm) | Article no. | Description | Size (mm) |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|
| IM15100 | LeanOnMe Mini + Soft-Touch Cover | W150xL300 mm | IM10500 | Soft-Touch Cover for IM10100 | W150xL300 mm |
| IM15101 | LeanOnMe Basic XS +Soft-Touch Cover | W300xL400 mm | IM10501 | Soft-Touch Cover for IM10101 | W300xL400 mm |
| IM15102 | LeanOnMe Basic S + Soft-Touch Cover | W400xL600 mm | IM10502 | Soft-Touch Cover for IM10102 | W400xL600 mm |
| IM15103 | LeanOnMe Basic M + Soft-Touch Cover | W500xL700 mm | IM10503 | Soft-Touch Cover for IM10103 | W500xL700 mm |
| IM15104 | LeanOnMe Basic L + Soft-Touch Cover | W250xL900 mm | IM10504 | Soft-Touch Cover for IM10104 | W250xL900 mm |
| IM15105 | LeanOnMe Basic LW + Soft-Touch Cover | W450xL800 mm | IM10505 | Soft-Touch Cover for IM10105 | W450xL800 mm |
| IM15106 | LeanOnMe Basic XL + Soft-Touch Cover | W550xL900 mm | IM10506 | Soft-Touch Cover for IM10106 | W550xL900 mm |
| IM15107 | LeanOnMe Wing + Soft-Touch Cover | W450xL800 mm | IM10507 | Soft-Touch Cover for IM10107 | W450xL800 mm |
| IM15108 | LeanOnMe Channel + Soft-Touch Cover | W750xL750 mm | IM10508 | Soft-Touch Cover for IM10108 | W750xL750 mm |
| IM15110 | LeanOnMe Ring S + Soft-Touch Cover | Ø400 mm | IM10510 | Soft-Touch Cover for IM10110 | Ø400 mm |
| IM15111 | LeanOnMe Ring M + Soft-Touch Cover | Ø500 mm | IM10511 | Soft-Touch Cover for IM10111 | Ø500 mm |
| IM15112 | LeanOnMe Roll S + Soft-Touch Cover | W330xL1000 mm | IM10512 | Soft-Touch Cover for IM10112 | W330xL1000 mm |
| IM15113 | LeanOnMe Roll L + Soft-Touch Cover | W330xL2300 mm | IM10513 | Soft-Touch Cover for IM10113 | W330xL2300 mm |
| IM16100 | LeanOnMe Mini + Hygienic Cover | W150xL300 mm | IM10600 | Hygienic Cover for IM10100 | W150xL300 mm |
| IM16101 | LeanOnMe Basic XS + Hygienic Cover | W300xL400 mm | IM10601 | Hygienic Cover for IM10101 | W300xL400 mm |
| IM16102 | LeanOnMe Basic S + Hygienic Cover | W400xL600 mm | IM10602 | Hygienic Cover for IM10102 | W400xL600 mm |
| IM16103 | LeanOnMe Basic M + Hygienic Cover | W500xL700 mm | IM10603 | Hygienic Cover for IM10103 | W500xL700 mm |
| IM16104 | LeanOnMe Basic L + Hygienic Cover | W250xL900 mm | IM10604 | Hygienic Cover for IM10104 | W250xL900 mm |
| IM16105 | LeanOnMe Basic LW + Hygienic Cover | W450xL800 mm | IM10605 | Hygienic Cover for IM10105 | W450xL800 mm |
| IM16106 | LeanOnMe Basic XL + Hygienic Cover | W550xL900 mm | IM10606 | Hygienic Cover for IM10106 | W550xL900 mm |
| IM16107 | LeanOnMe Wing + Hygienic Cover | W450xL800 mm | IM10607 | Hygienic Cover for IM10107 | W450xL800 mm |
| IM16108 | LeanOnMe Channel + Hygienic Cover | W750xL750 mm | IM10608 | Hygienic Cover for IM10108 | W750xL750 mm |
| IM16110 | LeanOnMe Ring S + Hygienic Cover | Ø400 mm | IM10610 | Hygienic Cover for IM10110 | Ø400 mm |
| IM16111 | LeanOnMe Ring M + Hygienic Cover | Ø500 mm | IM10611 | Hygienic Cover for IM10111 | Ø500 mm |
| IM16112 | LeanOnMe Roll S + Hygienic Cover | W330xL1000 mm | IM10612 | Hygienic Cover for IM10112 | W330xL1000 mm |
| IM16113 | LeanOnMe Roll L + Hygienic Cover | W330xL2300 mm | IM10613 | Hygienic Cover for IM10113 | W330xL2300 mm |

LeanOnMe -
Positioning cushions

immedia
by Etac

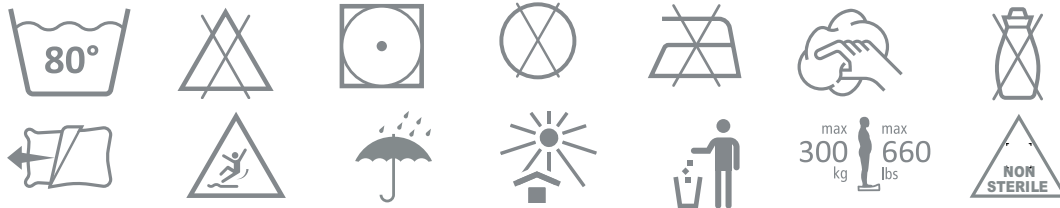

GB:

Material:

Cover: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modal (TEN-CEL™)
Back: 100% polyester + Polyurethane membrane
Innercushion: 95/5% Polyester/Elasthane
Filling: Polyurethane foam, EPP-beans
This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5 and 9, or a 70% disinfection solution
Never try to repair a product yourself.
Never use a defective product.

Washing instructions:

Recommended to wash the product before use.
Remove innercushion before washing
Do not use fabric softener
Do not over dry
Do not drain dry
Shake thoroughly after drying

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

SV:

Material:

Överdrag: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modal (TEN-CEL™)
Baksida: 100% Polyester + Polyuretanmembran
Innerydyna: 95/5% Polyester/Elasthane
Fyllning: Polyuretanskum, EPP-kulor
Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättspirit
Försök aldrig reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt

Tvättinstruktioner:

Tvätt rekommenderas före användning.
Ta bort innerkudden före tvätt
Använd inte sköjmedel
Torka inte för länge
Låt inte dropporka
Skaka noggrant efter torkning

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

NO:

Materiale:

Trekk: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive) 25% Modal (TENCEL™)
Bakside: 100% Polyester + Polyuretanmembran
Innerpute: 95/5% Polyester/Elasthane
Fyll: polyuretanskum, EPP-bønner

Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.

Vaskeinstruks:

Det anbefales og vaske produktet før bruk.
Fjern innerputen før vask
Ikke bruk tøymykner.
Låt inte torka for længe
Låt inte dropporkay
Rist godt etter tørking

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

DA:

Materiale:

Betræk: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive) 25% Modal (TEN-CEL™)
Bagside: 100% Polyester + Polyuretan membran
Inderpude: 95/5% Polyester/Elasthane
Fyld: polyuretanskum, EPP-bønner

Reparér aldrig selv et produkt.
Et defekt produkt må ikke anvendes.

Vaskeinstruktion:

Anbefales, at vaske produktet før brug.
Fjern inderpuden før vask
Anvend ikke skyllemiddel.
Lad ikke tørre for længe
Må ikke dryptørre
Ryst grundigt efter tørring

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

FI:

Materiaali:

Pehmeä suojus: 75 % lyocel (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modaali (TENCEL™)
Takaosa: 100 % Polyesteriä + Polyuretaanikalvoe
Sisätynny: 95/5% Polyester/Elasthane
Täyte: Polyuretaanivaahdot, EPP-pavut

Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.
Viallista tuotetta ei saa käyttää.

Pesuhjeet:

Tuotteen pesu ennen käyttöä on suositeltavaa.
Irrota sisätynny ennen pesua.
Älä käytä huuhteluainetta.
Älä kuivaa liikaa
Älä valuta kuivaksi
Ravista huolellisesti kuivauksen jälkeen.

Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään ja erityisesti pesun jälkeen. Tarkista, ettei saumoissa tai kankaassa ole vaurioita.



DE:

Material:

Bezug: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitiv), 25% Modal (TEN-CEL™)

Rückseite: 100 % Polyester + Polyurethan-Membran

Innenkissen: 95/5% Polyester/Elasthane

Füllung: Polyuretanschaum, EPP-Perlen

Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.

Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.

Waschanleitung:

Das Waschen des Produktes vor der Anwendung wird empfohlen.

Innenkissen vor dem Waschen herausnehmen

Keinen Weichspüler verwenden.

Nicht über trocknen.

Nicht lufttrocknen lassen.

Nach dem Trocknen gründlich schütteln

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

NL:

Materiaal:

Zachte hoes: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ gevoelig), 25% Modal (TENCEL™)

Rugschaal: 100% Polyester + Polyurethaanmembraan

Binnenkussen: 95/5% Polyester/Elasthane

Vulling: Polyuretaanschuim, EPP-bonen

Probeer een product nooit zelf te repareren.

Gebruik nooit een defect product.

Wasinstructies:

We adviseren om het product voor gebruik te wassen.

Verwijder binnenkussen voor het wassen

Gebruik geen wasverzachter

Niet te hard laten drogen

Niet nat ophangen

Niet nat ophangen

Goed schudden na het drogen

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen. Controleer op schade aan de naden en de stof.

FR:

Matériaux :

Housse douce au toucher: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensible), 25% Modal (TENCEL™)

Dos : 100 % polyester + membrane en polyuréthane

Coussin intérieur: 95/5% Polyester/Elasthane

Rembourrage : mousse de polyuréthane, particules EPP

N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.

N'utilisez jamais un produit défectueux.

Instructions de lavage :

Il est recommandé de laver le produit avant la première utilisation.

Retirer le coussin intérieur avant le lavage

Ne pas utiliser d'adoucissant

Ne pas sécher excessivement

Ne pas laisser sécher à l'air libre

Secouer vigoureusement après le séchage

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

IT:

Materiale:

Rivestimento morbido: 75% Lyocell (TENCEL™ + SMARTCEL™ sensitive), 25% Modal (TENCEL™)

Schienale: 100% poliestere + membrana in poliuretano

Cuscino interno: 95/5% Polyester/Elasthane

Imbottitura: Schiuma di poliuretano, grani di PPE

Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.

Non utilizzare mai un prodotto difettoso.

Istruzioni di lavaggio:

Si consiglia di lavare il prodotto prima dell'uso.

Rimuovere la fodera prima di lavare

Non usare ammorbidente

Non asciugare eccessivamente

Non asciugare a secco

Agitare accuratamente dopo l'asciugatura

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio.

Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

ES:

Materiales:

Funda de tacto suave: 75% Lyocell (sensible a TENCEL™ + SMARTCEL™), 25% Modal (TENCEL™)

Detrás 100% poliéster + membrana de poliuretano

Cojín interior: 95/5% Polyester/Elasthane

Llenado: Espuma de poliuretano, judías de EPP

No intente reparar usted mismo el producto.

No utilice nunca un producto defectuoso.

Instrucciones de limpieza:

Se recomienda lavar el producto antes de usarlo.

Retire el cojín interior antes del lavado

No utilice suavizante


No secar en exceso

No escurrir hasta que se seque

Agite bien después del secado

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

Illustrations

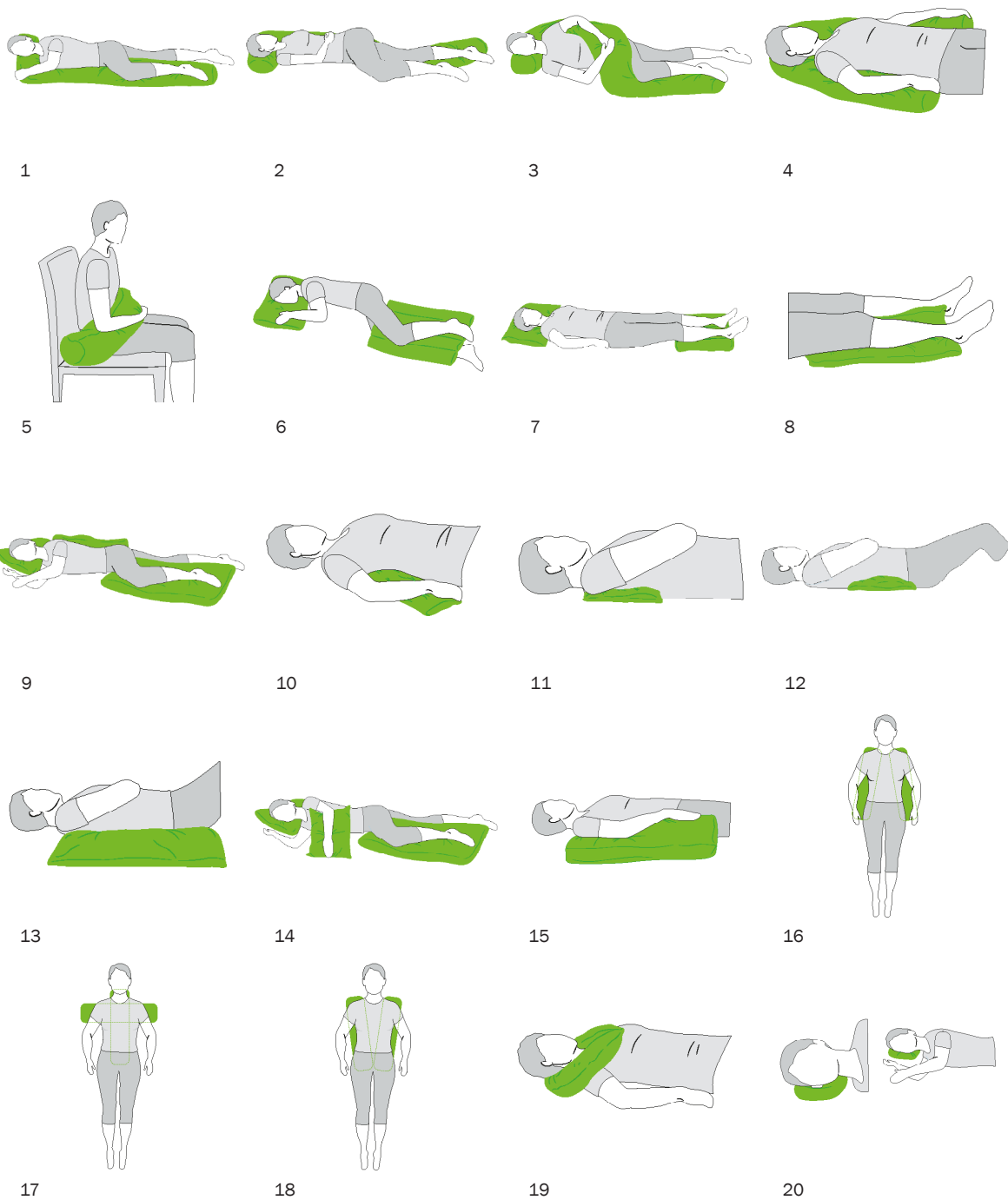

Check



Etac Immedia A/S
 Parallevej 3
 DK-8751 Gedved
 www.etac.com

UK responsible person:
 Etac Ltd, Unit 60
 Hartlebury Trading Estate
 Hartlebury Kidderminster DY10 4JD

See www.etac.com



etac[®]
 Creating Possibilities