


Etac manuell rullstol

Rekonditioneringsanvisning



74148Q 2020-12-15

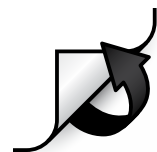

Återanvändning

Etacs rullstolar kan återanvändas under deras hela livslängd. För aktuell livslängd, se manual för respektive rullstol på www.etac.com.

Tvätt

- Rengör chassit med rengöringsmedel utan slipmedel som har pH-värde mellan 5-9, eller med 70% desinfektionssprit. Skölj och torka.
- Rengör hjulen från hårstrån och avlagringar m.m.
- Rullstolens chassi (ej huvudstödsbåge Etac Prio) och fast monterade klädselar samt tillbehör utan textilklädsel kan tvättas i maskintvätt alt. diskabinett i 65° C upp till 10 minuter. Löstagbara textilier, t.ex. ryggöverdrag, samt tillbehör med textilklädsel tvättas enligt separat anvisning.
- Vid tvätt i kabinett/diskdesinfektor ska:
 - Kryssfällda rullstolar fällas ihop och stå på alla fyra hjulen.
 - Fastramstolar stå på alla fyra hjulen med ryggchassit uppfällt.
 - Benstöd monteras av (kan dock tvättas tillsammans med stolen).
 - Batteripaket och ställdon (Etac Prio Eltilt) demonteras.
- Spola ej med högtryckstvätt direkt på lager (fig 1).
- Spola ej med högtryckstvätt från nära håll på klädseln.
- Spola ej med högtryckstvätt på elektriska komponenter (Etac Prio Eltilt).
- Elektriska komponenter (Etac Prio eltilt) kan rengöras med borste och vatten. Max temp 20°. Interna kablar måste vara anslutna. Dra tillbaka ställdonet till innersta läget så att inte kolvstången avfettas. Starka lösningsmedel, basiska eller alkaliska vätskor får inte användas.
- Tag bort påklistrade dekaler och lappar. Observera att Etacs märkningar skall vara kvar.
- Textilier tvättas enligt separat märkning på textilen. Skum tvättas enligt märkning på skummet. Finns ingen märkning skall det inte tvättas utan vid behov bytas ut.

Tork

- Rullstolens chassi och fast monterade klädselar samt tillbehör utan textilklädsel kan torkas i diskabinett i:
 1. 70°C upp till 10 min.
 2. 80°C upp till 2 min.
 3. 85°C upp till 30 sek.
- Textilier som ej kan torktumlas kan torkas i torkskåp i 50° upp till 10 min.
- Rullstol med kryssram och Etac Prio har dräneringshål och skall stå på alla fyra hjul i utfällt läge under torkning (fig 2). Etac Prio tillas bakåt.
- Rullstol med fast ram skall läggas ner bakåt för dränering under torkning (fig 3).

Kontrollera trasiga och slitna delar

Delar som har skevhet, sprickor, rostskador eller deformationer skall bytas ut.

Delar som är slitna och har nedsatt funktion bör bytas ut.

Mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg.

Etac rekommenderar att endast originaldelar används. Etacs originaldelar är utprovade tillsammans med produkten för avsedd användning och har genomgått föreskrivna provningsmetoder.

Kontrollera zoner med hög belastning extra noga.

- Rygginfästning (fig 4).
- Kryssdel på kryssramstolar (fig 5).

Kontrollera och justera funktioner

Kontrollera och justera så att följande fungerar enligt avsedd användning.

Alla justeringar och inställningar ska göras enligt rullstolens manual, i denna finns bland annat rullstolens felsökningsschema som kan vara till hjälp för att identifiera eventuella fel och åtgärder. Senaste dokumentation finns att hitta på www.etac.com.

Kontrollera:

- så att fällning och tiltfunktioner såsom kryssfällning eller sitsvinkel fungerar obehindrat. På komfortrullstolar som Etac Prio och Etac Next Comfort kontrolleras gas/lås-kolven för rygg och sitsvinkel. Låsning och frisläppning skall fungera, kan ställas in med justernippeln.
- benstöd: Eventuell låsfunktion skall låsa korrekt. Kontrollera även benstödet fällbarhet och svängbarhet.
- drivhjul: Lufttryck i däck och att quick release-låset låser korrekt.
- länkhjul: Skall snurra obehindrat utan att lagren hugger (fig 6).
- framgaffel: Skall rotera obehindrat utan att lagren hugger (fig 7).
- att körhandtagsklädsel sitter fast (fig 8).
- låsningen i körhandtagens infästning och att fästet är helt och utan sprickor. (fig 9).
- brukarbroms/vårdarbroms: Bromsfunktion och låsfunktion.
- tippskydd: Höjd, lås- fäll- vridfunktion, slitage/vassa kanter.
- att rullstolen går rakt. Om rullstolen drar snett, justera länkhjulfästets höjd och lodning samt kontrollera hjullager och lufttryck. På Etac Prio, Etac Next och Etac Next Comfort kan länkhjulfästet inte justeras. Om stolen drar snett, kontrollera länkhjulets hjullager samt lufttryck.
- att skruvar och muttrar är åtdragna. På rullstolar med gas/lås-kolv, kontrollera även dessa infästningar.
- att drivringar och ekerskydd inte har grader eller vassa kanter.
- Säkerställ att brukarmanual och alla Etacs etiketter medföljer vid förskrivning till ny brukare.
- Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid.

Anvisning för kvittblivning av uttjänta rullstolar

Etac rekommenderar att uttjänta rullstolar kasseras efter samråd med kommunen och/eller ett återvinningsföretag som verkar på er ort. De kan tillhandahålla lämpliga kärl för de material som rullstolar innehåller. Vid fragmentering bör man ta bort brännbara material så som klädselar innan man lämnar hela produkten till fragmenteringsanläggning.



