

# Short Instruction

IMM1064\_SI.VER10.2023-01-24



| Article no. | Description              | Size (mm)  |
|-------------|--------------------------|------------|
| IM108088    | RescueSheet              | W750xL2000 |
| IM108089    | RescueSheet - extra wide | W850xL2000 |

RescueSheet

immedia  
by Etac



## GB:

### Material:

Fabric: Nylon  
Straps: Polyester  
Buckles: Acetal.

**Never try to repair a product yourself.  
Never use a defective product.**

### Washing instructions:

Do not add fabric conditioner.  
This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

## SV:

### Material:

Tyg: Nylon  
Remmar: Polyester  
Spännen: Acetal.

**Försök aldrig reparera en produkt själv.  
Använd aldrig en defekt produkt.**

### Tvättinstruktioner:

Använd inte sköljmedel.  
Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättsprit

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

## NO:

### Materiale:

Stoff: Nylon  
Stropper: Polyester  
Spenner: Acetal.

**Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.  
Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.**

### Vaskeinstruks:

Ikke bruk tøyrenner.  
Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5-9. Eller den kan desinfiseres med maks 70% konsentrasjon, eksempel VIRKON.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

## DA:

### Materiale:

Stof: Nylon  
Remme: Polyester  
Spænder: Acetal.

**Reparér aldrig selv et produkt.  
Et defekt produkt må ikke anvendes.**

### Vaskeinstruktion:

Anvend ikke skyllemiddel.  
Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

## FI:

### Materiaali:


Kangas: Nylonia  
Hihnat: Polyesteriä  
Soljet: Asetaalia.

**Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.  
Älä koskaan käyttää viallista tuotetta.**

### Pesuohjeet:

Älä käytä huuhteluvainetta.  
Tuote voidaan puhdistaa pesuaineella, joka ei sisällä liuottimia ja jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.

Tuote on tarkistettava säännöllisesti, mieluiten joka kerta kun sitä käytetään ja erityisesti pesun jälkeen. Tarkista, ettei saumoissa tai kankaassa ole vaurioita.

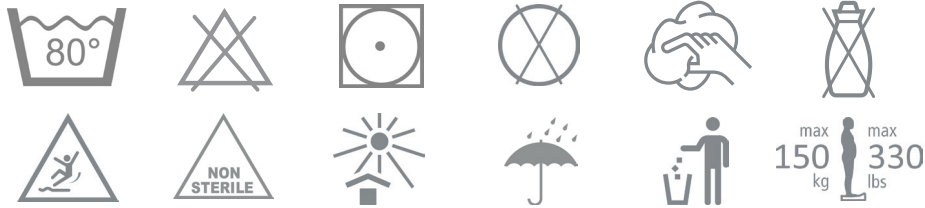

**DE:**

**Material:**

Stoff: Nylon  
Riemen: Polyester  
Schnallen: Acetal.

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.  
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

**Waschanleitung:**

Keinen Weichspüler verwenden.  
Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70% - Desinfektionslösung gereinigt werden.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

**NL:**

**Materiaal:**

Stof: Nylon  
Banden: Polyester  
Gespen: Acetaal.

**Probeer een product nooit zelf te repareren.  
Gebruik een product nooit als het defect is.**

**Wasinstructies:**

Gebruik geen wasverzachter.  
Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen. Controleer op schade aan de naden en de stof.

**FR:**

**Matériaux :**

Tissu : Nylon  
Sangles : Polyester  
Boucles : Acétal.

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.  
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

**Instructions de lavage :**

N'utilisez pas d'adoucissant.  
Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

**IT:**

**Materiale:**

Tessuto: Nylon  
Cinghie: Poliestere  
Fermagli: Acetalica.

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.  
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

**Istruzioni di lavaggio:**

Non usare ammorbidente.  
Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio. Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

**ES:**

**Materiales:**

Tejido: Nylon  
Correas: Poliéster  
Hebillas: Acetal.


**No intente reparar usted mismo el producto.  
No utilice nunca un producto defectuoso.**

**Instrucciones de limpieza:**


No utilizar suavizante.  
El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70%.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.


# Illustrations

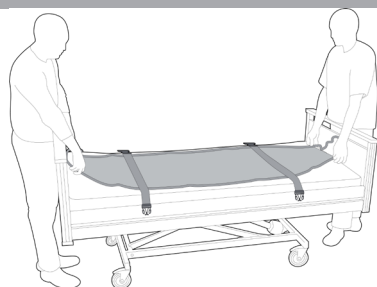


1

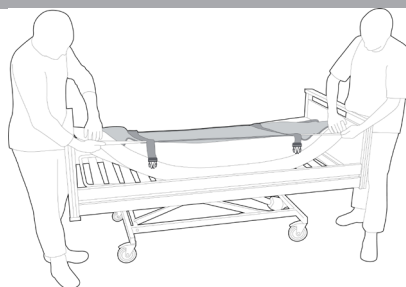


2

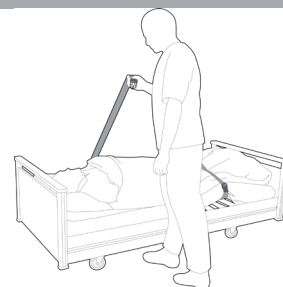


3

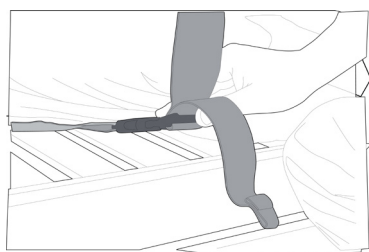

4

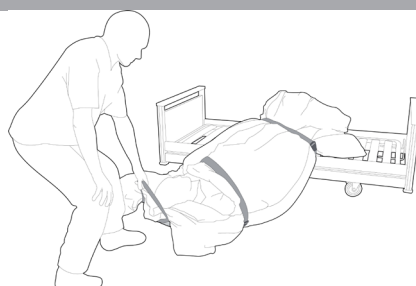


5

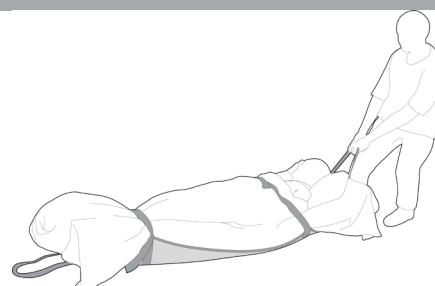

6

## Check

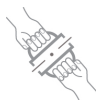

Etac Immedia A/S  
Parallelvej 3  
DK-8751 Gedved  
[www.etac.com](http://www.etac.com)

UK responsible person:  
Etac Ltd, Unit 60  
Hartlebury Trading Estate  
Hartlebury Kidderminster DY10 4JD



RescueSheet

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities