


# Tippskydd/Anti-tipp/Kippschutz

Tippskydd Elite/Act/Sting/Cross  
Anti-tip Elite/Act/Sting/Cross  
Kippschutz Elite/Act/Sting/Cross

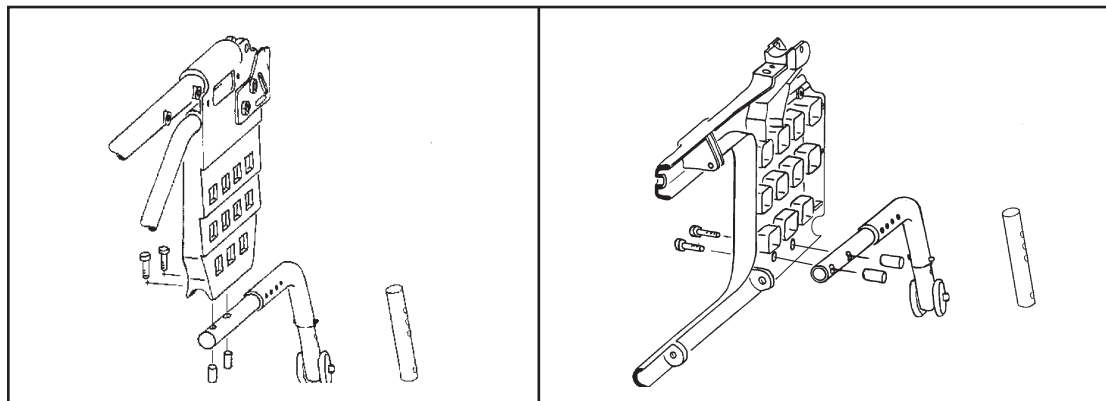

## Tippskydd Elite/Act/Sting/Cross

Tippskyddet består av tre (Act) eller fyra (Elite, Sting, Cross) delar:

- Infästningsröret monteras under hjulfästet (se bild).
- Tippskyddsroret snäpps på infästningsröret i lämpligt längdläge.
- Förlängningsdelen med avlastningshjul fästs i tipskydds röret med skruv/mutter i önskad höjd.

För att kunna köra över trösklar och tjocka mattkanter rekommenderas ett avstånd från golv till avlastningshjul på 3-4 cm. För Elite/Sting/Cross med 20" drivhjul monterat i C-raden, finns ett speciellt tipskydd med kortare tipskyddsror.

## Anti-tipp Elite/Act/Sting/Cross

The anti-tip stabilisers consist of three (Act) or four (Elite, Sting, Cross) parts:

- The attachment bar is mounted under the wheel mount (see sketch).
- The anti-tip stabilising bar snaps onto the attachment bar at a suitable height.
- The extension with its wheel is attached to the stabilising bar with a screw and nut at the desired height.

To allow you to drive over thresholds and the edges of thick carpets, a distance of 1" 1 ½" from the floor to the stabiliser wheel is recommended. For Elite/Sting/Cross chairs with 20" rear wheel mounted in C-pos, there is a special anti-tip stabiliser with shorter bars.

## Kippschutz Elite/Act/Sting/Cross

Der Kippschutz besteht aus drei (Act) oder vier (Elite, Sting, Cross) Teilen:

- Das Befestigungsrohr wird unter der Radbefestigung montiert (siehe Abbildung)
- Das Kippschutzrohr wird in geeigneter Längenposition am Befestigungsrohr durch Einschnappen befestigt
- Das Verlängerungsteil mit Entlastungsrad wird im Kippschutzrohr mit Schraube/Mutter in gewünschter Höhe montiert.


Um über Schwellen und dicke Teppichkanten fahren zu können, wird ein Abstand von 3-4 cm zwischen Boden und Entlastungsrad empfohlen. Für Elite/Sting/Cross mit 20" Treibräder in der C-Reihe montiert, ist ein besonderer Kippschutz mit kürzerem Kippschutzrohr erhältlich.

74042C

03-05-27


Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp  
Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com

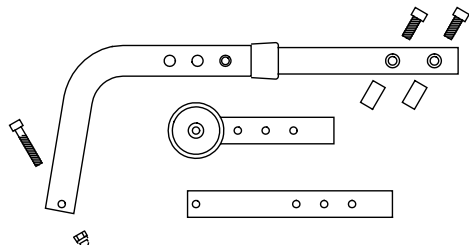


Art. nr: 25177\*

Cross 20", 22", 24"

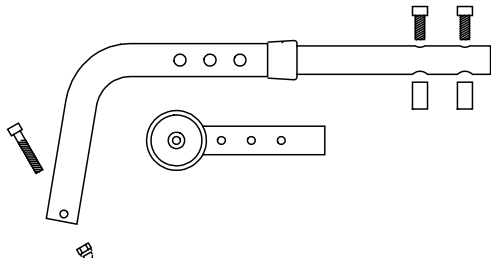


Art. nr: 25478\*

Act 24"

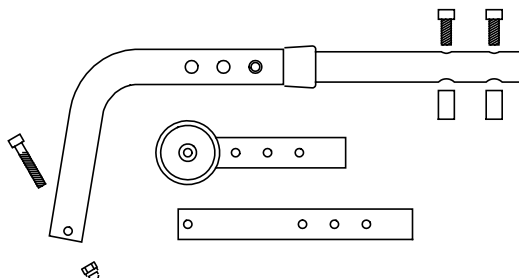


Art. nr: 25283\*

Elite/Sting 20", 22", 24"

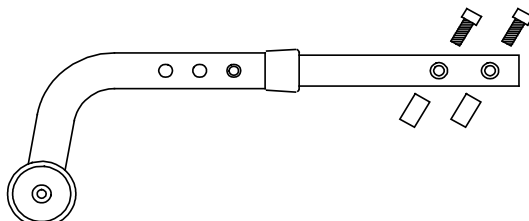

Art. nr: 25302\*

Cross 20" C-pos

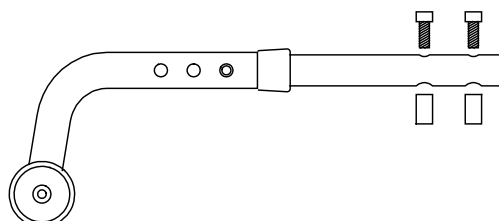

Art. nr: 25303\*

Sting 20" C-pos

\*) OBS! Art nr gäller 1 st  
NOTE! Item No is for 1 piece  
OBS! Art Nr gltig fr 1 St

74042C

03-05-27

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com

 etac®