

Monteringsvejledning (DK)

Montering af bord på Cheetah

Monteringsanvisning (SV)

Montering av bord på Cheetah

Monteringsanvisning (N)

Montering av bord på Cheetah

Mounting instruction (GB)

Mounting tray on the Cheetah

Montageanleitung (D)

Montage der Tisch an den Cheetah



Montage handleiding (NL)

Montage van de werkblad op de Cheetah

Monteringsvejledning

Montering af bord på Cheetah

R82[®]

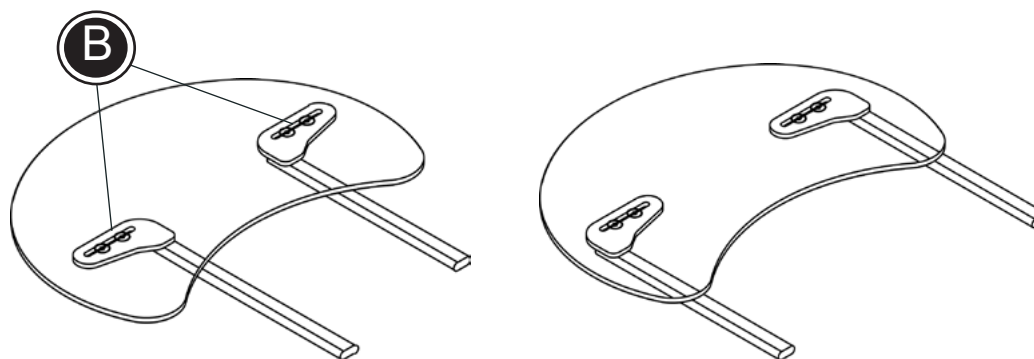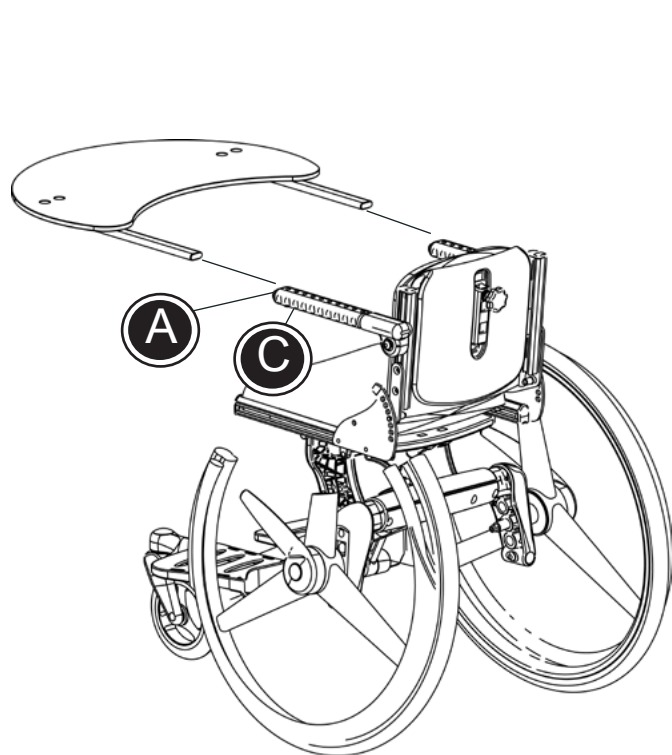

Bordet til Cheetah leveres usamlet og kan bruges til alle størrelser.

Følg nedenstående vejledning for at montere bordet korrekt:



- 1) Plastpropperne foran på armlænene (A) fjernes.
- 2) Bordbeslagene monteres på pladen vha. medfølgende skruer og møtrikker (B).
- 3) Bordbeslagene føres ind i armlænene og der spændes vha. fingerskruen (C).

Bordbeslagene kan vendes begge veje afhængig af hvilken størrelse stol, bordet skal monteres på.

Monteringsanvisning

Montering av bord på Cheetah

R82[®]

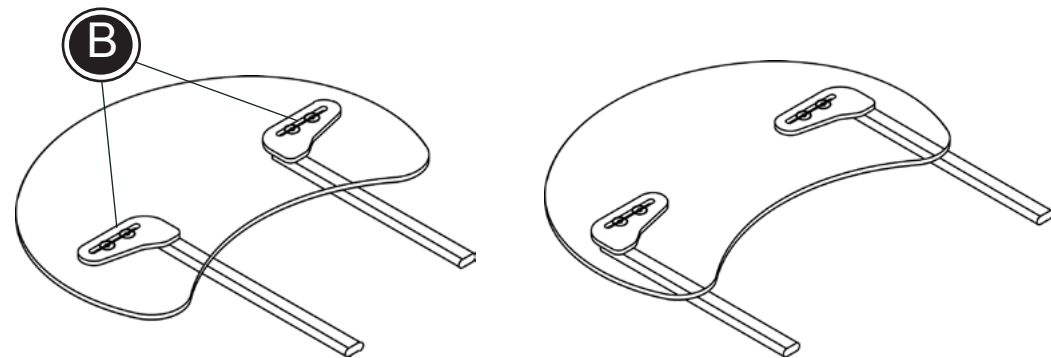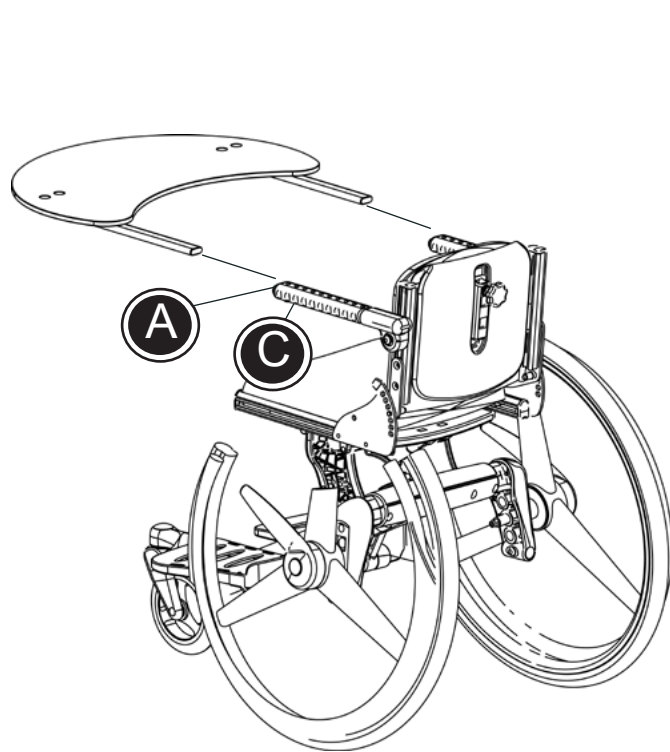

Bord till Cheetah finns i en storlek, passar alla sittbredder och levereras omonterad.

Följ nedan instruktioner för att montera bord.



- 1) Ta bort ändpropparna framtill på armstöden.
- 2) Fäst beslagen på bordet med medföljande skruvar och muttrar (B).
- 3) För in beslagen i armstöden och dra fast med fingerskruven (C).

Beslagen kan vändas åt olika håll beroende på stolens bredd.

Monteringsanvisning

Montering av bord på Cheetah

R82[®]

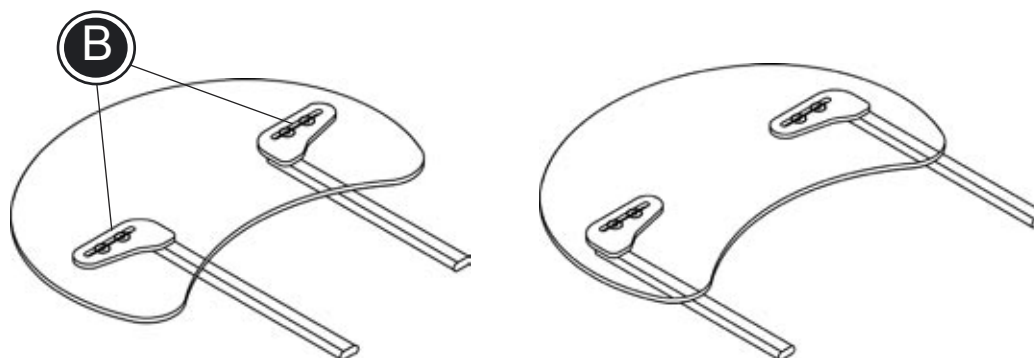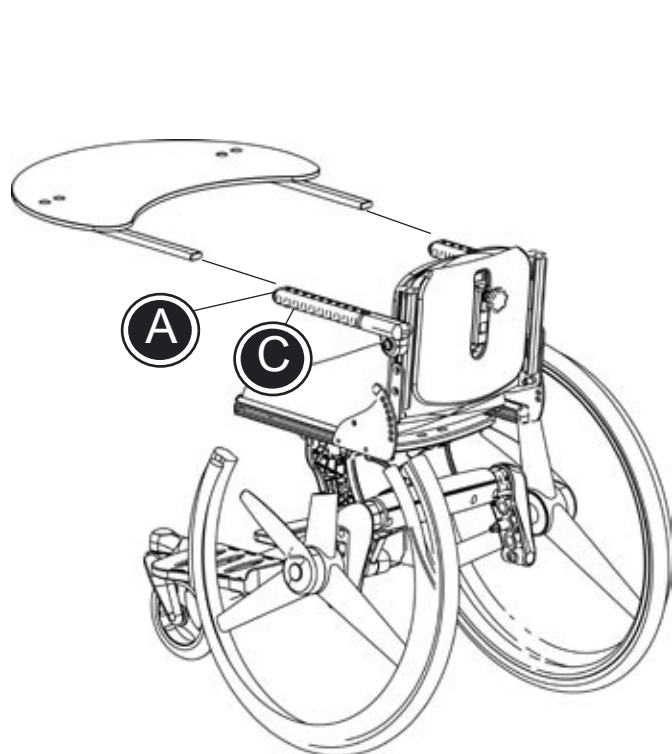

Bordet til Cheetah leveres umontert, og kan brukes til alle størrelser.

Følg veiledningen under for korrekt montering av bordet:



- 1) Plastproppene foran på armlenene (A) fjernes.
- 2) Bordbeslagene monteres på platen ved hjelp av medfølgende skruer og muttere (B).
- 3) Bordbeslagene føres inn i armlenene og strammes til ved hjelp av fingerskruen (C).

Bordbeslagene kan vendes begge veier, avhengig av hvilken stolstørrelse bordet skal monteres på.

Mounting instruction

R82[®]

Mounting tray on the Cheetah

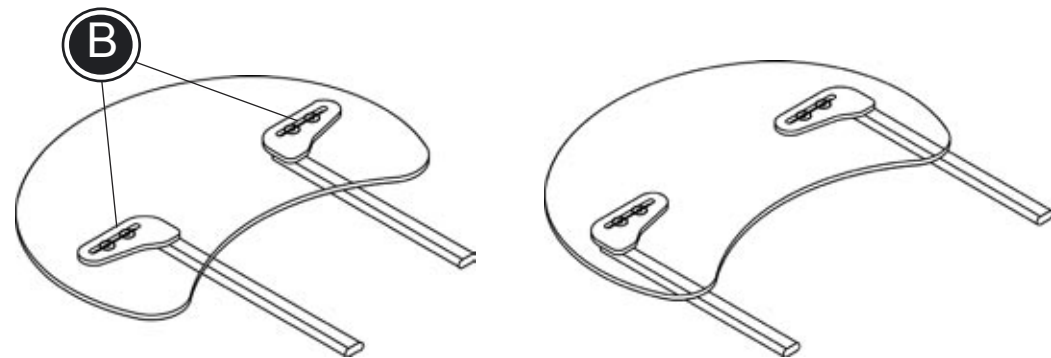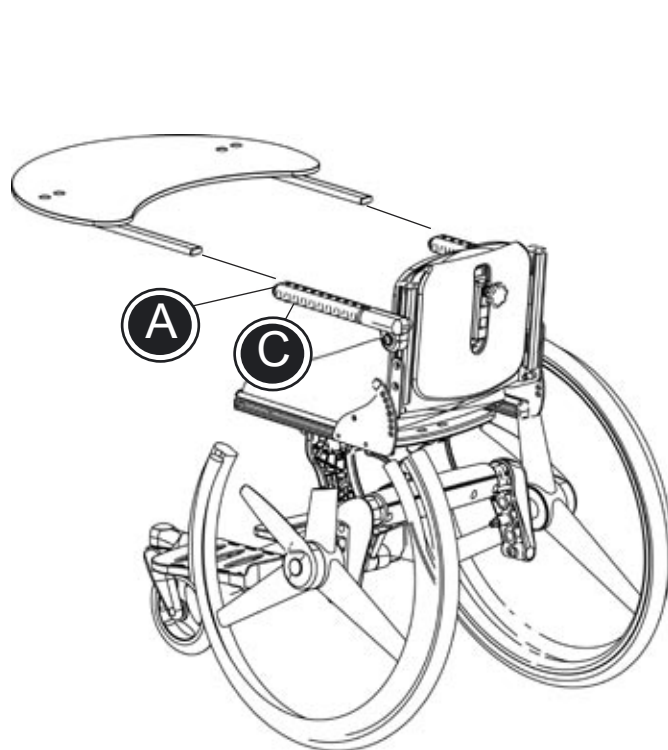

The Cheetah tray will be delivered unassembled and can be used for all the sizes.

Follow the instructions below to mount the tray correctly:



- 1) Remove the end pieces in front of the armrests.
- 2) Mount the brackets on the tray top by using the screws and nuts enclosed (B).
- 3) Lead the brackets into the armrests and tighten with the finger screw (C).

The brackets can be turned each way depending on the chair size of which the tray should be used.

Montageanleitung

Montage der Tisch an den Cheetah

R82[®]

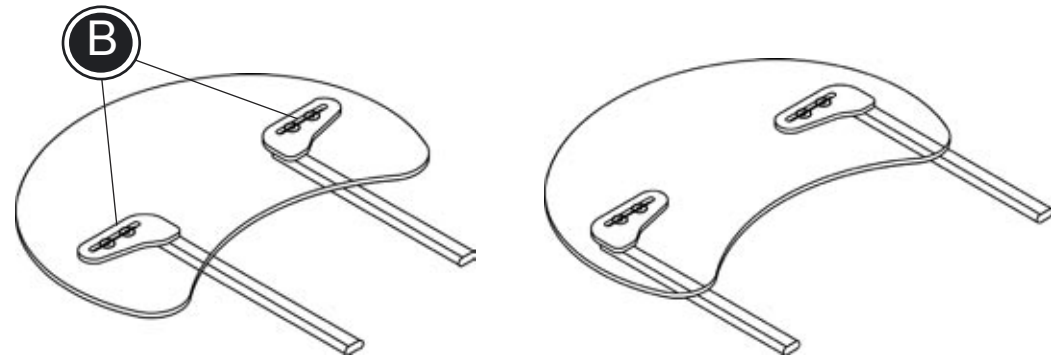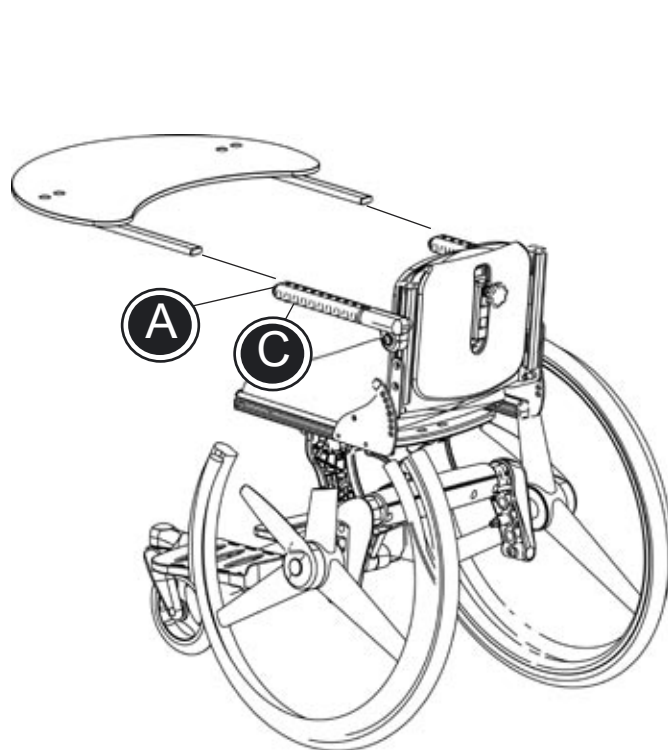

Der Cheetah Tisch wird unmontiert geliefert und kann für alle Größen eingesetzt werden.

Befolgen Sie folgende Anweisungen um den Tisch richtig zu montieren:



1. Entfernen Sie die Abdeckkappen vorne an den Armlehnen.
2. Montieren Sie die Beschläge mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern an der Tischplatte (B).
3. Schieben Sie die Stangen in die Armlehnen und befestigen diese mit den Schrauben (C)

Die Beschläge können innen- und außenliegend montiert werden, dies hängt von der Sitzbreite des Cheetah ab.

Montage handleiding

Montage van de werkblad op de Cheetah

R82[®]

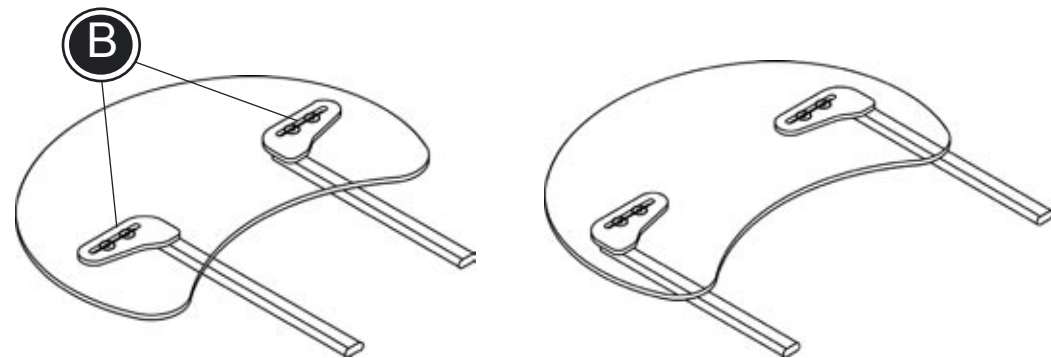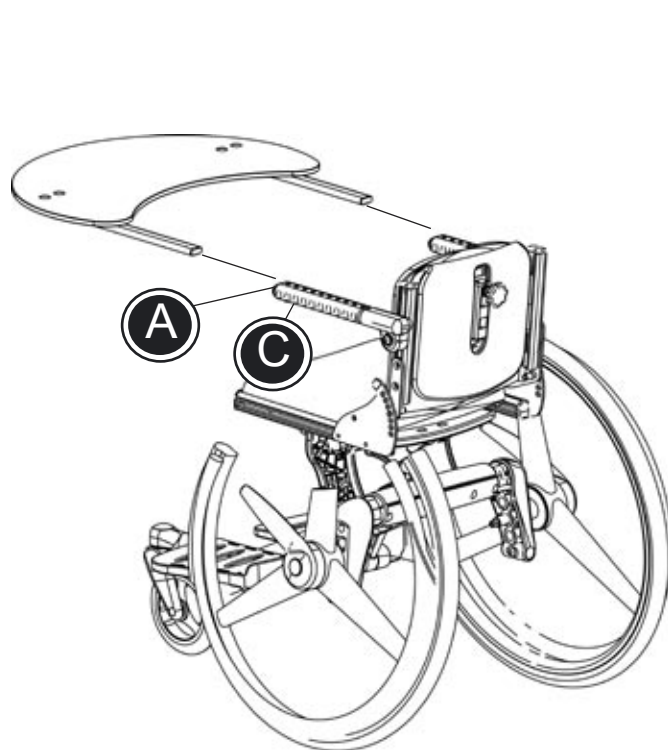

Het werkblad past op alle maten van de Cheetah.

Volg de onderstaande instructies om het werkblad op de juiste wijze op de Cheetah te monteren.

1. Verwijder de zwarte doppen (A) uit de voorkant van de armsteunen.
2. Monteer de beugels met de bijgeleverde bouten en moeren (B) aan het werkblad.
3. Steek de beide buizen van het werkblad in de armsteunen en draai de snelspanners (C) onder de armsteunen vast.

Het werkblad kan aan de zitbreedte van de Cheetah worden aangepast. De beugels (B) van het werkblad kunnen naar binnen en naar buiten worden geschoven.