

Monteringsvejledning (DK)

Montering af sideplader på Cheetah

Monteringsanvisning (N)

Montering av sideplater på Cheetah

Mounting instruction (GB)

Mounting side plates on the Cheetah

Montageanleitung (D)

Montage die Seitenplatten an den Cheetah


Montage handleiding (NL)

Montage van de kledingbeschermers op de Cheetah

Monteringsvejledning

Montering af sideplader på Cheetah

R82[®]

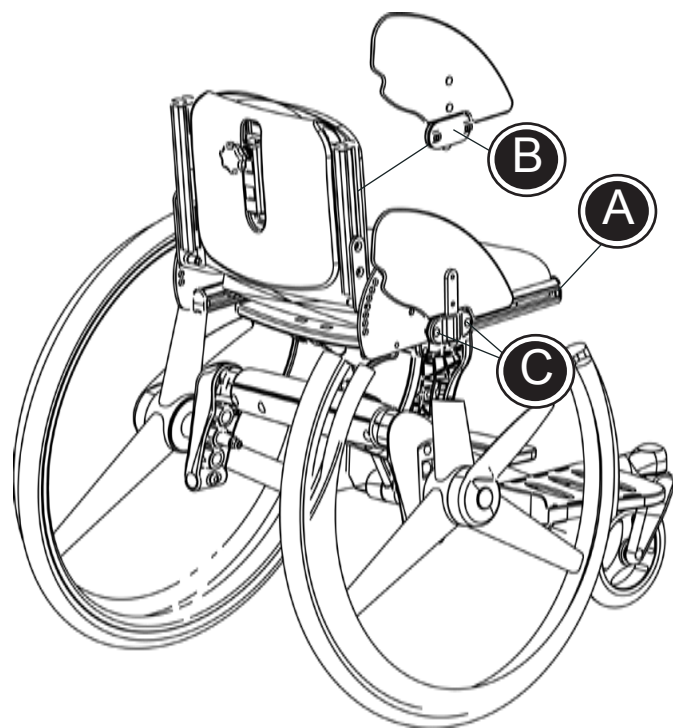

Cheetah kan udstyres med sideplader.

Følg nedenstående vejledning for at montere sidepladerne korrekt:

- 1) Fjern plastpropperne foran på stolen (A).
- 2) Sidepladebeslaget (B) føres ind i skinnerne og fastgøres ved at spænde unbracoskruerne (C).
- 3) Sæt plastpropperne i igen.


Sidepladerne kan indstilles i dybden ved at løsne unbracoskruerne (C).

Sidepladen afmonteres let fra beslaget ved at løfte op.

Monteringsanvisning

Montering av sideplater på Cheetah

R82[®]

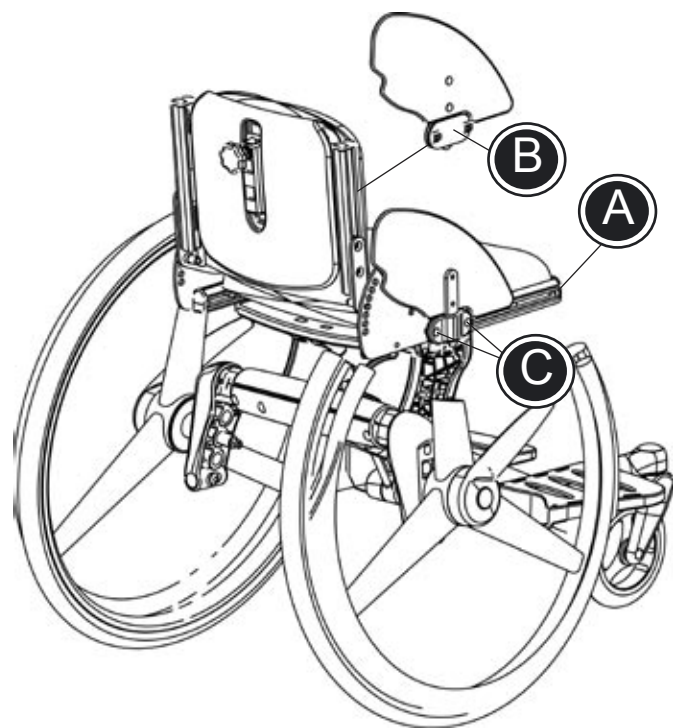

Cheetah kan utstyres med sideplater.

Følg veiledningen under for korrekt montering av sideplatene:

- 1) Fjern plastproppene foran på stolen (A).
- 2) Sideplatebeslaget (B) føres inn i skinnene og festes ved å skru til unbrakoskruene (C).
- 3) Sett i plastproppene igjen.


Sideplatene kan innstilles i dybden ved å løsne unbrakoskruene (C).

Sideplaten avmonteres enkelt ved å løftes opp.

Mounting instruction

Mounting side plates on the Cheetah

R82[®]

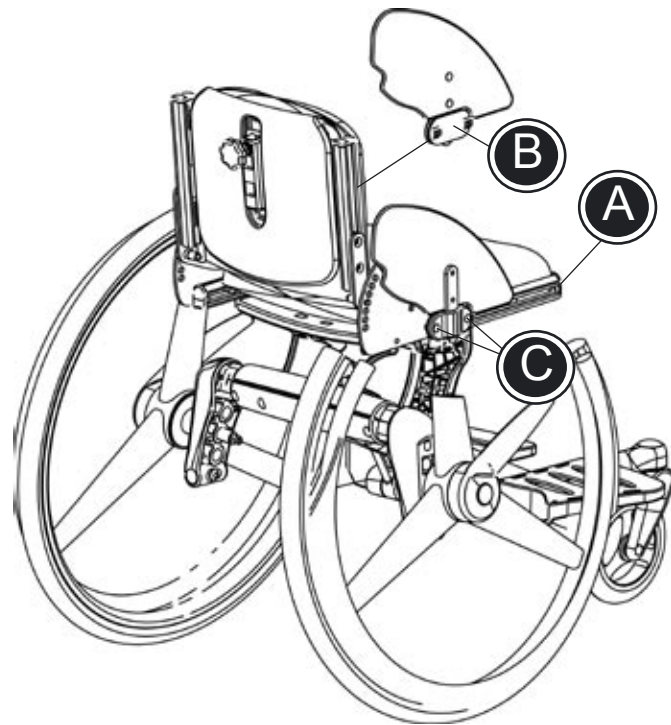

The side plates can be mounted on the Cheetah.

Follow the instructions below to mount the side plates correctly:

- 1) Remove the end pieces from the chair front (A)
- 2) The side plate bracket (B) must be placed in the seat rails and fastened by tightening the Allen screws (C)
- 3) Remount the end pieces


The side plates can be depth adjusted by loosening the Allen screws (C).

The side plates can be dismantled easily from the bracket by lifting the side plate.

Montageanleitung

R82[®]

Montage die Seitenplatten an den Cheetah

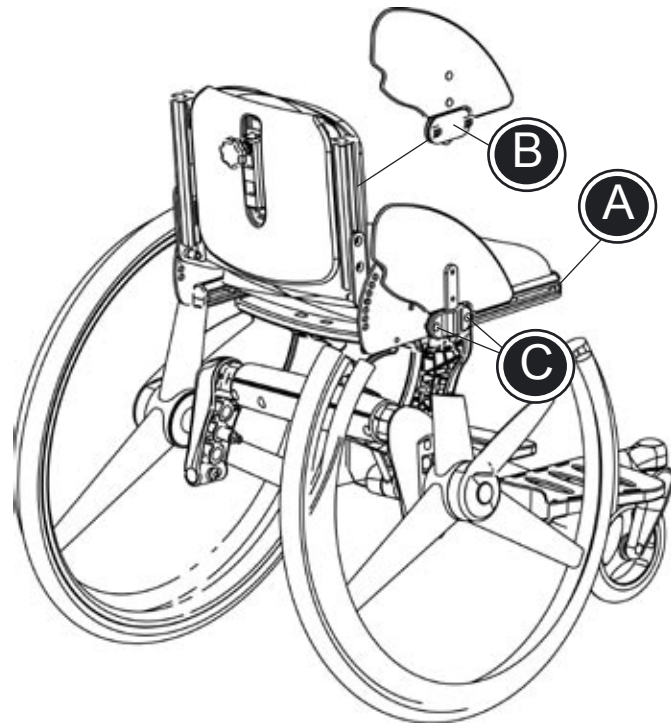

Die Seitenplatten können an den Cheetah montiert werden.

Befolgen Sie folgende Anweisungen um die Seitenplatten richtig zu montieren:

1. Entfernen sie die Abschlusskappen vorne an den Sitzstangen (A)
2. Der Beschlag für die Seitenplatten (B) muss in die Sitzstangen geschoben werden und in der gewünschten tiefe mit dem Inbusschlüssel festgeschraubt werden (C)
3. Die Abschlusskappen wieder auf die Sitzstangen aufstecken (A)


Die Seitenplatten können durch lösen der Inbusschrauben am Beschlag (C) in der Tiefe verstellt werden.

Die Seitenplatten können durch ziehen aus Beschlag abgenommen werden.

Montage handleiding

R82[®]

Montage van de kledingbeschermers op de Cheetah

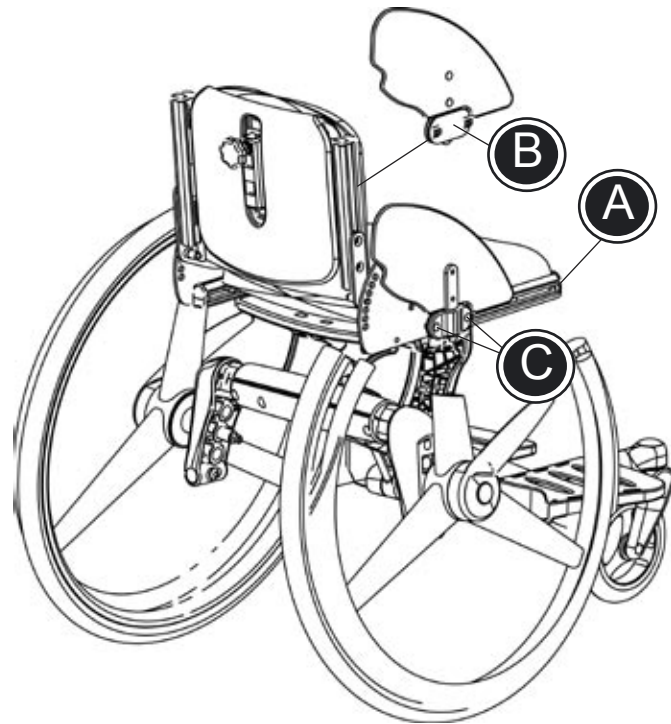

Volg de onderstaande instructies om de kledingbeschermers op de juiste wijze op de Cheetah te monteren.

1. Verwijder de zwarte dopjes (A) uit de voorkant van de profielen van het zitgedeelte.
2. Plaats vervolgens de houder (B) voor de kledingbeschermers in de zijkant van de profielen van het zitgedeelte en schuif deze in de gewenste positie. Draai daarna beide (C) inbusbouten stevig vast.
3. Plaats als laatste de zwarte dopjes (A) weer terug in de voorkant van de profielen van het zitgedeelte.

De kleding beschermers kunnen nu gemakkelijk in en uit worden genomen.