



UB200626B

etac®

Monteringssats Bygel




Monteringssett Bøjle

Assembly kit Bow

75018.3 2022-08-15



Rullstol, Tillverkare:
HD600-650, 38 - 45cm, Hantverksdesign

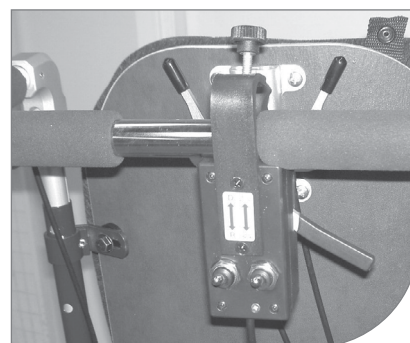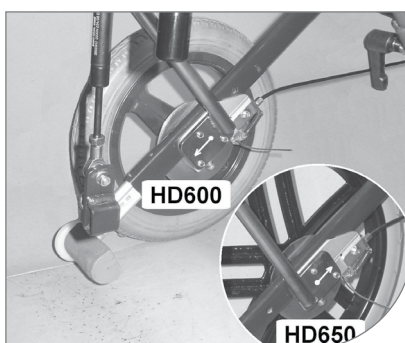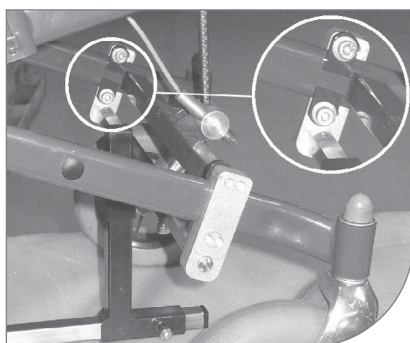

Monteringsanvisning

Lille Viking monteras på rullstolen först efter att den anpassats till brukaren.

Fram

Det främre beslaget placeras så nära som möjligt bakom tvärstaget. Beslaget monteras utvändigt på chassit med hålet neråt och skruvas fast med bultarna i de bakre hålen. Tvärstaget monteras med mittenröret neråt och bakåt. Kontrollera att tvärstaget kan röra sig fritt i förhållande till andra delar.

Bak

Ta bort hjulen så att stolen står på tippskydden. På nyare stolar sitter det ett tvärstag mellan hjulbeslagen som ska tas bort före monteringen. Skruva fast armarna invändigt med plattan framåt på HD650 och bakåt på HD600 (se bild). Monteringsvinklarna träs in i tryckdelen, bygelstopparna sätts på och det hela sätts in i monteringsarmarna. Justera tryckdelen så att den sitter vågrätt och med gasfjädern i mitten.

Tryckdelen ställs in så att gasfjädern trycks ihop halvvägs och att Lille Viking lyfts 2-3 cm över golvet. Kontrollera att avståndet mellan hjulbeslagen är detsamma som innan tvärstaget demonterades. Efter slutjusteringen ställs bygelstopparna in och alla skruvar kontrolleras.

Kom ihåg att kontrollera alla funktioner när Lille Viking monterats på stolen.

OBS

Stolen bör utrustas med bromshandtag för att inte hindra montering av manöverbox.






Tippskydd ska alltid finnas på rullstolen vid körning med hjälpmotor och dessa ska vara nedfällda.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



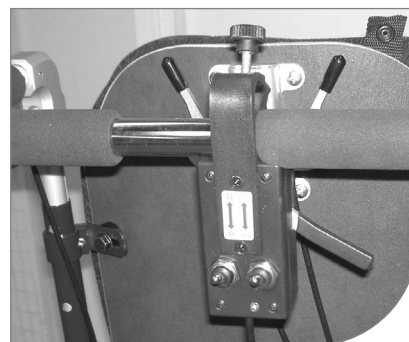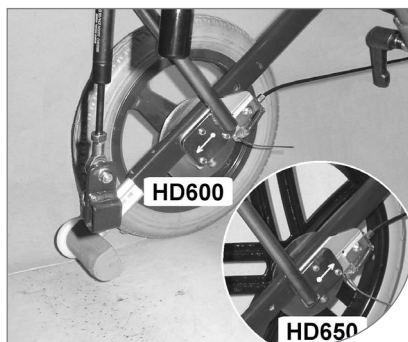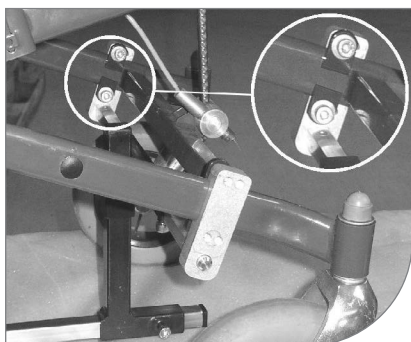

Monteringsvejledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, efter denne er blevet tilpasset brugeren.

For

De forreste beslag placeres så tæt som muligt bag det tværgående rør. Beslaget anbringes udvendigt på stellet, med hullet nedad, og skrues fast med boltene i de bagerste gevindhuller. Hammelen placeres med midterrøret nedad og bagud.

Husk at kontrollere, om hammelen kan bevæge sig frit, uden at berøre andre dele.

Bag

De bagerste monteringsarme placeres indvendigt på stolens hjulbeslag. På de nyere udgaver af HD-stolene sidder en tværstang, der skal fjernes før montagen. Fjern først hjulene, så stolen står på antitippene. Skru armene på, så de på HD600 vender med pladen bagud, og på HD650 med pladen fremad.

Monteringsvinklerne skubbes ind i trykdelen, bøjlestoppene sættes på, og hele arrangementet placeres i monteringsar-

mene, så trykdelen sidder i en højde af ca. 49 cm over gulvet. Hjælpe motoren placeres under stolen og trækstangen justeres, så drivhjulene befinder sig på linie med køres stolens baghjul.

Trykdelen indstilles, så Lille Viking 2000 løftes fri fra gulvet under frikobling, og gasfjederen trykkes ca. halvvejs sammen, når håndtaget står i nederste position.

Kontrollér at afstanden mellem stolens hjulbeslag fortsat er den samme, som før tværstangen blev fjernet.

Husk at kontrollere alle funktioner efter indjustering af Lille Viking 2000 på stolen.




OBS



Tipsikringer skal være monteret på kørestolen ved kørsel med hjælpemotor, og de skal være klappet ned. Dette gælder især for HD650-stolen, som tipper lettere end HD600.

Speederbox

Vi anbefaler, at stolen udrustes med kørebøjle og separate bremsehåndtag.

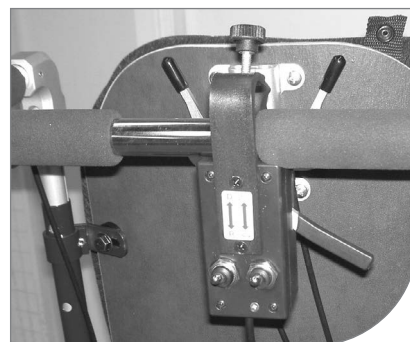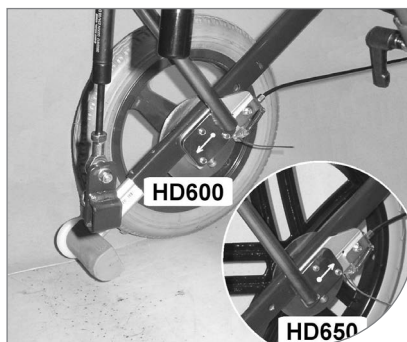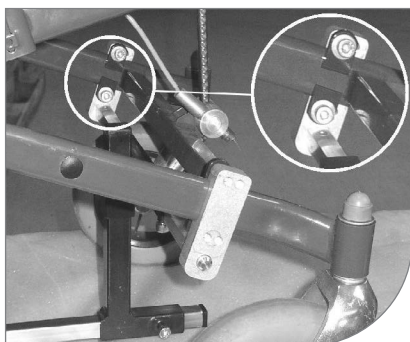

Mounting Instructions

Lille Viking 2000 is mounted on to the wheel chair after being adjusted to the user.

Front

The front brackets are placed as close behind the cross bar as possible. The bracket is fitted on the outside of the frame, with the hole pointing downwards and is then fastened with the bolts in the rear holes. The cross bar shall be placed with the centered tube down, facing backwards. Remember to check if the cross bar in the front centre section can move freely without being in contact with other parts.

Rear

The rear mounting arms is placed inside of the chair's wheel bracket. The newer HD-chair models have a cross bar which has to be removed before mounting. First remove the wheels so the chair will stand at the anti tip. Then mount the arms, those at the HD600 is turning with the plate backwards, and those at the HD650 with the plate forwards. The mounting angles are pushed into the pressure part, the bow's stoppers are put on, and the whole arrangement is placed in the mounting arms so that

the pressure part is in a height of about 49 cm above the ground. Lille Viking supporting motor is installed underneath the chair and the pulling bar is adjusted so that the driving wheels are on parallel lines with the wheelchair's rear wheels. The pressure is adjusted so that Lille Viking 2000 is lifted free off the ground during disengaging and the gas spring is pushed about halfway together when the handle is in the lowest position.

Check that the space between the chairs wheel brackets still are the same as before removing the cross bar. Remember to check that all functions are working properly after having installed Lille Viking 2000 onto the chair.

NB




The wheelchair must always be equipped with tilt protection when operating using the auxiliary motor and this must be folded down. This is especially important for the HD650-chair, which tilts easier than the HD600.

SPEEDERBOX

We recommend that the wheelchair is fitted with a driving bow and separate brake handles.

200626B
HD600+HD650

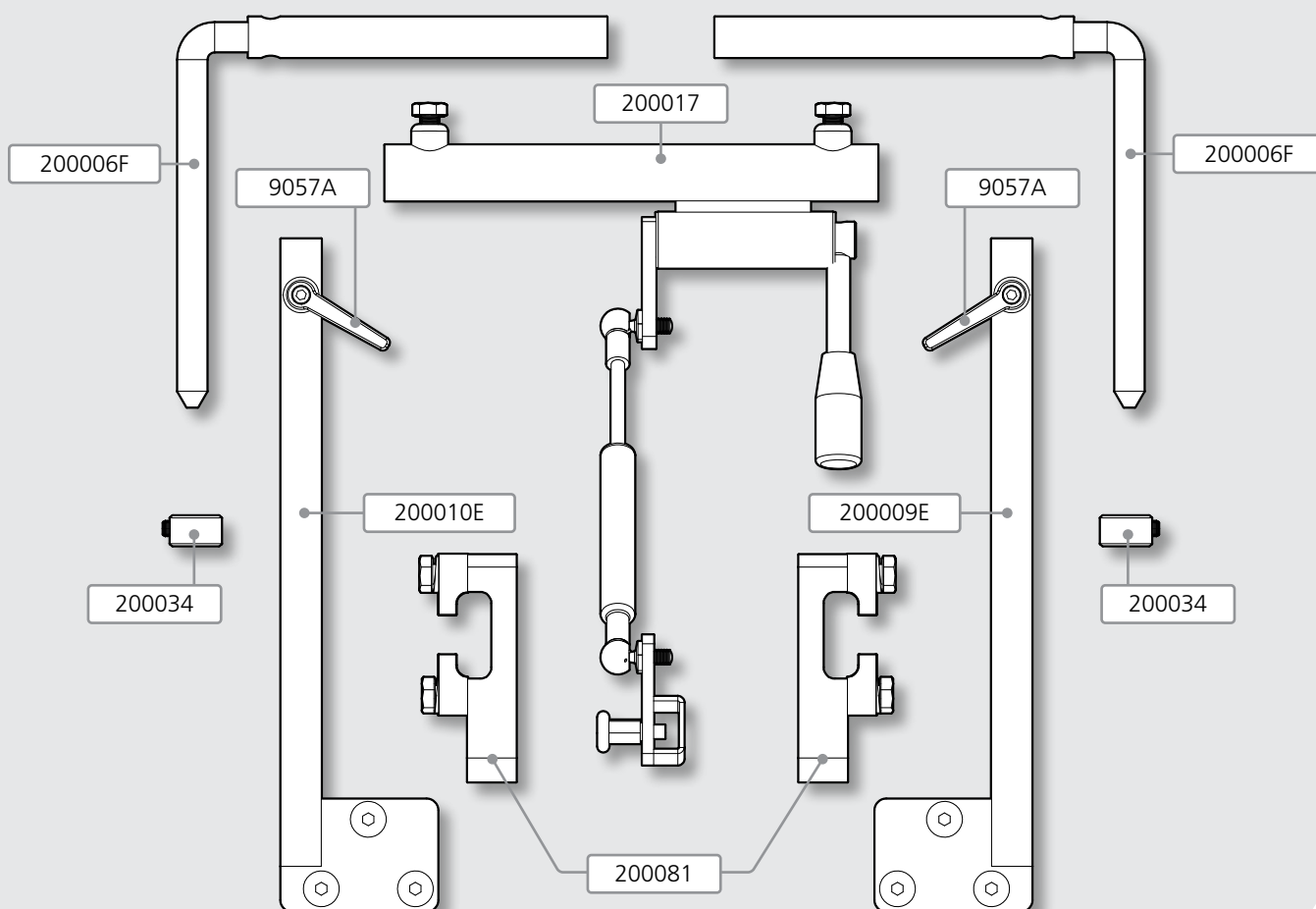

SV

Art. nr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6x12	2
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200081	Beslag fram HD	2
UB200009E	Monteringsarm HD höger	1
UB200010E	Monteringsarm HD vänster	1
UB200034	Bygelstopp	2

EN

Item. no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200017	Pressure part compl.	1
UB200081	Bracket front HD	2
UB200009E	Mounting arm HD right	1
UB200010E	Mounting arm HD left	1
UB200034	Bolt for bow	2