



UB200618A



Monteringssats Bygel

Monteringssett Bøjle



Assembly kit Bow

75071.2 2022-08-15

Rullstol, Tillverkare:

Netti, 38 - 45 cm, Alu Rehab

Netti Svipp, 38-45 cm. Alu Rehab

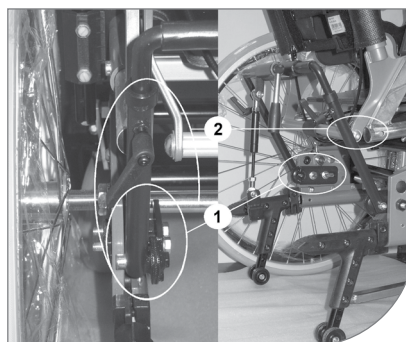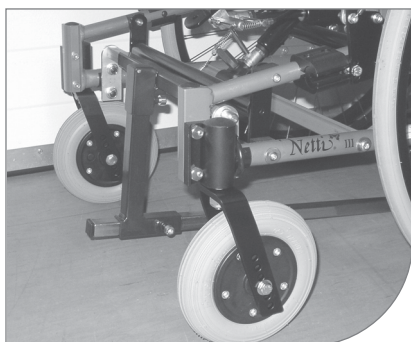

SV

Monteringsinstruktioner

Lille Viking 2000 ska inte monteras på rullstolen förrän den har anpassats för användaren.

Rullstolen måste vara försedd med framhjul:

7x 1¾ - Alu Rehab artikelnr 22193

Fram

De främre beslagen ska sättas fast direkt bakom framhjulen, på stolens nedersta, vågräta rör. Vrid dem så att hålen för monteringsstängerna är vända uppåt. På smala stolar placeras de på ramens utsida.

Stången ska vändas så att den vinklade bottendelen monteras fram, och vingmuttern är vänd nedåt (var uppmärksam på detaljerna i bilden).

Bak

Stålkonsolerna monteras i rad i de två hålen längst bak och placeras så att kuggskivorna är vända utåt - se bilden.

Rören monteras på kuggskivorna på så sätt att de löper nära intill sitsens längdjustering - se detaljbilden.

Öglesystemet justeras sedan på plats så att tippskydd och sitsfunktioner inte påverkas.

Obs! Stolens tippskydd måste eventuellt justeras bakåt så att de fortfarande fungerar korrekt.

Kom ihåg att kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt efter att ha justerat in Lille Viking 2000 på stolen.





Användning av tippskydd rekommenderas.

Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com

Kørestol, producent:

Netti, 38 - 45 cm, Alu Rehab

Netti Svipp, 38-45 cm. Alu Rehab

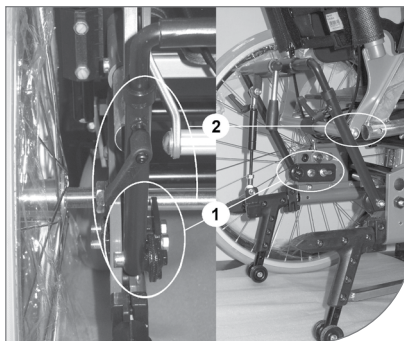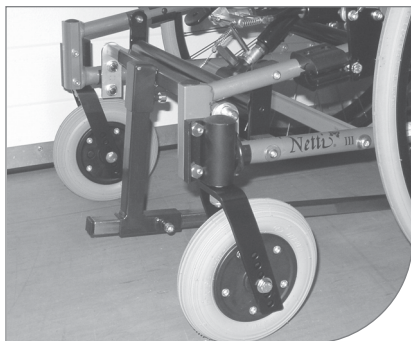

max
150 kg

DK

Monteringsvejledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, når den er tilpasset brugeren.

Kørestolen skal være monteret med forhjul:

7x 1 $\frac{3}{4}$ - Alu Rehab artikelnr. 22193

For

De forreste beslag anbringes umiddelbart bag forhjulene på stolens nederste vand-rette rør, så hullet til udskyderne vender opad. På smalle stole placeres de udvendigt på rammen.

Hammelen vendes, så vinkelbundstykket monteres foran, og fingerskruen vender nedad (bemærk detaljer på foto).

Bag

Hulpladebeslagene monteres i de 2 bagerste huller i en række og vendes med tandskiverne udad – se detalje på foto.

Rørene monteres på tandskiverne, så de passerer tæt bag sædets længdejustering – detalje.

Bøjlesystemet justeres på plads, så anti-tip og sædefunktioner ikke generes.

NB. Stolens anti-tip skal eventuelt justeres bagud, så de stadigvæk er funktionsdygtige.



Husk at kontrollere alle funktioner efter indjustering af Lille Viking 2000 på stolen.



Brug af tipsikring anbefales.



Wheelchair, manufacturer:
Netti, 38 - 45 cm, Alu Rehab
Netti Svipp, 38-45 cm. Alu Rehab

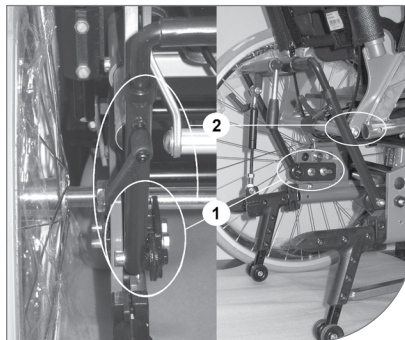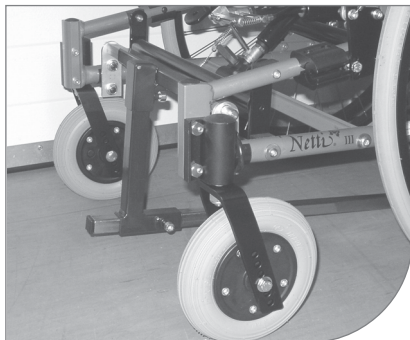

ENG

Mounting Instructions

Lille Viking 2000 is mounted on to the wheelchair after being adjusted to the user.

The wheelchair has to have these frontwheels:

7x 1 $\frac{3}{4}$ - front wheels, Alu Rehab part no. 22193

Front

The front brackets are fitted right behind the front wheels, at the lowest horizontal tube, so that the holes for the telescopic mounting bars are pointing upwards. At small chairs the brackets should be fitted outside the frame.

The cross bar centre section must be turned so the pull bar bracket is mounted in front, and the finger screw is pointing downwards (see photo for).

Rear

The steel brackets are mounted in the two hindmost holes in a row, and are turned with the cog washers outwards. See details 1 at the photo.

The tubes are to be mounted at the cog washers, so they pass closely behind the seat's length adjustment – details 2. The bow system is adjusted in place, not hindering the anti tilt- and seat functions.

NB. The anti tilt might be adjusted backwards to keep the functionality.


OBS

Remember to check that all functions are working properly after installing Lille Viking 2000 on to the chair.



We recommend the use of anti-tips.



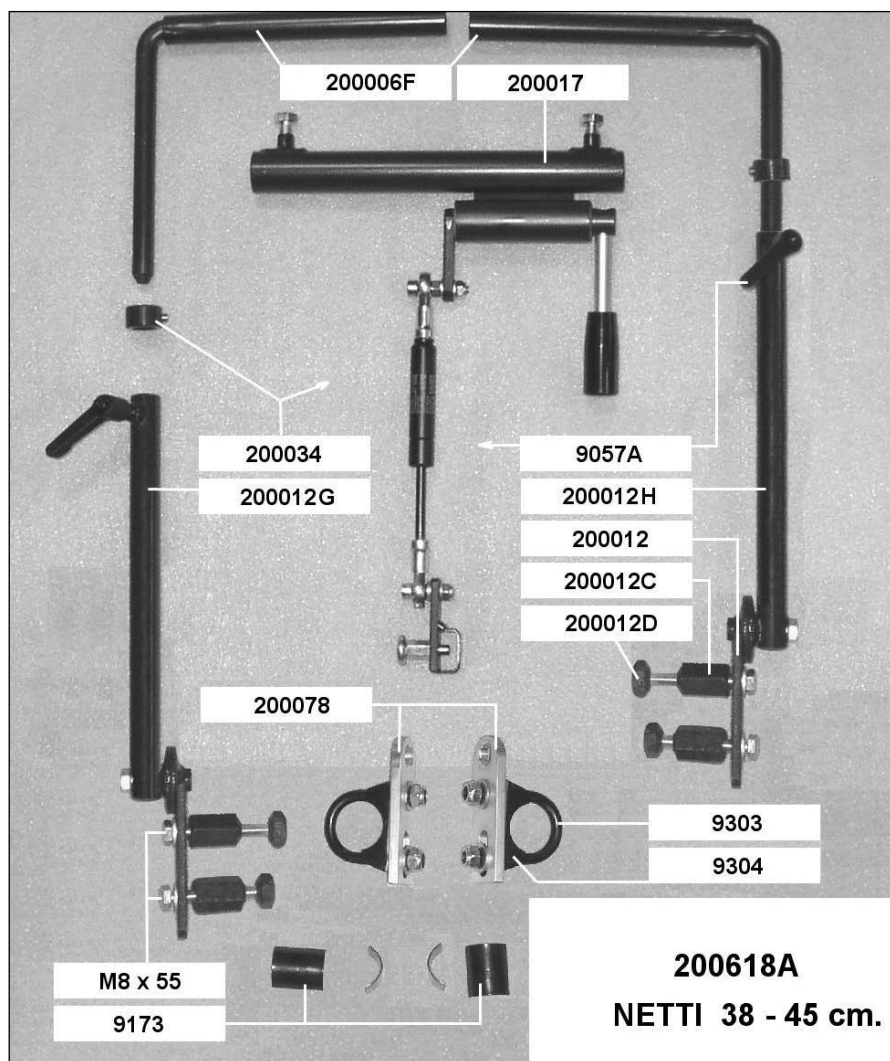

SV

Art.nr	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6 x 12	2
UB9173	Halvskål monteringsbeslag	4
UB9303	Fästklämma bygel 28 mm	2
UB9304	Fästklämma skål 28 mm	2
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200012	Ställbeslag med tandskiva	2
UB200012C	Distansbussning	4
UB200012D	Mutter	4
UB200012G	Fästarm 200 mm höger	1
UB200012H	Fästarm 200 mm vänster	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200078	Platta för monteringsbeslag yttre	2

ENG

Art. no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6 x 12	2
UB9173	Tube protector mounting bracket	4
UB9303	Mounting clamp bow 28 mm	2
UB9304	Mounting clamp basin 28 mm	2
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200012	Steel bracket with cog washer	2
UB200012C	Spacer	4
UB200012D	Nut	4
UB200012G	Mounting arm, 200 mm right	1
UB200012H	Mounting arm, 200 mm left	1
UB200017	Pressure part complete	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200078	Fittings bracket front round tubes 22-32 mm	2