




UB200624S



Monteringssats Rem
Monteringssett Rem
Assembly kit Strap

75074.2 2022-08-16

Rullstol, Tillverkare:
Cougar, 35 - 50 cm, R82
Combi Frame, 35 - 50 cm, R82

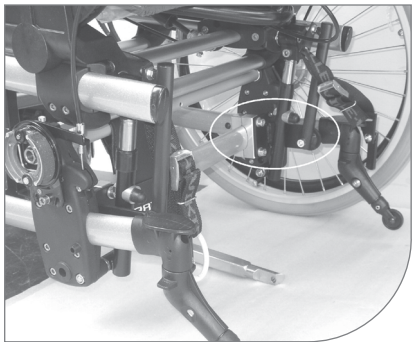

SV

Monteringsinstruktioner

Lille Viking 2000 ska inte monteras på rullstolen förrän den har anpassats för användaren.

Fram

De främre beslagen monteras på insidan av de nedersta rören, direkt bakom plastförstärkningen. Vrid dem så att hålen för monteringsstängerna är vända nedåt. Tänk på att vända den sneda ytan på aluminiumbeslagen så att de svarta beslagen hamnar parallellt.

Stången ska vändas så att den vinklade bottendelen monteras fram, och skruven är vänd uppåt.

Bak

Beslagen monteras på det vågräta röret som löper på tvären under stolen (observera detaljerna på bilden).

På smala stolar ska beslagen placeras längst ut mot plastförstärkningen, och monteringsarmarna ska då vändas så att de passerar rören för justering av sitthöjden på utsidan.

På breda stolar kan armarna placeras längre in på röret och armarna då ledas på insidan, förbi höjdjusteringen.

Rören monteras på kuggskivorna så att de pekar nästan lodrätt uppåt, utan att vidröra stolen.

Lille Viking 2000 sätts på plats så att hjulen befinner sig direkt bakom det tvärgående röret. Tänk på att lämna tillräckligt med utrymme så att hjulen inte går emot röret när motorn frikopplas. När lämplig placering har hittats ska remmarna justeras så att hjälpmotorn befinner sig ungefär 3 cm ovanför golvytan när den är frikopplad.

Kom ihåg att kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt efter att ha justerat in Lille Viking 2000 på stolen.



Användning av tippskydd rekommenderas.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



--	--	--	--	--	--



Kørestol, producent:
Cougar, 35 - 50 cm, R82
Combi Frame, 35 - 50 cm, R82



DK

Monteringsvejledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, når den er tilpasset brugeren.

For

De forreste beslag monteres på indersiden af de nederste rør, umiddelbart bag plastforstærkningen, og så hullet til udskyderne vender nedad. Vær opmærksom på at vende den skrå flade på aluminiumsbeslagene således, at de sorte udskyderbeslag kommer til at sidde parallelt.

Hammelen vendes, så vinkelbundstykket monteres foran, og skruen vender opad.

Bag

Beslagene monteres på det vandrette rør, som går på tværs under stolen (bemærk detaljer på foto).

På smalle stole anbringes beslagene helt ud mod plastforstærkningen, og montagearmene vendes, så de går udvendigt forbi rørene til justering af sædehøjden.

På brede stolen kan armene placeres længere inde på røret og armene føres indvendigt forbi højdejusteringen.

Rørene monteres på tandskiverne, så de peger næsten lodret op, uden at berøre stolen.

Lille Viking 2000 anbringes så hjulene står umiddelbart bag det tværgående rør. Husk at levne plads nok til, at hjulene ikke går imod røret, når hjælpemotoren frikobles. Når den endelige placering er fundet, justeres remmene, så hjælpemotoren løfter sig ca 3 cm fra gulvet under frikobling.

Husk at kontrollere alle funktioner efter indjustering af Lille Viking 2000 på stolen.



Brug af tipsikring anbefales.

Wheelchair, manufacturer:
Cougar, 35 - 50 cm, R82
Combi Frame, 35 - 50 cm, R82



ENG

Mounting instructions

Lille Viking 2000 is mounted on to the wheel chair after being adjusted to the user.

Front

The front fittings are mounted on to the inside of the lower tubes, right behind the plastic strengthening so the hole of the telescopic mounting bars are facing downwards. Make sure the inclined side of the aluminium fittings are turned so the black telescopic mounting brackets are on parallel lines. The cross bar in the front centre section is turned in order to mount the angled bracket in front with the screw facing up.


Rear

The fittings are mounted on to the horizontal tube which is straight across underneath the chair. The brackets are mounted on to the horizontal tube which is straight across beneath the chair (see details on photo). On narrow chairs, the brackets are mounted far out to the side against the plastic strengthening and the mounting brackets are turned so they are outside of the tubes to adjust the seat height. On the wider chairs, the mounting brackets can be placed further in on the tube, and the brackets are placed inside of the height adjustment. The tubes are mounted on to the cog washers pointing almost straight up, without being in contact with the chair. Lille Viking 2000 is then placed in a way that makes the wheel stand directly behind the crossing bar. Remember to leave enough space for the wheels not to be against the bar when the supporting motor is being disengaged. When the final position is found, the straps are adjusted to make the supporting motor lift about 3 cm above ground during disengaging.

Remember to check all functions after installing Lille Viking 2000 on to the chair.



We recommend the use of anti-tips.

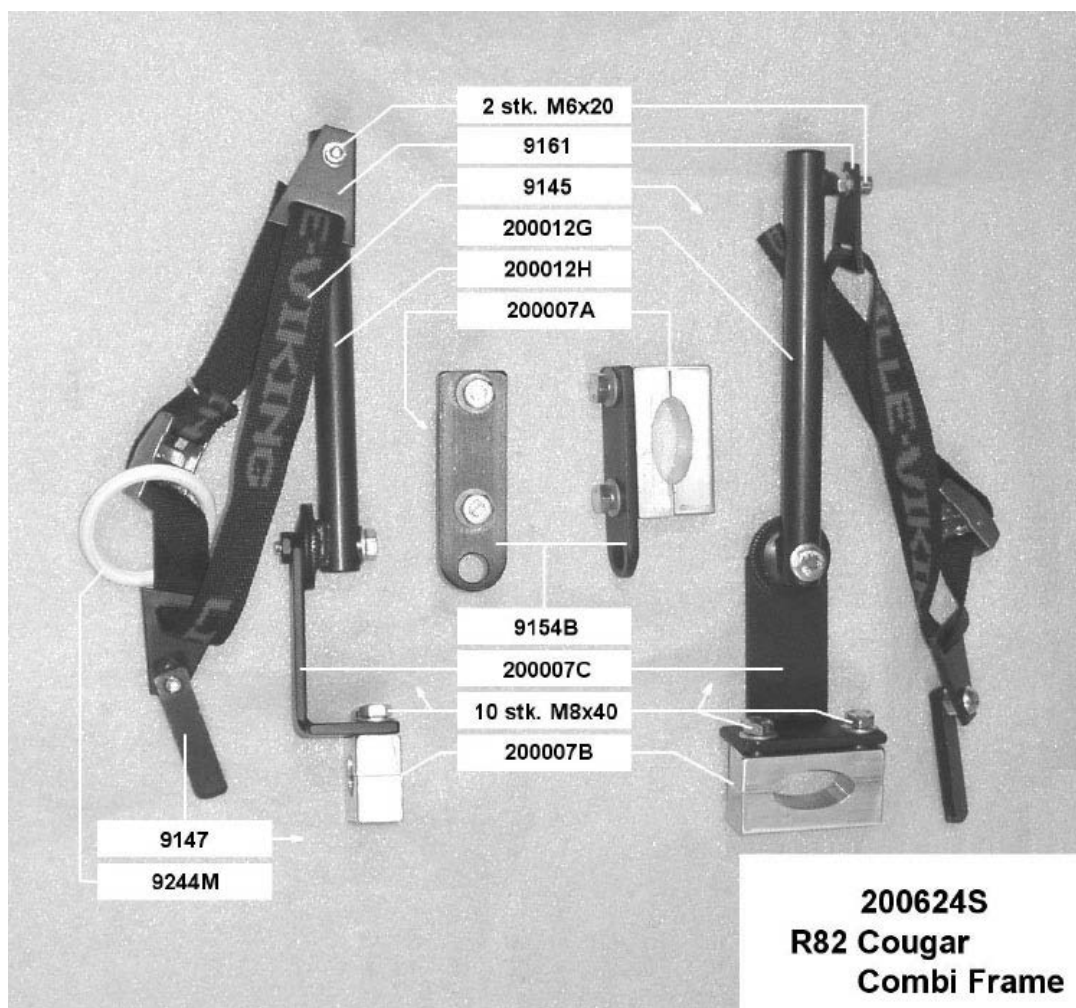

SV

Art.nr	Beskrivning	Antal
UB9145	Rem Lille Viking	2
UB9147	Remfäste övre och nedre	2
UB9154B	Beslag universal	2
UB9161	Remhållare	2
UB9244M	Gummiring vit	1
UB200007A	Beslag fram Cougar	2
UB200007B	Beslag bak Cougar	2
UB200007C	Monteringsarm Cougar	2
UB200012G	Fästarm 200 mm höger	1
UB200012H	Fästarm 200 mm vänster	1

ENG

Art. no.	Description	Qty
UB9145	Strap Lille Viking	2
UB9147	Strap fastening w. holder	2
UB9154B	Bracket universal	2
UB9161	Belt holder	2
UB9244M	Rubber ring white	1
UB200007A	Bracket front Cougar	2
UB200007B	Bracket rear Cougar	2
UB200007C	Mounting bracket Cougar	2
UB200012G	Mounting arm 200 mm right	1
UB200012H	Mounting arm 200 mm left	1