




UB200626



Monteringssats Bygel
Monteringssett Bøjle
Assembly kit Bow

75075.2 2022-08-16

Rullstol, Tillverkare:
Cirrus HandiCare, Cirrus Jubilee HandiCare, Cirrus 4 HandiCare

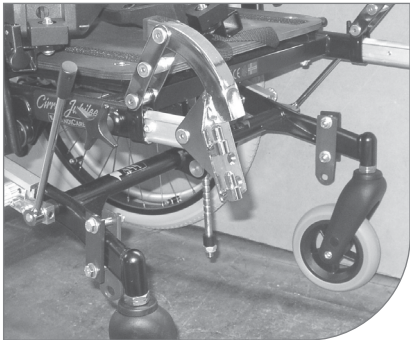

SV

Monteringsanvisning

Lille Viking monteras på rullstolen först efter att den anpassats till brukaren.

Fram

De främre beslagen monteras så nära bakom länkhjulen som det går med hålet i monteringsbeslaget neråt. Beslagen är märkta med H-höger och V-vänster. Tvärstaget placeras med "mittenröret" framåt så att det inte koliderar med sitsvinklingen. Se till att fästplattan inte kolliderar med länkhjulen.

Bak

Det bakre beslaget placeras direkt bakom tvärstaget så att det inte hindrar tippskyddet. Beslaget monteras på breda stolar med tandskivorna inåt och på smala stolar med tandskivorna utåt. Skruva fast monteringsarmarna på beslagen så att tryckdelen kommer mitt över fästöglan på drivmotorn. Placera bygelstopparna på monteringsvinklarna som skjuts in i tryckdelen. Hela anordningen anbringas sedan i monteringsarmarna. Justera höjden så att tryckdelen är ca 48 cm över golvet. Ställ in tryckdelen så att den sitter vågrätt med gasfjädern i mitten. Efter att kopplingsdelen fästs på fästöglan på drivmotorns båge efterjusteras tryckdelen så att gasfjädern trycks ihop halvvägs när handtaget är i nedersta läget. Kontrollera att Lille Viking lyfts upp 2-3 cm från golvet vid frikoppling samt att handtaget är stadigt i sina lägen. Efter slutjusteringen ställs bygelstopparna in och alla skruvar kontrolleras.

OBS

Kom ihåg att kontrollera alla funktioner när Lille Viking monterats på stolen.



Användning av tippskydd rekommenderas.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com




--	--	--	--	--	--	--



Kørestol, producent:

Cirrus HandiCare, Cirrus Jubilee HandiCare, Cirrus 4 HandiCare

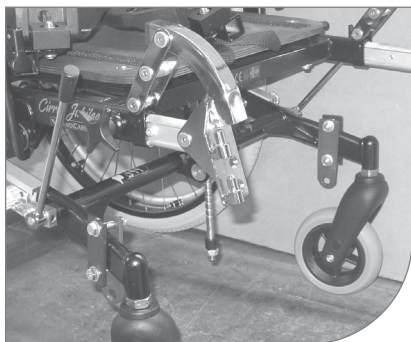**Monteringsvejledning**

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, når den er tilpasset brugeren.

For

De forreste beslag anbringes så tæt som muligt bag forhjulene, indvendigt på stellet og med hullet nedad. OBS: Beslagene er mærkede med "H"-øjre og "V"-enstre og skal placeres, så de sidder parallelt overfor hinanden. Hammelen placeres med midterrøret nedad og fremad, så den ikke berører sædetippet. Kontrollér at forhjulene kan dreje frit.

Bag

De bagerste beslag placeres øverst på de skrå rør, umiddelbart nedenfor tværstangen, så højt oppe, at de ikke generer anti-tippet. Beslagene anbringes: - på brede stole så de vender mod hinanden - på smalle stole, bort fra hinanden. Monteringsarmene skrues fast på tandskiverne, så de peger skråt bagud, med skruerne på bagsiden. Monteringsvinklerne skubbes ind i trykdelen, bøjlestoppene sættes på, og hele arrangementet placeres i monteringsarmene, så trykdelen sidder i en højde af ca. 49 cm over gulvet. Hjælpe motoren placeres under stolen og trækstangen justeres, så drivhjulene befinder sig på linie med køres stolens baghjul. Trykdelen indstilles, så Lille Viking 2000 løftes fri fra gulvet under frikobling, og gasfjederen trykkes ca. halvvejs sammen, når håndtaget står i nederste position.

OBS

Husk at kontrollere alle funktioner efter indjustering af Lille Viking 2000 på stolen.




Brug af tipsikring anbefales.



Wheelchair, manufacturer:

Cirrus HandiCare, Cirrus Jubilee HandiCare, Cirrus 4 HandiCare

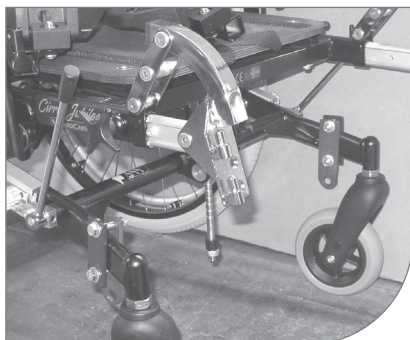

Mounting instruction

Lille Viking 2000 is mounted on to the wheel chair after being adjusted to the user.

Front

The front fittings are put as close as possible behind the front wheels, inside of the frame and with the hole facing downwards. NB: The fittings are marked with "R" – Right and "L" – left and should be placed in parallel positions. The cross bar in the front centre section is placed with the centre tube downwards, facing forward, so that it is not in contact with the edge of the seat. Make sure the front wheels turn freely.

Rear

The rear fittings are placed on the top of the sideways tubes, right beneath the cross bar, so far up that it will not be a problem for the anti-tilt. The fittings are put as follows: - on broad chairs they should face each other – on narrow chairs they should face away from each other. The mounting arms are screwed tightly on to the cog washers, so they are in a backward inclination, with the screws on the back. The mounting angles are pushed into the pressure part, the clamp bolts are fitted and the whole arrangement is placed into the mounting brackets so that the pressure part is about 49 cm above ground. The supporting motor is placed beneath the chair and the pulling bar is adjusted, to make the driving wheels on parallel lines with the wheel chairs' rear wheels. The pressure part is set so that Lille Viking 2000 can be lifted freely from the floor during disengaging and the gas spring is pushed about halfway together when the handle is in lower position.


OBS!

Remember to check all functions after fitting Lille Viking 2000 on to the wheelchair.



We recommend the use of anti-tips.



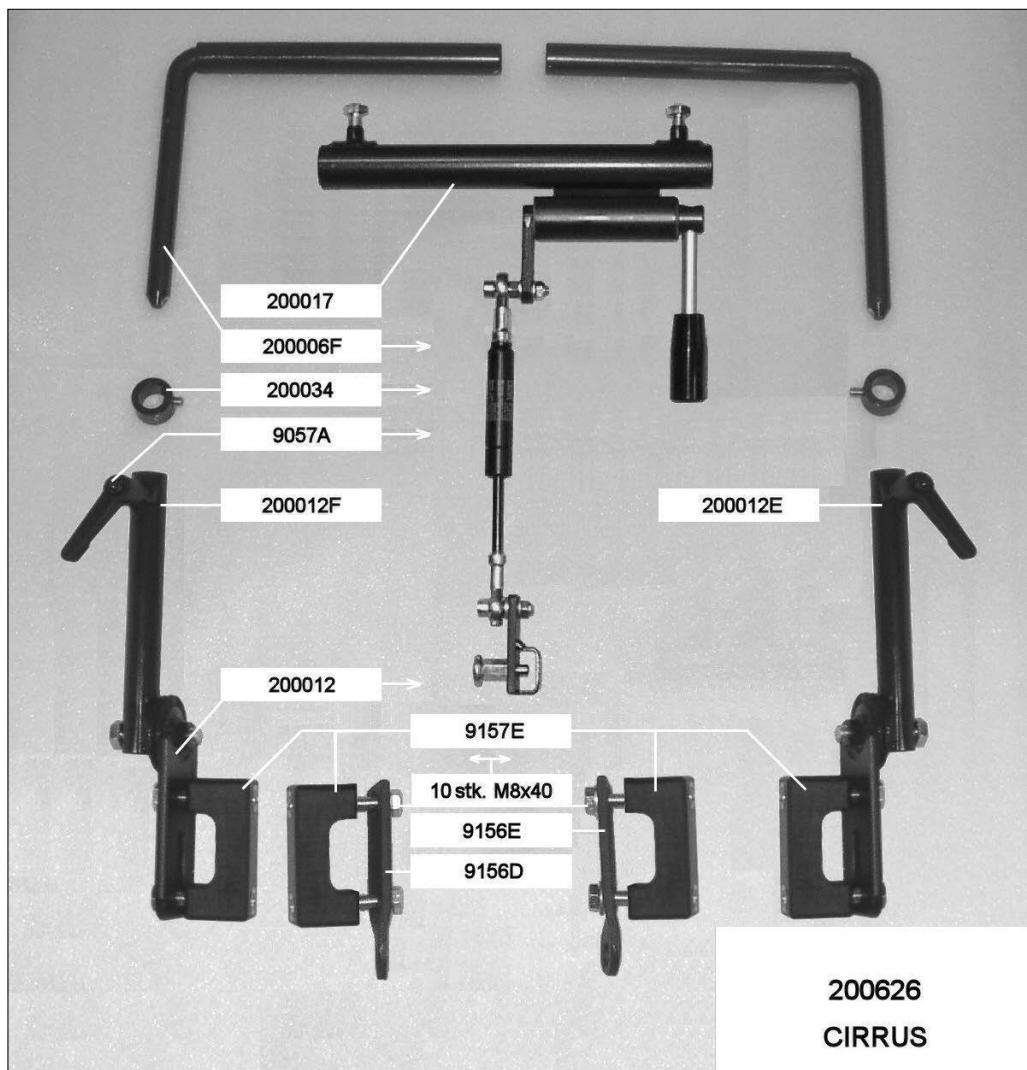

SV

Artnr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6x12	2
UB9156D	Monteringsbeslag Cirrus vänster	1
UB9156E	Monteringsbeslag Cirrus höger	1
UB9157E	Beslag bak HD/Cirrus	4
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200012	Ställbeslag med tandskiva	2
UB200012E	Fästarm 140 mm höger	1
UB200012F	Fästarm 140 mm vänster	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2

ENG

Art. no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB9156D	Mounting bracket Cirrus left	1
UB9156E	Mounting bracket Cirrus right	1
UB9157E	Bracket rear HD/Cirrus	4
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200012	Steel bracket with cog washer	2
UB200012E	Mounting arm 140 mm right	1
UB200012F	Mounting arm 140 mm left	1
UB200017	Pressure part compl.	1
UB200034	Bolt for bow	2