



UB200626A






Monteringssats Bygel
Monteringssett Bøjle
Assembly kit Bow

75076.4 2022-08-16



Rullstol, Tillverkare:
HD500, 38-45cm, Hantverksdesign AB

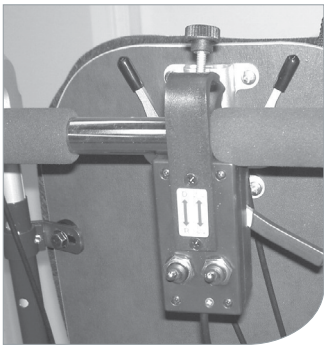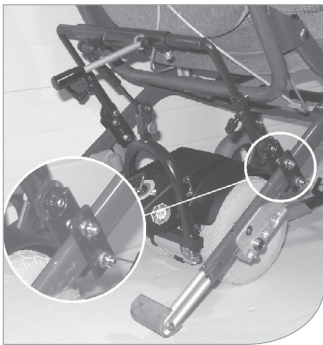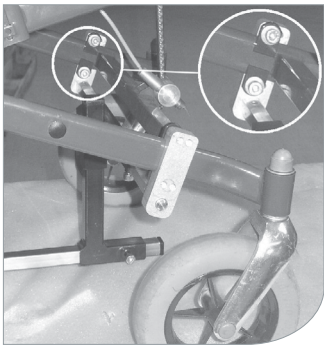

Monteringsanvisning

Lille Viking monteras på rullstolen först efter att den anpassats till brukaren.

Fram

Det främre beslaget placeras så nära som möjligt bakom tvärstaget. Beslaget monteras utvändigt på chassit med hålet neråt och skruvas fast med bultarna i dom bakre hålen. Tvärstaget monteras med mittenröret neråt och bakåt. kontrollera att tvärstaget kan röra sej fritt i förhållande till andra delar.

Bak

De bakre beslagen monteras direkt nedanför böjen på ramröret så högt det går för att inte påverka tippskyddet med tandskivorna inåt. Monteringsarmarna skruvas fast på tandskivorna så att de pekar ca 45 grader bakåt med spakvreden på undersidan. Monteringsvinklarna träs in i tryckdelen, bygelstopparna såtts på och det hela sätts in i monteringsarmarna. Justera tryckdelen så att den sittervågrätt och med gasfjädern i mitten.

Tryckdelen ställs in så att gasfjädern trycks ihop halvvägs och att Lille Viking lyfts 2-3 cm över golvet. Efter slutjusteringen ställs bygelstopparna in och alla skruvar kontrolldras.

OBS

Ersätt handtaget i framkant på drivmotorn med den medföljande remmen innan drivmotorn anbringas. Stolen bör utrustas med bromshandtag för att inte hindra montering av manöverbox.

OBS

Kom ihåg att kontrollera alla funktioner när Lille Viking monterats på stolen.



Tippskydd ska alltid finnas på rullstolen vid körning med hjälpmotor och dessa ska vara nedfällda.




Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



--	--	--	--	--	--



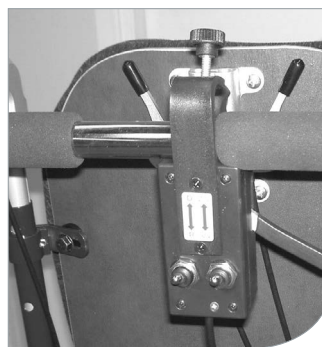

Monteringsveiledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, når den er tilpasset brugeren.

(* se bemærkning næste side) Trykdelen indstilles, så Lille Viking 2000 løftes fri fra gulvet under frikobling, og gasfjederen trykkes ca. halvvejs sammen, når håndtaget står i nederste position.

For

De forreste beslag placeres så tæt som muligt bag det tværgående rør. Beslaget anbringes udvendigt på stellet, med hullet nedad, og skrues fast med boltene i de bagerste gevindhuller. Hammelen placeres med midterrøret nedad og bagud. Husk at kontrollere, om hammelen kan bevæge sig frit, uden at berøre andre dele.

Speederbox

Vi anbefaler, at stolen udrustes med kørebøjle og separate bremsehåndtag.

OBS Husk at kontrollere alle funktioner efter indjustering af Lille Viking 2000 på stolen.

Bag


De bagerste beslag placeres øverst på de skrå rør, umiddelbart nedenfor bøjningen, men så højt oppe, at de ikke generer anti-tippet. Monteringsarmene skrues fast på tandskiverne, så de peger ca. 45 grader bagud, med finger-skruerne på undersiden. Monteringsvinklerne skubbes ind i trykdelen, bøjlestoppene sættes på, og hele arrangementet placeres i monteringsarmene.

Hjælpe motoren placeres under stolen og trækstangen justeres, så drivhjulene befinder sig på linie med kørestolens baghjul.

* BEMÆRK: Hvis Lille Viking ikke kan placeres mellem kørestolens baghjul, udskiftes håndtaget på batterierne med remmen (25 x 1,5) nederst på fotoet, hvorefter hjælpe motoren kan flyttes længere fremad.



Tipsikringer skal være monteret på kørestolen ved kørsel med hjælpe motor, og de skal være klappet ned.

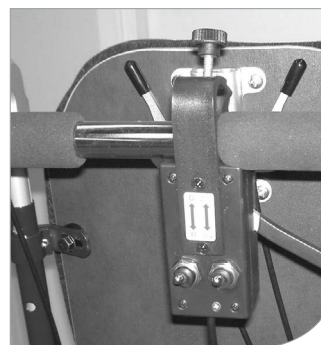

Mounting instructions

Lille Viking 2000 is mounted onto the wheelchair after being adjusted to the user.

Front

The front brackets are placed as close behind the cross bar as possible. The bracket is fitted on the outside of the frame, with the hole pointing downwards and is then fastened with the bolts in the rear holes. The cross bar shall be placed with the centered tube down, facing backwards. Remember to check if the cross bar in the front centre section can move freely without being in contact with other parts.

Rear

The rear fittings are placed at the top of the inclined tubes, right behind the curv, but so far up that it will not be a problem for the anti-tilt. The mounting bars are screwed on to the cog washers, so that they are pointing about 45 degrees backwards, with the fingerscrews placed on the underside. The angled mounting bars are pushed into the pressure part, the bolt for the bow is fitted and the whole assembly is placed into the mounting bars. The supporting motor is installed underneath the chair and the pulling bar is adjusted making the driving wheels be on parallel lines with the wheelchair's rear wheels*.

The pressure part is adjusted so that Lille Viking 2000 is lifted free off the ground during disengaging and the gas spring is pushed about halfway together when the handle is in lower position.

Speederbox

We recommend that the chair will be fitted with a driving bow and separate brake handles.

NB


Remember to check that all functions are working properly after having installed Lille Viking 2000 onto the chair.

* Please note: If Lille Viking 2000 cannot be placed between the rear wheels on the wheelchair, the handle on the batteries is replaced by the strap (25 x 1,5) at the bottom of the photo with all parts. This makes it possible to move the supporting motor further to the front.



The wheelchair must always be equipped with tilt protection when operating using the auxiliary motor and this must be folded down.

200626A
HD500

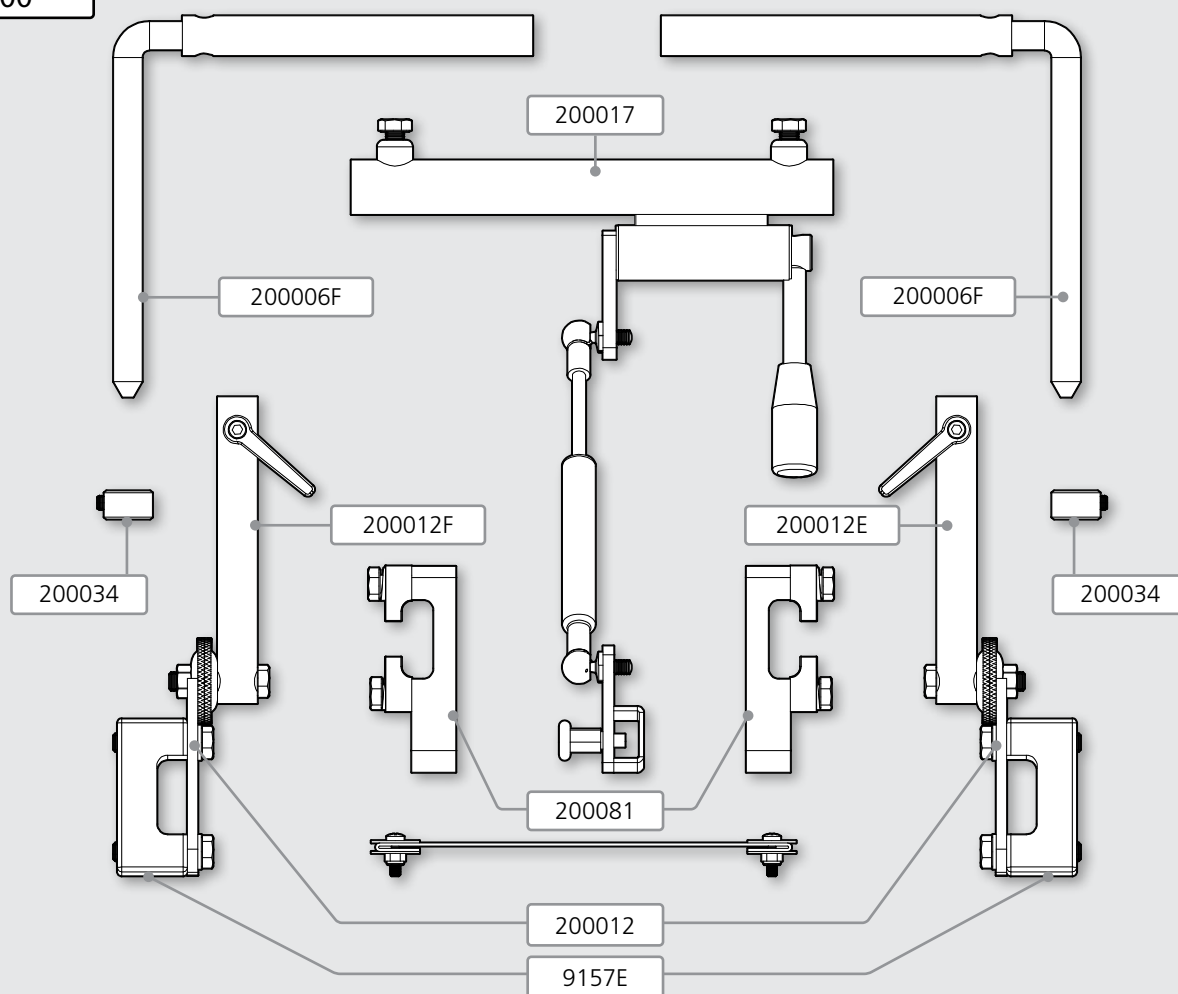

SV

Art. nr.	Beskrivning	Antal
UB9157E	Beslag bak HD/Cirrus	2
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200012	Ställbeslag med tandskiva	2
UB200012E	Fästarm 140 mm höger	1
UB200012F	Fästarm 140 mm vänster	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200081	Beslag fram HD	2

EN

Item. no.	Description	Qty
UB9157E	Bracket rear HD/Cirrus	2
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200012	Steel bracket with cog washer	2
UB200012E	Mounting arm 140 mm right	1
UB200012F	Mounting arm 140 mm left	1
UB200017	Pressure part compl.	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200081	Bracket front HD	2