



UB200626D



Monteringssats Bygel

Monteringssett Bøjle

Assembly kit Bow



75077.2 2022-08-16

Rullstol, Tillverkare:

Impera 39-51cm, HandiCare

Legend 39-51cm, HandiCare

Emineo 39-51cm, HandiCare

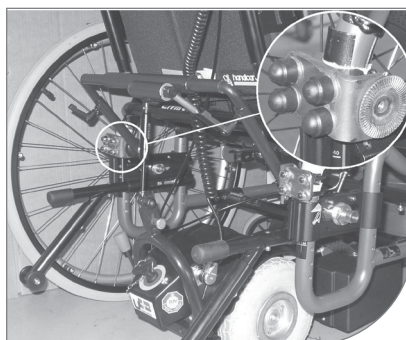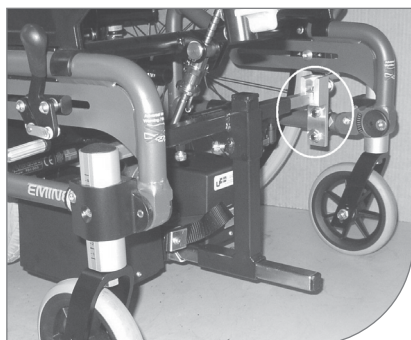max
150 kg

SV

Monteringsinstruktioner

Lille Viking 2000 ska inte monteras på rullstolen förrän den har anpassats för användaren.

Fram

De främre beslagen ska sättas fast direkt bakom framhjulen, på stolens nedersta, vågräta rör. Vrid dem så att hålen för monteringsstängerna är vända nedåt.

Stången ska vändas så att den vinklade bottendelen monteras fram, och vingmuttern är vänd uppåt.

Obs! På de stolar som är 39 cm breda kan beslagen fästas på ramens utsida, eller också kan stången som saknar fräskåra förkortas 5-6 cm.

Bak

Beslagen monteras på det vågräta röret under hjulbeslagen, så att kuggskivorna är vända mot varandra. På så vis går det att problemfritt använda tippskyddet som visas. Om stolens sits är inställd på en låg höjd, och med hjulbeslagen placerade högt upp på ramen, vänds beslagen så att kuggskivorna är uppåt (som bilden visar).

Monteringsarmarna fästs snett uppåt vid kuggskivorna, nära in på sitsens bakkant.

Vinkeljärnen pressas in i tryckdelen, öglorna sätts på och därefter placeras hela anordningen i monteringsarmarna. Det gör att tryckdelen hamnar på ca 49 cm höjd över golvet. Hjälpmotorn placeras under stolen, och dragstången justeras så att drivhjulen hamnar i linje med rullstolens bakhjul. Tryckdelen installeras så att Lille Viking 2000 lyfts helt upp från golvet vid frikoppling, och gasfjädern pressas samman ungefär halvvägs när handtaget är i det nedersta läget.

Kom ihåg att kontrollera att alla funktioner fungerar korrekt efter att ha justerat in Lille Viking 2000 på stolen.



Användning av tippskydd rekommenderas.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com




Kørestol, producent:

Impera 39-51cm, HandiCare

Legend 39-51cm, HandiCare

Emineo 39-51cm, HandiCare

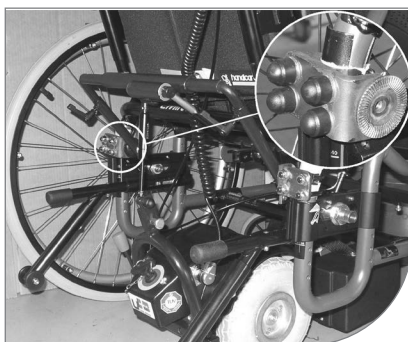

DK

Monteringsvejledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, når den er tilpasset brugeren.

For

De forreste beslag anbringes umiddelbart bag forhjulene, på stolens nederste vandrette rør, og gerne så hullet til udskyderne vender nedad.

Hammelen vendes, så vinkelbundstykket monteres foran, og fingerskruen vender opad.

NB. På 39 cm. brede stole kan beslagene anbringes på stellets udvendige side, eller udskyderen uden fræst spor afkortes 5-6 cm.

Bag

Stelbeslagene monteres på det vandrette rør under hjulbeslagene, så tandskiverne vender mod hinanden. Dermed er det muligt uhindret at anvende de viste anti-tip. Hvis stolen er indstillet til en lav sædehøjde - med hjulbeslagene placeret højt på rammen - vendes stelbeslagene med tandskiverne opad (som vist).

Monteringsarmene anbringes skråt opad på tandskiverne, tæt ind til sædets bagkant.



Monteringsvinklerne skubbes ind i trykdelen, bøjlestoppene sættes på, og hele arrangementet placeres i monteringsarmene, så trykdelen sidder i en højde af ca. 49 cm over gulvet. Hjælpe motoren placeres under stolen og trækstangen justeres, så drivhjulene befinder sig på linie med kørestolens baghjul. Trykdelen indstilles, så Lille Viking 2000 løftes fri fra gulvet under frikobling, og gasfjederen trykkes ca. halvvejs sammen, når håndtaget står i nederste position.

Husk at kontrollere alle funktioner efter indjustering af Lille Viking 2000 på stolen.



Brug af tipsikring anbefales.

Wheelchair, manufacturer:
Impera 39-51cm, HandiCare
Legend 39-51cm, HandiCare
Emineo 39-51cm, HandiCare

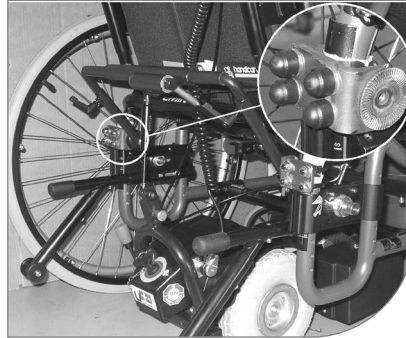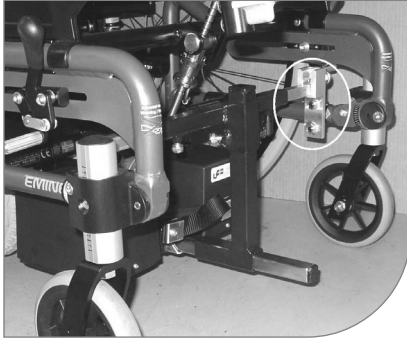

ENG

Monteringsvejledning

Lille Viking 2000 is mounted onto the wheelchair after being adjusted to the user.

Front

The front brackets are fitted right behind the front wheels, on the wheelchair's horizontal tube, preferably so that the holes on the telescopic mounting brackets face downwards. The cross bar in the front centre section is turned so that the angled bar is mounted in front and the finger screw is turned upwards.
NB. On 39 cm wide chairs, the brackets can be fitted on the outside of the frame, or the telescopic mounting bar which does not have a precut track, can be shortened 5-6 cm.

Rear


The steel brackets are mounted onto the horizontal tube beneath the wheel fittings, so that the cog washers are turned against each other. This makes it possible to use the anti-tilts without problems. If the wheelchair has been adjusted to a low seat height – with the wheel bosses placed high up on the frame – the steel brackets should be turned in order to make the cog washers face upwards (as illustrated).

The mounting bars are fitted in an upwards inclination on the cog washers, close to the back edge of the seat. The angled mounting bars are pushed into the pressure part, the bolts for the bow is put on and the whole assembly is fitted into the mounting bars so that the pressure part is 49 cm above ground. The supporting motor is installed underneath the chair and the pulling bar is adjusted. The driving wheels should now be on parallel lines with the wheelchair's rear wheels. The pressure part is adjusted so that Lille Viking 2000 is lifted free off the floor during disengaging and the gas spring is pushed about halfway together when the handle is in lower position.

Remember to check that all functions are working properly after installing Lille Viking 2000 onto the chair.



We recommend the use of anti-tips.

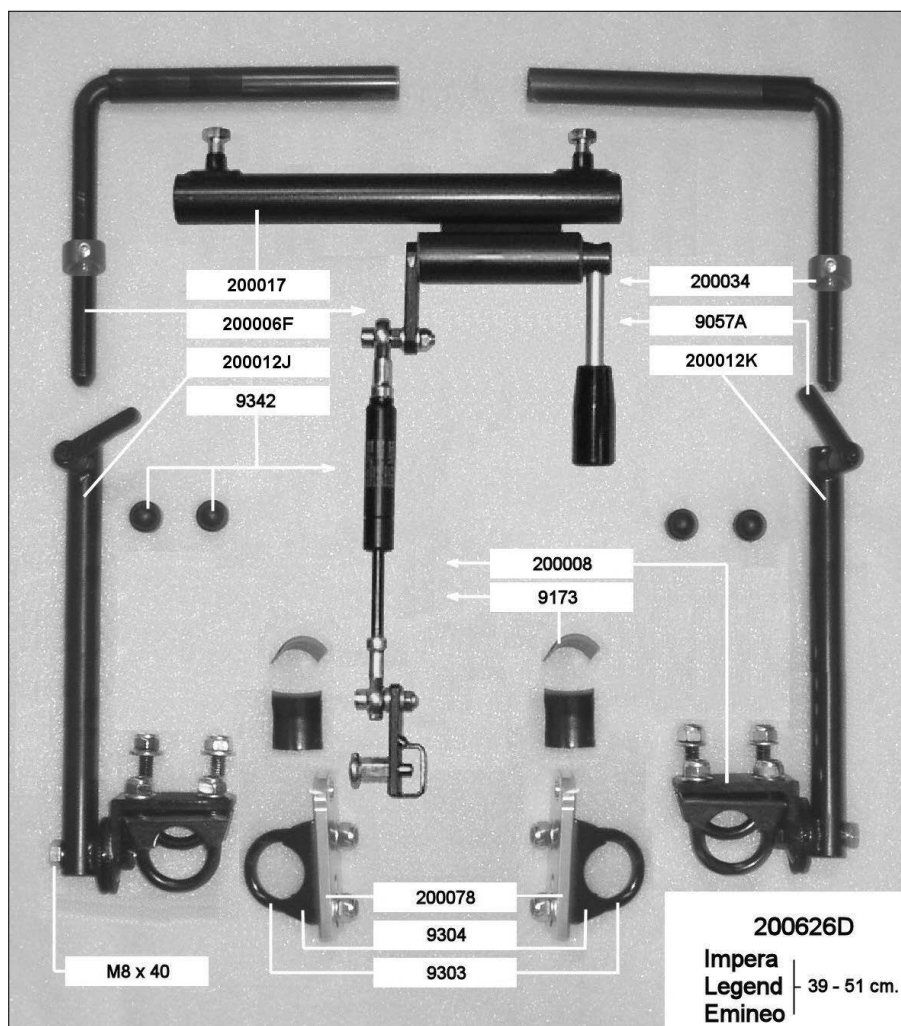

SV

Art.nr	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6 x 12	2
UB9173	Halvskål monteringsbeslag	12
UB9303	Fästklämma bygel 28 mm	6
UB9304	Fästklämma skål 28 mm	6
UB9342	Mutterskydd M8	8
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200008	Ställbeslag bak Handicare	2
UB200012J	Fästarm 300 mm höger	1
UB200012K	Fästarm 300 mm vänster	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200078	Platta för monteringsbeslag yttre	2

ENG

Art.no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB9173	Tube protector mounting bracket	12
UB9303	Mounting clamp bow 28 mm	6
UB9304	Mounting clamp basin 28 mm	6
UB9342	Nut protection M8	8
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200008	Steel bracket rear Handicare	2
UB200012J	Mounting arm 300 mm right	1
UB200012K	Mounting arm 300 mm left	1
UB200017	Pressure part complete	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200078	Fittings bracket front round tubes 22-32 mm	2