



UB200626G






Monteringssats Bygel
Monteringssett Bøjle
Assembly kit Bow

75078.3 2022-08-16



Rullstol, Tillverkare:
HD500 Humlan, 52 cm, Hantverksdesign AB

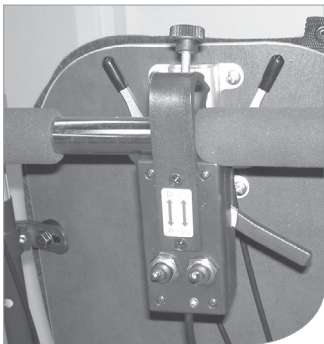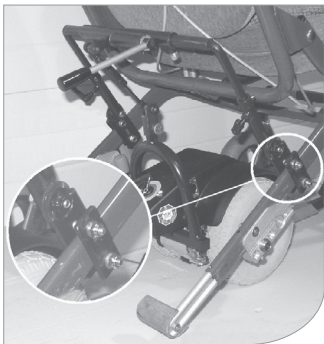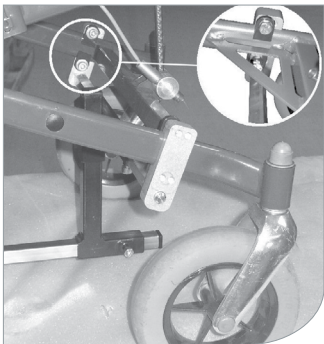

Monteringsanvisning

Lille Viking monteras på rullstolen först efter att den anpassats till brukaren.

Fram

Det främre beslaget placeras så nära som möjligt bakom tvärstaget. Beslaget monteras utvändigt på chassit med hålet neråt och skruvas fast med bultarna i dom bakre hålen. Tvärstaget monteras med mittenröret neråt och bakåt. kontrollera att tvärstaget kan röra sej fritt i förhållande till andra delar.

Bak

De bakre beslagen monteras direkt nedanför böjen på ramröret så högt det går för att inte påverka tippskyddet med tandskivorna inåt. Monteringsarmarna skruvas fast på tandskivorna så att de pekar ca 45 grader bakåt med spakvreden på undersidan. Monteringsvinklarna träs in i tryckdelen, bygelstopparna sätts på och det hela sätts in i monteringsarmarna.

Justera tryckdelen så att den sittervågrätt och med gasfjädern i mitten. Tryckdelen ställs in så att gasfjädern trycks ihop halvvägs och att Lille Viking lyfts 2-3 cm över golvet. Efter slutjusteringen ställs bygelstopparna in och alla skruvar kontrollldras.

Kom ihåg att kontrollera alla funktioner när Lille Viking monterats på stolen.

OBS



Tippskydd ska alltid finnas på rullstolen vid körning med hjälpmotor och dessa ska vara nedfällda.

Körhandtag

Stolen bör vara utrustad med separata bromshandtag för att underlätta placeringen av manöverboxen.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com





--	--	--	--	--	--





Kørestol, producent:
HD500 Humlan, 52 cm, Hantverksdesign AB

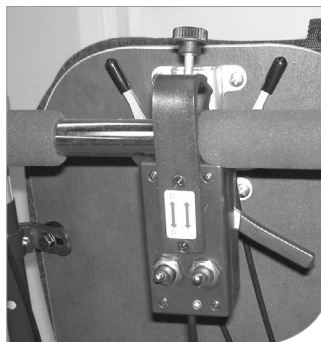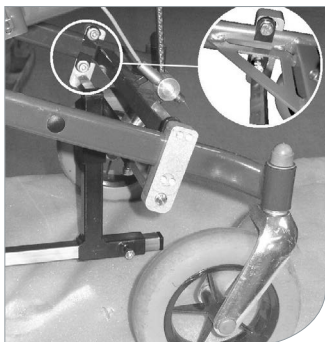

Monteringsveiledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, efter denne er blevet tilpasset brugeren.

For

De forreste beslag placeres så tæt som muligt bag det tværgående rør. Aluminiumsbeslaget anbringes udvendigt på stellet, med hullet nedad. Det grå stålbeslag anbringes som vist, og skrues fast med boltene i de bagerste gevindhuller.

Hammelen placeres med midterrøret nedad og bagud. Husk at kontrollere, om hammelen kan bevæge sig frit, uden at berøre andre dele.

Bag

De bagerste beslag placeres øverst på de skrå rør, umiddelbart nedenfor bøjningen, men så højt oppe, at de ikke generer anti-tippet. Monteringsarmene skrues fast på tandskiverne, så de peger ca. 45 grader bagud, med fingerskruerne på undersiden. Monteringsvinklerne skubbes ind i trykdelen, bøjlestoppene sættes på, og hele arrangementet placeres i monteringsarmene.

Hjælpe motoren placeres under stolen og trækstangen justeres, så drivhjulene befinder sig på linie med kørestolens baghjul.*

Trykdelen indstilles, så Lille Viking 2000 løftes fri fra gulvet under frikobling, og gasfjederen trykkes ca. halvvejs sammen, når håndtaget står i nederste position.

Husk at kontrollere alle funktioner efter indjustering af Lille Viking 2000 på stolen.



OBS



Tipsikringer skal være monteret på kørestolen ved kørsel med hjælpe motor, og de skal være klappet ned.

Speederbox

Vi anbefaler, at stolen udrustes med kørebøjle og separate bremsehåndtag.

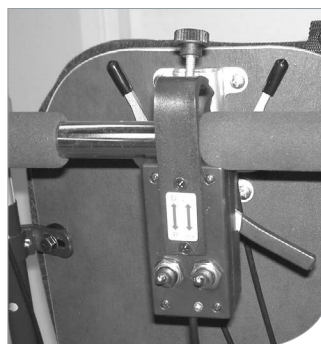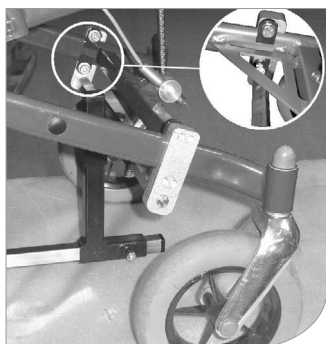

Mounting instructions

Lille Viking 2000 is mounted onto the wheelchair after being adjusted to the user.

Front

The front brackets are fitted as close behind the crossing bar as possible. The aluminium bracket is mounted on the outside of the frame, with the hole pointing downwards. The grey steel bracket is fitted as illustrated, and is fastened with the bolts in the rear holes. The cross bar in the front centre section is fitted with the centre tube downwards and somewhat backwards. Remember to control that the cross bar in the front centre section can move freely without being in contact with other parts.

Rear

The rear brackets are fitted at the top of the inclined tubes, right below the curve, but so far up that it will not be a problem to the anti-tilt. The mounting bars are screwed onto the cog washers, making them point out about 45 degrees backwards, with the fingerscrews on the underside. The angled mounting bars are pushed into the pressure part, the bolts for the bow are fitted and the whole assembly is fitted into the mounting bars.

The supporting motor is installed underneath the chair and the pulling bar is adjusted so that the driving wheels are on parallel lines with the wheelchair's rear wheels. The pressure part is adjusted so that Lille Viking 2000 is lifted free off the floor during disengaging and the gas spring is pushed about halfway together when the handle is in lower position. Remember to control that all functions are working properly after having installed Lille Viking 2000 onto the chair.


NB



The wheelchair must always be equipped with tilt protection when operating using the auxiliary motor and this must be folded down.

Speederbox

We recommend that the wheelchair is fitted with a driving bow and separate brake handles.

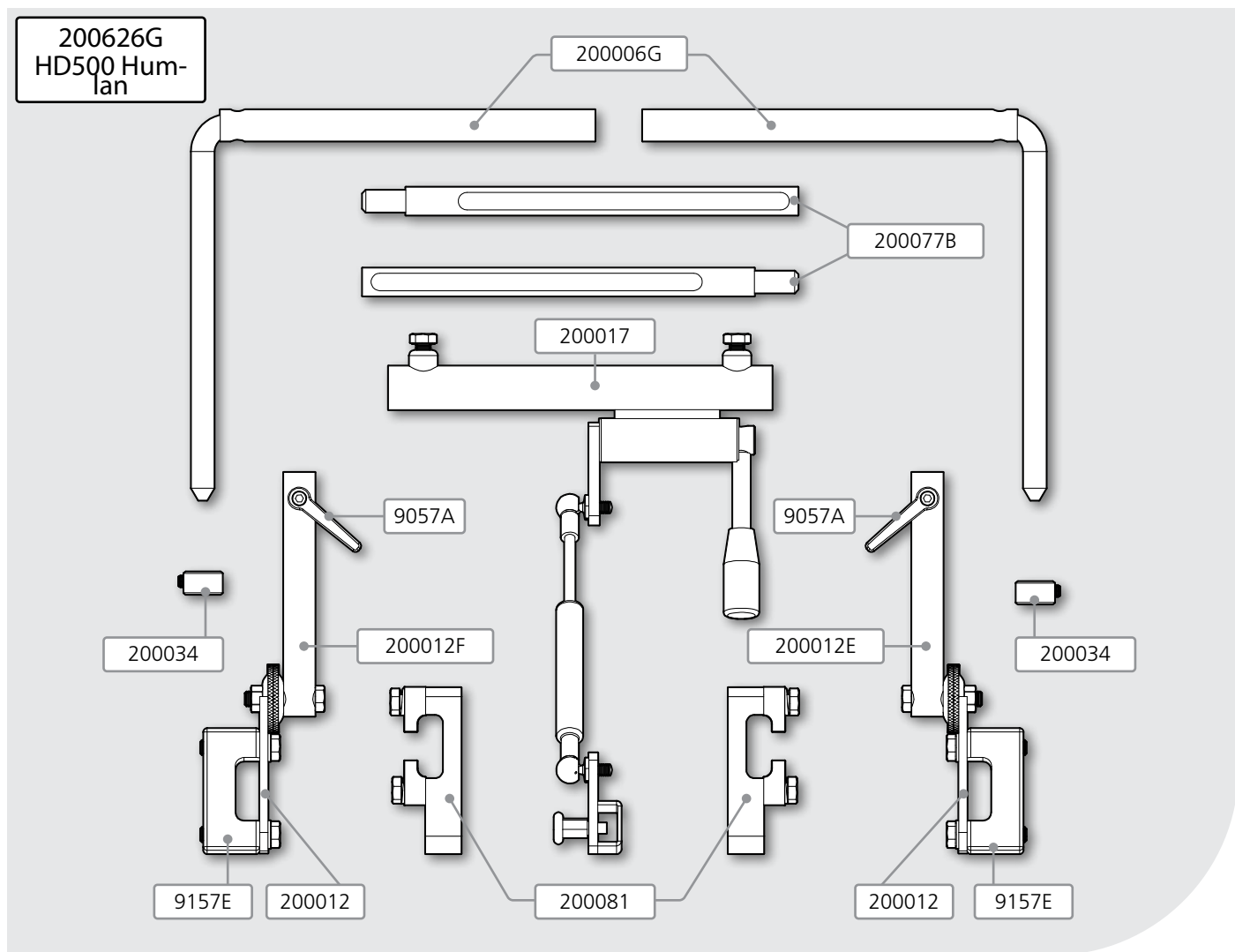

SV

Art. nr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6x12	2
UB9157E	Beslag bak HD/Cirrus	2
UB200006G	Monteringsvinkel extra lång	2
UB200012	Ställbeslag med tandskiva	2
UB200012E	Fästarm 140 mm höger	1
UB200012F	Fästarm 140 mm vänster	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200077B	Teleskopstång 250 mm med spår	2
UB200081	Beslag fram HD	2

EN

Item. no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB9157E	Bracket rear HD/Cirrus	2
UB200006G	Mounting angle extra long	2
UB200012	Steel bracket with cog washer	2
UB200012E	Mounting arm 140 mm right	1
UB200012F	Mounting arm 140 mm left	1
UB200017	Pressure part compl.	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200077B	Telescopic mounting bar 250 mm with precut track	2
UB200081	Bracket front HD	2