



UB200626H

etac®

Monteringssats Bygel

Monteringssett Bøjle




Assembly kit Bow

75079.3 2022-08-16



Rullstol, Tillverkare:
HD650 Humlan, 52cm, Hantverksdesign

MAX
150 kg
330 lbs

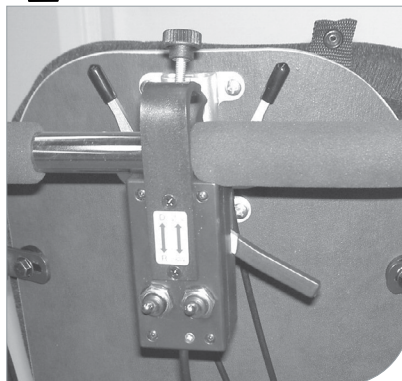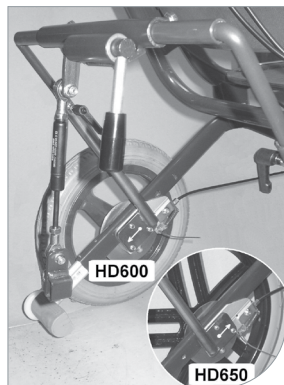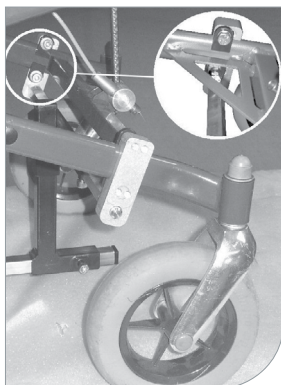

Monteringsanvisning

Lille Viking monteras på rullstolen först efter att den anpassats till brukaren.

Fram

Det främre beslaget placeras så nära som möjligt bakom tvärstaget. Beslaget monteras utvändigt på chassit med hålet neråt och skruvas fast med bultarna i dom bakre hålen. Tvärstaget monteras med mittenröret neråt och bakåt. kontrollera att tvärstaget kan röra sej fritt i förhållande till andra delar.

Bak

Ta bort hjulen så att stolen står på tippskydden. På Humlanstolen sitter det ett tvärstag mellan hjulbeslagen som ska tas bort före monteringen.

Skruva fast armarna invändigt med plattan framåt som på HD650 (se bild). Monteringsvinklarna träs in i tryckdelen, bygelstopparna sätts på och det hela sätts in i monteringsarmarna. Justera tryckdelen så att den sitter vågrätt och med gasfjädern i mitten. Tryckdelen ställs in så att gasfjädern trycks ihop halvvägs och att Lille Viking lyfts 2-3 cm över golvet.

Kontrollera att avståndet mellan hjulbeslagen är detsamma som innan tvärstaget demonterades. Efter slutjusteringen ställs bygelstopparna in och alla skruvar kontrolldras.

Kom ihåg att kontrollera alla funktioner när Lille Viking monterats på stolen.

OBS



Tippskydd ska alltid finnas på rullstolen vid körning med hjälpmotor och dessa ska vara nedfällda.

Stolen bör utrustas med bromshandtag för att inte hindra montering av manöverbox.






Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com





Kørestol, producent:
HD650 Humlan, 52cm, Hantverksdesign

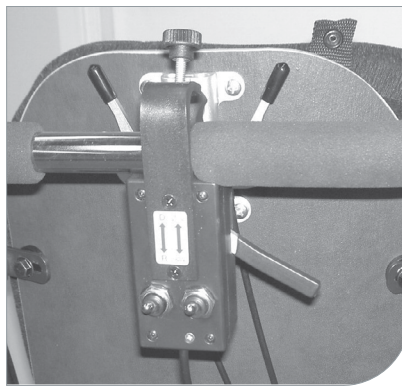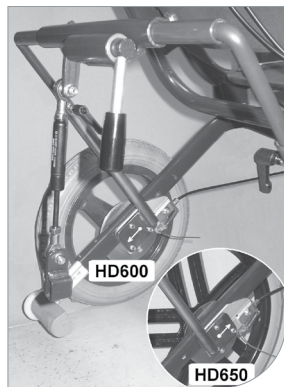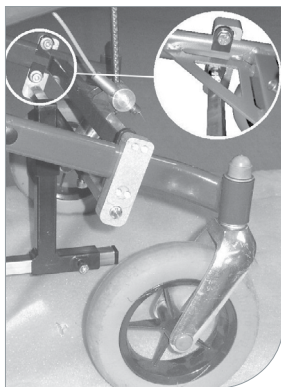

Monteringsvejledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, efter denne er blevet tilpasset brugeren.

For

De forreste beslag placeres så tæt som muligt bag det tværgående rør. Aluminiumsbeslaget anbringes udvendigt på stellet, med hullet nedad. Det grå stålbeslag anbringes som vist, og skrues fast med boltene i de bagerste gevindhuller. Hammelen placeres med midterrøret nedad og bagud. Husk at kontrollere, om hammelen kan bevæge sig frit, uden at berøre andre dele.

Bag

Fjern først hjulene, så stolen står på antitippene. På Humlan-stolen sidder en tværstang mellem hjulbeslagene, som skal fjernes før montagen. Skru armene fast indvendigt på hjulbeslagene, så de vender med pladen fremad, som på HD650. Monteringsvinklerne skubbes ind i trykdelen, bøjlestoppene sættes på, og hele arrangementet placeres i monteringsarmene, så trykdelen sidder i en højde af ca. 49 cm over gulvet.

Hjælpe motoren placeres under stolen og trækstangen justeres, så drivhjulene befinder sig på linie med kørestolens baghjul. Trykdelen indstilles, så Lille Viking 2000 løftes fri fra gulvet under frikobling, og gasfjederen trykkes ca. halvvejs sammen, når håndtaget står i nederste position. Kontrollér at afstanden mellem stolens hjulbeslag fortsat er den samme, som før tværstangen blev fjernet.

Husk at kontrollere alle funktioner efter indjustering af Lille Viking 2000 på stolen.

OBS






Tipsikringer skal være monteret på kørestolen ved kørsel med hjælpemotor, og de skal være klappet ned.

Speederbox

Vi anbefaler, at stolen udrustes med kørebøjle og separate bremsehåndtag.



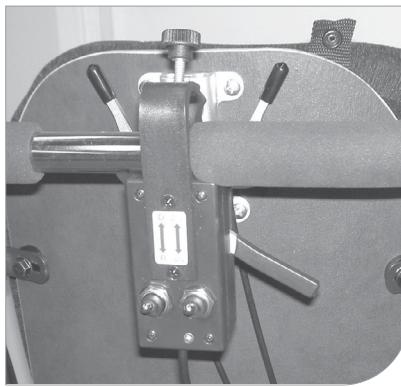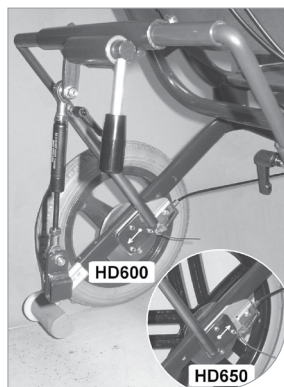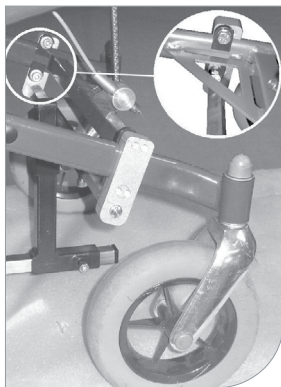

Mounting Instructions

Lille Viking 2000 is mounted onto the wheelchair after being adjusted to the user.

Front

The front brackets are fitted as close behind the crossing bar as possible. The aluminium bracket is mounted on the outside of the frame, with the hole pointing downwards. The grey steel bracket is fitted as illustrated, and is fastened with the bolts in the rear holes. The cross bar in the front centre section is fitted with the centre tube downwards and somewhat backwards. Remember to check that the cross bar in the front centre section can move freely without being in contact with other parts.

Rear

Remove the wheels, so the chair will stand at the anti tip. The Humlan-chair has a cross bar between the wheel brackets which has to be removed before mounting. Fasten the arms on the inside of the wheel brackets, so that the plate is pointing forward, like the HD650. The angled mounting bars are pushed into the pressure part, mount the bow stoppers, and fit the whole assembly into the mounting bars so that the pressure part is in a height of about 49 cm above ground.

Lille Viking 2000 support motor is placed beneath the chair, and the pull bar is adjusted, so that the driving wheels are on parallel lines with the wheelchairs' rear wheel. The pressure part is adjusted so that Lille Viking 2000 is free off the ground during disengaging, and the gas spring is pushed about halfway together when the handle is in the lowest position. Check that the space between the chair's wheel bracket is the same as before removing the cross bar. Remember to check that all functions are working properly after having installed Lille Viking 2000 onto the chair.

NB.




The wheelchair must always be equipped with tilt protection when operating using the auxiliary motor and this must be folded down.

Speederbox

We recommend that the wheelchair is fitted with a driving bow and separate brake handles.



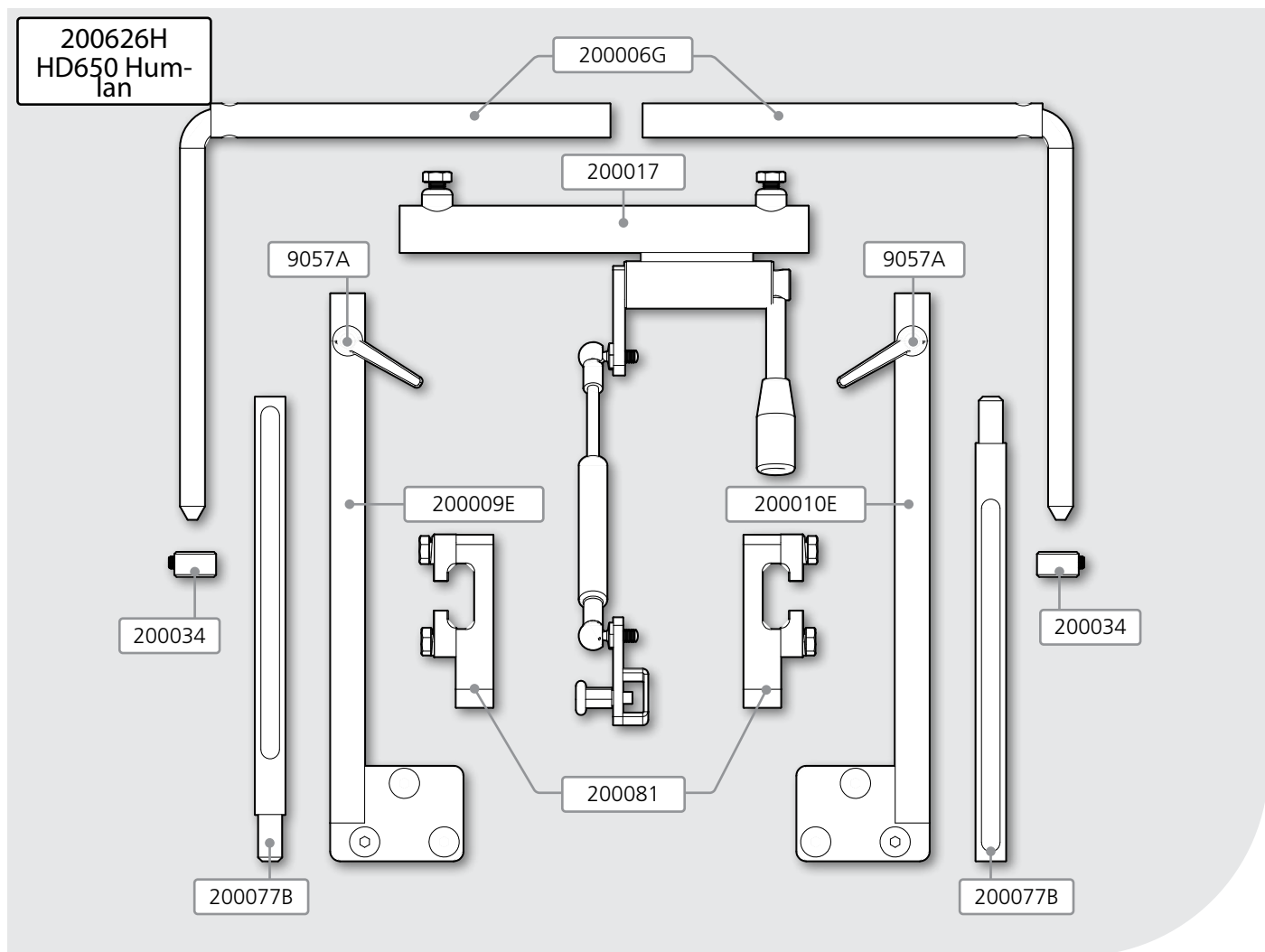

SV

Art. nr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6x12	2
UB200006G	Monteringsvinkel extra lång	2
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200009E	Monteringsarm HD höger	1
UB200010E	Monteringsarm HD vänster	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200077B	Teleskopstång 250 mm med spår	2
UB200081	Beslag fram HD	2

EN

Item. no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB200006G	Mounting angle extra long	2
UB200017	Pressure part compl.	1
UB200009E	Mounting arm HD right	1
UB200010E	Mounting arm HD left	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200077B	Telescopic mounting bar 250 mm with precut track	2
UB200081	Bracket front HD	2