



UB200629C



Monteringssats Rem



Monteringssett Rem

Assembly kit Strap

75081.2 2022-08-16

Rullstol, Tillverkare:

Azalea, Invacare

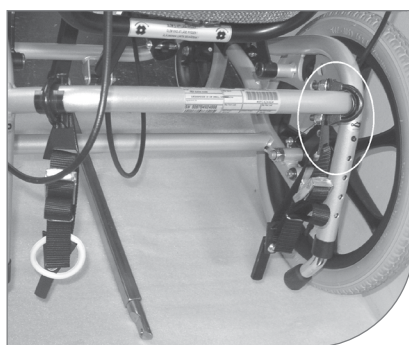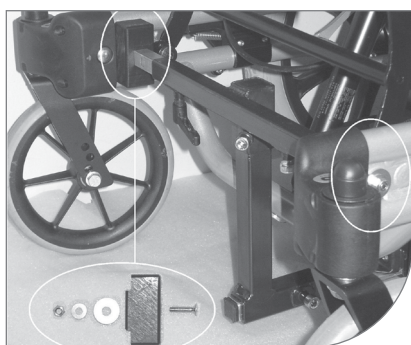

SV

Monteringsinstruktioner

Lille Viking 2000 ska inte monteras på rullstolen förrän den har anpassats för användaren.

Fram

De svarta plastbeslagen monteras i hålen på ramen, strax bakom framhjulen. Du kan behöva lossa framhjulsupphängningen en aning för att kunna sätta beslaget på plats. Plastbeslaget sätts fast med de försänkta skruvarna som sticks genom hålet inifrån och ut, och dras sedan åt med brickor och muttrar på ramens utsida.

Stången ska vändas så att fyrkantsröret till den vinklade bottendelen vänds bakåt och nedåt.

Baksida

Beslagen fästs på det tvärgående röret bakom sitsen, med remhållarna på framsidan av röret (se foto). Avståndet mellan remmarna bör vara minst 32 cm.

Obs!

Det är viktigt att stolens bakdäck pumpas upp till högsta däckstryck!

Hjälpmotorn placeras under stolen, och justeras i längsled, så att röret mellan stolens bakhjul passerar mellan batteriet och hjulen. Frikopplingshöjden anpassas efter behov med hjälp av remmarna så att motorn ligger an helt mot det tvärgående röret bakom sitsen.

Ledsagaren måste få information om hur remmarnas längd justeras, samt om stolens funktioner nu är begränsade på något sätt.





Användning av tippskydd rekommenderas.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



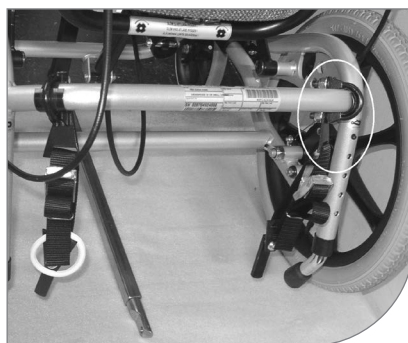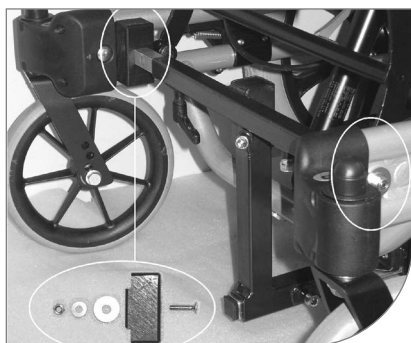

DK

Monteringsveiledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, når den er tilpasset brugeren.

For

De sorte plastbeslag monteres i hullerne på rammen lige bag forhjulene. Det kan være nødvendigt at løsne forhjulophænget en smule, for at få beslaget på plads. Plastbeslaget spændes fast med de undersænkede skruer igennem hullet til udskyderne og med skiver og møtrikker på ydersiden af rammen.

Hammelen vendes, så firkanttrøret til vinkelbundstykket vender bagud og nedad.

Bag

Beslagene anbringes på det tværgående rør bag sædet med remmeholderne på forsiden af røret (se foto). Afstanden mellem remmene bør være min. 32 cm

OBS

Det er vigtigt, at stolens bagdæk er pumpede til højeste dæktryk!



Hjælpe motoren placeres under stolen og justeres på langs, så røret mellem stolens baghjul passerer mellem batteriet og hjulene. Frikoblingshøjden justeres nøjagtigt ved hjælp af remmene, så motoren går helt op imod det tværgående rør bag sædet.

Ledsageren skal instrueres i justering af remmenes længde, samt i eventuelle begrænsninger af sædefunktionerne.



Brug af tipsikring anbefales.

Wheelchair, manufacturer:
Azalea, Invacare

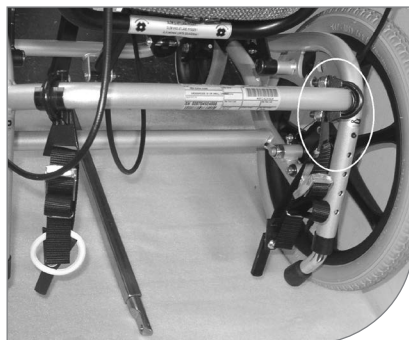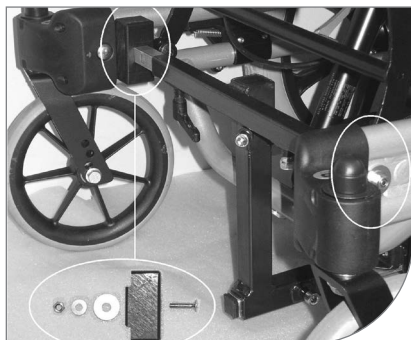

ENG

Mounting Instructions

Lille Viking 2000 is mounted on to the wheelchair after being adjusted to the user.

Front

The black plastic brackets are mounted into the holes at the frame, right behind the front wheels. It might be necessary to unfasten the fixing device a little, to get the bracket in place.

The plastic bracket is tightened firmly with the countersunk screws through the holes in the telescopic bars, with washers and nuts on the outer side of the frame. The cross bar centre section is turned so the square tube for the angle bracket is turning backwards and downwards.

Rear

The brackets shall be put on the cross bar behind the seat, the strap holders should be on the front side of the tube. (see photo). The distance between the straps should be at least 32 cm.


OBS

It is important that the chair's rear wheels have maximum pressure! The supporting motor is placed under the chair, and shall be adjusted lengthwise so that the tube between the chair's rear wheels is passing between the battery and the wheels. The height during disengaging is precisely adjusted by the straps, so that the motor will go all the way up against the transverse tube behind the seat.

The companion must be given directions in adjustments of the strap length, and also in possible restrictions for the seat functions.



We recommend the use of anti-tips.

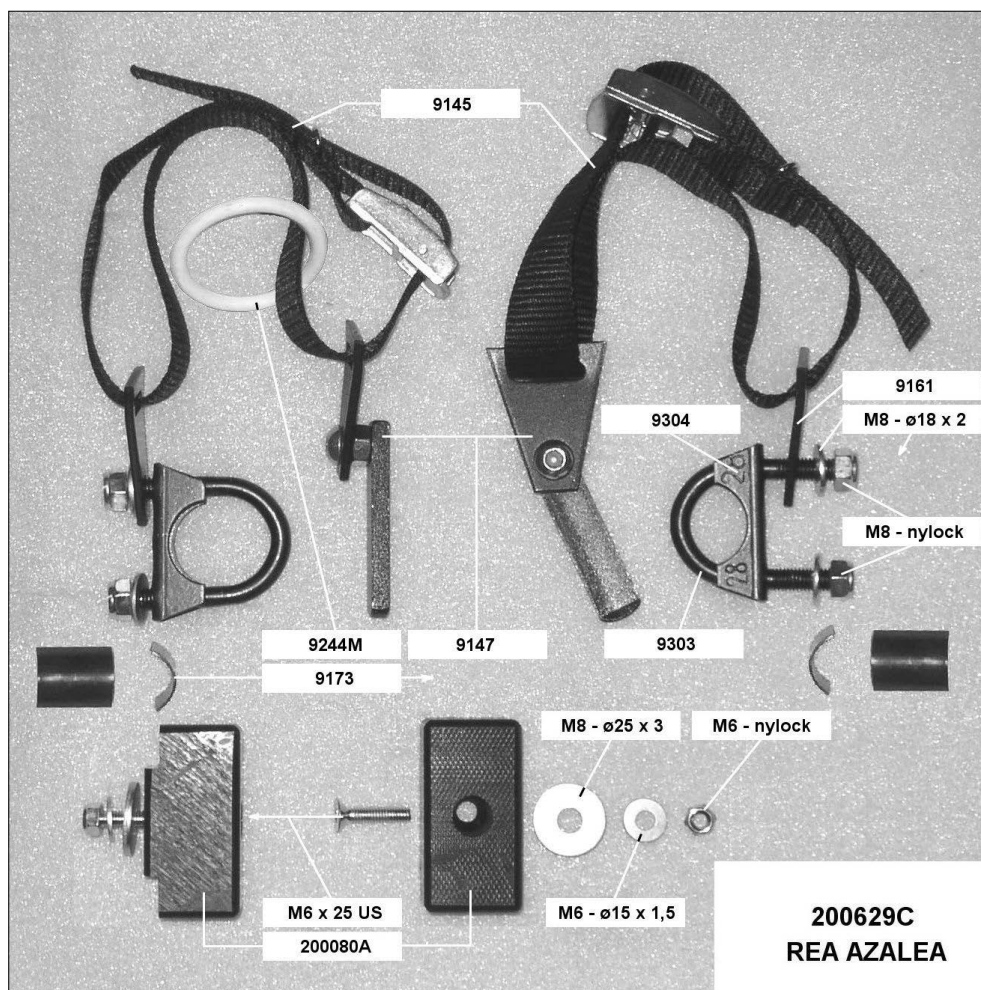

SV

Art.nr	Beskrivning	Antal
UB9145	Rem Lille Viking	2
UB9147	Remfäste övre och nedre	2
UB9161	Remhållare	2
UB9173	Halvskål monteringsbeslag	4
UB9244M	Gummiring vit	1
UB9303	Fästklämma bygel 28 mm	2
UB9304	Fästklämma skål 28 mm	2
UB200080A	Monteringsbeslag fram Bellis	2

ENG

Art.no.	Description	Qty
UB9145	Strap Lille Viking	2
UB9147	Strap fastening with holder	2
UB9161	Belt holder	2
UB9173	Tube protector mounting bracket	4
UB9244M	Rubber ring white	1
UB9303	Mounting clamp bow 28 mm	2
UB9304	Mounting clamp basin 28 mm	2
UB200080A	Mounting bracket front Bellis	2