



UB200629D




Monteringssats Bygel

Monteringssett Bøjle

Assembly kit Bow

75082.3 2022-08-16

Rullstol, Tillverkare:
Azalea, Invacare

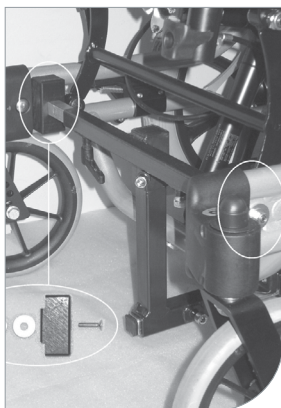

SV

Monteringsanvisning

Lille Viking monteras på rullstolen först efter att den anpassats till brukaren.

Fram

Monteringsbeslag UB200080A monteras i hålen bakom länkhjulsfästet. Det kan ibland behöva lossa på länkhjulsfästet för att få plats med beslaget. Beslaget skruvas fast med försänkta skruvar genom hålet för teleskopstången och med brickor och mutter på utsidan av ramen. Tvärstaget vänds med fyrkantsröret bakåt och neråt.

Bak

Beslagen så långt bakåt det går på det understa horisontella rören med tandskivorna uppåt och inåt. Monteringsarmarna skruvas fast på tandskivorna så att de kommer strax bakom tvärstaget. Monteringsvinklarna träas in i tryckdelen, bygelstopparna sätts på och det hela sätts in i monteringsarmarna. Drivmotorn justeras i stolens längdled så att tvärstaget under stolen passerar mellan motor och batteri. Justera tryckdelen så att den sitters vågrätt och med gasfjädern i mitten. Tryckdelen ställs in så att gasfjädern trycks ihop halvvägs och att Lille Viking lyfts 2-3 cm över golvet. Lyfthöjden justeras så att motorn går helt upp mot tvärstaget på stolens rygg. Efter slutjusteringen ställs bygelstopparna in och alla skruvar kontrolleras.

OBS

Kom ihåg att kontrollera alla funktioner när Lille Viking monterats på stolen.




Användning av tippskydd rekommenderas.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



Kørestol, producent:
Azalea, Invacare

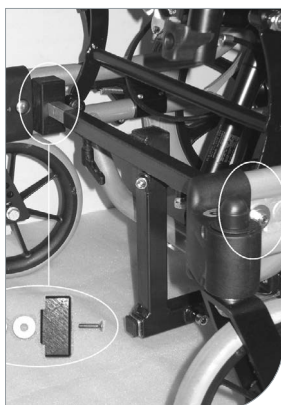

Monteringsvejledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, når den er tilpasset brugeren.

For

Udskyderbeslag UB200080A monteres i hullerne på rammen lige bag forhjulene. Det kan være nødvendigt at løsne forhjulophænget en smule, for at få beslaget på plads. Plastbeslaget spændes fast med de undersænkede skruer igennem hullet til udskyderne og med skiver og møtrikker på ydersiden af rammen. Hammelen vendes, så firkanttrøret til vinkelbundstykket vender bagud og nedad.

Bag

Beslagene anbringes længst muligt tilbage på det nederste vandrette rør, så tandskiverne vender opad og mod hinanden. Rørene monteres på tandskiverne, så de passerer tæt bag det vandrette rør. Bøjlesystemet monteres og justeres, så sædefunktionerne så vidt muligt ikke begrænses.

OBS

Det er vigtigt, at stolens bagdæk er pumpede til højeste dæktryk!


Hjælpemotoren placeres under stolen og justeres på langs, så røret mellem stolens baghjul passerer mellem batteriet og hjulene. Løftehøjden under frikobling justeres nøjagtigt, så motoren går helt op imod det tværgående rør bag sædet.

Ledsageren skal instrueres i eventuelle begrænsninger af sædefunktionerne.



Brug af tipsikring anbefales.

Wheelchair, manufacturer:
Azalea, Invacare

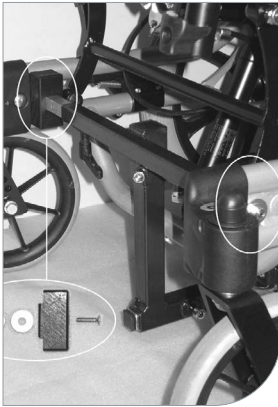

Mounting Instructions

Lille Viking 2000 is mounted on to the wheelchair after being adjusted to the user.

Front

Mounting bracket UB200080A are mounted into the holes at the frame, right behind the front wheels. It might be necessary to unfasten the fixing device a little, to get the bracket in place.

The plastic bracket is tightened firmly with the countersunk screws through the holes in the telescopic bars, with washers and nuts on the outer side of the frame. The cross bar centre section is turned so the square tube for the angle bracket is turning backwards and downwards.

Rear

The brackets are mounted as far back as possible at the lowest horizontal tube, so that the cog washers are turned upwards and are facing each other.

The tubes are to be mounted on the cog washers, so that they pass by close behind the horizontal tube. Then the bow system is mounted and adjusted preferably so the seat functions not becomes limited.


NB

It is important that the chair's rear wheels have maximum pressure! The supporting motor is placed under the chair, and adjusted lengthwise, so the tube between the chair's rear wheels is passing between the battery and the wheels. The lifting height when disengaged is adjusted precisely, so that the motor will go all the way up against the transverse tube behind the seat.

The companion must be given directions of possible restrictions for the seat functions.



We recommend the use of anti-tips.

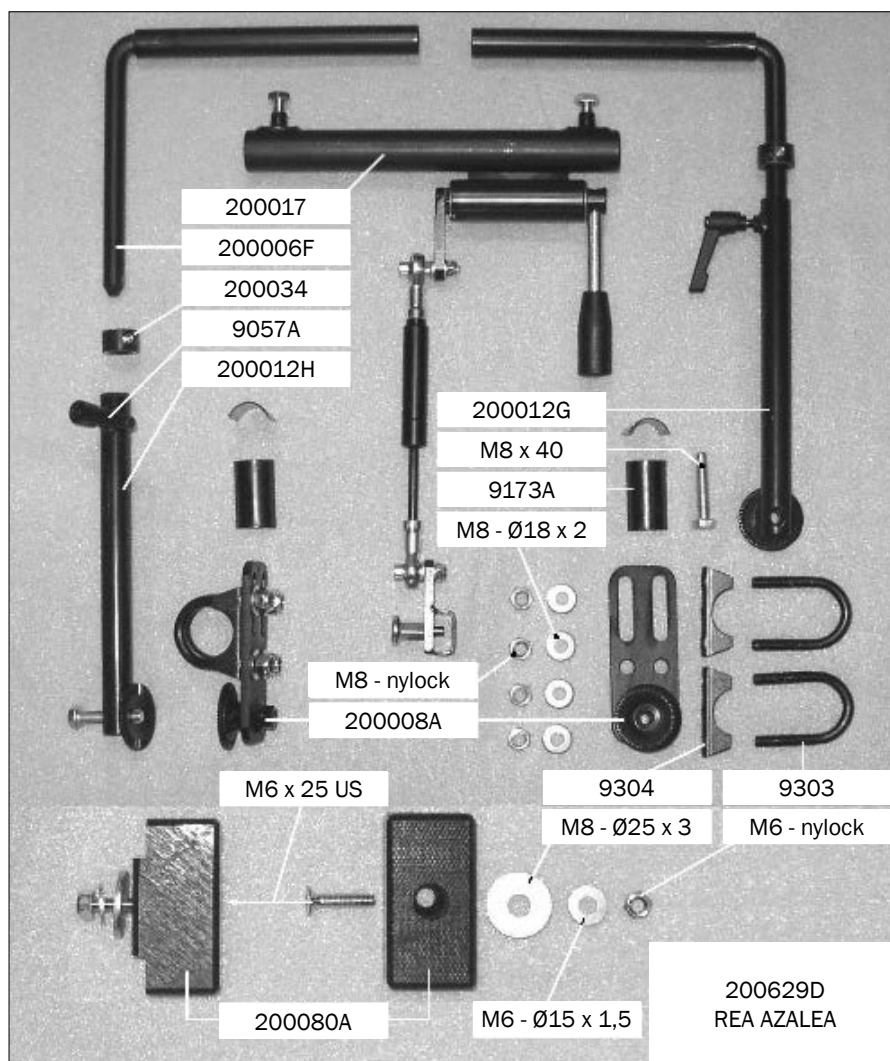

SV

Art.nr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6X12	2
UB9173A	Halvskål lång	4
UB9303	Fästklämma bygel 28 mm	4
UB9304	Fästklämma skål 28 mm	4
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200008A	Beslag med tandskiva	2
UB200012H	Fästarm 200 mm vänster	1
UB200012G	Fästarm 200 mm höger	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200080A	Monteringsbeslag fram Bellis	2

ENG

Art.no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6 x 12	2
UB9173A	Half basin long	4
UB9303	Mounting clamp bow 28 mm	4
UB9304	Mounting clamp basin 28 mm	4
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200008A	Bracket with cog washer	2
UB200012H	Mounting arm 200 mm left	1
UB200012G	Mounting arm 200 mm right	1
UB200017	Pressure part complete	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200080A	Mounting bracket front Bellis	2