





UB200633F



Monteringssats Bygel
Monteringssett Bøjle
Assembly kit Bow

75085.2 2022-08-16

Rullstol, Tillverkare:
Rea Focus 38-53, Invacare

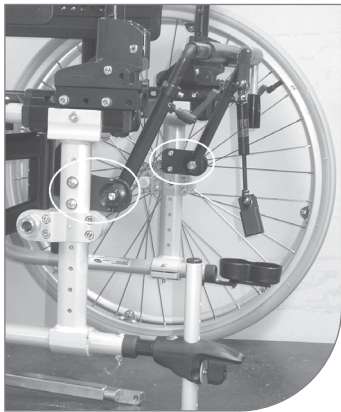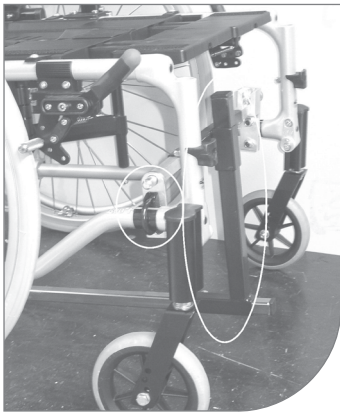

max
150 kg

SV

Monteringsanvisning

Lille Viking monteras på rullstolen först efter att den anpassats till brukaren.

Fram

De främre beslagen monteras på ramrören direkt bakom länkhjulsfästet och med hålet på beslaget uppåt. Tvärstaget monteras med vinkelstycket framåt och med skruven neråt (se foto).

OBS

Byt ut std vinkelstycke mot det långa som följer monteringsatsen.

Bak

De bakre beslagen monteras på den övre delen av aluprofilen där hjulnaven är monterade. På smala stolar vänds tandskivorna utåt och på breda inåt. Skruva fast monteringsarmarna på beslagen så att tryckdelen kommer mitt över fästöglan på drivmotorn. Placera bygelstopparna på monteringsvinklarna som skjuts in i tryckdelen. Hela anordningen anbringas sedan i monteringsarmarna. Justera höjden så att tryckdelen är ca 48 cm över golvet. Ställ in tryckdelen så att den sitter vågrätt med gasfjädern i mitten. Efter att kopplingsdelen fästs på fästöglan på drivmotorns båge efterjusteras tryckdelen så att gasfjädern trycks ihop halvvägs när handtaget är i nedersta läget. Kontrollera att Lille Viking lyfts upp 2-3 cm från golvet vid frikoppling samt att handtaget är stadigt i sina lägen.

Efter slutjusteringen ställs bygelstopparna in och alla skruvar kontrolleras.



Användning av tippskydd rekommenderas.




Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



--	--	--	--	--	--	--



Kørestol, producent:
Rea Focus 38-53, Invacare

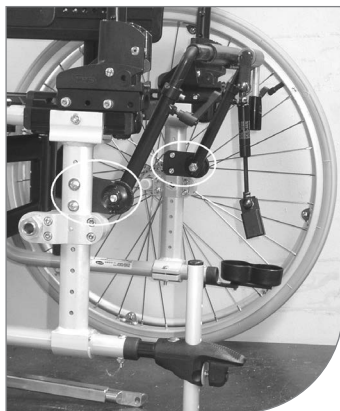

max
150 kg

Monteringsvejledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, når den er tilpasset brugeren.

For

De forreste beslag anbringes på stelrørene umiddelbart bag forhjulene, så hullet til udskyderne vender opad. Hammelen vendes, så vinkelbundstykket monteres foran, og skruen vender nedad (bemærk detaljer på foto).

OBS

Det er nødvendigt at anvende en høj model af vinkelbundstykket – art.nr. 200019C.

Bag

Stelbeslagene anbringes på den øverste halvdel af alu-profilen, hvor hjulnavene er monteret.

På smalle stole vendes beslagene med tandskiverne udad, og på brede stole med skiverne mod hinanden.

Montagearmene monteres skråt opad på tandskiverne, tæt ind til sædets bagkant.

Monteringsvinklerne skubbes ind i trykdelen, bøjlestoppene sættes på, og hele arrangementet placeres i armene, så trykdelen sidder i en højde af ca. 49 cm over gulvet.

Hjælpemotoren placeres under stolen og trækstangen justeres, så drivhjulene befinder sig på linie med kørestolens baghjul.

Trykdelen indstilles, så Lille Viking 2000 løftes fri fra gulvet under frikobling, og gas-fjederen trykkes ca. halvvejs sammen, når håndtaget står i nederste position.

Husk at kontrollere alle funktioner efter indjustering af Lille Viking 2000 på stolen.



Brug af tipsikring anbefales.

Wheelchair, manufacturer:
Rea Focus 38-53, Invacare



Mounting Instructions

Lille Viking 2000 is mounted on to the wheelchair after being adjusted to the user.

Front

The front brackets are placed on the frame tubes right behind the front wheels, with the hole for the telescopic bars pointing upwards. The cross bar 's centre section must be turned so the angled bracket is mounted in front, and the screw is pointing downwards (see photo).

NB. It is necessary to use a high model of the pull bar bracket.

Rear

The rear fittings are placed on the upper half of the aluminium section, where the wheel hubs are mounted. For narrow chairs the fittings should be turned with the cog washers pointing outwards, and for wide chairs the cog washers should face each other. The mounting bars are fitted aslant upwards, on the cog washers, close to the rear edge of the seat.

The angled mounting bars are pushed into the pressure part, the bow stoppers are put on and the whole assembly is fitted into the mounting bars so that the pressure part is ca. 49 cm above ground.


The supporting motor is installed underneath the chair and the pulling bar is adjusted. The driving wheels should now be on parallel lines with the wheelchair's rear wheels.

The pressure part is adjusted so that Lille Viking 2000 is lifted free off the ground during disengaging and the gas spring is pushed about halfway together when the handle is in the lowest position.

NB! Remember to check all functions after fitting Lille Viking 2000 on to the wheelchair.



We recommend the use of anti-tips.

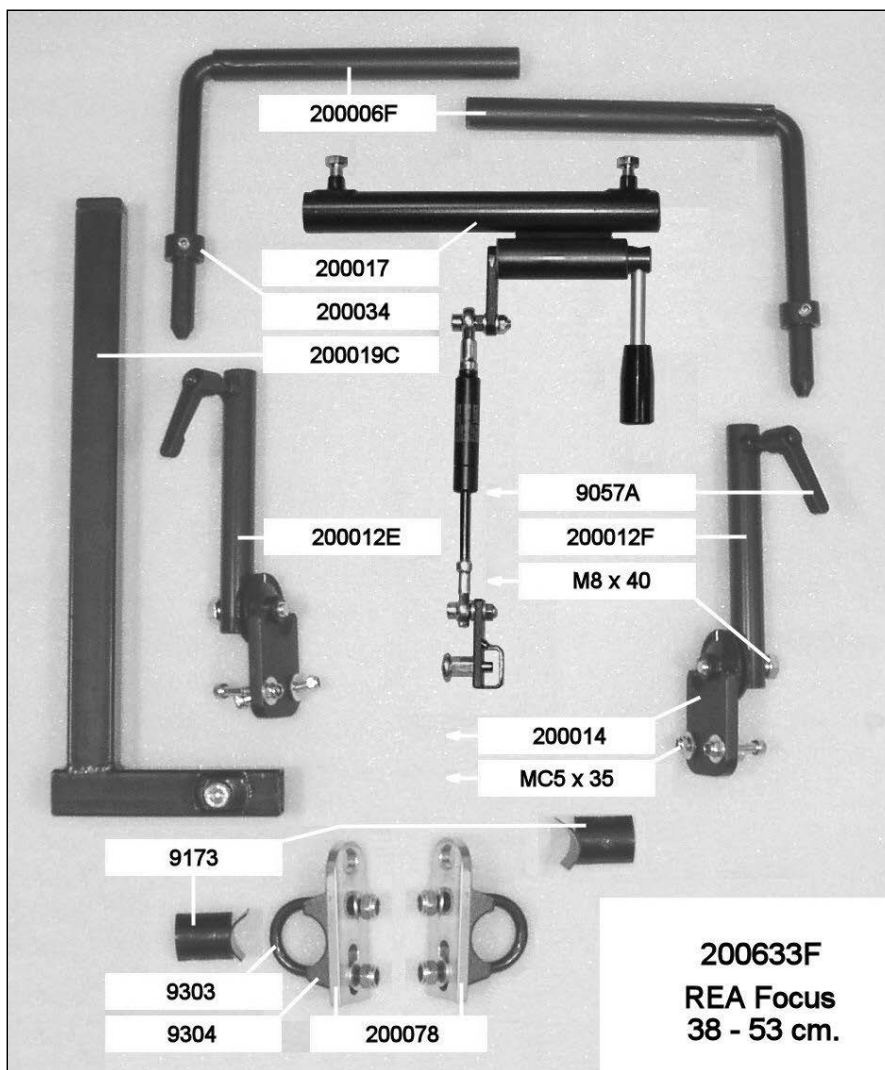

SV

Artnr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6x12	2
UB9173	Halvskål monteringsbeslag	4
UB9303	Fästklämma bygel 28 mm	2
UB9304	Fästklämma skål 28 mm	2
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200012E	Fästarm 140 mm höger	1
UB200012F	Fästarm 140 mm vänster	1
UB200014	Beslag bak Roxx	2
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200019C	Vinkelstag	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200078	Platta för monteringsbeslag yttre	2

ENG

Art.no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB9173	Tube protector mounting bracket	4
UB9303	Mounting clamp bow 28 mm	2
UB9304	Mounting clamp basin 28 mm	2
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200012E	Mounting arm 140 mm right	1
UB200012F	Mounting arm 140 mm left	1
UB200014	Bracket rear Roxx	2
UB200017	Pressure part compl.	1
UB200019C	Pull bar bracket	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200078	Fitting bracket front round tubes 22-32 mm	2