



UB200633K





Monteringssats Bygel

Monteringssett Bøjle

Assembly kit Bow

75086.2 2022-08-16

Rullstol, Tillverkare:
Bellis, Invacare

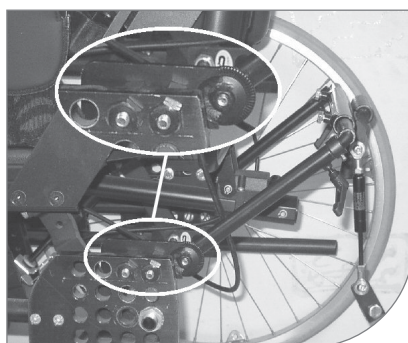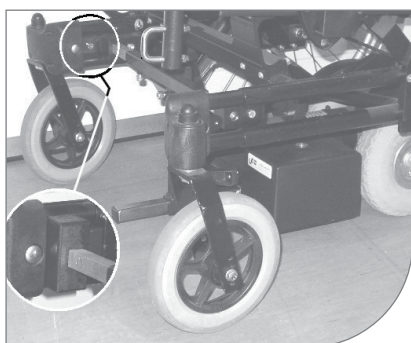

max
150 kg

SV

Monteringsanvisning

Lille Viking monteras på rullstolen först efter att den anpassats till brukaren. Pga frihöjden under stolen kan Lille Viking monteras endast när sitthöjden är i de två högsta lägena och med 24" drivhjul.

Fram

Ta bort de två 6 mm skruvarna som sitter invändigt på ramen strax bakom länkhjulsfästena. montera därefter de två plastbeslagen och skruva fast dom med de försänkta skruvarna genom hålet för teleskopstången. Tvärstaget monteras med fyrkanthålet bakåt och neråt.

Bak

På grund av utrymmesbrist under stolen (det tvärgående staget) är det nödvändigt att flytta hjulen (24") till någon av den understa hålraderna. Det kan också vara nödvändigt att flytta ut navhylsorna så inte låsmekanismen i hjulaxlarna påverkas. Monteringsarmarna skruvas fast på tandskivorna snett uppåt och bygelsystemet justeras så att tryckdelen sitter ca 48 cm över golvet och i mitten.

Hjälpmotorn justeras i djupled så att den inte hindrar sitsens justeringsmöjligheter.

Vårdaren skall instrueras i eventuella begränsningar av sitsfunktionerna.





Användning av tippskydd rekommenderas.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



Kørestol, producent:
Bellis, Invacare

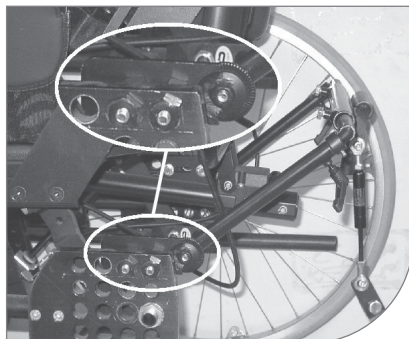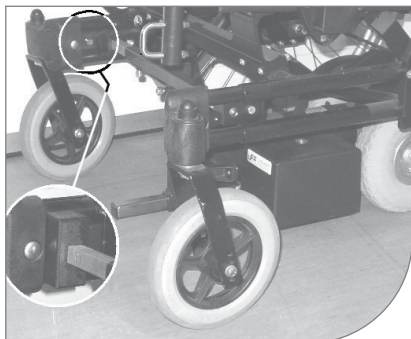

Monteringsvejledning

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, når den er tilpasset brugeren.

Af hensyn til frihøjden under stolen er det dog nødvendigt, at baghjulene monteres i én af de 2 nederste rækker i hulpladerne.

For

Fjern de to 6 mm skruer, som sidder indvendigt på rammen lige bagved forhjulene. Montér derefter de sorte plastbeslag, og spænd dem fast med de undersænkede skruer igennem hullet til udskyderne.

Hammelen vendes, så røret i midten til vinkelbundstykket vender nedad.

Bag

På grund af den trange plads under det tværgående rør midt under stolen, kan det blive nødvendigt at flytte hjulene til én af de 2 nederste hulrækker - se foto. Desuden kan det være påkrævet at justere hjulnavene længere ud i pladerne, så låsemekanismen i akslerne kan fungere og hjulene dreje frit.

Rørene monteres på tandskiverne, så de peger skråt opad, og bøjlesystemet justeres, så trykdelen sidder ca. 49-50 cm over gulvet.

Hjælpemotoren placeres under stolen og indstilles på langs, så hjulene rører jorden midt under stolens baghjul. Det kan dog være en fordel, at justere den lidt bagud, så der bliver bedre plads til, at sædet kan tippes.



Ledsageren skal instrueres i eventuelle begrænsninger af sædefunktionerne.



Brug af tipsikring anbefales.



Wheelchair, manufacturer:
Bellis, Invacare

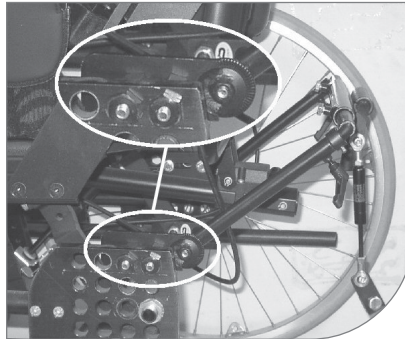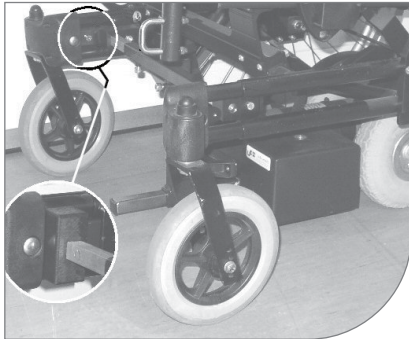

Mounting Instructions

Lille Viking 2000 is mounted on to the wheel chair after being adjusted to the user. Because of the free height beneath the chair, it is necessary however, that the rear wheels are mounted in one of the 2 lower ranges in the perforated plates.

Front

Remove the two 6 mm screws that are located inside of the frame just behind the front wheels. Then, mount the two large black plastic covers and tighten them with the lower died screws through the hole to the releaser devices. The cross bar in the front centre section is turned so that the tube in the centre of the angled bracket faces downwards.

Rear

Because of the lack of space underneath the chair, caused by a cross beam, it can be necessary to move the wheels down to one of the 2 lower mounting positions (see photo). It can also be necessary to adjust the wheelbase so the locking mechanism on the shaft will lock safely, and the wheels can be turned freely. The tubes shall be mounted on the toothwashers, so that they are pointing in an angle backwards, and the bow system has to be adjusted so that the pressure parts is fixed in a position 49-50 cm above the floor.


The support motor is placed beneath the chair and is adjusted lengthwise so that the wheels touch ground right in the middle under the chair's rear wheel. It can be an advantage however, to adjust it somewhat further back, to make more space for the seat to tilt.

The companion should be instructed in any possible limitations of the seat functions.



We recommend the use of anti-tips.



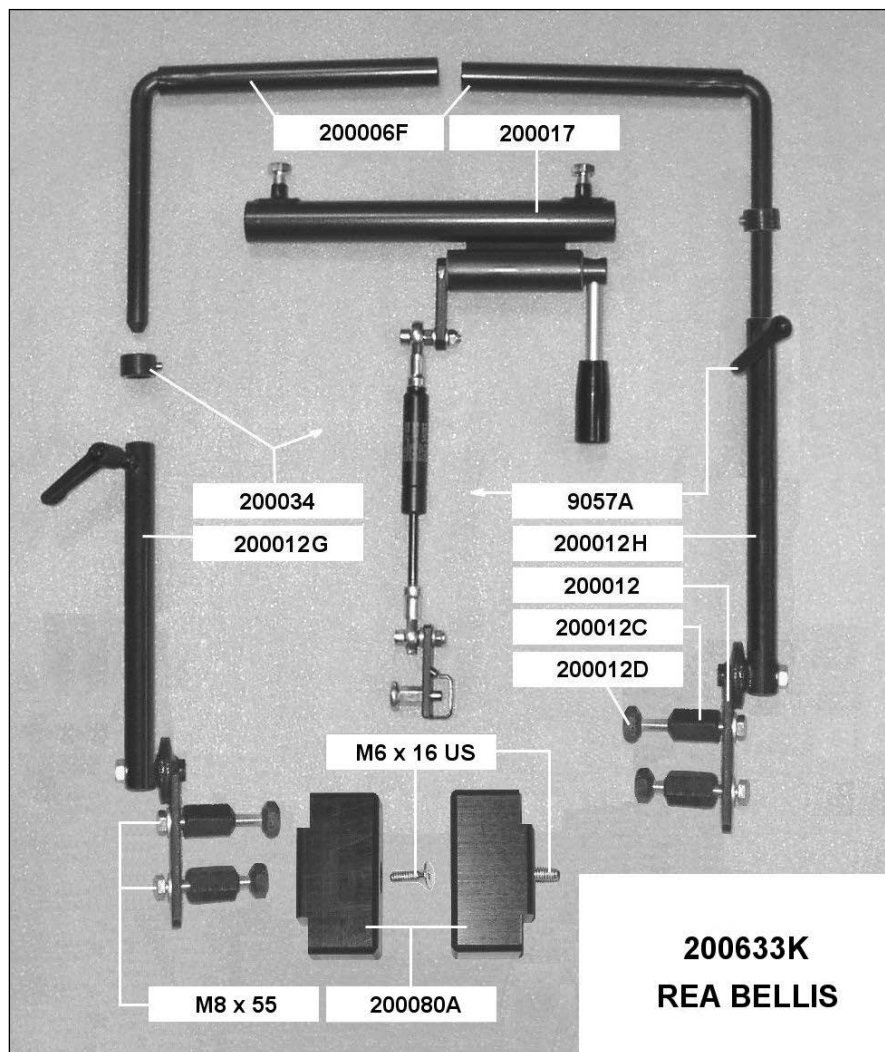

SV

Artnr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6X12	2
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200012	Ställbeslag med tandskiva	2
UB200012C	Distansbussning	4
UB200012D	Mutter	4
UB200012G	Fästarm 200 mm höger	1
UB200012H	Fästarm 200 mm vänster	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200080A	Monteringsbeslag fram Bellis	2

ENG

Art.no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200012	Steel bracket with cog washer	2
UB200012C	Spacer	4
UB200012D	Nut	4
UB200012G	Mounting arm 200 mm right	1
UB200012H	Mounting arm 200 mm left	1
UB200017	Pressure part complete	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200080A	Mounting bracket front Bellis	2