



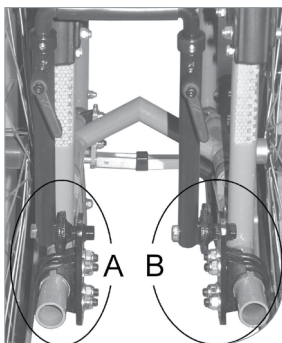
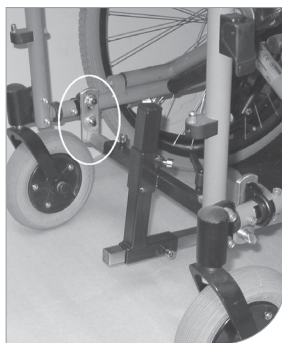
UB200635A



Monteringssats Bygel
Monteringssett Bøjle
Assembly kit Bow

75087.2 2022-08-16

Rullstol, Tillverkare:
Runda rör, 22 - 25 mm, diverse/ generell
Rea 702, Invacare, 702 TV, Invacare, 703LX, Invacare, 150, Invacare



Monteringsanvisning
Lille Viking monteras på rullstolen först efter att den anpassats till brukaren.

Fram

De främre beslagen monteras på stolens nedre horisontella rör bakom länkhjulsfästet så långt fram som möjligt. på smala stolar monteras beslaget på utsidan och på breda stolar på insidan. Tvärstag och vinkelstycke monteras så att dragstången pekar lite uppåt. Till sist justeras den i längdriktningen så att drivhjulen står i linje med stolens bakhjul.

Bak

De bakre beslagen monteras på den bakersta delen av chassit. När de monteras bakåt på det lodräta röret eller uppåt på det horisontella finns det möjlighet att vända dom på två sätt: A på smala stolar och B på breda stolar. Monteringsarmarna skruvas på beslagen i en position så de sticker ut ca 10 cm bakom sitsen. Monteringsvinklarna träs in i tryckdelen, bygelstopparna sätts på och det hela sätts in i monteringsarmarna. Justera tryckdelen så att den sitter vågrätt och med gasfjädern i mitten ca 48 cm över golvet. Tryckdelen ställs in så att gasfjädern trycks ihop halvvägs och att Lille Viking lyfts 2-3 cm över golvet.

Efter slutjusteringen ställs bygelstopparna in och alla skruvar kontrolleras.



Användning av tippskydd rekommenderas.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



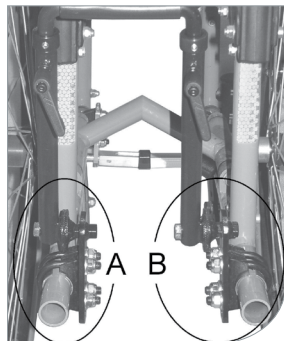
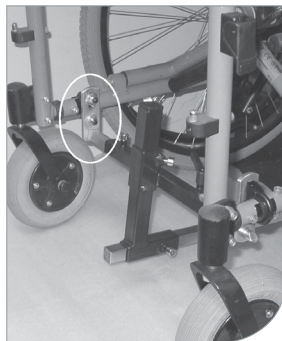
--	--	--	--	--	--



Kørestol, producent:

Runde rør, 22 - 25 mm, diverse/ generell

Rea 702, Invacare, 702 TV, Invacare, 703LX, Invacare, 150, Invacare

**Monteringsvejledning**

Lille Viking 2000 monteres først på kørestolen, efter denne er blevet tilpasset brugeren.

For

De forreste beslag placeres på stolens nederste vandrette stelrør, umiddelbart bag forhjulene og så langt fremme som muligt. Beslagene anbringes på indersiden af stellet. Dog kan det på smalle stole blive nødvendigt at anbringe dem på ydersiden.

Hammel og vinkelbundstykket monteres, så hjælpemotorens trækstang midt under stolen står vandret, eller om muligt peger lidt opad. Til sidst justeres den i længderetningen, så drivhjulene står på linie med stolens baghjul.

Bag

Beslagene placeres på den bagerste del af stellet. Når de anbringes bagud på det lodrette rør eller opad på det vandrette rør, er der mulighed for at vende dem på 2 måder: A: på smalle stole, og B: på brede stole.

Monteringsarmene anbringes på beslagene, og spændes fast i en position, hvor de munder ud ca. 10 cm bag sædet.

Monteringsvinklerne skubbes ind i trykdelen og bøjlestoppene sættes løst på, inden delene sættes på plads i armene. Trykdelen justeres, så koblingsdelen sidder vandret, inden den spændes fast på vinklerne, og højden indstilles til 48-50 cm over gulvet. Dermed løftes hjælpemotoren 2-3 cm fri af gulvet under frikobling, og gasfjederen bliver presset ca. halvt sammen i nederste stillingen.

OBS

Placere bøjlestoppene korrekt og efterspænde alle skruer. Når Lille Viking 2000 er monteret og indjusteret, kontrolleres alle funktioner, inden stolen afleveres til brugeren.



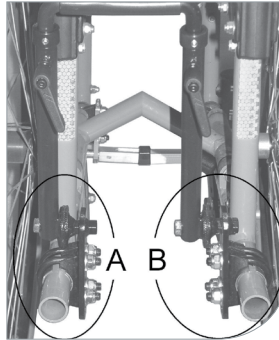
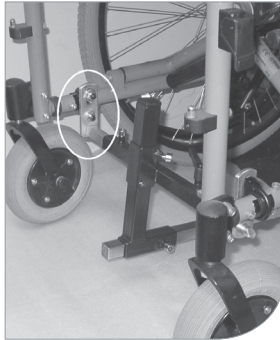
Brug af tipsikring anbefales.



Wheelchair, manufacturer:

Round tubes, 22-25 mm, various/ universal

Rea 702, Invacare, 702 TV, Invacare, 703LX, Invacare, 150, Invacare

**Mounting Instructions**

Lille Viking 2000 is mounted on to the wheelchair after being adjusted to the user.

Front

The front brackets are fitted to the chairs lowest horizontal tube, right behind the front wheels and as far in front as possible. The front brackets are fitted on the frame's inside. For small chairs it might be necessary to fasten the brackets on the frame's outer side. The cross bar and the angle bracket is mounted so that the pull bar right below the chair is horizontal, or if possible points somewhat upwards. Finally it shall be adjusted lengthwise, so that the driving wheels are on parallel line with the wheelchairs' rear wheels.

Rear

The brackets are mounted at the rear part of the frame. When they are mounted at the back of the vertical tube, or upwards at the horizontal tube (see photo), it is possible to turn them in two ways -

A: Narrow chairs B: Wide chairs

The mounting arms are placed on the brackets, and are locked up in a position where they end out about 10 cm behind the seat. The angled mounting bars are pushed into the pressure part, the screws for the bow are put on loosely and the whole assembly is fitted into the arms.

The pressure part is adjusted, so that the coupling part is horizontal, before it's strapped firmly on the angles, and the height is adjusted to 48-50 cm above the ground. The Lille Viking 2000 supporting motor is lifted about 2-3 cm off the ground during disengaging, and the gas spring is pressed about half way together in its lowest position.

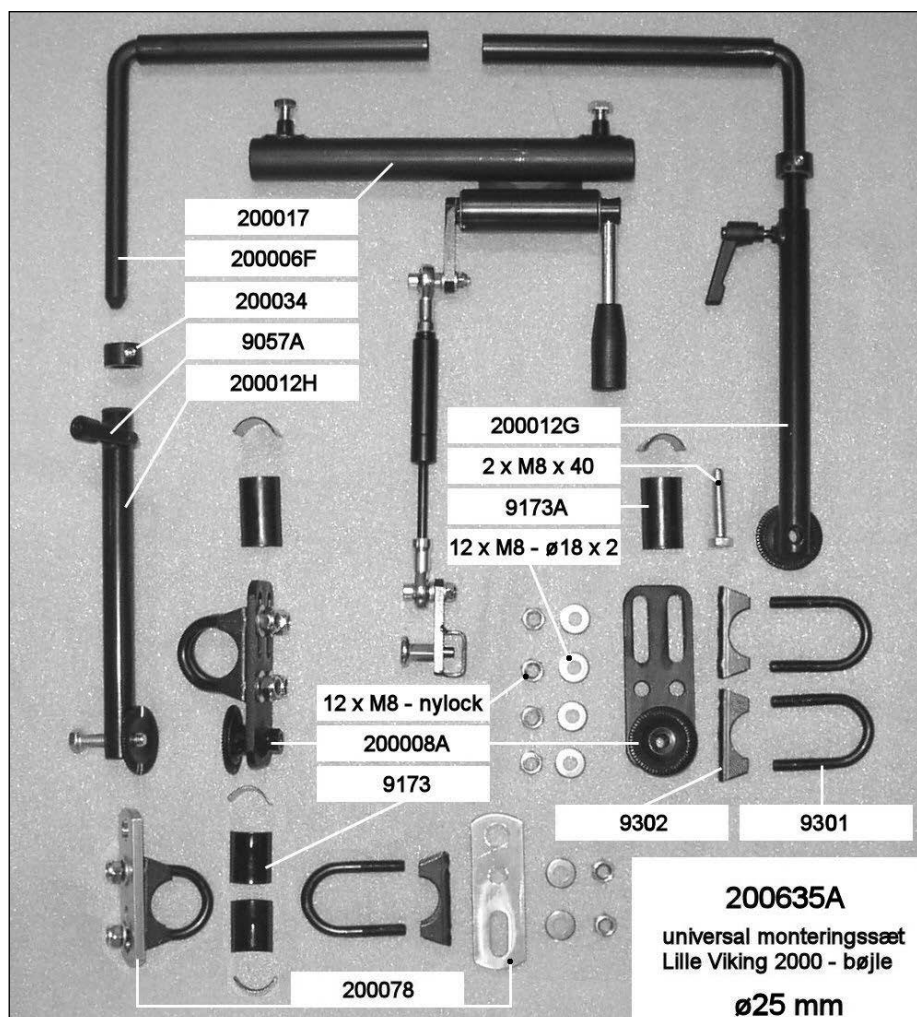
REMEMBER to place the bow stoppers correctly and tighten all screws.

When Lille Viking 2000 is mounted and adjusted, all functions has to be checked before the chair is delivered to the user.



We recommend the use of anti-tips.





SV

Artnr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6X12	2
UB9173	Halvskål monteringsbeslag	4
UB9173A	Halvskål	4
UB9301	Fästklämma bygel 25 mm	6
UB9302	Fästklämma skål 25 mm	6
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200008A	Beslag med tandskiva	2
UB200012H	Fästarm 200 mm vänster	1
UB200012G	Fästarm 200 mm höger	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200078	Platta för monteringsbeslag yttre	2

ENG

Art.no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB9173	Tube protector mounting bracket	4
UB9173A	Half basin long	4
UB9301	Mounting clamp bow 25 mm	6
UB9302	Mounting clamp basin 25 mm	6
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200008A	Bracket with cog washer	2
UB200012H	Mounting arm 200 mm left	1
UB200012G	Mounting arm 200 mm right	1
UB200017	Pressure part complete	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200078	Fittings bracket front round tubes 22-32 mm	2