

Monteringsvejledning (DK)

Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle

Monteringsveiledning (N)

Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsanvisning (SV)

Montering av armstöd, griphandtag och lekbåge.

Mounting instruction (GB)

Mounting arm rests, grip handle and toy bar

Montageanweisung (D)

Montage der Armauflage, des Handgriffes und des Spielzeughalters

Montage-handleiding (NL)

Armsteunen, greep en speelgoedrek monteren

Instructions de montage (FR)

Montage des repose bras, poignée thoracique et barre de jeux:

Monteringsvejledning

R82[®]

Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle

Montering af armlæn:

- * Armlænet monteres ved at føre stængerne ind i bordpladen og fastgøre skrue (A) ved hjælp af den 5 mm unbraconøgle som er monteret foran på bordet.

Justering af armlæn:







- * Skrue (B) løsnes ved hjælp af 5 mm unbraconøglen, for at indstilling vinklen på armlænet.
- * Skrue (C) løsnes ved hjælp af 5 mm unbraconøglen, for at vippe armlænet til siden.

Montering af gribebøjle:

- * Beslaget monteres, i de ønskede huller under bordet, ved hjælp af medfølgende skive og skue (D). Fastgør ved hjælp af 5 mm unbraconøglen.
- * Placer gribebøjlen i beslagene og fastgør ved hjælp af håndtaget (E)

Montering af legetøjsbøjle:

- * Beslaget monteres, i de ønskede huller under bordet, ved hjælp af medfølgende skive og skue (D). Fastgør ved hjælp af 5 mm unbraconøglen.
- * Placer legetøjsbøjlen i beslagene og fastgør ved hjælp af håndtaget (F)

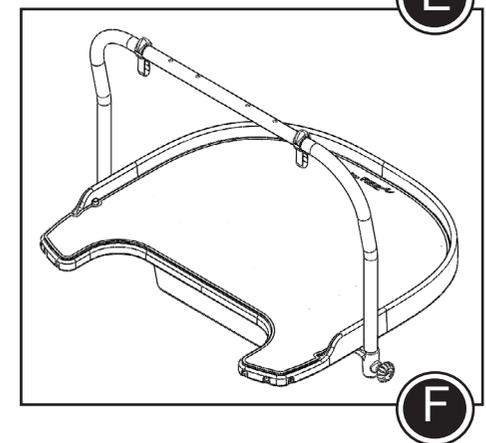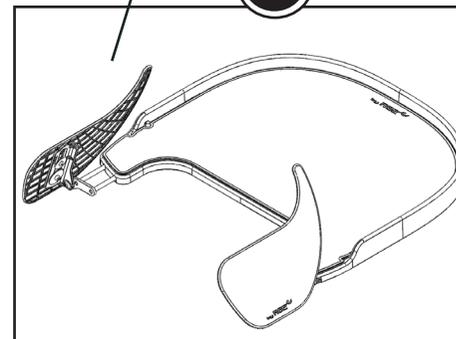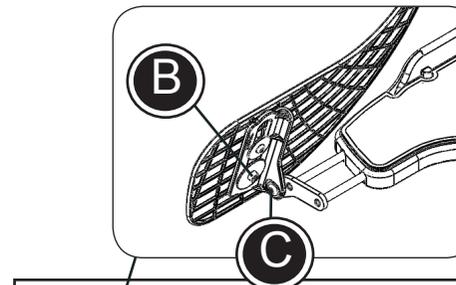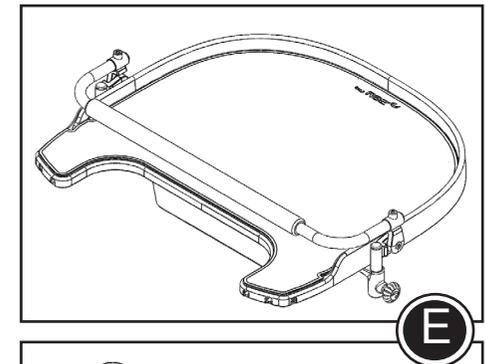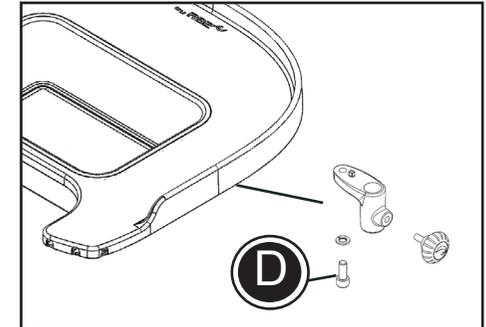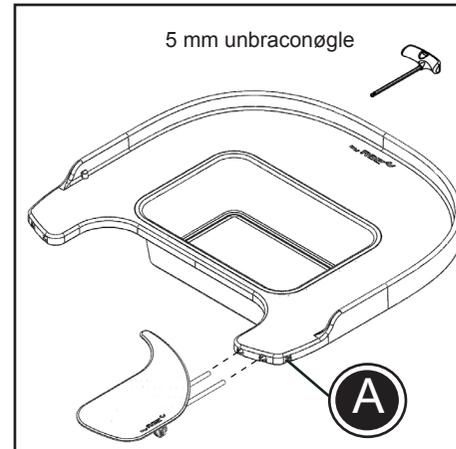

Monteringsveiledning

R82[®]

Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Montering av armlener

- Armlenene monteres ved å føre stengene inn i bordplaten og feste skruene (A) med den 5 mm umbraconøkkelen som er festet foran på bordet.

Justering av armlener


- Skruen (B) løsnes med 5 mm umbraconøkkelen, for å innstille vinkelen på armlenene.
- Skruen (C) løsnes med 5 mm umbraconøkkelen, for å vippe armlenene til siden.

Montering av gripebøyle

- Beslaget (B) monteres i hull under bordet ved bruk av medfølgende skive og skruer (D). Festes med 5 mm umbraconøkkelen.
- Plasser gripebøylene i beslagene og fest med håndtaket (E).

Montering av lekebøyle

- Beslaget monteres i hull under bordet ved bruk av medfølgende skive og skruer (D). Festes med 5 mm umbraconøkkelen.
- Plasser lekebøylene i beslagene og fest med håndtaket (F).

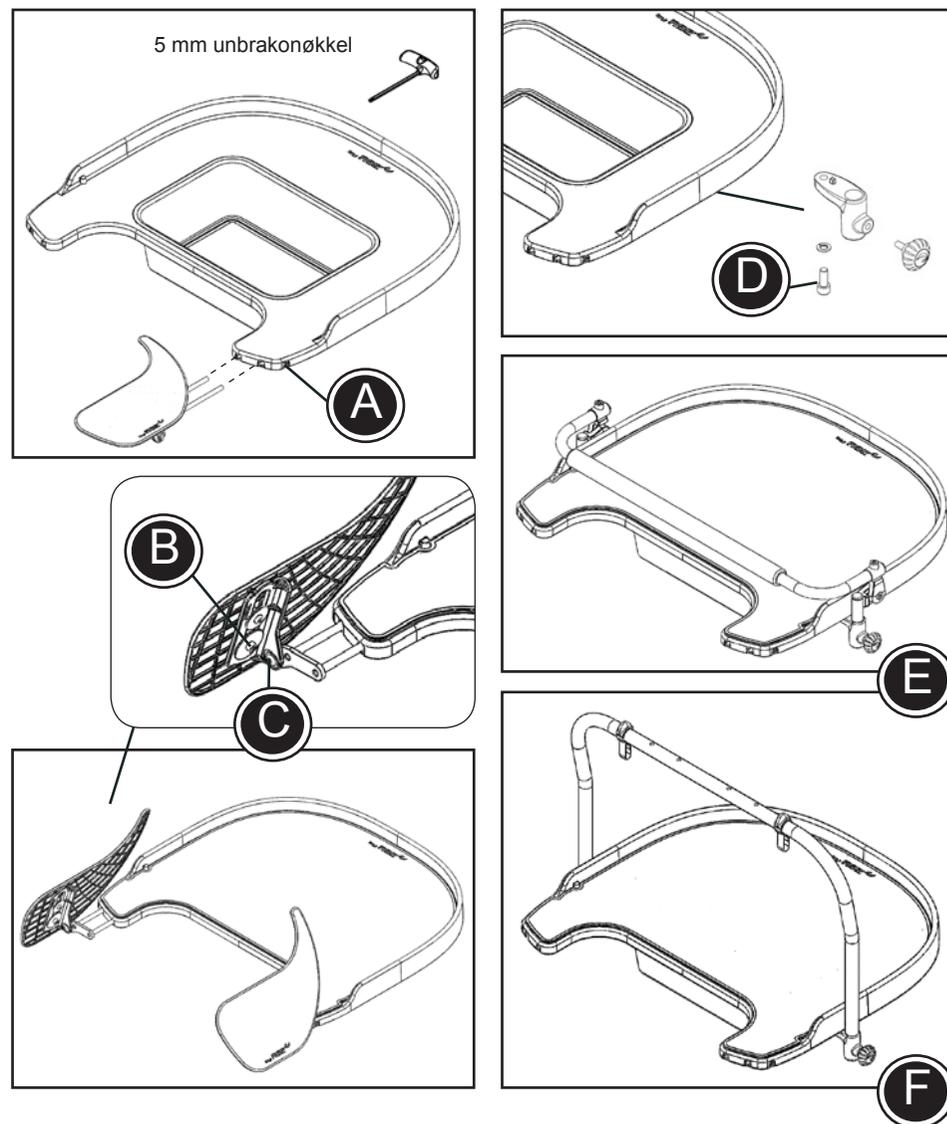

Monteringsanvisning

R82[®]

Montering av armstöd, griphandtag och lekbåge.

Montering av armstöd:

- * Sätt i stagen till armstöden i brickan och skruva fast med den 5 mm insexnyckel som finns fäst under brickan.

Justering av armstöd:


- * Vinkeljustering av armstöd: Lossa skruven (B) under armstödet. Använd den medföljande insexnyckeln.
- * Uppfällning av armstöd: Lossa skruven (C) med den medföljande insexnyckeln.

Montering av griphandtag:

- * Montera fästena till griphandtaget i valfritt hål under bordet. Skruva åt med den medföljande 5 mm insexnyckeln.
- * Montera griphandtaget i fästena och skruva åt med insexnyckeln.

Montering av lekbåge:

- * Montera fästena till lekbågen på var sida om bordet genom att använda bricka och medföljande skruv. Skruva åt med insexnyckel 5 mm.
- * Montera lekbågen i fästena och skruva åt med handtaget.

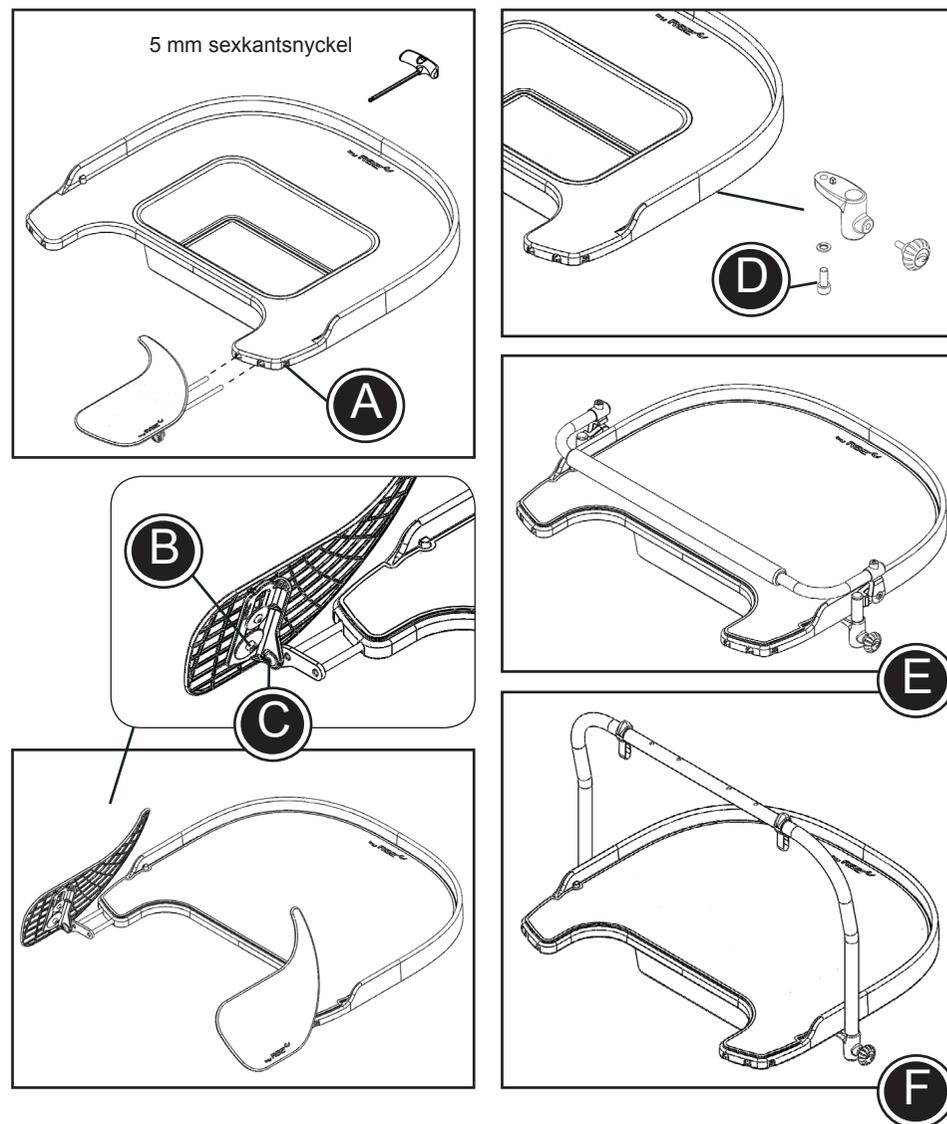

Mounting instruction

R82[®]

Mounting arm rests, grip handle and toy bar

Mounting the arm rest:

- * Mount the arm rest bars in the tray and fasten the screw (A) with the 5 mm Allen key mounted in the tray

Adjusting the arm rest:







- * Loosen the screw (B) beneath the arm rest to angle adjust. Use the 5 mm Allen key.
- * Loosen the screw (C) with the 5 mm Allen key to flip up the arm rest

Mounting the grip handle:

- * Mount the fittings in the desired holes beneath the tray, using the washer and screw (D). Fasten with the 5 mm Allen key.
- * Mount the grip handle in the fittings and fasten with the handle (E)

Mounting the toy bar:

- * Mount the fittings on each side of the tray using the washer and screw (D). Fasten with the 5 mm Allen key.
- * Mount the toy bar in the fittings and fasten with the handle (F)

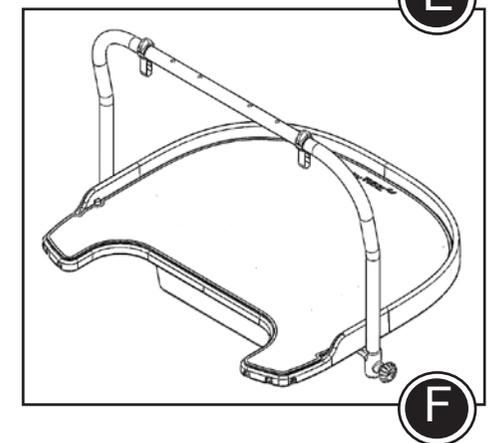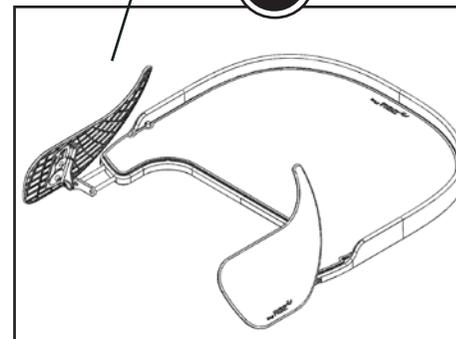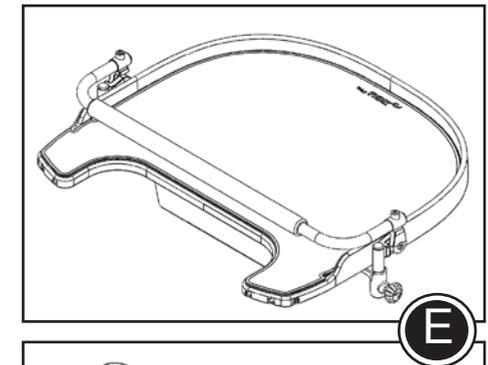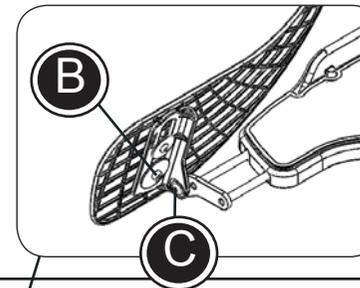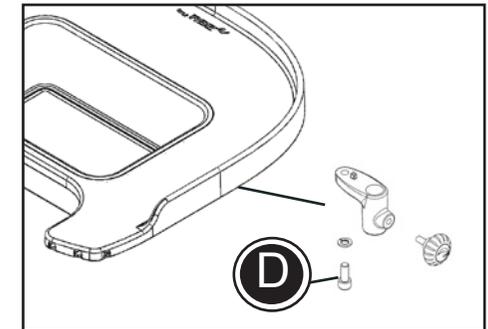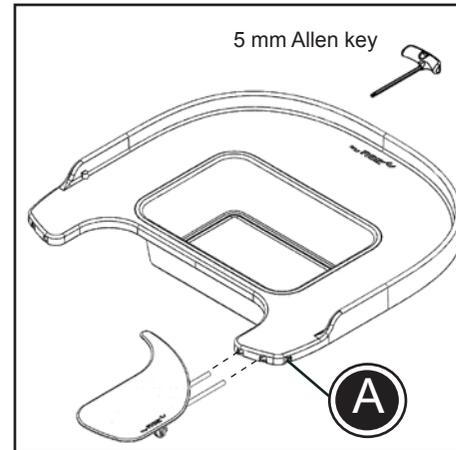

Montageanweisung

R82[®]

Montage der Armauflage, des Handgriffes und des Spielzeughalters

Mounting the arm rest:

- * Befestigen Sie die Armauflage mit Hilfe der Schraube (A) und einem 5 mm Inbusschlüssel auf dem Tisch

Einstellung der Armauflage:







- * Lösen Sie die Schraube (B) unter der Armauflage um die Neigung einzustellen mit Hilfe eines 5mm Inbusschlüssel.
- * Lösen Sie die Schraube (C) mit Hilfe eines 5mm Inbusschlüssel um die Armauflage seitlich zu drehen

Befestigung des Handgriffes:

- * Befestigen Sie den Handgriff in dem vorgesehenen Loch unterhalb des Tisches, nutzen Sie hierzu die Unterlegscheibe und Schraube (D). Ziehen Sie die Schraube mit einem 5mm Inbusschlüssel fest.
- * Befestigen Sie den Handgriff in der Halterung und ziehen Sie die Verriegelung (E) fest

Befestigung des Spielzeughalters:

- * Befestigen Sie die Halterung auf beiden Seiten des Tisches mit Hilfe der Unterlegscheibe und der Schraube (D). Ziehen Sie die Schrauben mit einem 5mm Inbusschlüssel fest.
- * Befestigen Sie den Spielzeughalter an der Halterung und ziehen Sie die Verriegelung (F) fest

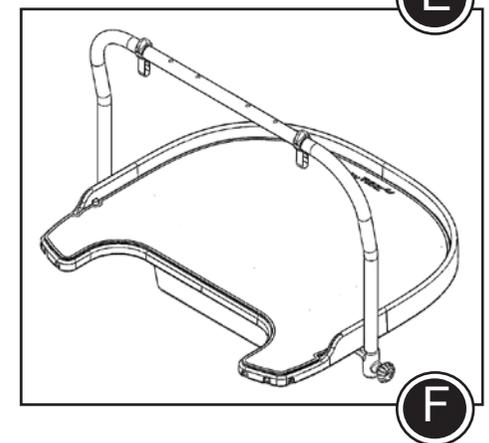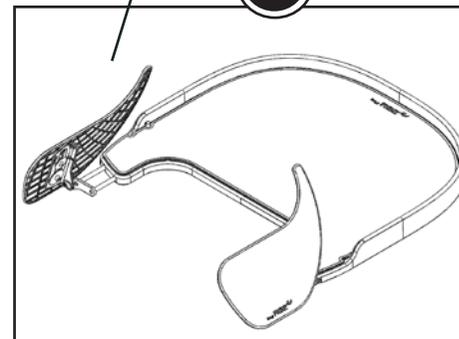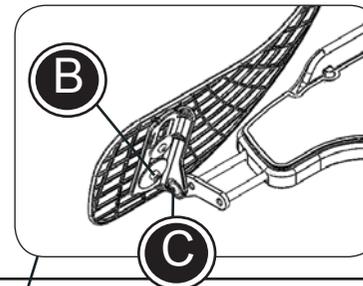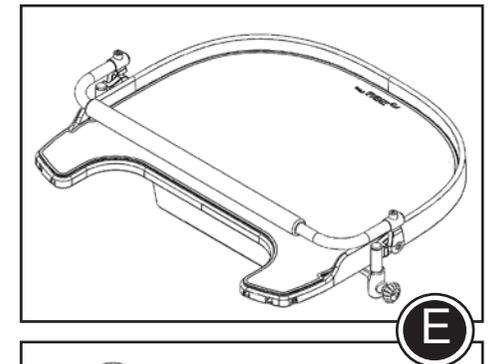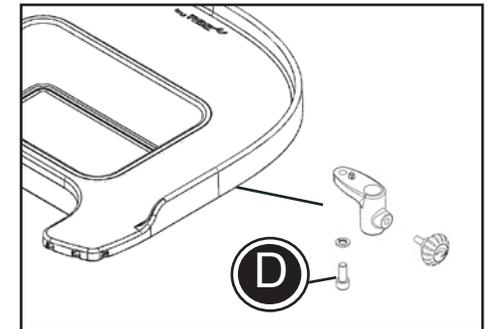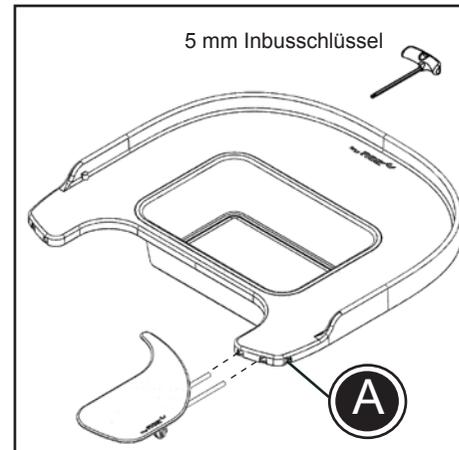

Montage-handleiding

R82[®]

Armsteunen, greep en speelgoedrek monteren

De armsteun monteren:

- * Monteer de armsteunbuizen in het werkblad. Zet de schroef (A) vast met de 5 mm inbusleutel (bevindt zich in het werkblad).

De armsteun verstellen:







- * Draai de inbusbout (B) onder de armsteun losser om de hoek te kunnen verstellen. Gebruik hiervoor de 5 mm inbusleutel.
- * Draai de inbusbout (C) los met de 5 mm inbusleutel en verstel de armsteun

De greep monteren:

- * Monteer de bevestigingen in de gewenste openingen onder het werkblad. Gebruik hierbij het plaatje en de inbusbout (D). Zet vast met de 5 mm inbusleutel.
- * Monteer de greep in de bevestigingen en zet vast met de snelspanner (E)

Het speelgoedrek monteren:

- * Monteer de bevestigingen aan elke zijde van het werkblad. Gebruik daarbij het plaatje en de inbusbout (D). Zet vast met de 5 mm inbusleutel.
- * Monteer het speelgoedrek in de bevestigingen en zet vast met de snelspanner (F)

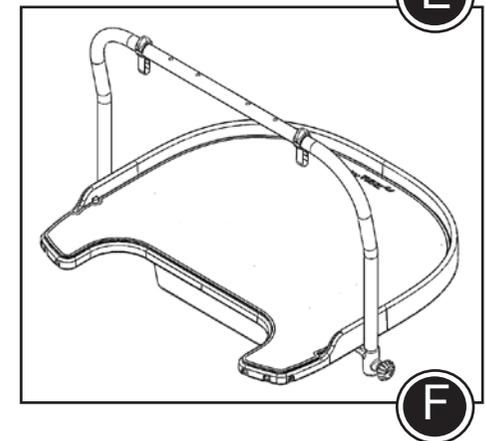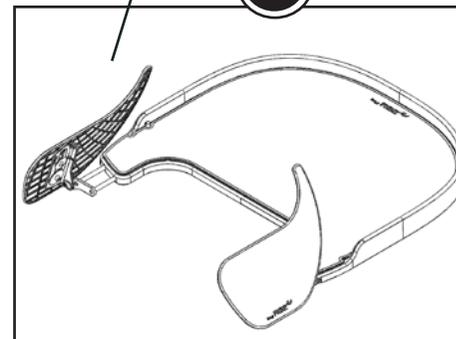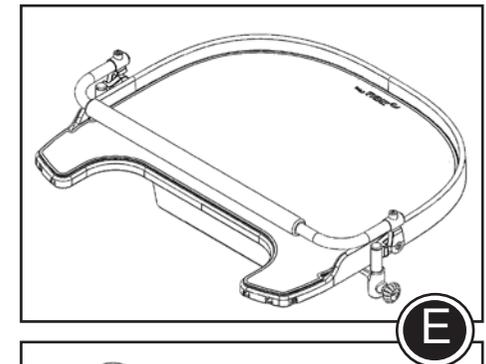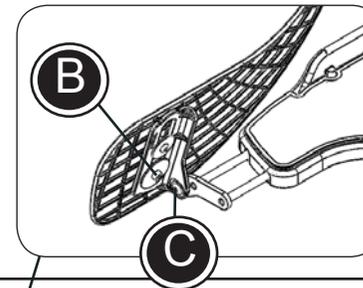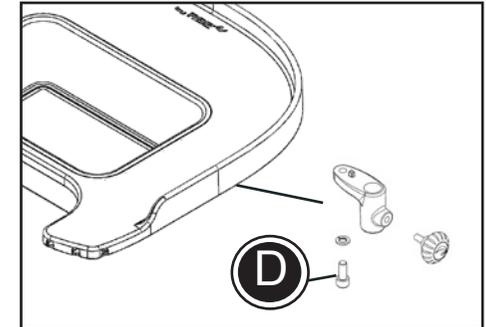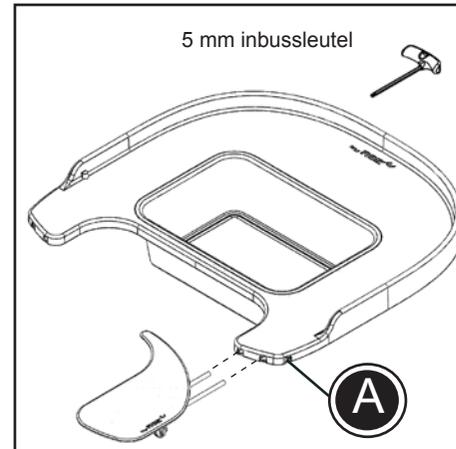

Instructions de montage

R82[®]

Montage des repose bras, poignée thoracique et barre de jeux:

Montage des repose bras:

- * Monter les barres des repose bras dans la tablette et serrer la vis (A) avec la clé Allen 5 mm qui se trouve sur la tablette.

Réglage des repose bras:

- * Desserrer la vis (B) se trouvant sous le repose bras pour régler l'inclinaison. Utiliser la clé Allen 5 mm.
- * Desserrer la vis (C) avec la clé Allen 5 mm pour escamoter le repose bras.

Montage de la poignée thoracique:

- * Monter les fixations dans les trous désirés sous le plateau, en utilisant la rondelle et la vis (D). Serrer avec la clé Allen 5.
- * Monter la poignée dans ses fixations et serrer avec la manette (E).

Montage de la barre de jeux:

- * Monter les fixations de chaque côté du plateau en utilisant la rondelle et la vis (D). Serrer avec la clé Allen 5 mm.
- * Monter la barre de jeu dans ses fixations et serrer avec la manette (F)

