



1.

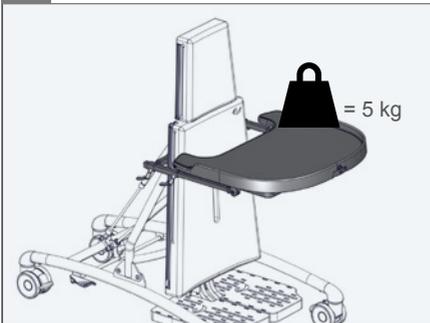


Caribou mit Therapietisch Die maximale Traglast beträgt 5 kg.

2.

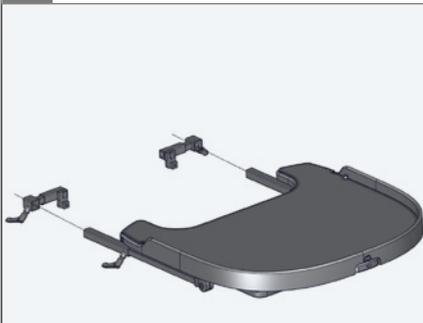

Einzelteile Therapietisch


3.

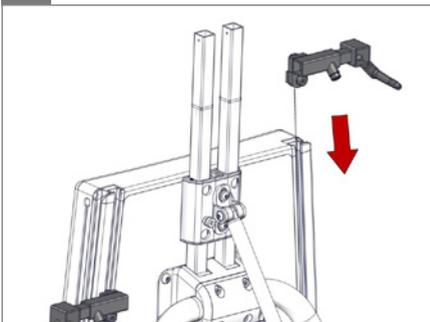

Halterungen in die Schienen an der Rückseite des Grundpolsters einsetzen.

4.


⊙ 5 mm, 2,5 Nm

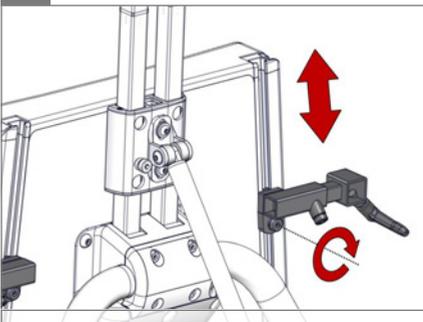

Halterungen mit 5 mm Inbusschlüssel montieren. Achtung! Parallele Montagehöhe der Halterungen sicherstellen.


5.

⊙ 5 mm, 2,5 Nm

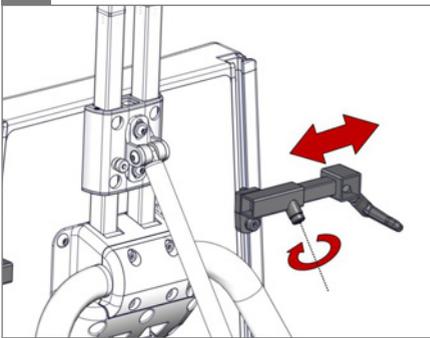

Halterungen mit 5 mm Inbusschlüssel auf Tischbreite einstellen.

6.

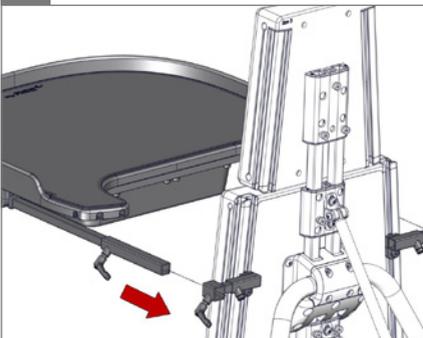

Therapietisch in Halterungen einsetzen.

