

Monteringsvejledning (DK)

Montering af justerbare fixlocks

Monteringsveiledning (N)

Montering av justerbare fixlocks på Tiger 2000

Mounting instruction (GB)

Mounting adjustable fixlocks

Montageanleitung (D)

Montage der einstellbaren Gurtaufnahmen am Tiger 2000

Montage handleiding (NL)

Het montage van verstelbare klapgespen op de Tiger 2000

Monteringsanvisning (SE)

Montering av justerbara fixlock

Monteringsvejledning

R82[®]


Montering af justerbare fixlocks på Tiger 2000

- * Fjern ryghynden.
- * Placér spændet (A) i rillen (B) bagpå ryggen.

Bemærk at der er udskæring i spændet, så det passer på ryggen.

- * Montér skruen (C) i spændet (A) fra indersiden af ryggen.

Spændet kan justeres op og ned ad rillen, ved at løsne skruen (C).

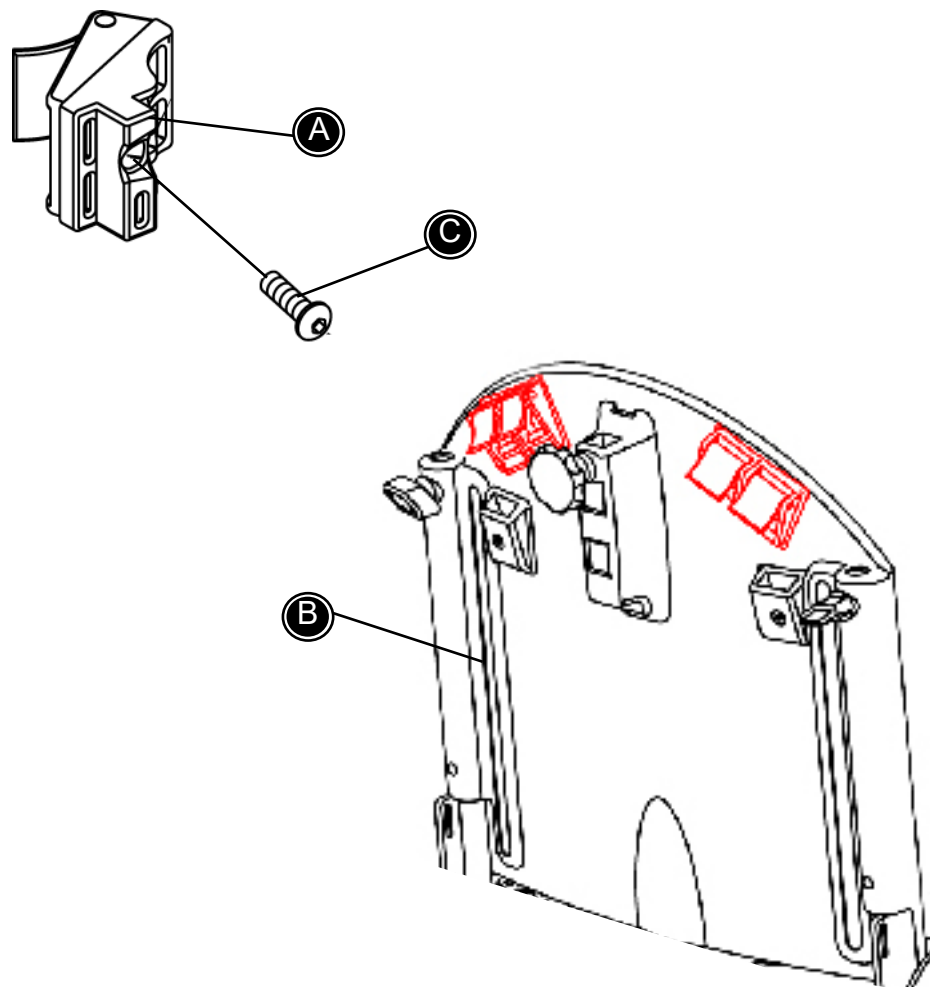

Monteringsanvisning

Montering av justerbara fixlock


R82[®]

- * Ta bort ryggdynan
- * Placera fixlock (A) i spåret (B) bak på ryggen.

Notera att det är en utskärning i beslaget för att passa på ryggen.

- * Skruva i skruven (C) i beslaget (A) från insidan av ryggen.

Fixlock kan höjjusteras i spåret genom att lossa skruven (C).

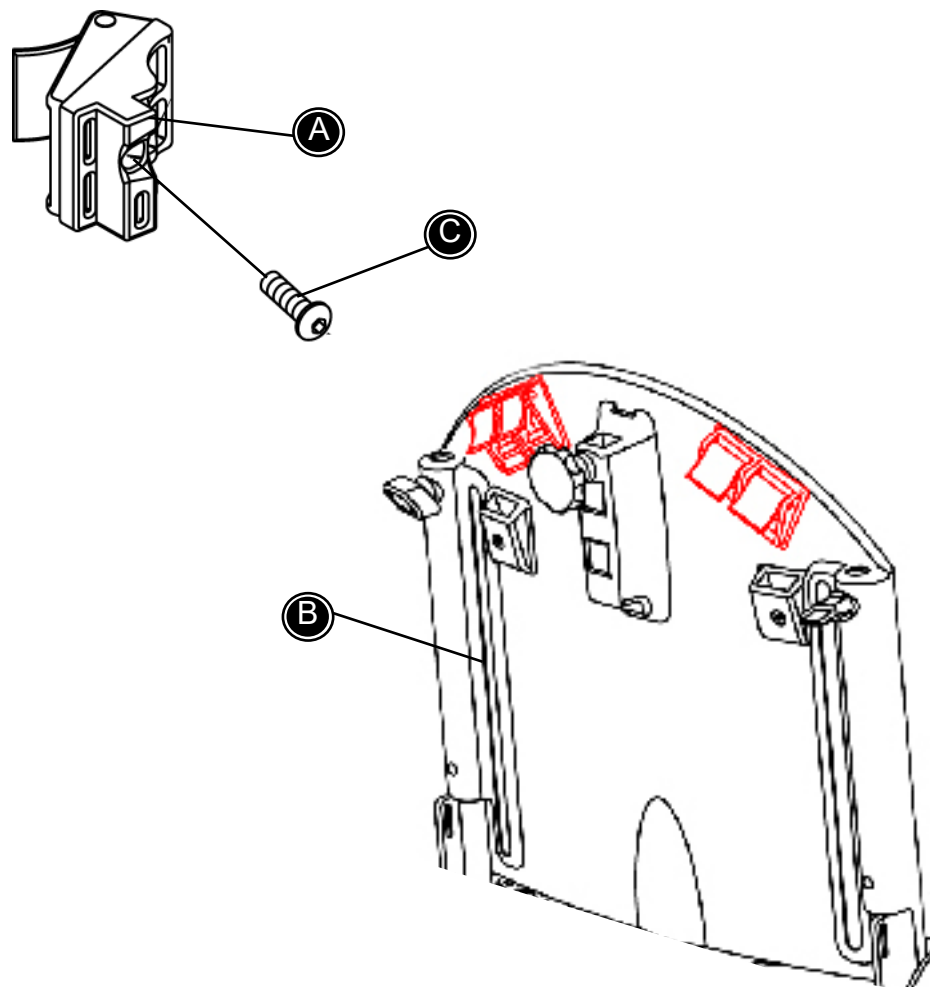

Mounting instruction

R82[®]


Mounting adjustable fixlocks on the Tiger 2000

- * Remove the back cushion.
- * Place the fitting (A) in the slots (B) at the back of the back.

Note that there is a carving in the fitting, to fit the back.

- * Fit the screw (C) in the fitting (A) from the inside of the back.

The fitting can be adjusted up and down in the slot, by loosening the screw (C).

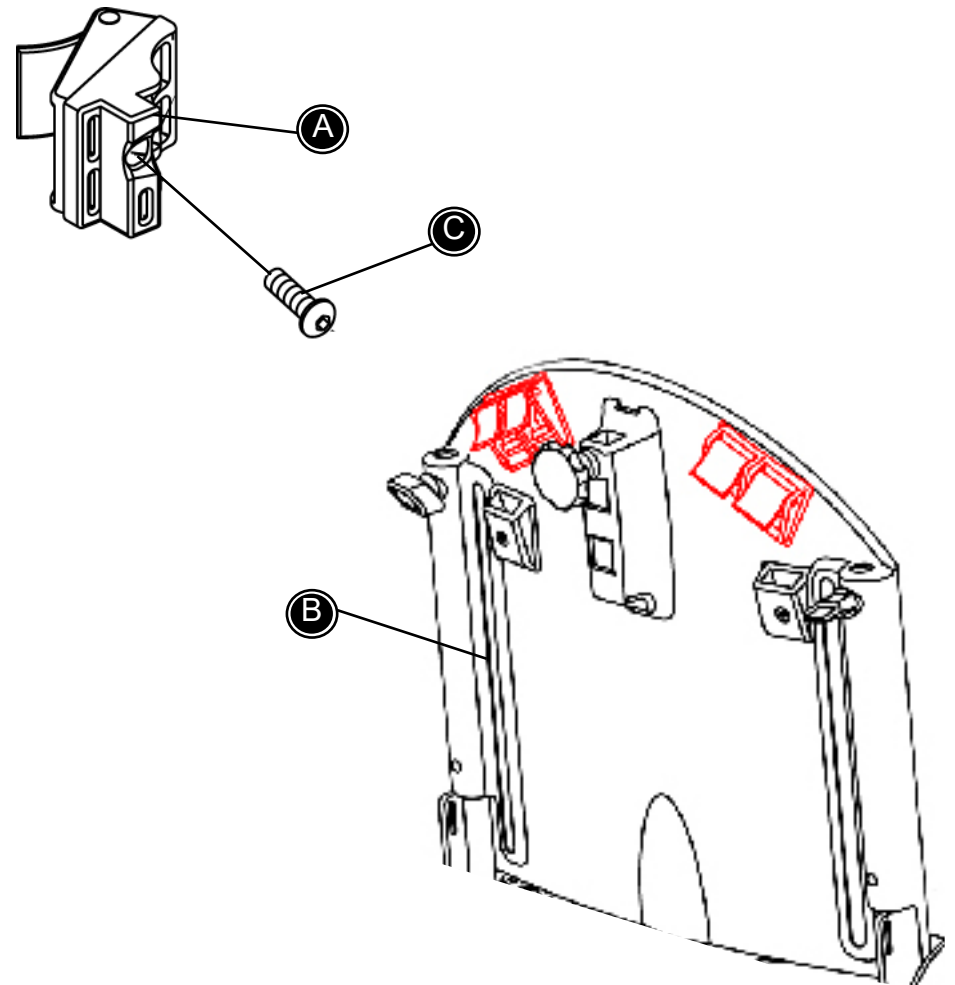

Montageanleitung

R82[®]


Montage der einstellbaren Gurtaufnahmen am Tiger 2000

- * Entfernen Sie das Rückenpolster
- * Platzieren Sie die Aufnahmen (A) in die Schlitz (B) auf der Rückseite des Rückens

(Beachten Sie die Biegung welche zu dem Rücken passt)

- * Stecken Sie die Schraube (C) in den Beschlag (A) von der Innenseite des Rückens.

Der Beschlag kann durch lösen der Schraube (C) in der Höhe eingestellt werden.

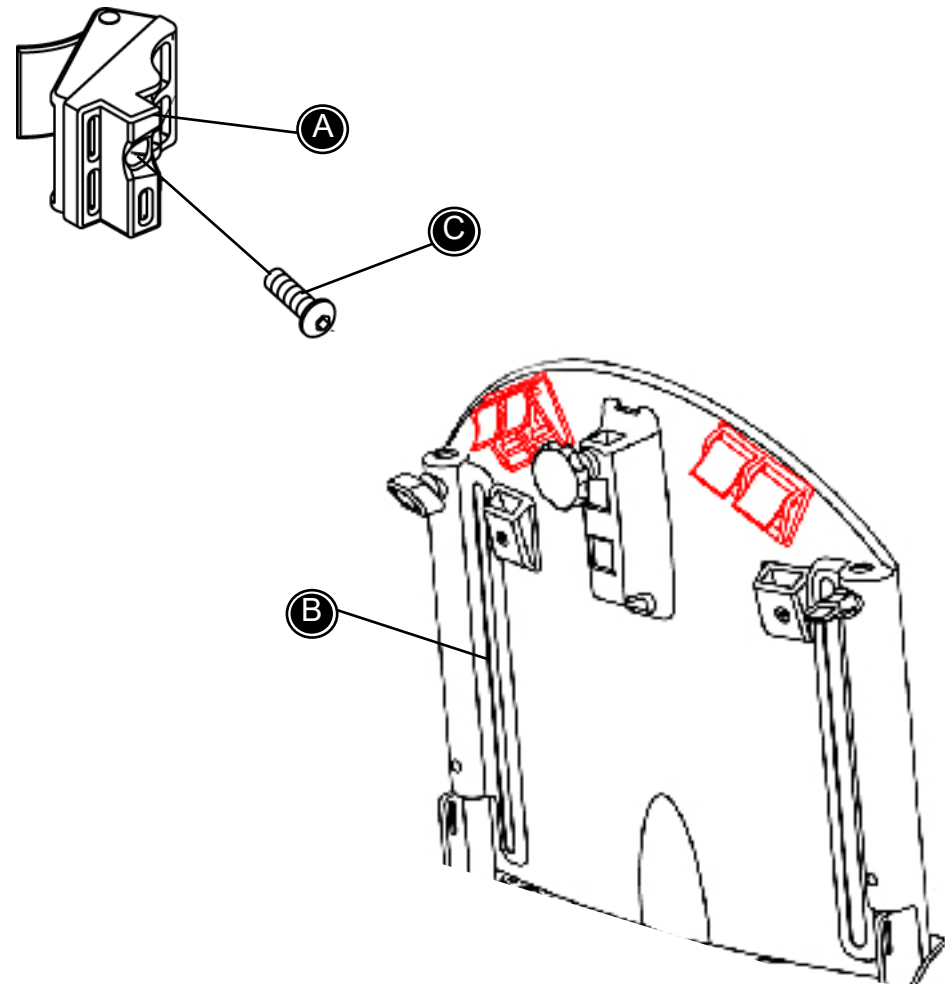

Montage handleiding

R82[®]


Het montage van verstelbare klapgespen op de Tiger 2000

- * Verwijder het rugkussen.
- * Plaats de bevestiging (A) in de gleuven (B) aan de achterzijde van het ruggedeelte.

De bevestiging is voorzien van een speciale uitsparing zodat de bevestiging goed op het ruggedeelte past.

- * Draai de inbusbout (C) in de bevestiging (A) vanuit de binnenzijde van het ruggedeelte.

De bevestiging kan in de gleuf omhoog en omlaag bijgesteld worden, door de inbusbout (C) losser te draaien.

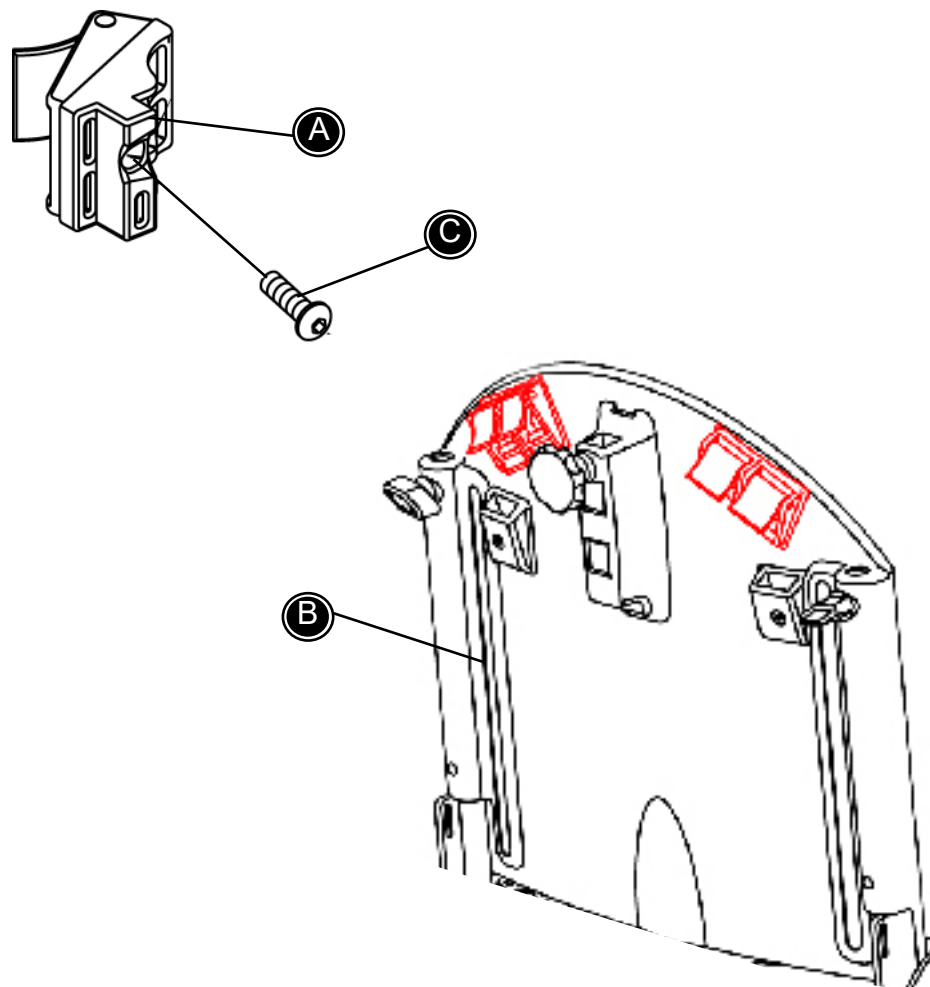

Monteringsveiledning

R82[®]

Montering av justerbare fixlocks på Tiger 2000

- * Fjern ryggputen.
- * Plasser fixlocks (A) i rillen (B) på toppen av ryggens bakside.

Påse at utskjæringen i fixlocks passer i rillen på ryggen.

- * Monter skruen (C) i fixlocks (A) fra ryggens forside.

Fixlocks plassering kan justeres i rillen ved å løsne skruen (C).

