

Tiger 2000 / Serval klar til brug (DK)

Tiger 2000 klar för användning (SV)

Tiger 2000 / Serval klar til bruk (N)

Tiger 2000 / Serval ready for use (GB)

Tiger 2000 / Serval einsatzbereit machen (D)

Tiger 2000 / Serval prêt à l'emploi (F)

Tiger 2000 / Serval příprava k použití (CZ)


Tiger 2000 / Serval klar til brug

R82®

Tiger 2000 / Serval leveres sammenklappet for at den skal fylde mindre under transporten. For at gøre din Tiger 2000 / Serval klar til brug, bør nedenstående punkter følges:

- 1) Træk ud i den sorte rem under sædet for at vippe fodstøtten frem.
- 2) Stellet foldes ud og låsebeslagene låser stellet med et lille "klik".
- 3) Skubbebøjlen monteres og indstilles i den ønskede højde.

Tiger 2000 / Serval er nu klar til brug.

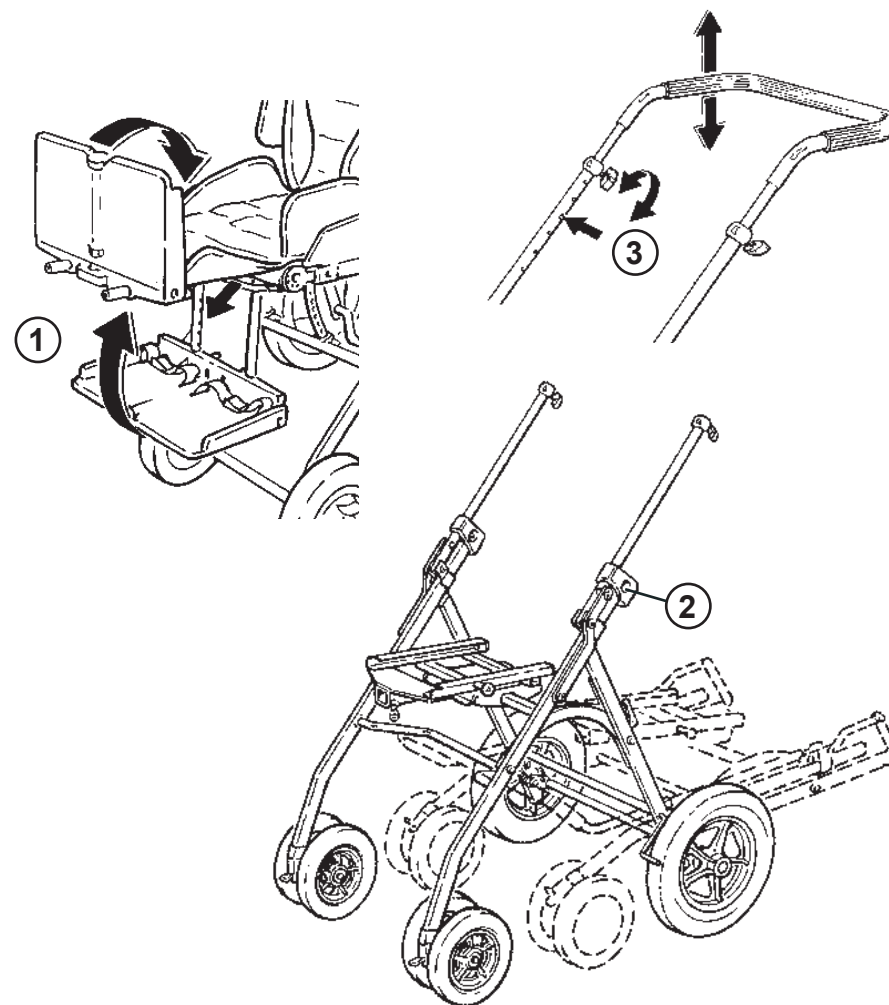


Tiger 2000 klar för användning

R82®

Tiger 2000 levereras ihopfälld för att ta så liten plats som möjligt under transport. Gör så här för att göra stolen klar för användning:

- 1) Dra ut den svarta remmen under sitsen och fäll upp fotstödet.
- 2) Fäll ut chassit så att spärrarna klickar fast.
- 3) Montera körbygeln och justera höjden.

Nu är Tiger 2000 klar för användning

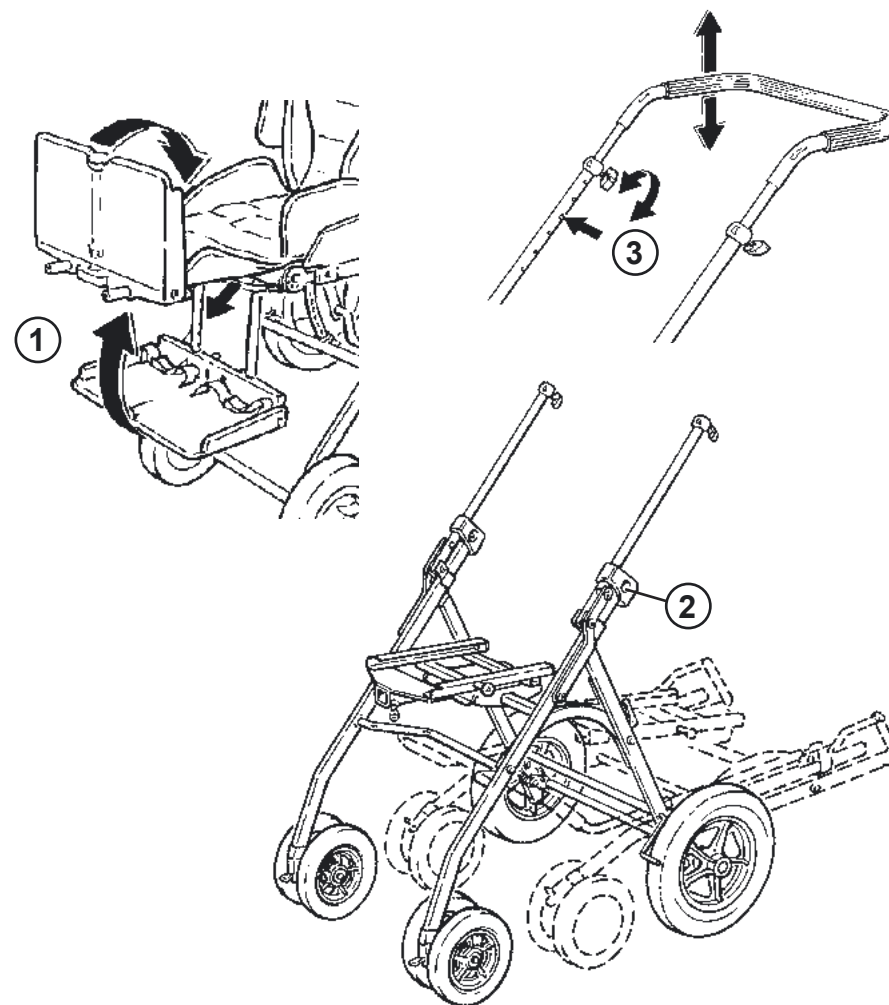


Tiger 2000 / Serval klar til bruk



Tiger 2000 / Serval leveres sammenlagt for at den skal ta mindre plass under transport. For å gjøre den klar til bruk, gjør følgende:

- 1) Trekk ut den sorte remmen under setet og vipp fotstøtten frem.
- 2) Når rammen slås ut "klikker" låseboltene på plass.
- 3) Monter kjørehåndtaket og juster høyden.

Tiger 2000 / Serval er nå klar til bruk.

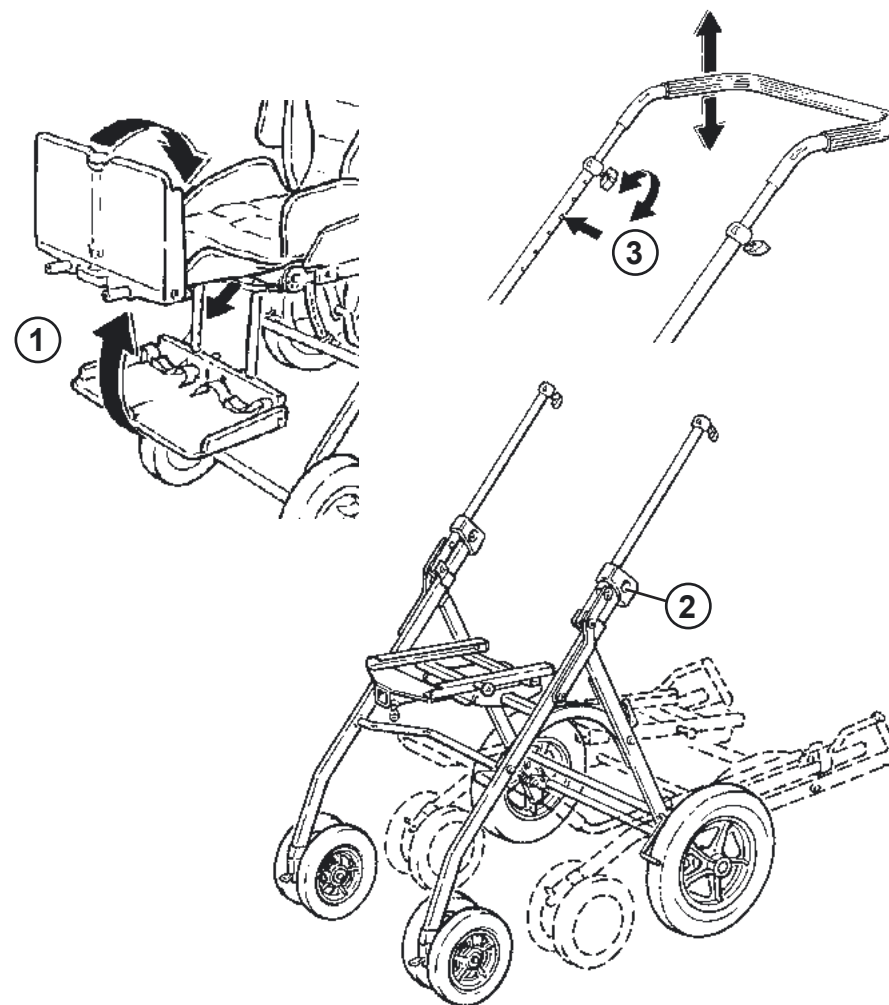


Tiger 2000 / Serval ready for use



Tiger 2000 / Serval is folded, when delivered, but is unfolded very easily. Follow the below description:

- 1) Pull out the black strap and tip the footsupport into horizontal position.
- 2) Unfold the frame the lock fittings „clicks“ into place.
- 3) Mount the push brace and adjust the height.

Tiger 2000 / Serval is now ready for use.

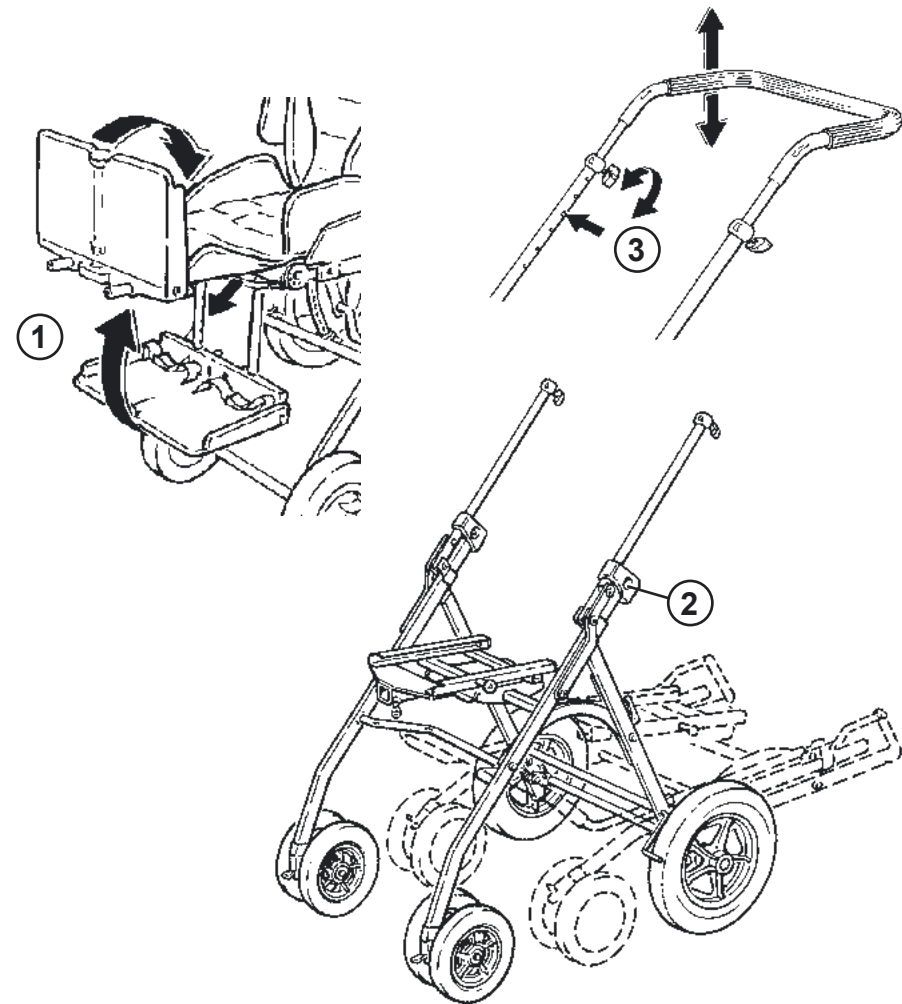


Tiger 2000 / Serval einsatzbereit machen



Bei der Lieferung ist der Tiger 2000 / Serval zusammengeklappt. Das Entfalten ist in den folgenden Zeilen beschrieben:

- 1) Die Fußplatte muss waagrecht stehen, dann ziehen Sie an den schwarzen Gurt unter der Sitzvorderkante
- 2) Das Gestell aufklappen bis die Beschläge eingelockt sind.
- 3) Stecken Sie den Schiebebügel ein und stellen Sie die Höhe ein.

Tiger 2000 / Serval sind nun gebrauchsfertig.

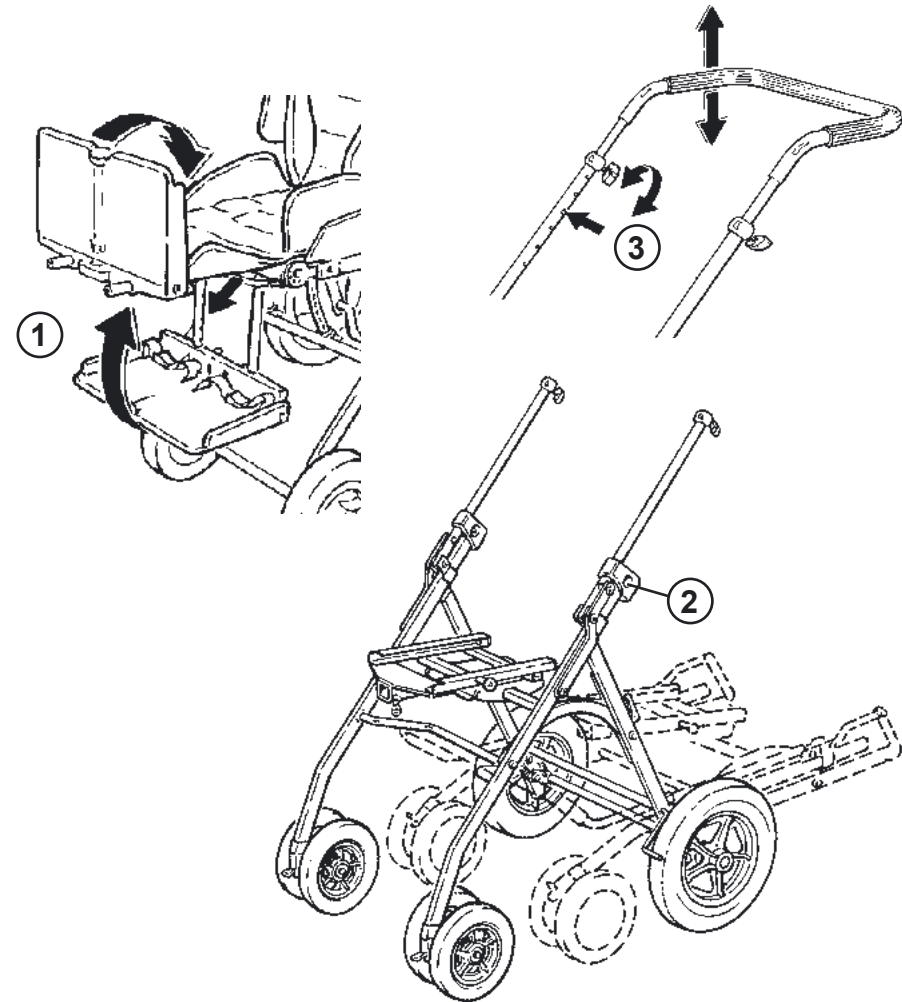


Tiger 2000 / Serval prêt à l'emploi

R82®

Le Tiger 2000 / Serval est livré replié, mais il se déplie facilement. Suivez la description ci-dessous:

- 1) Sortez la bande noire et mettez le repose-pied en position horizontale.
- 2) Dépliez le cadre jusqu'à ce que le système de verrouillage se clique en position.
- 3) Montez la barre de poussée et réglez la hauteur.

Le Tiger 2000 / Serval est à présent prêt à l'emploi.

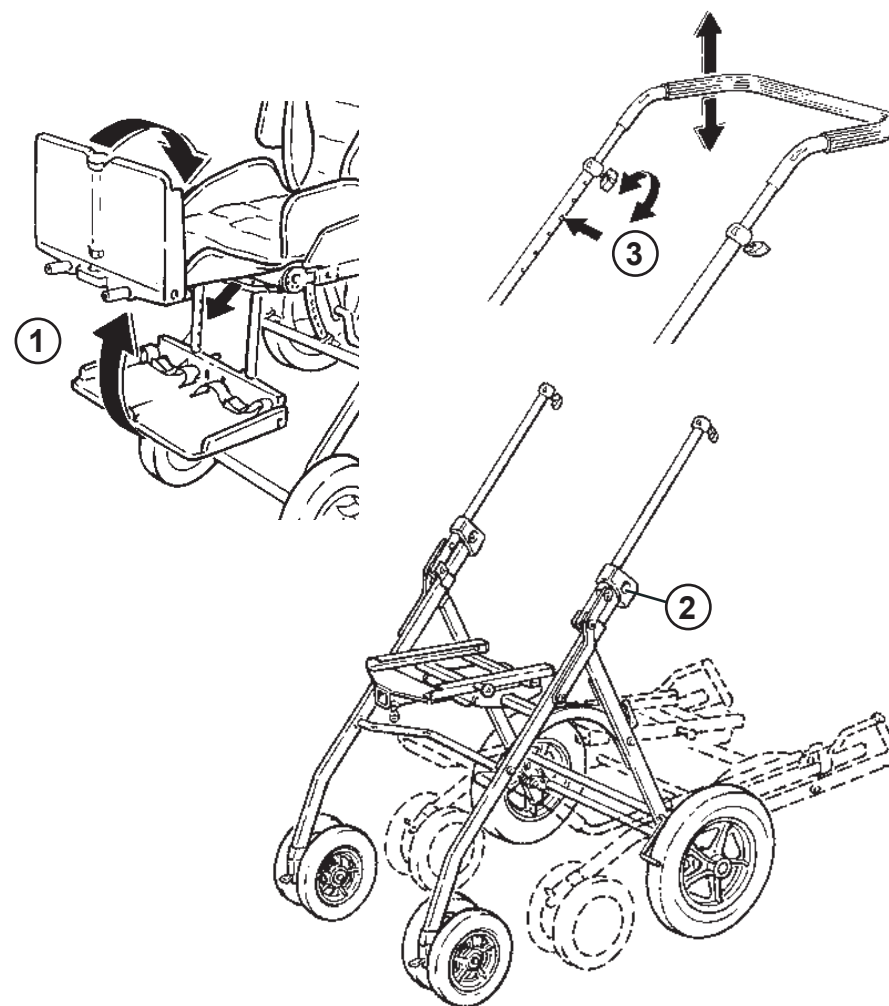

Tiger 2000 / Serval příprava k použití

R82®

Tiger 2000 / Serval je při dodání složený, ale lze ho velmi snadno rozložit. Postupujte podle následujícího popisu:

- 1) Vytáhněte černý pás a odklopte opěrky nohou do horizontální polohy.
- 2) Rozložte rám a fitinky zámků „zaklikněte“ na své místo.
- 3) Připevněte tlačnou vzpěru a nastavte výšku.

Nyní je Tiger 2000 / Serval připraven k použití.

