




Määräaikaistarkastuksen muistilista – FI Molift Partner 255


molift[®]
by Etac

PI03405 - 2026-06-10 - Rev. 2.0

Standardin ISO:10535 mukaisesti

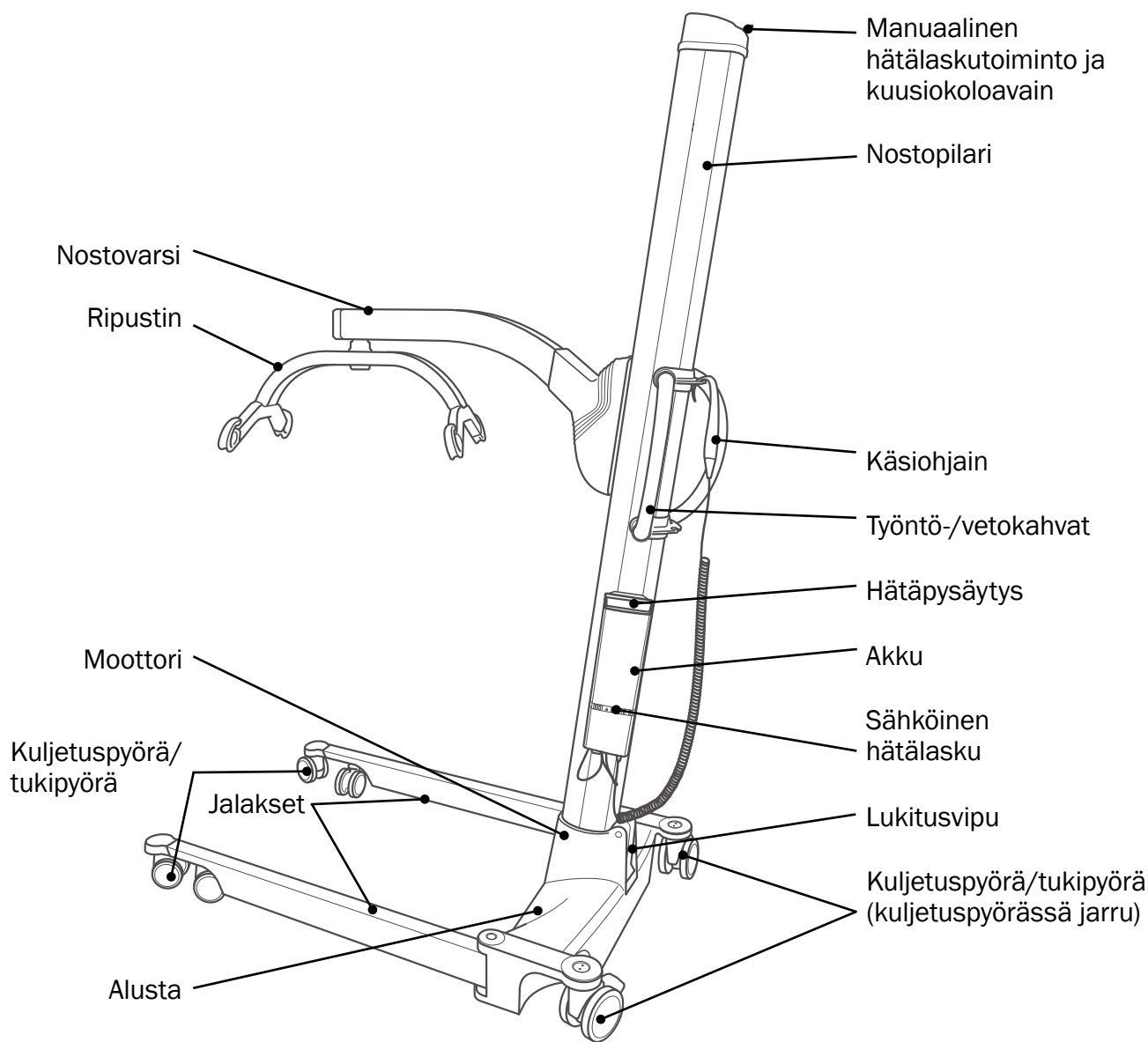

Tuotetarra, Mover 180

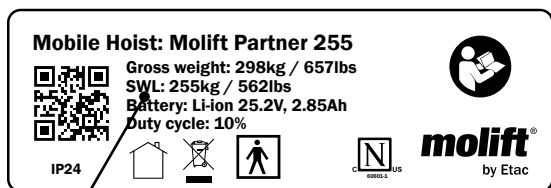

Suurin turvallinen kuorma (SWL)

Tyypikilpi, Mover 180



Sarjanumero

Tuotenumero

Valmistuspäivä



www.etac.com



Tämän dokumentin kopion voi ladata osoitteesta www.etac.com.

Siirry tuotesivulle skannaamalla tuotetarrassa oleva QR-koodi. Käyttöopas löytyy dokumenttien osiosta.

Tuotenumero (katso tyyppikilpi):

Sarjanumero (katso tyyppikilpi):

Valmistuspäivä:

Omistaja:

Nostoliina ei sisälly tähän tarkastukseen, vaan se on tarkastettava erikseen.

Huollon merkkival

Huomioi huollon merkkivalon väri:

Tila	Huollon merkkivalo	Toiminto
☐	(Ei valoa)	Huoltoa/määräaikaistarkastusta ei tarvita
☐	Keltainen	Varaa huolto
☐	Keltainen (vilkkuu ja antaa äänimerkin käytön aikana)	Suorita huolto
☐	Keltainen (syttyy ja sammuu hitaasti)	Suorita määräaikaistarkastus

Käyttökohteet

- ☐ Koti
- ☐ Sairaala
- ☐ Hoitolaitos
- ☐ Muu



Määräaikaistarkastuksen saa suorittaa tehtävään soveltuva ja pätevä henkilö, joka on perehtynyt huolella laitteen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon



Määräaikaistarkastuksen päivämäärän ja tarkastajan sekä mahdolliset lisätiedot voi syöttää nostolaitteen Molift Service Tool -sovellukseen. Molift suosittelee lisäämään kaikki nostolaitteeseen liittyvät havainnot/huomiot Molift Service Tool -sovellukseen, jotta laitteen historiatiedot pysyvät ajan tasalla

Silmämääräinen



Tarkasta kuormittuvat rakenteet silmämääräisesti, ettei niissä ole vaurioita, halkeamia, kulumia ja vääntymiä. Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuuntoon.

OK	Ei OK	
☐	☐	Nostopilari
☐	☐	Nostovarsi
☐	☐	Jalakset
☐	☐	Tuotetarra
☐	☐	Muovisuojat
☐	☐	Käsiohjain
☐	☐	Kuljetuspyörä/tukipyörä
☐	☐	Latauslaite
☐	☐	Jarrut kuljetuspyörä/tukipyörä
☐	☐	Johdot
☐	☐	Akku
☐	☐	Muu elektroniikka
☐	☐	Ripustin
☐	☐	Jalkojen säätömekanismi
☐	☐	Korroosiovauriot
☐	☐	Hitsausaumamat
☐	☐	Käyttöopas on tallessa/saatavilla

Functional examination



Test function and inspect for wear and damage.
All checkpoints must be checked to approve hoist for further use

OK Ei OK

OK	Ei OK	
☐	☐	Kuljetuspyörä/tukipyörä
☐	☐	Takapyörien jarrut
☐	☐	Jalakset sisäasennossa (samasuuntaisesti): Tarkasta, ettei jalasten välinen ero pienene, kun niitä työnnetään yhteen käsin
☐	☐	Nostopilari on kiinnitetty kokonaan, kun lukituskahva kytketään
☐	☐	Hätäpysäytyspainike on täysin toimintakunnossa ja sammuttaa virransyötön painiketta käytettäessä. Nollaa painikkeen asetukset
☐	☐	Manuaalisen hätälaskutoiminnon työkalu
☐	☐	Sähköinen hätälasku
☐	☐	Manuaalinen hätälasku
☐	☐	Käsiohjain (painikkeet, käsiohjaimen johdon vedonpoistin, koukku ja akun merkkivalo)
☐	☐	Ripustimen liitäntä (nivel liikkuu vapaasti ja äänettömästi)
		Jos kaikki tähän saakka tarkastetut kohdat ovat OK, testaa nostolaite suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)
☐	☐	Tee yksi nostokierros painolla, joka vastaa suurinta turvallista kuormaa (SWL), katso tuotetarrasta arvo kiloina (kg) / paunoina (lbs). Moottori ja akseli eivät saa liukua kuormitettuna (aiheuttaen nostovarren laskeutumisen), ja liikkeen on oltava tasainen ja vakaa.
☐	☐	Jalkojen säätömekanismi, ulko- ja sisäasento suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)

☐	☐	Suorita uusi silmämääräinen tarkastus; tarkasta vauriot, vällys ja vääntymiset edellä kuvatulla tavalla. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava ja testi toistettava, kunnes nostolaite toimii moitteettomasti
☐	☐	Latauslaite on toimintakunnossa
☐	☐	Nollaa määräaikaistarkastus painamalla käsiohjaimen ylös- ja alas-painikkeita 12 sekunnin ajan (nollauksen jälkeen huoltovalo sammuu)

Lisävarusteet:

Tarkastajan tiedot

Nimi:

Päiväys/paikka:

Allekirjoitus:

- ☐ Hyväksytty ilman vikoja
Seuraava tarkastus (VVVV / KK): /
- ☐ Nostolaite on merkitty "Epäkunnossa"-merkinnällä ja lähetetty korjattavaksi
- ☐ Nostolaitetta ei voi korjata, joten se poistetaan käytöstä

Mikäli määräaikaistarkastuksessa ilmenee vikoja, kulumia tai muita vaurioita, jotka vaarantavat potilaan turvallisuuden, nostolaitetta ei saa käyttää ennen kuin puute on korjattu

- ☐ Asiasta on ilmoitettu omistajalle




Lakisääteisten vaatimusten takia tämä dokumentti tai sen kopio on arkistoitava osaksi omistajan huoltokirjaa

Jos vikoja ei löydy ja tarkastus on hyväksytty, kiinnitä määräaikaistarkastustarra ja merkitse **seuraavan** tarkastuksen kuukausi ja vuosi. Kun tilaat tarran, käytä tuotenumeroa 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:

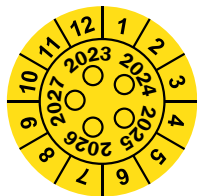

Merkitse tarraan seuraavan määräaikaistarkastuksen kuukausi ja vuosi

Muistiinpanot ja havainnot

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Promefa SA**

Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac