
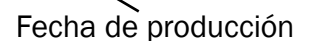


De acuerdo con la norma ISO 10535

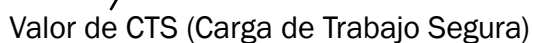

Puede descargarse una copia de este documento en www.etac.com.

Escanee el código QR de la etiqueta del producto para acceder a la página de inicio. El manual de usuario se encuentra en la sección de documentos.

N.º de artículo (véase la etiqueta de identificación):

N.º de serie (véase la etiqueta de identificación):

Año de producción:

Propietario:

El arnés debe inspeccionarse por separado y no está incluido en esta inspección.

Indicador de luz de servicio

Observe el color del indicador luminoso de servicio:

Estado	Luz de servicio	Modo
☐	(sin luz)	No se requiere servicio/inspección periódica
☐	Amarillo	Pedir servicio
☐	Amarillo (parpadea y suena cuando se acciona)	Realizar mantenimiento
☐	Amarillo (se enciende y apaga lentamente)	Realizar inspecciones periódicas

Lugar de utilización

- ☐ Hogar
- ☐ Hospital
- ☐ Residencia de ancianos
- ☐ Otro



La inspección periódica debe realizarla una persona debidamente cualificada y que conozca bien el diseño, el uso y el cuidado de la grúa



La herramienta Molift Service del software de la grúa ofrece la opción de introducir la fecha de PI y el nombre del inspector junto con información adicional.

Molift recomienda añadir todas las observaciones/comentarios relativos a la grúa en la herramienta Molift Service para el registro completo del historial de la grúa

Examen visual



Examen visual de la estructura para asegurarse de que no hay daños, grietas, deshilachados o deformaciones. Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

Bien *No está bien*

☐	☐	Columna de elevación
☐	☐	Brazo elevador
☐	☐	Patas
☐	☐	Etiqueta del producto
☐	☐	Cubiertas de plástico
☐	☐	Mando
☐	☐	Ruedas/ruedas giratorias
☐	☐	Cargador
☐	☐	Frenos de las ruedas/ruedas giratorias
☐	☐	Cables
☐	☐	Batería
☐	☐	Otros componentes electrónicos
☐	☐	Percha
☐	☐	Mecanismo de ajuste de piernas
☐	☐	Sin corrosión
☐	☐	Soldaduras
☐	☐	Las instrucciones de uso/ el manual del usuario están presentes/disponibles

Examen funcional



Compruebe si funciona e inspeccione para detectar si presenta desgaste o daños.

Se deben marcar todos los puntos de verificación para aprobar el uso posterior de la grúa

<i>Bien</i>	<i>No está bien</i>	
☐	☐	Ruedas/ruedas giratorias
☐	☐	Frenos de las ruedas/ruedas giratorias traseras
☐	☐	Con las patas en la posición interior (en paralelo): Compruebe que la distancia entre las patas no pueda disminuir al empujarlas con la mano
☐	☐	La columna de elevación está completamente fija cuando se engancha el asa de bloqueo
☐	☐	El botón de parada de emergencia es totalmente operativo e interrumpe el suministro de energía cuando se activa. Botón de reinicio
☐	☐	Herramienta para el descenso manual de emergencia
☐	☐	Descenso eléctrico de emergencia
☐	☐	Descenso manual de emergencia
☐	☐	Mando (botones, alivio de tensión en el cable del mando, gancho e indicador de batería)
☐	☐	Enganche de la percha (la articulación giratoria se mueve libremente y sin hacer ruido)

<i>Bien</i>	<i>No está bien</i>	
		Si todos los puntos se han marcado como “Bien”, la grúa se probará con una CTS (Carga de Trabajo Segura)
☐	☐	Realice un ciclo de elevación con un peso igual al a la CTS (consulte la etiqueta del producto para conocer el valor en kg/lbs). El motor y el eje no deben deslizarse cuando hay carga (haciendo que el brazo elevador descienda), y el movimiento debe ser suave y uniforme
☐	☐	Mecanismo de ajuste de piernas, hacia fuera y hacia dentro con CTS (Carga de Trabajo Segura)
☐	☐	Realice un nuevo control visual; Daños, juego y deformaciones como se describió anteriormente. Cualquier pieza dañada debe ser reparada o sustituida y la prueba se repite una vez más hasta que la grúa funcione correctamente
☐	☐	El cargador está operativo
☐	☐	Reinicie la inspección periódica pulsando los botones de subida y bajada del mando de control durante 12 segundos (después de reiniciar, la luz de servicio se apaga)

Accesorios:

Realizado por

Nombre completo:

Fecha/lugar:

Firma:

☐ Aprobado sin fallos

Próxima inspección

(MM/AAAA): /

☐ La grúa se marca con “Fuera de servicio”
y se envía a reparar

☐ La grúa no se puede reparar y se retira del
servicio

Si al realizar la inspección periódica se encuentra
algún defecto, desgaste u otro daño que pueda
poner en peligro la seguridad del paciente, la grúa
no podrá utilizarse hasta que se haya subsanado
la anomalía.


☐ Se ha notificado al propietario



Por requisitos legales, este documento o una copia del mismo debe archivar-se con el libro de registro de servicio del propietario

Si se aprueba sin defectos, coloque la etiqueta de inspección periódica y marque el mes y el año para la **próxima** inspección periódica. Al pedir la etiqueta, utilice el n.º de referencia 1100306

Next periodic inspection

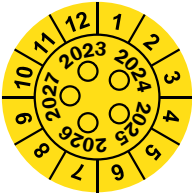

Inspection performed by: _____

Marque la etiqueta con el mes y el año de la próxima inspección periódica

Notas y observaciones

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Promefa SA**

Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

**Etac A/S**

Parallelsvej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac