




Kontrolní seznam pravidelných prohlídek – CZ Molift Partner 255


molift[®]
by Etac

PI03411 - 2026-06-10 - Rev. 2.0

V souladu s ISO 10535

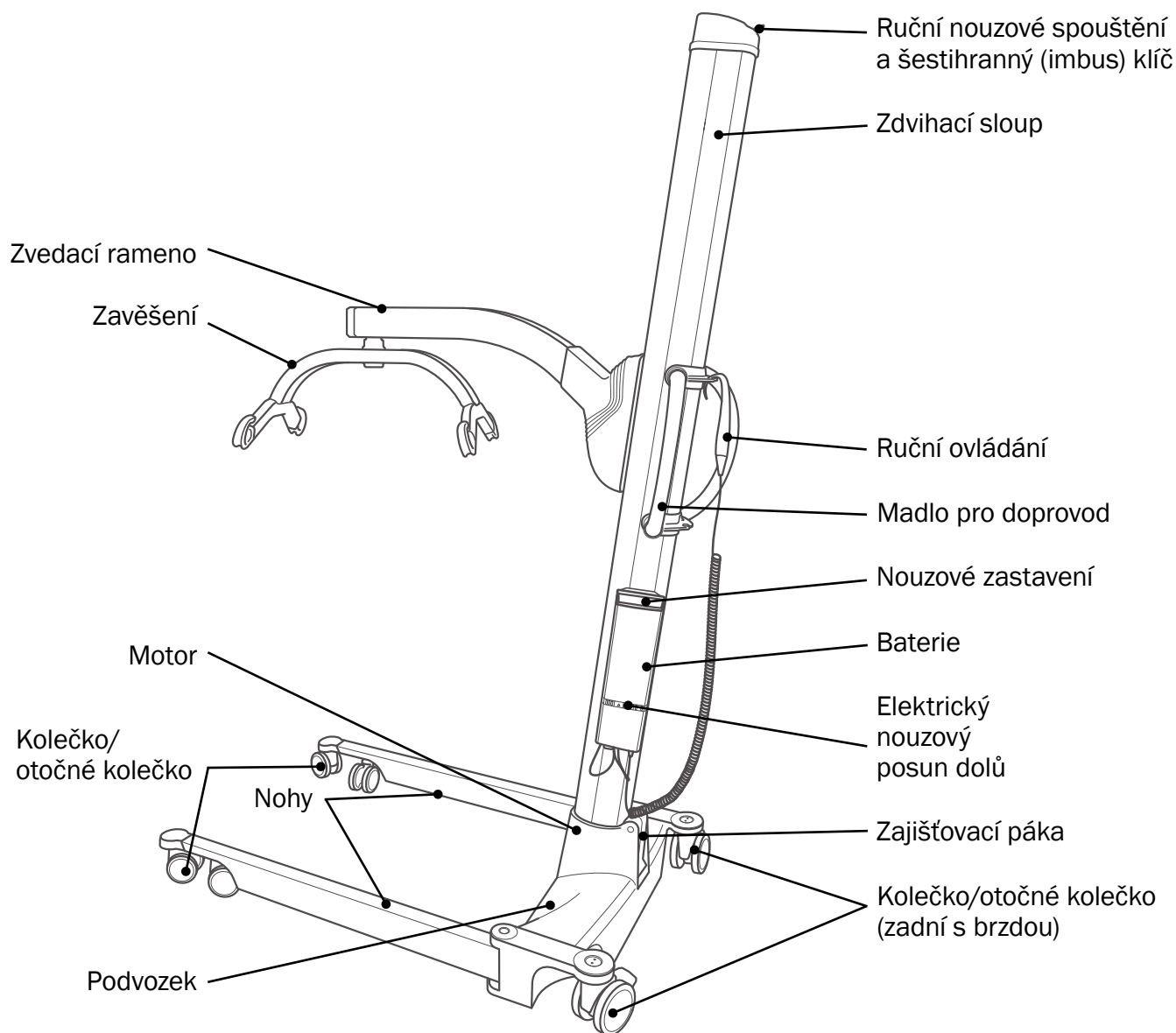

Výrobní štítek

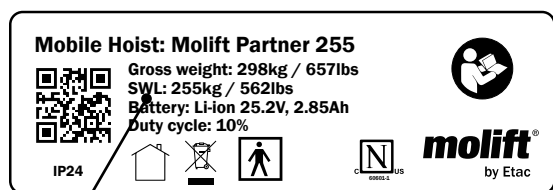

Hodnota SWL

ID štítek



Výrobní číslo

Katalog. č.

Datum výroby



Kopie tohoto dokumentu je ke stažení na adrese www.etac.com.

Oskenujte QR kód na štítku produktu pro přístup na domovskou stránku produktu. Návod k použití naleznete v sekci dokumentů.

Katalog. č. (viz ID štítek):

Výrobní číslo (viz ID štítek):

Rok výroby:

Vlastník:

Závěsný kurt je nutno kontrolovat samostatně, není zahrnutý do této prohlídky.

Servisní kontrolka

Povšimněte si barvy servisní kontrolky:

Status	Kontrolka údržby	Režim
☐	(nesvítí)	Servis/pravidelná kontrola nejsou nutné
☐	Žlutá	Objednat údržbu
☐	Žlutá (při provozu bliká a zazní zvuk)	Proveďte servis
☐	Žlutá (pomalu se zapne a vypne)	Proveďte pravidelnou kontrolu

Případy použití

- ☐ Domov
- ☐ Nemocnice
- ☐ Pečovatelský dům
- ☐ Ostatní



Pravidelnou prohlídku má provádět osoba, která je vhodná, řádně kvalifikovaná a dostatečně obeznámená s konstrukcí, používáním a péčí o zvedák



Softwarový servisní nástroj zvedáku Molift umožňuje zadat datum pravidelné prohlídky a jméno kontrolora spolu s dalšími informacemi. Společnost Molift doporučuje zadat všechna pozorování / poznámky týkající se zvedáku do servisního nástroje Molift pro vytvoření kompletní historie zvedáku

Vizuální prohlídka



Vizuální prohlídka nosné konstrukce, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození, prasklinám, roztřepení nebo deformacím. Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body

V POŘÁDKU	Není V POŘÁDKU	
☐	☐	Zdvihací sloup
☐	☐	Zvedací rameno
☐	☐	Nohy
☐	☐	Výrobní štítek
☐	☐	Plastové kryty
☐	☐	Ruční ovládání
☐	☐	Kolečko/otočné kolečko
☐	☐	Nabíječka
☐	☐	Brzdy na kolečko/otočné kolečko
☐	☐	Kabely
☐	☐	Baterie
☐	☐	Ostatní elektronické jednotky
☐	☐	Zavěšení
☐	☐	Mechanismus nastavení nohou
☐	☐	Bez koroze
☐	☐	Svary
☐	☐	Návod k použití je přítomný / dostupný

Funkční kontrola



Prověřte funkci, zkontrolujte opotřebení a poškození.
Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body

V POŘÁDKU	Není V POŘÁDKU	
☐	☐	Kolečko/otočné kolečko
☐	☐	Brzdy zadních kol/rejdových kol
☐	☐	S nohama podvozku ve vnitřní poloze (rovnoběžnými): Zkontrolujte, zda se vzdálenost mezi nohama nelze zmenšit tlakem rukou
☐	☐	Zvedací sloup je po aktivaci pojistné rukojeti řádně upevněn
☐	☐	Tlačítko nouzového zastavení je plně funkční a při stlačení přeruší napájení. Resetujte spínač
☐	☐	Nástroj pro ruční nouzové spouštění
☐	☐	Elektrický nouzový posun dolů
☐	☐	Ruční nouzový posun dolů
☐	☐	Ruční ovládání (tlačítka, odlehčení tahu na kabelu ručního ovládání, hák a kontrolka baterie)
☐	☐	Spojka zvedacího závěsu (otočný spoj se pohybuje volně a nehlukně)

V POŘÁDKU	Není V POŘÁDKU	
		Pokud byly všechny body dosud v pořádku, otestujte zvedák na bezpečnostní limit (SWL)
☐	☐	Proveďte jeden zvedací cyklus s hmotností rovnou SWL (hodnota v kg/lbs je uvedena na výrobním štítku). Motor a vřeteno nesmí při zatížení prokluzovat (způsobit spuštění zvedacího ramene) a pohyb musí být plynulý a rovnoměrný
☐	☐	Mechanismus nastavení nohou, ven a dovnitř s bezpečnostním limitem (SWL)
☐	☐	Proveďte novou vizuální kontrolu; Poškození, zásahy a deformace, jak jsou popsány výše. Jakékoli poškozené součásti se musí opravit nebo vyměnit a zkoušku je nutné opakovat, dokud zvedák nebude fungovat správně
☐	☐	Nabíječka je funkční
☐	☐	Resetujte pravidelnou kontrolu stisknutím tlačítek nahoru a dolů na ručním ovládání na 12 sekund (po resetu zhasne servisní kontrolka)

Příslušenství:

Provedl

Jméno a příjmení:

Datum/místo:

Podpis:

☐ Schváleno bez závad

Příští prohlídka

(RRRR / MM): /

☐ Zvedák je označen „Mimo provoz“
a odeslán k opravě

☐ Zvedák není způsobilý k opravě a je vyřazen
z provozu

Pokud pravidelná prohlídka odhalí závadu,
opotřebení nebo jiné poškození, které ohrožuje
bezpečnost pacienta, nesmí být zvedák používán,
dokud nebude závada odstraněna.

☐ Vlastník je informován




Vzhledem k zákonným požadavkům musí být tento dokument nebo jeho kopie uložena se servisní knížkou majitele

Poznámky a zjištění

V případě schválení bez závad nalepte kontrolní štítek a vyznačte měsíc a rok **další** pravidelné kontroly. Při objednávání štítku použijte č. položky 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:

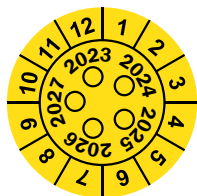

Na štítku vyznačte měsíc a rok další pravidelné kontroly

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Promefa SA**

Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac