


# Molift Mover 180, 205 och 300

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac


## Checklista för periodiska kontroller (SV)

I enlighet med ISO:10535

PI06104 Rev. A 2022-06-15

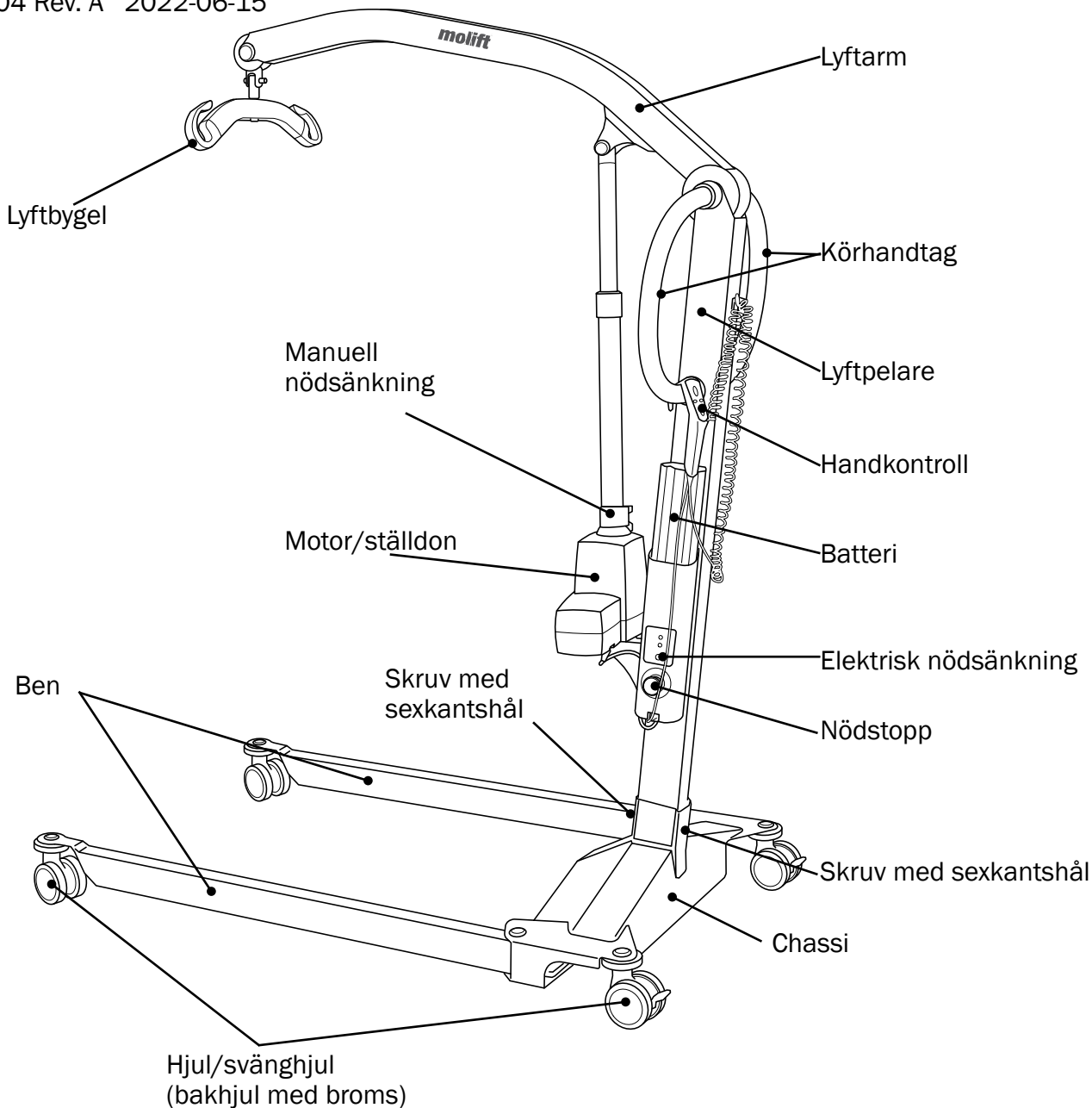

### Produktetikett, Mover 180

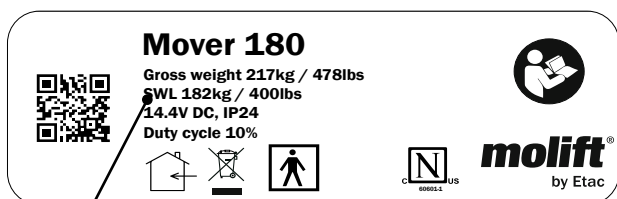


Värde för säker arbetsbelastning

### ID-etikett, Mover 180




Serienummer Artikelnummer Tillverkningsdatum



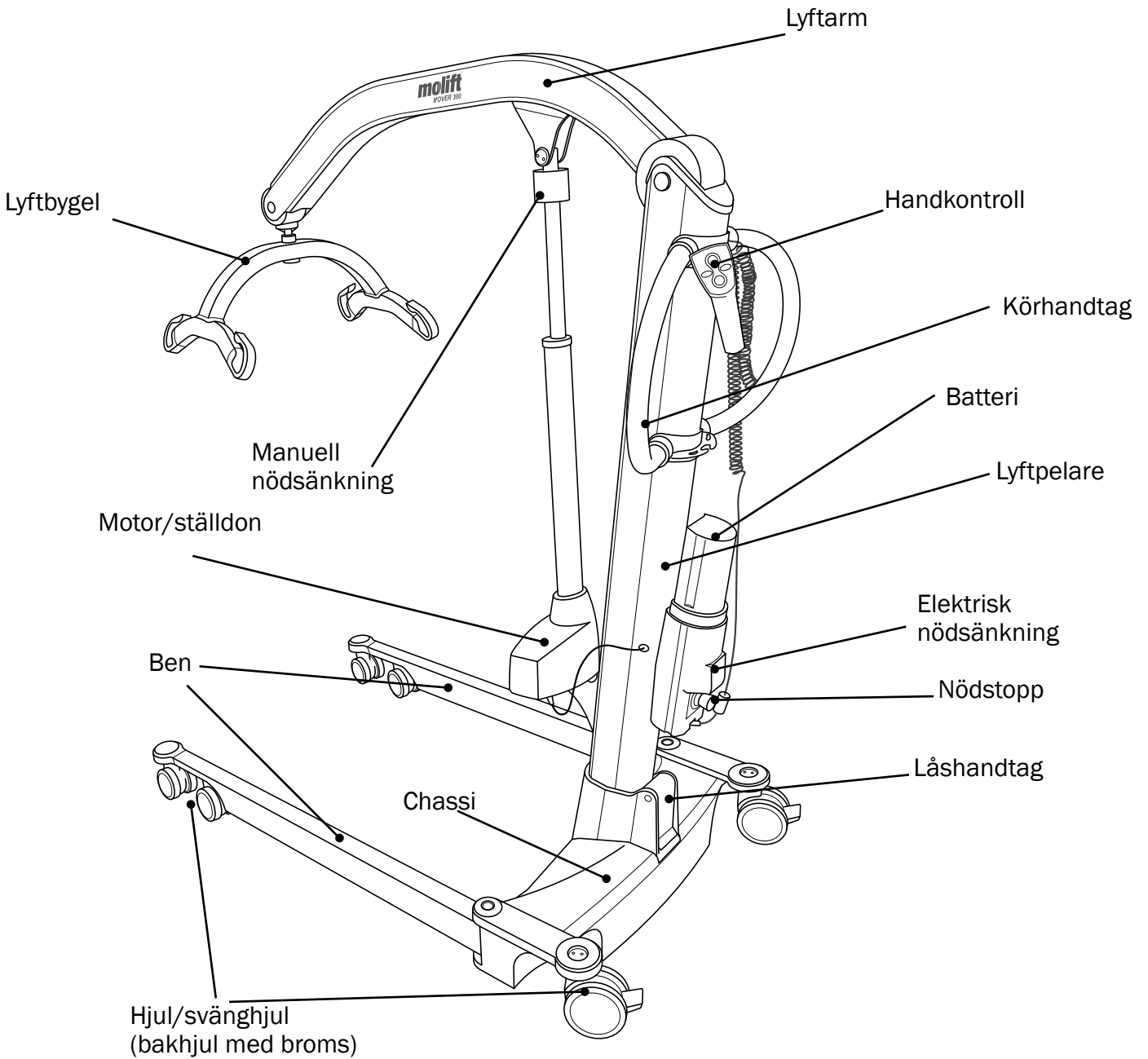

### Produktetikett, Mover 300

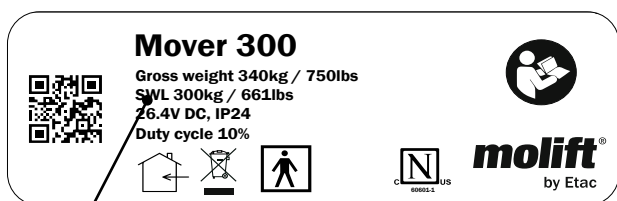

Värde för säker arbetsbelastning

### ID-etikett, Mover 300



Serienummer Artikelnummer Tillverkningsdatum

Det går att ladda ner det här dokumentet från [www.etac.com](http://www.etac.com).

Scanna QR-koden på produktetiketten för att komma till produktens hemsida. Användarmanualen finns under "Dokument".

Artikelnummer (se ID-etikett):

.....

Serienummer (se ID-etikett):

.....

Tillverkningsår:

.....

Ägare:

.....

Selen ska inspekteras separat och ingår inte i den här kontrollen.

Specificera modell:

Mover 180  
Mover 205  
Mover 300

## Användningssituation

Hemma  
Sjukhus  
Vårdhem  
Annan



**Den periodiska kontrollen ska utföras av en person som är lämpad och kvalificerad samt har kunskap om hur lyften är utformad, används och sköts.**



**Med lyftens mjukvara Molift Service tool är det möjligt att ange datum när den periodiska kontrollen utförs, namnet på kontrollören samt ytterligare information. Molift rekommenderar att man skriver in alla observationer/kommentarer rörande lyften i Molift Service tool för att få en komplett historiklogg för lyften.**

## Serviceljusindikator

Kontrollera serviceljusindikatorns ljus:

Status	Serviceljus	Läge
	(Lyser inte)	Strömsparkläge (Stand by)
	Grön	Redo att användas
	Gul	Boka service
	Röd	Låt utföra service
	Röd (plus ljusignal)	Låt utföra service omedelbart

## Visuell undersökning



**Visuell undersökning av den bärande strukturen för att säkerställa att det inte finns några skador, sprickor, deformationer eller andra fel. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.**

OK    Inte OK

Lyftpelare
Lyftarm
Ben
Produktetikett
Plastskydd
Handkontroll
Ställdon
Hjul/svänghjul
Bromsar på hjul/svänghjul
Laddare
Kablar
Batteri
Elektronik
Lyftbygel, inkl. vaddering
Benspridningsmekanism
Ingen korrosion
Svetsning
Användningsinstruktioner/ användarmanual finns på plats/är tillgänglig

**Funktionskontroll**

**Testa FUNKTIONEN och kontrollera beträffande slitage och skador. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.**

OK    *Inte OK*

Hjul/svänghjul

Bakhjuls-/svänghjulsbromsar

Med ben i inre läge (parallella):  
Kontrollera att det inte går att minska avståndet mellan benen när de trycks ihop för hand.

Endast för Mover 180:  
Lyftpelaren är komplett fixerad med låsskruvar med sexkantshål som är hårt åtdragna.

Endast för Mover 205 och 300:  
Lyftpelaren är komplett fixerad när låshandtaget är aktiverat.

Nödstoppsknappen fungerar korrekt och bryter strömmen när den trycks ner.  
Återställ brytaren.

Elektrisk nödsänkning

Manuell nödsänkning

Handkontroll (knappar, dragavlastning på handkontrollens kabel, krok samt batteriindikator)

Lyftbygelkoppling (vridleden rör sig fritt och utan ljud)

Snabbkoppling till lyftbygel

Om alla punkter har markerats med "OK" hittills ska lyften testas med säker arbetsbelastning.

Genomför en lyftcykel med vikt som motsvarar säker arbetsbelastning (se produktetiketten för värde i kg/lbs).

Ställdonet får inte slira under belastning (vilket får lyftarmen att sänkas).

Benspridningsmekanism, utåt och inåt med säker arbetsbelastning

OK    *Inte OK*

Kontrollera visuellt igen beträffande skador, spel och deformationer så som beskrivs ovan. Alla skadade delar måste repareras eller bytas ut och testet ska göras om tills lyften arbetar korrekt.

Laddaren fungerar.

Med fulladdat batteri insatt, efter inledande cykel, batteriljuset är släckt, skiftnyckel-/serviceljusindikatorn är grön

Tillbehör:

.....

.....

.....

**Kontroll utförd av**

För- och efternamn:

Datum/plats:

Underskrift:

Godkänd utan fel.

Nästa kontroll (ÅÅÅÅ/MM):        /

Lyften har klassats som "fungerar inte" och skickats för reparation.

Lyften kan inte repareras och har tagits ur drift.

Om den periodiska kontrollen visar på defekter, slitage eller andra skador som kan äventyra patientsäkerheten får lyften inte användas förrän bristen har åtgärdats.

Ägaren har informerats.

## Anteckningar

 **Till följd av juridiska krav måste det här dokumentet eller en kopia av det arkiveras tillsammans med ägarens servicelögbok.**

Om enheten godkändes utan fel ska kontrolletiketten med markering av år och månad för **nästa** kontroll sättas fast. När du beställer etikett, använd artikelnummer 1100306

