




Checklista för periodiska kontroller – SV

Molift Mover 180, 205 och 300


molift[®]
by Etac

PI08202 - 2025-03-12 - Rev. 1.0

I enlighet med ISO 10535

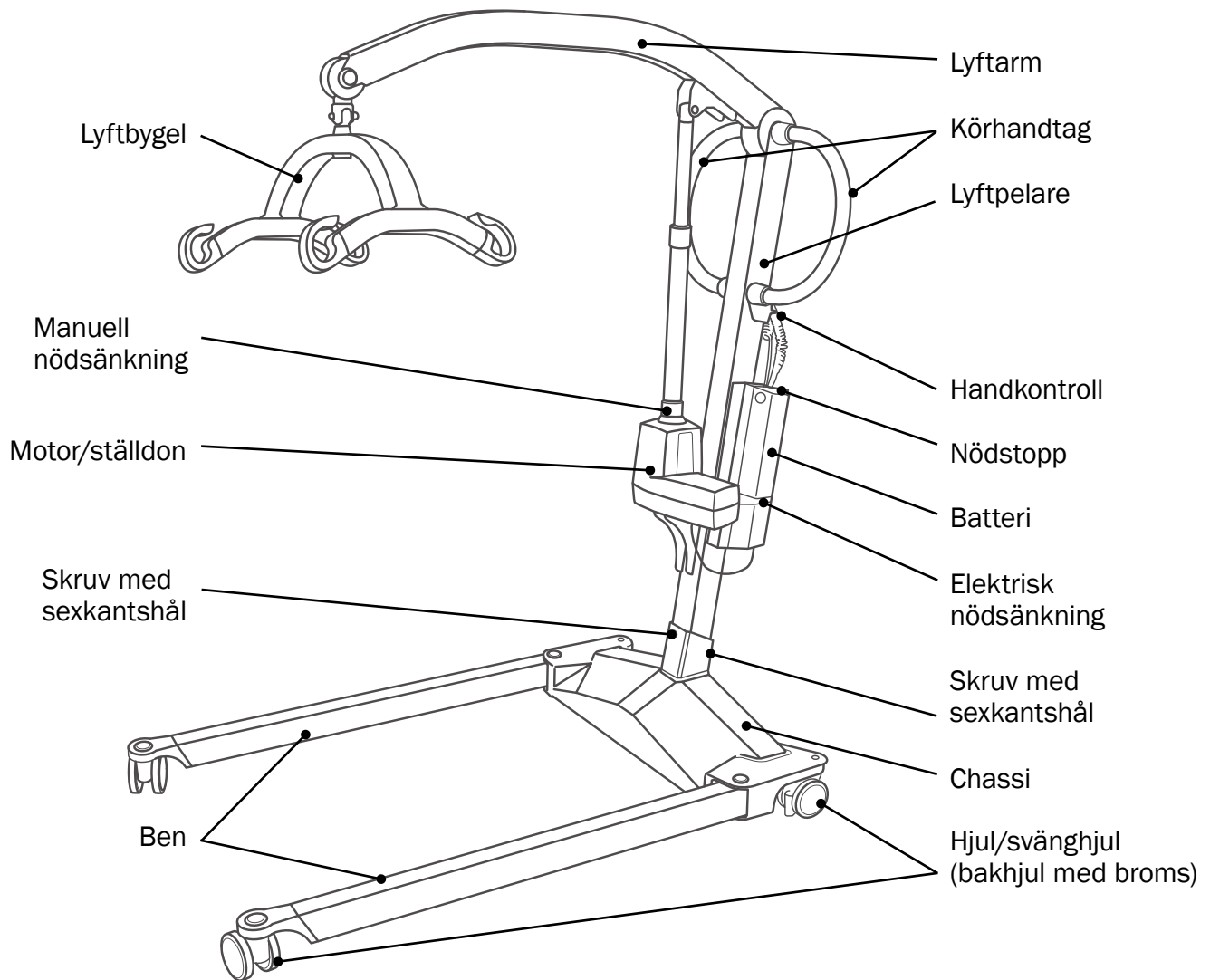

Produktetikett, Mover 180

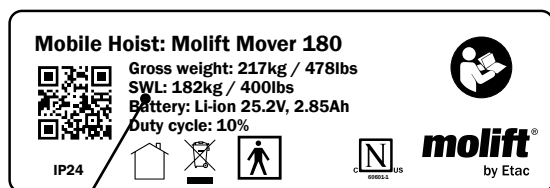

Värde för säker arbetsbelastning

Id-etikett, Mover 180



Serienummer


Artikelnummer

Tillverkningsdatum




www.etac.com



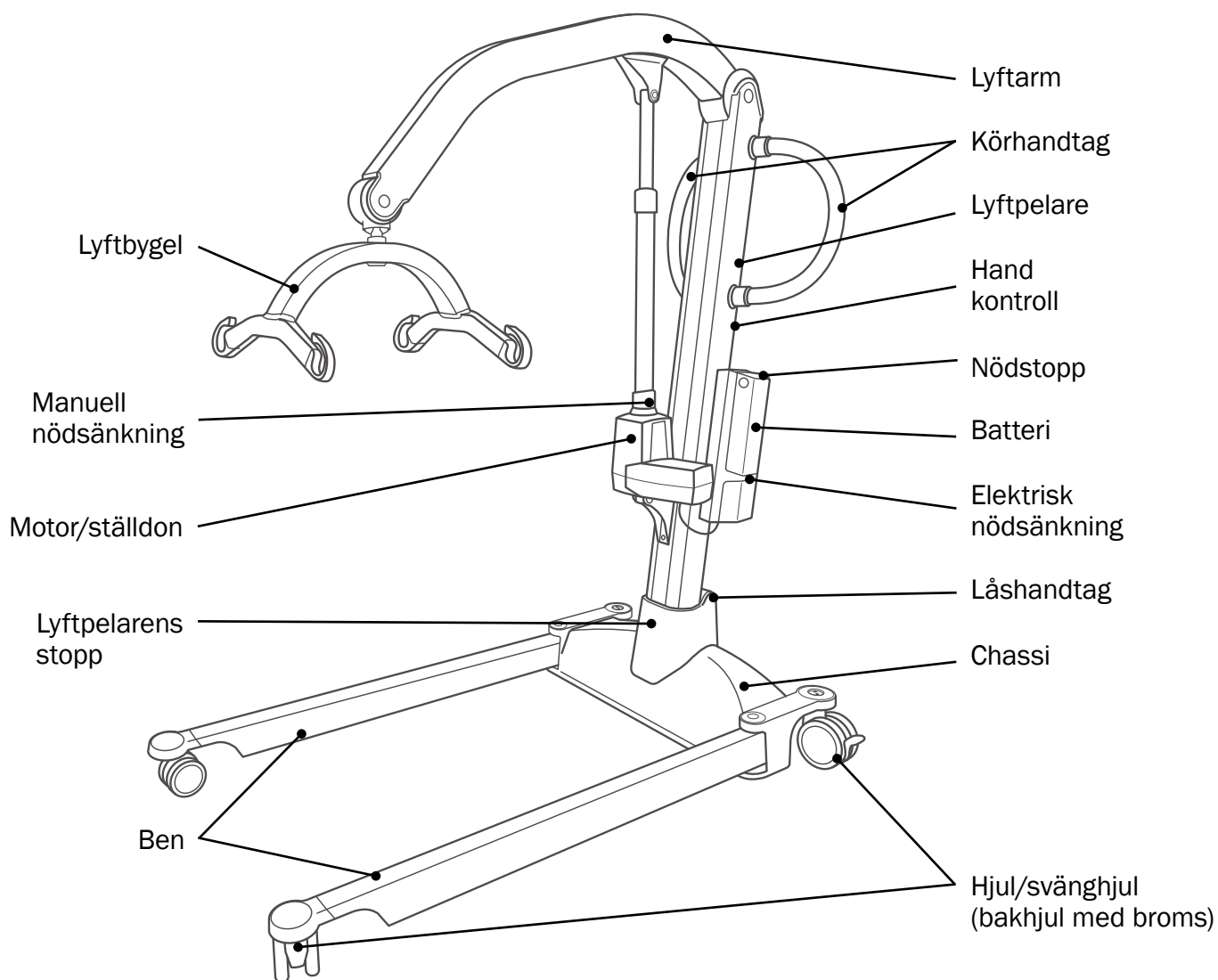

Produktetikett, Mover 205

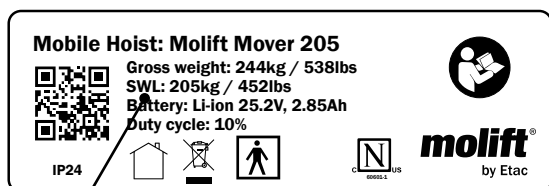

Värde för säker arbetsbelastning


Id-etikett, Mover 205




Serienummer

Artikelnummer

Tillverkningsdatum

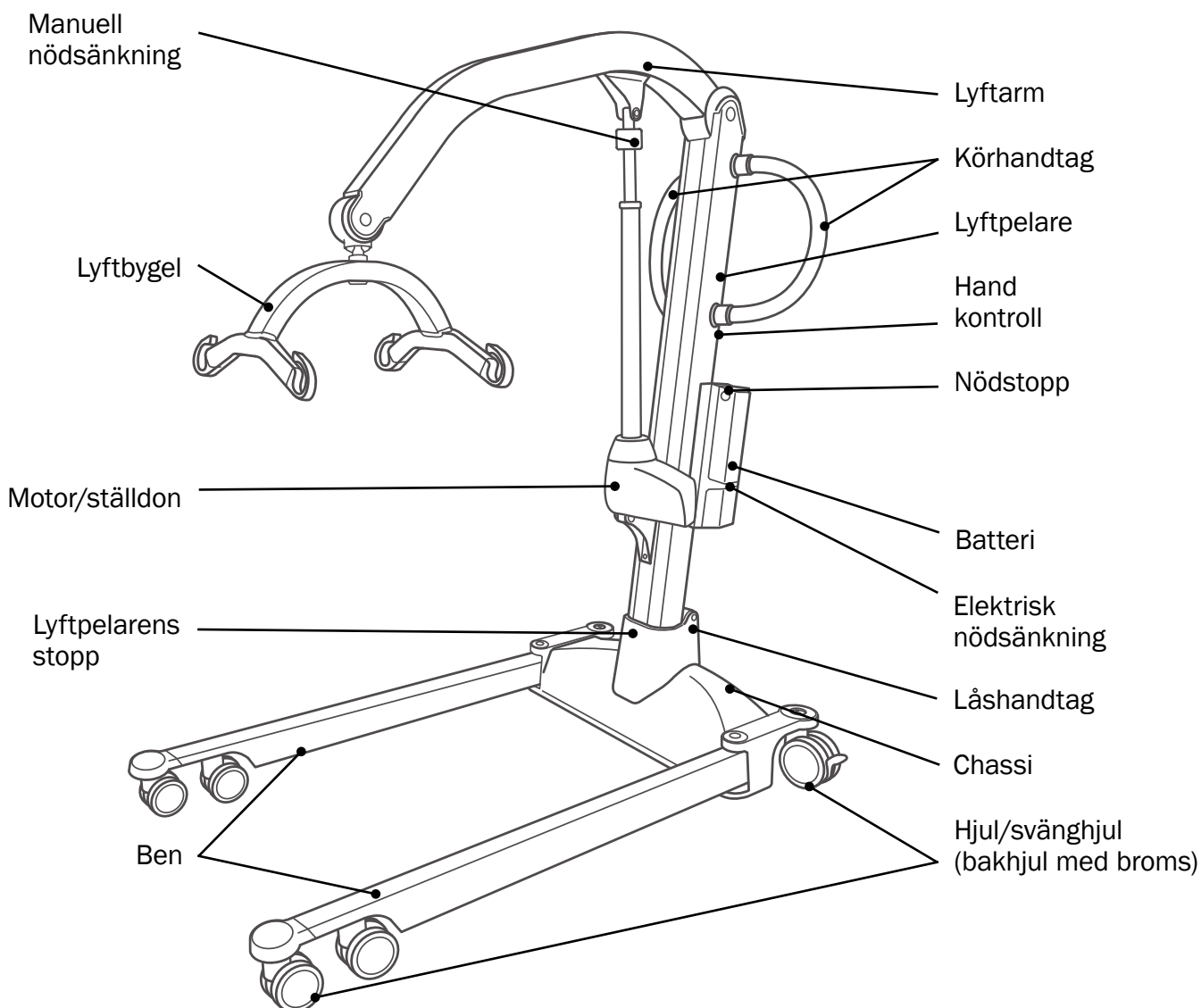

Produktetikett, Mover 300

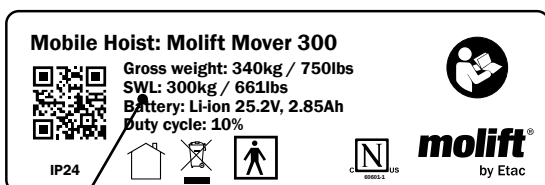

Värde för säker arbetsbelastning

Id-etikett, Mover 300



Serienummer

Artikelnummer

Tillverkningsdatum

Det går att ladda ner det här dokumentet från www.etac.com.

Scanna QR-koden på produktetiketten för att komma till produktens hemsida. Användarmanualen finns under "Dokument".

Artikelnummer (se ID-etikett):

.....

Serienummer (se ID-etikett):

.....

Tillverkningsår:

.....

Ägare:

.....

Selen ska inspekteras separat och ingår inte i den här kontrollen.

Specificera modell:

Mover 180

Mover 205

Mover 300

Användningssituation

Hemma

Sjukhus

Vårdhem

Annan



Den periodiska kontrollen ska utföras av en person som är lämpad, kvalificerad samt har kunskap om hur lyften är utformad, används och sköts



Med lyftens mjukvara Molift Service Tool är det möjligt att ange datum när den periodiska kontrollen utförs, namnet på kontrollören samt ytterligare information. Molift rekommenderar att man skriver in alla observationer/kommentarer rörande lyften i Molift Service Tool för att få en komplett historiklogg för lyften

ServiceIjusindikator

Kontrollera serviceIjusindikatorns Ijus:

Status	ServiceIjus	Läge
	(Lyser inte)	Service/periodiska kontroll krävs ej
Gul		Boka service
Gul (blinkar och Ijuder vid drift)		Låt utföra service
Gul (tänds och släcks långsamt)		Utför periodiska kontroll

Visuell undersökning



Visuell undersökning av den bärande strukturen för att säkerställa att det inte finns några skador, sprickor, deformationer eller andra fel. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning

OK Inte OK

Lyftpelare
Lyftarm
Ben
Produktetikett
Plastskydd
Handkontroll
Ställdon
Hjul/svänghjul
Bromsar på hjul/svänghjul
Laddare
Kablar
Batteri
Annan elektronik
Lyftbygel
Mekanism för benjustering
Ingen korrosion
Svetsning
Användningsinstruktioner/ användarmanual finns på plats/ är tillgänglig

Funktionskontroll

Testa funktionen och kontrollera beträffande slitage och skador. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning

OK *Inte OK*

OK <i>Inte OK</i>
Hjul/svänghjul
Bakhjuls-/svänghjulsbromsar
Med ben i inre läge (parallella): Kontrollera att det inte går att minska avståndet mellan benen när de trycks ihop för hand
Endast för Mover 180: Lyftpelaren är komplett fixerad med låsskruvar med sexkantshål som är hårt åtdragna
Endast för Mover 205 och 300: Lyftpelaren är komplett fixerad när låshandtaget är aktiverat
Nödstoppsknappen fungerar korrekt och bryter strömmen när den trycks ner. Återställ brytaren
Elektrisk nödsänkning
Manuell nödsänkning
Handkontroll (knappar, dragavlastning på handkontrollens kabel, krok samt batteriindikator)
Lyftbygelkoppling (vridleden rör sig fritt och utan ljud)
Snabbkoppling till lyftbygel
Om alla punkter har markerats med "OK" hittills ska lyften testas med säker arbetsbelastning
Genomför en lyftcykel med vikt som motsvarar säker arbetsbelastning (se produktetiketten för värde i kg/lbs). Ställdonet får inte slira under belastning (vilket får lyftarmen att sänkas)
Mekanism för benjustering, utåt och inåt med säker arbetsbelastning

Kontrollera visuellt igen beträffande skador, spel och deformationer så som beskrivs ovan. Alla skadade delar måste repareras eller bytas ut och testet ska göras om tills lyften arbetar korrekt

Laddaren fungerar

Återställ periodiska kontroll genom att trycka på upp- och nedknapparna på handkontrollen i tolv sekunder (efter återställning släcks servicelampan)

Tillbehör:

.....

.....

.....

Kontroll utförd av

För- och efternamn:

Datum/plats:

Underskrift:

Godkänd utan fel.

Nästa kontroll (ÅÅÅÅ/MM)/

Lyften har klassats som "fungerar inte" och skickats för reparation.

Lyften kan inte repareras och har tagits ur drift.

Om den periodiska kontrollen visar på defekter, slitage eller andra skador som kan äventyra patientsäkerheten får lyften inte användas förrän bristen har åtgärdats.

Ägaren har informerats.




Till följd av juridiska krav måste det här dokumentet eller en kopia av det arkiveras tillsammans med ägarens serviceloggbok.

Anteckningar

Om enheten godkändes utan fel ska periodiska kontroll etiketten med markering av år och månad för **nästa** periodiska kontroll sättas fast. När du beställer etikett, använd artikelnummer 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:

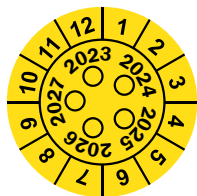

Märk etiketten med månad och år för nästa periodiska kontroll

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac