




Sjekkliste for periodisk kontroll (NO)

Molift Mover 180, 205 og 300


molift[®]
by Etac

PI08203 - 2025-05-01 - Rev. 1.0

I samsvar med ISO 10535

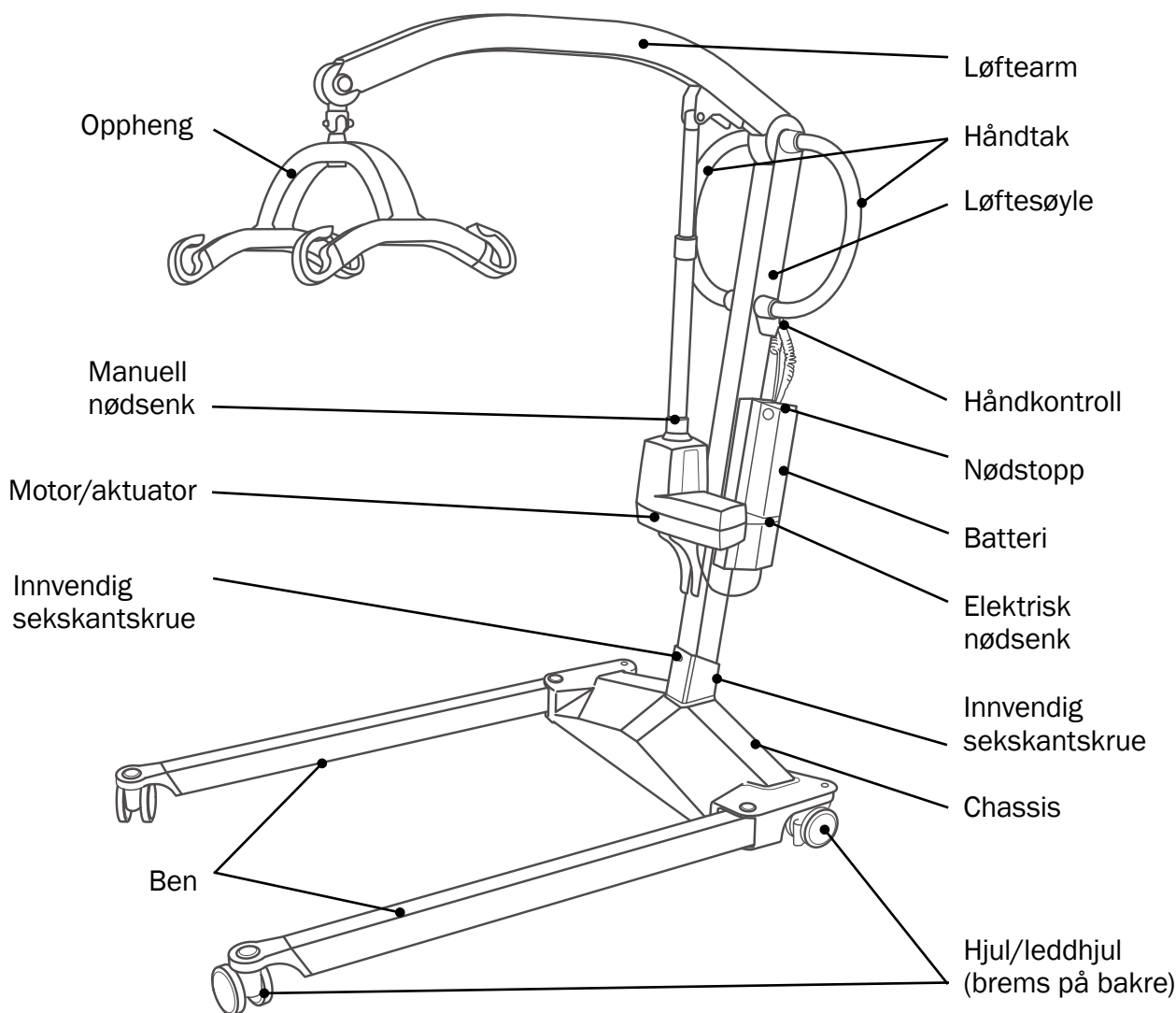

Produktetikett Mover 180

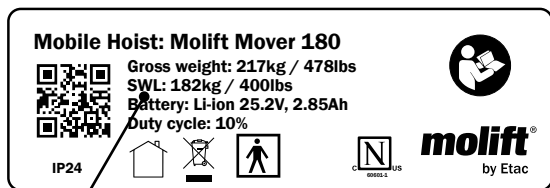

Brukervekt (SWL)-verdi

ID-etikett Mover 180



Serienr.


Artikkelnr.

Produksjonsdato




www.etac.com



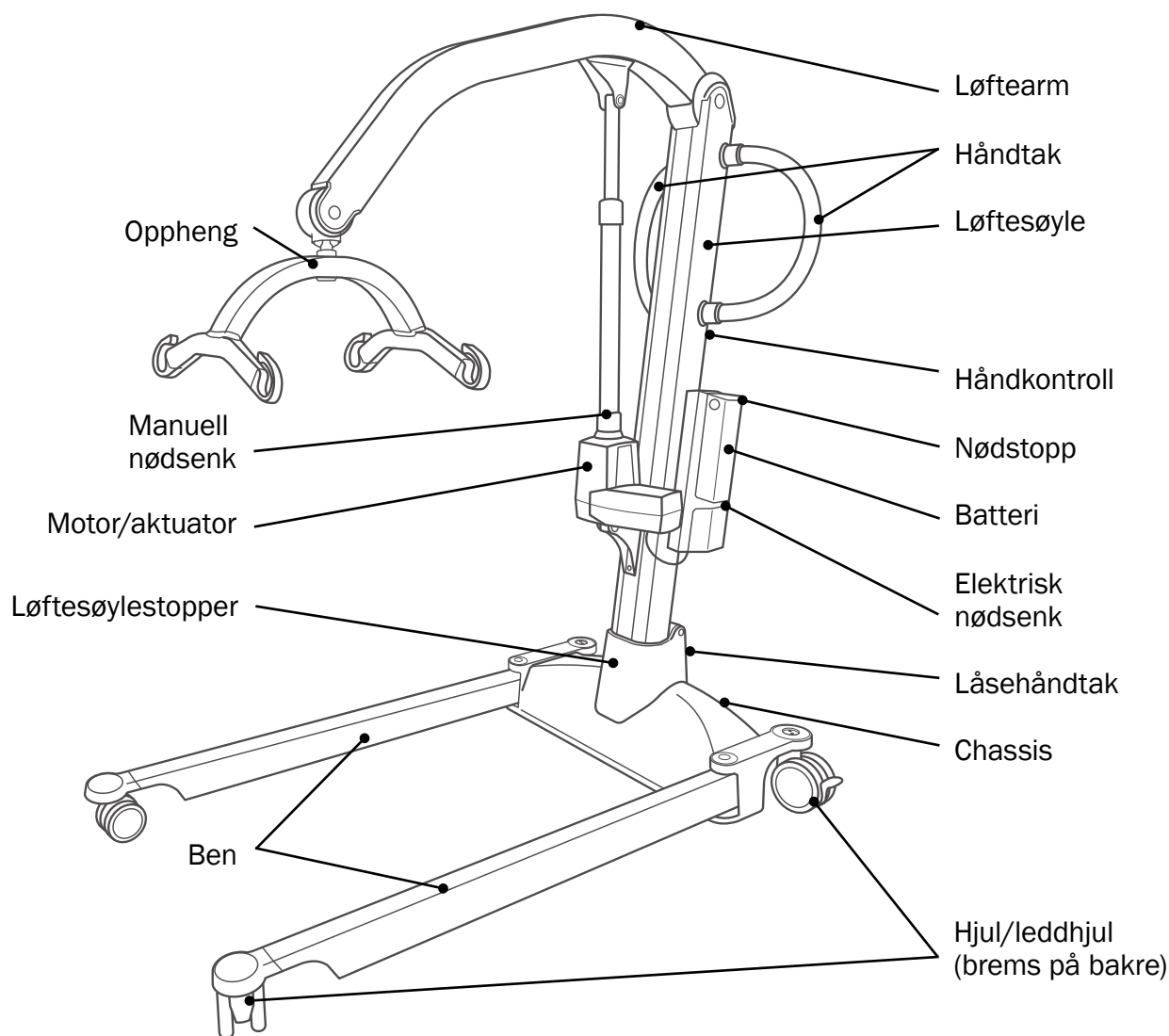

Produktetikett Mover 205

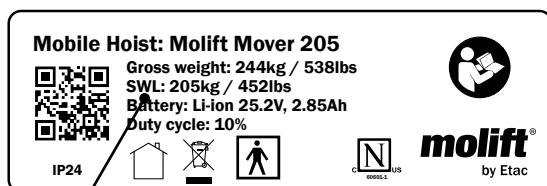

Brukervekt (SWL)-verdi


ID-etikett Mover 205




Serienr.

Artikkelnr.

Produksjonsdato

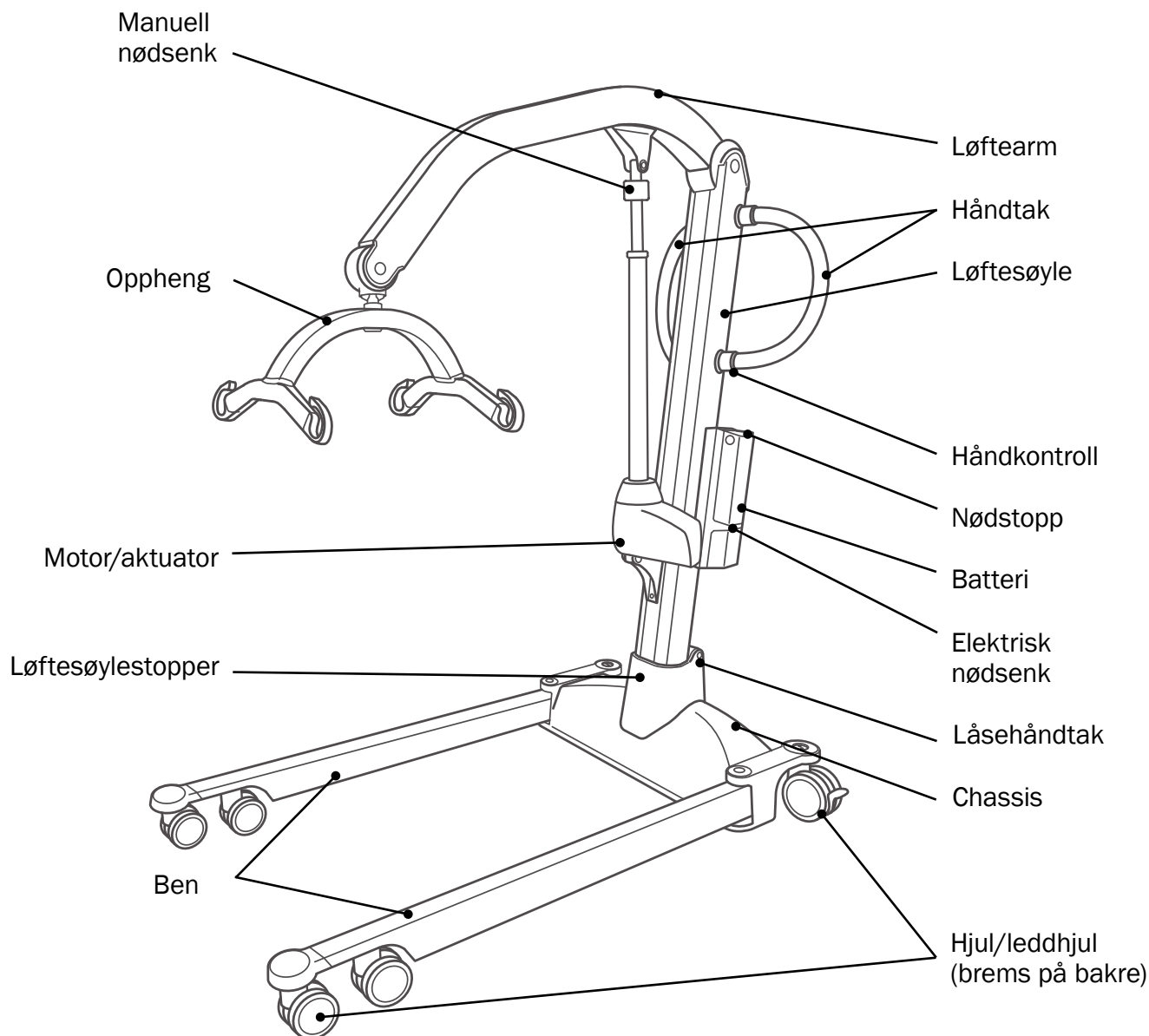

Produktetikett Mover 300

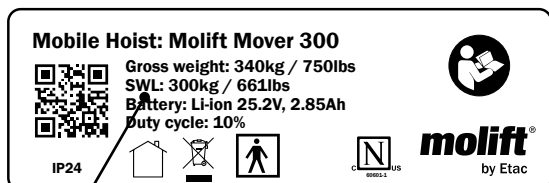

Brukervekt (SWL)-verdi

ID-etikett Mover 300



Serienr.

Artikkelnr.

Produksjonsdato

Du kan laste ned en kopi av dette dokumentet på www.etac.com.

Skann QR-koden på produktetiketten for å komme til hjemmesiden til produktet. Du finner brukerhåndboken i dokument-delen.

Artikkelnr. (se ID-etikett):

.....

Serienr. (se ID-etikett):

.....

Produksjonsår:

.....

Eier:

.....

Seilet må inspiseres separat og er ikke en del av denne inspeksjonen.

Spesifikk modell:

Mover 180
Mover 205
Mover 300

Brukssituasjon

Hjemme
Sykehus
Pleiehjem
Annet



Den periodevise inspeksjonen skal gjennomføres av en person som er egnet og godt kvalifisert, og godt kjent med designet, bruken og vedlikeholdet av løfteren



Programvaren Molift Service Tool byr på muligheten til å legge inn dato for PI og navnet til den som gjennomfører informasjon samt ytterligere informasjon i løfteren. Molift anbefaler å legge inn observasjoner / kommentarer angående løfteren i Molift Service Tool for å få en komplett servicehistorikk for løfteren

Serviceindikatorlys

Legg merke til fargen til serviceindikatorlyset:

Status	Servicelys	Modus
	(Ikke lys)	Service/Periodevise inspeksjon ikke nødvendig
	Gul	Bestill service
	Gul (blits og lyd når operert)	Utføre service
	Gul (sakte slår på og av)	Utføre Periodevise inspeksjon

Visuell undersøkelse



Visuell undersøkelse av lastbærende struktur for å forsikre at den ikke er skadet, har sprekker, brudd eller deformeringer. Alle avkryssingspunkt må krysses av før løfteren kan godkjennes for fremtidig bruk

OK Ikke OK

Løftesøyle
Løftearm
Ben
Produktetikett
Plastdeksel
Håndkontroll
Aktuator
Hjul/leddhjul
Bremser på hjul/leddhjul
Lader
Kabler
Batteri
Annen elektronikk
Oppheng
Benjusteringsmekanisme
Ingen korrosjon
Sveisesømmer
Bruksanvisning/brukerhåndbok til stede/tilgjengelig

Funksjonskontroll



Test funksjonen og inspiser om det er slitasje eller skade.

Alle avkryssingspunkt må krysses av før løfteren kan godkjennes for fremtidig bruk

OK Ikke OK

Hjul/leddhjul

Bakhjul-/leddhjulbrems

Med ben i indre posisjon (parallel): Kontroller av avstanden mellom bena ikke reduseres når de dyttes sammen for hånd

Kun for Mover 180: Løftesøylen er helt festet med sekskantede låseskruer godt festet

Kun for Mover 205 og 300: Løftesøylen er helt fast når låsehåndtaket er aktivert

Nødstoppbryteren fungerer fullstendig og bryter strømforsyningen når den aktiveres. Nullstillingsknapp

Elektrisk nødsenk

Manuell nødsenk

Håndkontroll (knapper, kabelslakker håndbetjeningskabel, krok og batteriindikator)

Opphengkobling (svingkoblingen beveger seg fritt og uten lyder)

Oppheng hurtigutløser

Hvis alle punkt hittil er «OK» må løfteren testes med brukervekt (SWL)

Gjennomfør en løftesyklus med vekt tilsvarende brukervekt (SWL) (se produktetikett for verdi i kg/lbs).

Aktuatoren skal ikke slippe under last (senke løftearmen)

Benjusteringsmekanisme, ytre og indre posisjon med brukervekt (SWL)

Utfør ny visuell kontroll; Skader, slark og deformasjoner som beskrevet ovenfor. Eventuelle skadede deler må repareres eller erstattes, og testen gjentas en gang til til taljen fungerer som den skal

OK Ikke OK

Laderen fungerer

Tilbakestill Periodevis inspeksjon ved å trykke på opp- og nedknappene på håndbetjening i 12 sekunder (etter tilbakestilling er servicelampen av)

Tilbehør:

.....

.....

.....

Gjennomført av

Fult navn:

.....

Dato/sted:

.....

Underskrift:

.....

Godkjent uten feil

Neste inspeksjon
(ÅÅÅÅ / MM):/.....

Løfteren er merket «Ute av drift» og sendt til reparasjon

Løfteren kvalifiserer ikke til reparasjon og er tatt ut av bruk

Dersom den periodevis inspeksjonen avslører defekt, slitasje eller annen skade som utgjør en trussel for pasientsikkerheten skal løfteren ikke brukes til defekten er utbedret

Eier er varslet




På grunn av rettslige krav må dette dokumentet, eller en kopi av det, arkiveres sammen med eierens serviceloggbok

Kommentarer og observasjoner

Hvis godkjent uten feil; sett på inspeksjonsetikett og marker måned og år for **neste** periodevise inspeksjon. Bruk produktnr. 1100306 ved bestilling av etikett

Next periodic inspection

Inspection performed by:

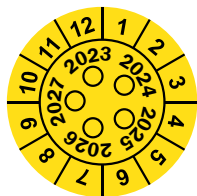

Mark label with month and year for next Periodic inspection

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac