




Tjekliste til periodisk eftersyn (DA) Molift Mover 180, 205 og 300


molift[®]
by Etac

PI08204 - 2025-05-01 - Rev. 1.0

I overensstemmelse med ISO 10535

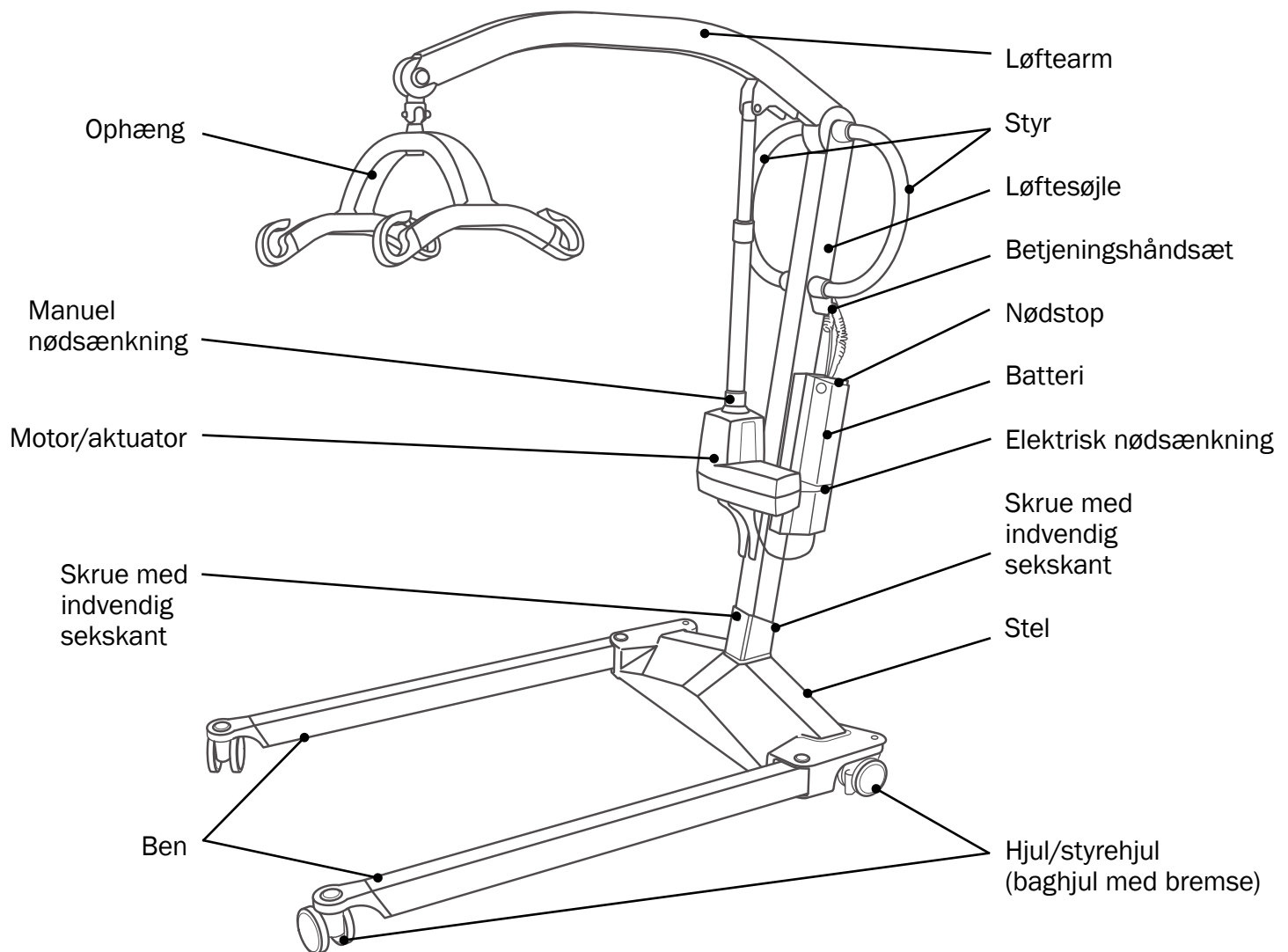

Produktmærkat, Mover 180

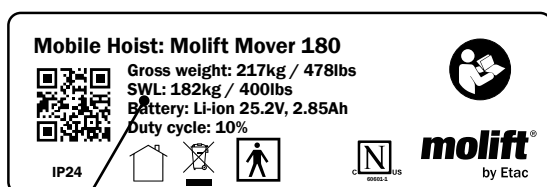

SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

Id-mærkat, Mover 180



Serienummer


Artikelnummer

Produktionsdato




www.etac.com



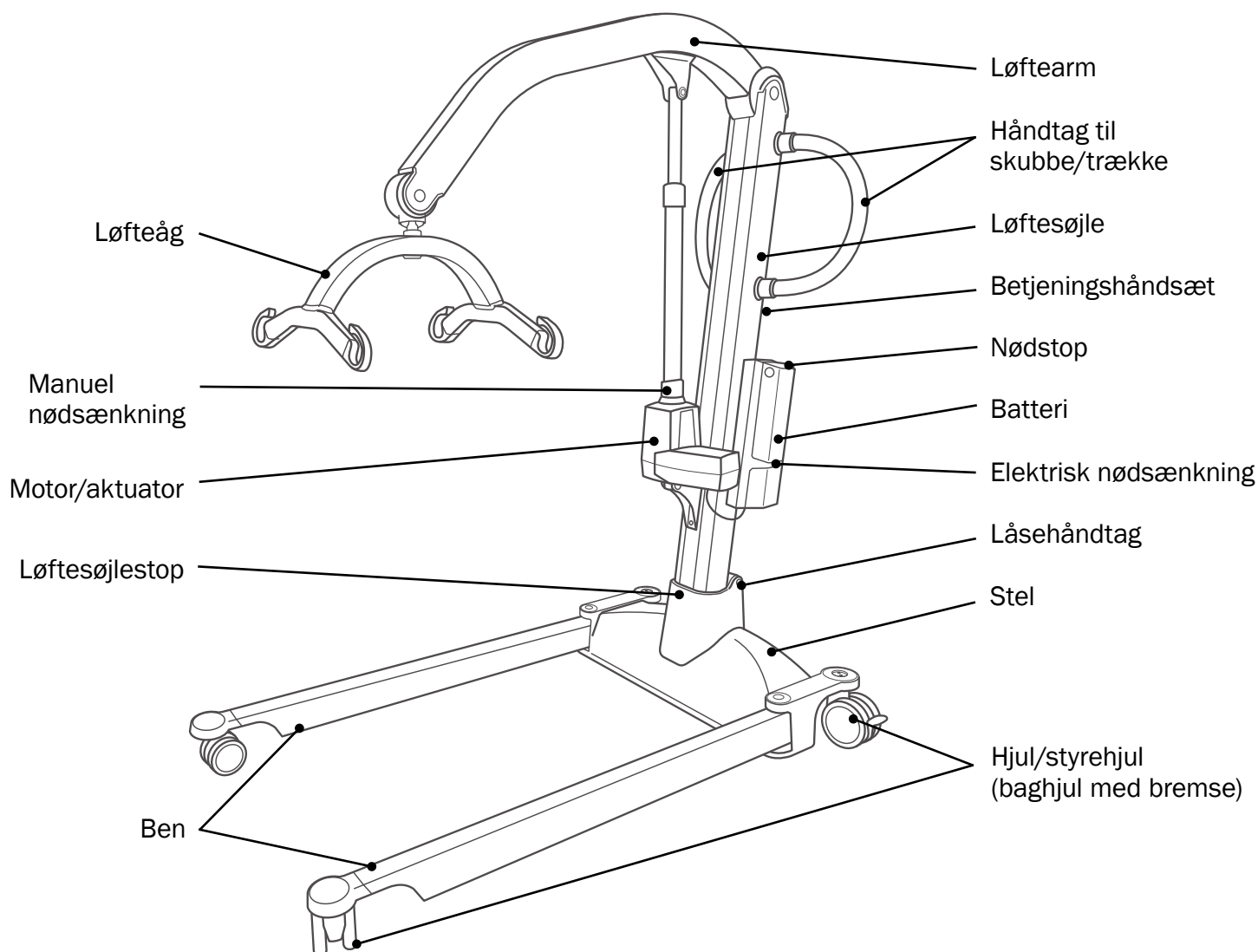

Produktmærkat, Mover 205

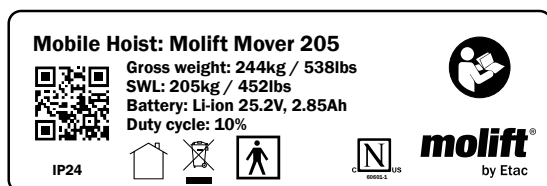


SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)


Id-mærkat, Mover 205



Serienummer Artikelnummer Produktionsdato

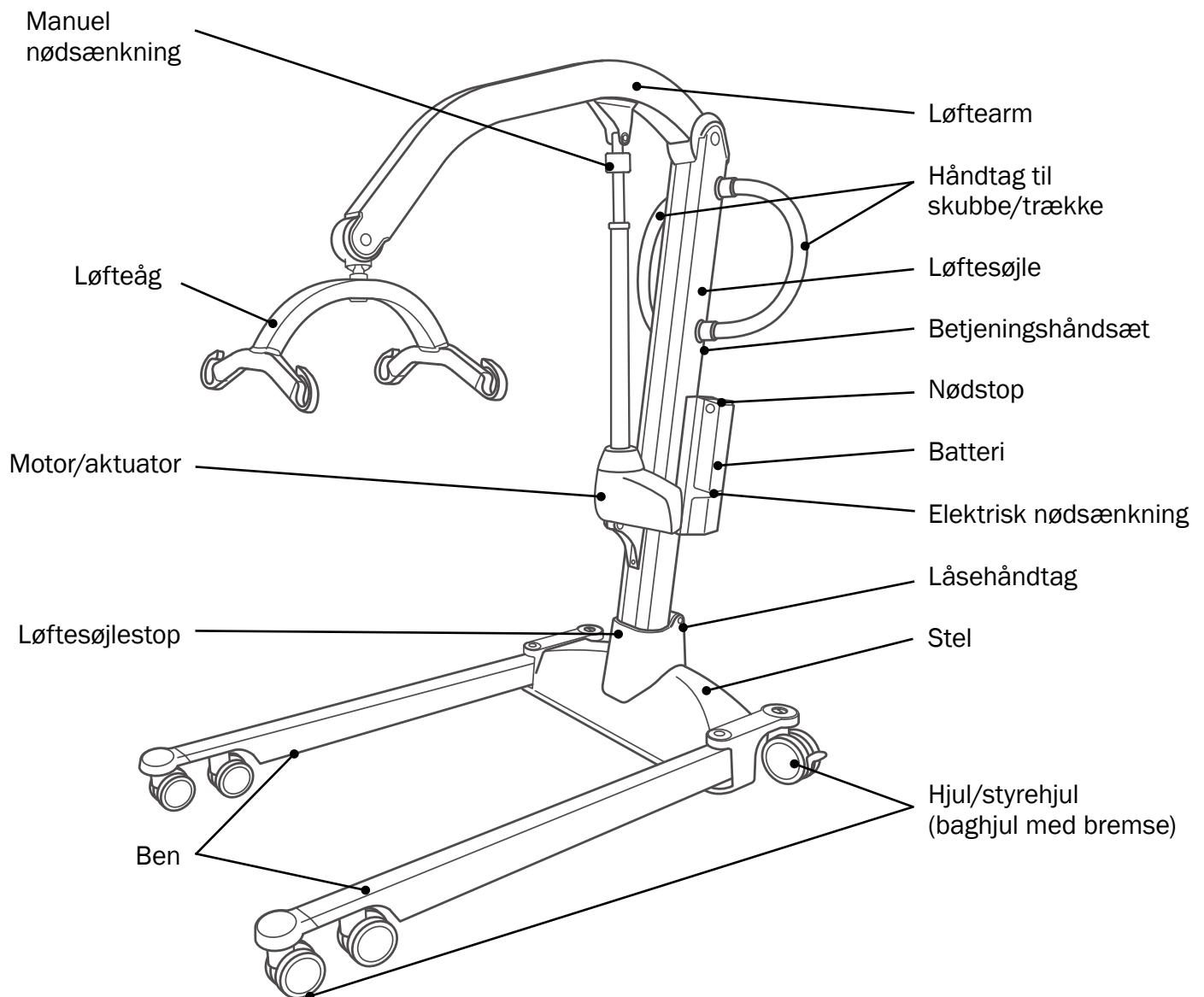

Produktmærkat, Mover 300

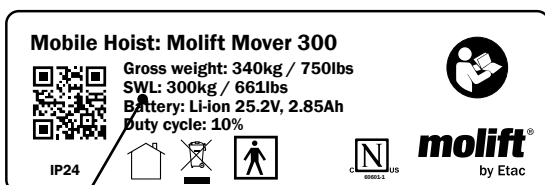

SWL-værdi (sikker arbejdsbelastning)

Id-mærkat, Mover 300



Serienummer

Artikelnummer

Produktionsdato

En kopi af dette dokument kan downloades på www.etac.com.

Scan QR-koden på produktmærkaten for at få adgang til produktets hjemmeside. Brugervejledningen kan findes i dokumentafsnittet.

Artikelnummer (se id-mærkat):

.....

Serienummer (se id-mærkat):

.....

Produktionsår:

.....

Ejer:

.....

Sejlet skal inspiceres særskilt og er ikke med i dette eftersyn.

Angiv model:

Mover 180
Mover 205
Mover 300

Anvendelsessituation

Hjemmet
Hospital
Plejehjem
Andet



Det periodiske eftersyn skal udføres af en person, der er egnet og tilstrækkeligt kvalificeret og godt bekendt med konstruktion, brug og pleje af personløfteren



Personløfterens software Molift Service-værktøj giver mulighed for at indtaste dato for PI og navnet på inspektøren sammen med yderligere oplysninger. Molift anbefaler at tilføje alle observationer/bemærkninger vedrørende personløfteren i Molift Service-værktøjet for at have en komplet historiklog over personløfteren

Serviceindikatorens lys

Vær opmærksom på farven på serviceindikatorens lys:

Status	Servicelys	Tilstand
	(Intet lys)	Service/Periodisk inspektion er ikke nødvendig
	Gul	Bestil service
	Gul (blink og lyd ved betjening)	Udfør service
	Gul (tænder og slukker langsomt)	Udfør Periodisk Inspektion

Visuel undersøgelse



Visuel undersøgelse af den lastbærende struktur for at sikre, at der ikke er skader, revner, flosser eller deformationer. Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug

OK Ikke OK

	Løftesøjle
	Løftearm
	Ben
	Produktmærkat
	Plastdæksler
	Betjeningshandsæt
	Aktuator
	Hjul/styrehjul
	Bremser på hjul/styrehjul
	Oplader
	Ledninger
	Batteri
	Øvrig elektronik
	Ophæng
	Benjusteringsmekanisme
	Ingen korrosion
	Svejsninger
	Brugsanvisning/brugervejledning er til stede/tilgængelig

Funktionel undersøgelse

Test funktion, og inspicer for slitage og skader.

Alle kontrolpunkter skal tjekkes for at godkende personløfter til videre brug

OK Ikke OK

OK Ikke OK

Opladeren er funktionsdygtig

Nulstil Periodisk inspektion ved at trykke på op- og ned-knapperne på håndbetjeningen i 12 sekunder (efter nulstilling er servicelyset slukket)

Hjul/styrehjul

Baghjul/styrehjulets bremser

Med benene i indre position (parallelt): Kontroller, at afstanden mellem benene ikke kan mindskes, når de skubbes sammen med hånden

Kun for Mover 180: Løftesøjlen er fuldstændig fastgjort med sekskantede låseskruer spændt stramt

Kun for Mover 205 og 300: Løftesøjlen sidder helt fast, når låsehåndtaget er i indgreb

Nødstopknappen er fuldt funktionsdygtig og afbryder strømmen, når den aktiveres. Nulstil afbryder

Elektrisk nødsænkning

Manuel nødsænkning

Betjeningshåndsæt (knapper, aflastning på betjeningshåndsættets ledning, krog og batteriindikator)

Ophængets kobling (drejeled bevæger sig frit og uden støj)

Hurtigudløser til ophæng

Hvis alle punkter indtil videre er "OK", skal personløfteren testes med SWL

Udfør én løftecyklus med vægt, der svarer til SWL (se produktmærkaten for værdi kg/lbs). Aktuatorens må ikke glide under belastning (forårsager at løftearmen sænker sig)

Benjusteringsmekanisme, ydre og indre position med SWL

Udfør ny visuel kontrol; Skader, slør og deformationer som beskrevet ovenfor. Eventuelle beskadigede dele skal repareres eller udskiftes, og testen gentages endnu en gang, indtil hejsen fungerer korrekt

Tilbehør:

.....

.....

.....

Udført af

Fulde navn:

.....

Dato/sted:

.....

Underskrift:

.....

Godkendt uden fejl

Næste eftersyn (ÅÅÅÅ/MM): /

Personløfteren er markeret "Ude af drift" og sendt til reparation

Personløfteren er ikke berettiget til reparation og er taget ud af drift

Hvis det periodiske eftersyn afslører en defekt, slitage eller anden skade, der bringer patientens sikkerhed i fare, må personløfteren ikke anvendes, før manglen er afhjulpet

Ejeren er underrettet




Grundet lovkrav skal dette dokument eller en kopi arkiveres sammen med ejerens serviceløgbog

Noter og observationer

Hvis den godkendes uden fejl, påføres inspektionsmærkat, og måned og år til **næste** Periodisk eftersyn noteres herpå. Ved bestilling af mærkat anvendes varenummer 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:

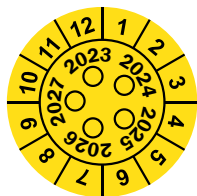

Notér måned og år til næste Periodisk eftersyn på mærkaten

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac