




Määräaikaistarkastuksen muistilista (FI)

Molift Mover 180, 205 ja 300


molift[®]
by Etac

PI08205 - 2025-05-01 - Rev. 1.0

Standardin ISO:10535 mukaisesti

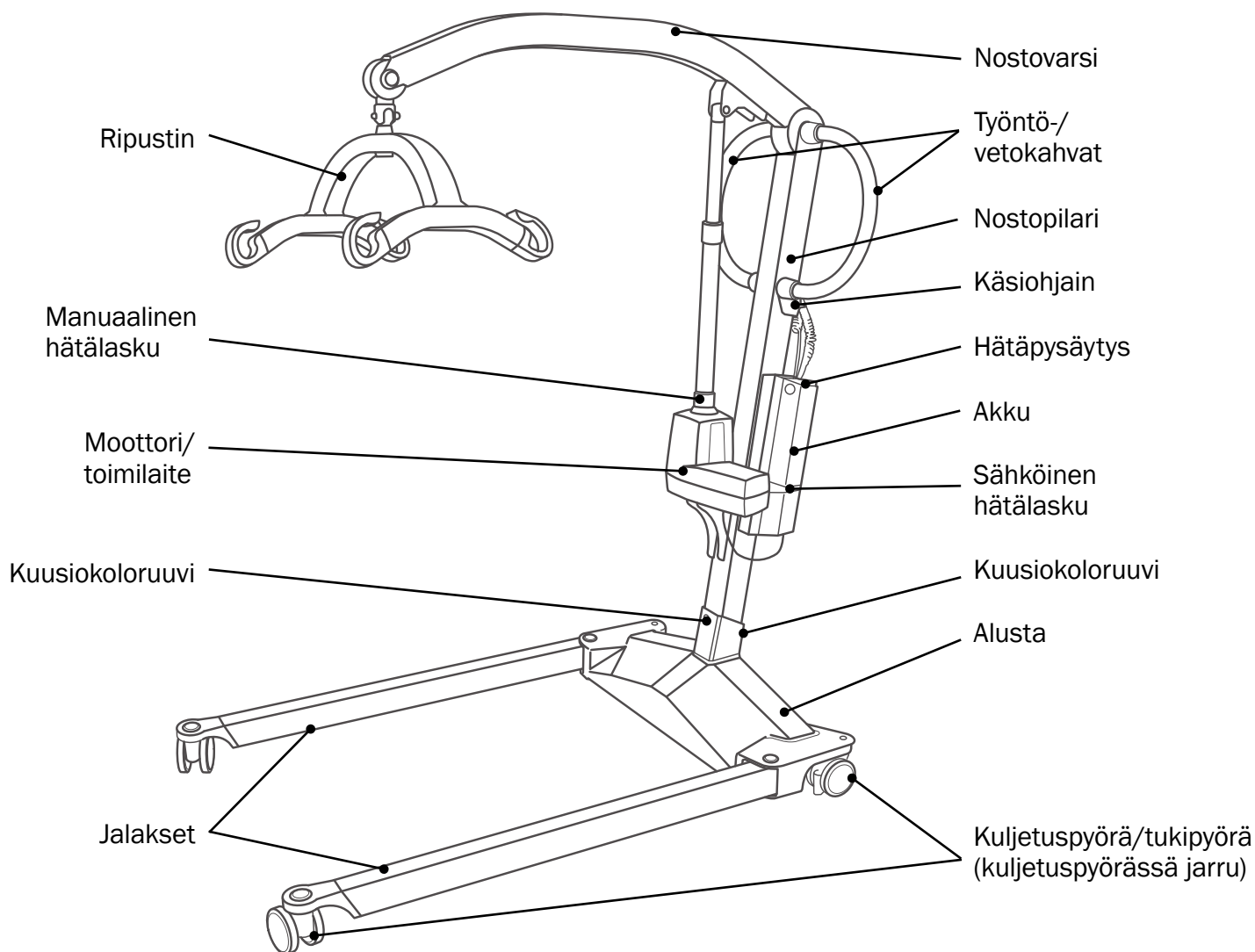

Tuotetarra, Mover 180

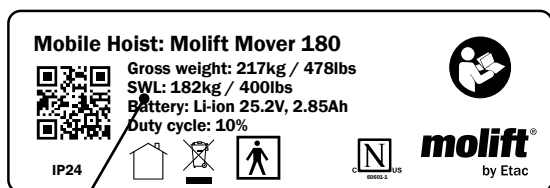

Suurin turvallinen kuorma (SWL)

Tyyppikilpi, Mover 180



Sarjanumero


Tuotenumero

Valmistuspäivä




www.etac.com



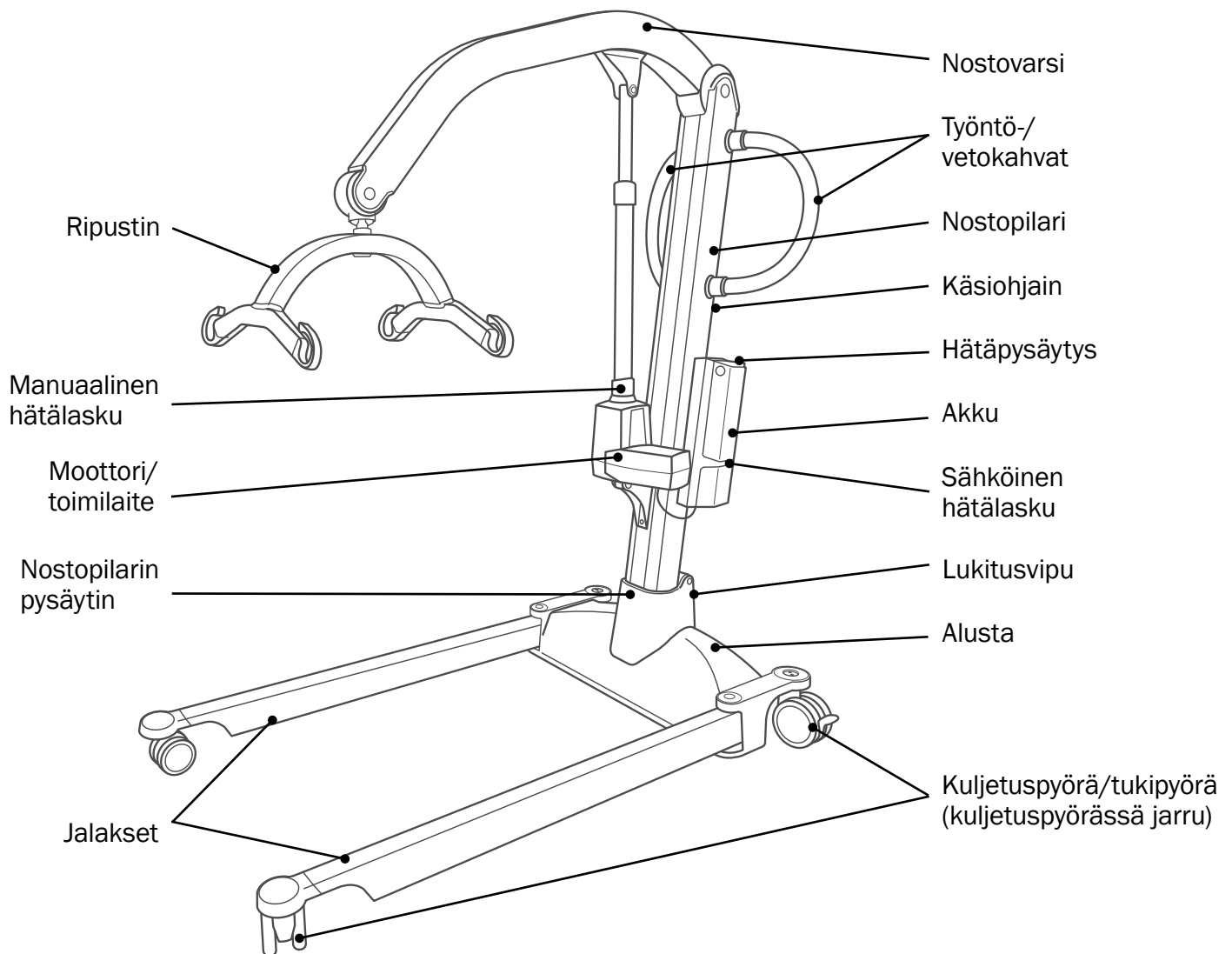

Tuotetarra, Mover 205

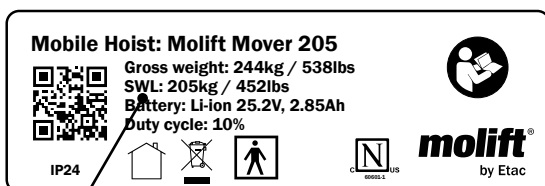

Suurin turvallinen kuorma (SWL)


Tyypikilpi, Mover 205




Sarjanumero

Tuotenumero

Valmistuspäivä

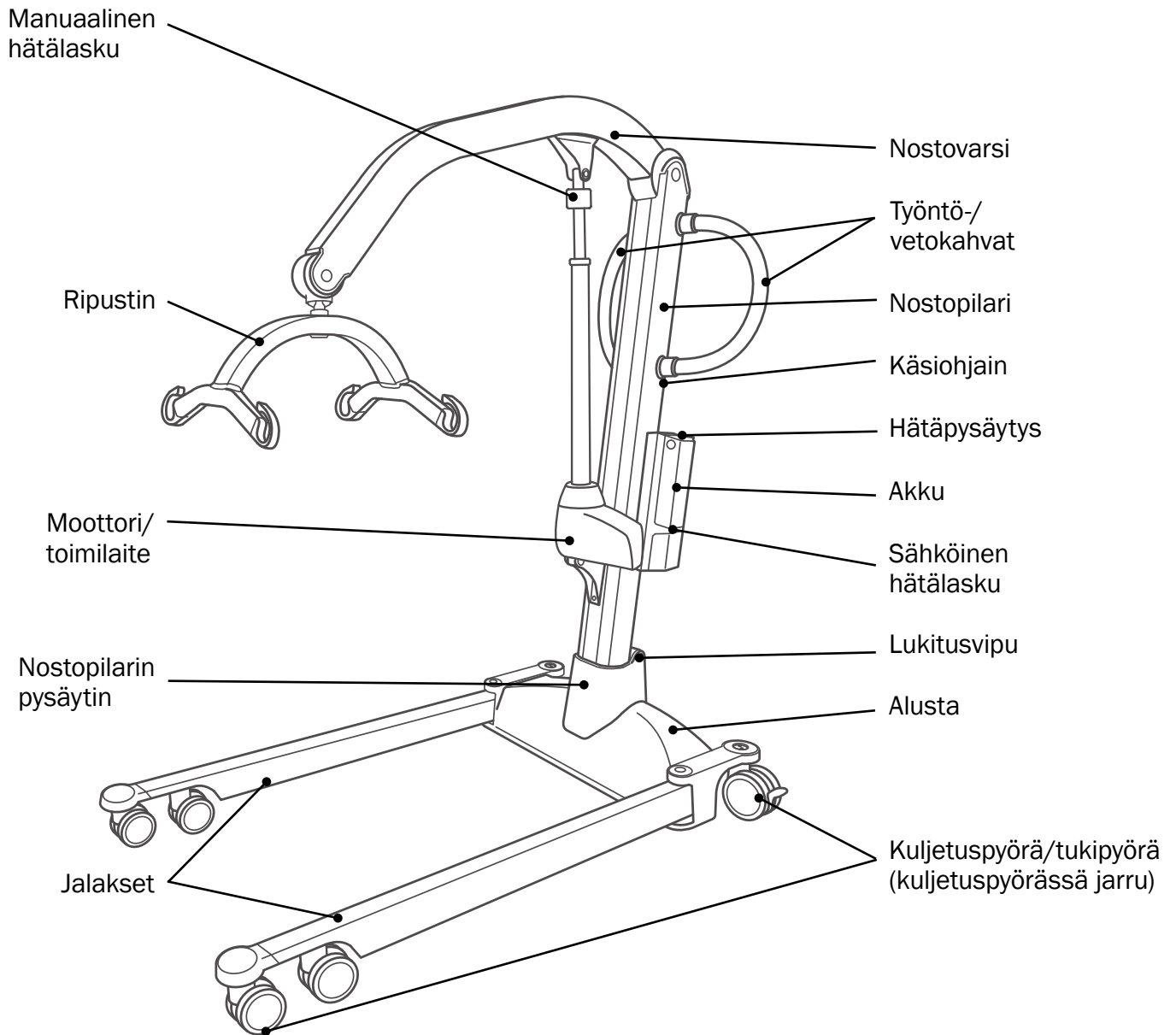

Tuotetarra, Mover 300

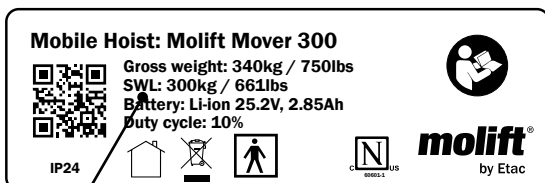

Suurin turvallinen kuorma (SWL)

Tyypikilpi, Mover 300



Sarjanumero

Tuotenumero

Valmistuspäivä

Tämän dokumentin kopion voi ladata osoitteesta www.etac.com.

Siirry tuotesivulle skannaamalla tuotetarrassa oleva QR-koodi. Käyttöopas löytyy dokumenttien osiosta.

Tuotenumero (katso tyyppikilpi):

.....

Sarjanumero (katso tyyppikilpi):

.....

Valmistuspäivä:

.....

Omistaja:

.....

Nostoliina ei sisälly tähän tarkastukseen, vaan se on tarkastettava erikseen.

Valitse malli:

Mover 180
Mover 205
Mover 300

Käyttökohteet

Koti
Sairaala
Hoitolaitos
Muu



Määräaikaistarkastuksen saa suorittaa tehtävään soveltuva ja pätevä henkilö, joka on perehtynyt huolella laitteen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon



Määräaikaistarkastuksen päivämäärän ja tarkastajan sekä mahdolliset lisätiedot voi syöttää nostolaitteen Molift Service Tool -sovellukseen. Molift suosittelee lisäämään kaikki nostolaitteeseen liittyvät havainnot/huomiot Molift Service Tool -sovellukseen, jotta laitteen historiatiedot pysyvät ajan tasalla

Huollon merkkival

Huomioi huollon merkkivalon väri:

Tila	Huollon merkkivalo	Toiminto
	(Ei valoa)	Huoltoa/määräaikaistarkastusta ei tarvita
	Keltainen	Varaa huolto
	Keltainen (vilkkuu ja antaa äänimerkin käytön aikana)	Suorita huolto
	Keltainen (syttyy ja sammuu hitaasti)	Suorita määräaikaistarkastus

Silmämääräinen



Tarkasta kuormittuvat rakenteet silmämääräisesti, ettei niissä ole vaurioita, halkeamia, kulumia ja vääntymiä. Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuuntoon.

OK Ei OK

Nostopilari
Nostovarsi
Jalakset
Tuotetarra
Muovisuojat
Käsiohjain
Toimilaite
Kuljetuspyörä/tukipyörä
Jarrut kuljetuspyörä/tukipyörä
Latauslaite
Johdot
Akku
Muu elektroniikka
Ripustin
Jalkojen säätömekanismi
Korroosiovauriot
Hitsausseamat
Käyttöopas on tallessa/saatavilla

Functional examination



Test function and inspect for wear and damage.

All checkpoints must be checked to approve hoist for further use

OK Ei OK

Kuljetuspyörä/tukipyörä
Takapyörien jarrut
Jalaket sisäasennossa (samasuuntaisesti): Tarkasta, ettei jalasten välinen ero pienene, kun niitä työnnetään yhteen käsin
Vain Mover 180: Nostopilari on kiinnitetty kokonaan kireillä kuusiolukkoruuveilla
Vain Mover 205 ja 300: Nostopilari on kiinnitetty kokonaan, kun lukituskahva kytketään
Hätäpysäytyspainike on täysin toimintakunnossa ja sammuttaa virransyötön painiketta käytettäessä. Nollaa painikkeen asetukset
Sähköinen hätälasku
Manuaalinen hätälasku
Käsiohjain (painikkeet, käsiohjaimen johdon vedonpoistin, koukku ja akun merkkivalo)
Ripustimen liitäntä (nivel liikkuu vapaasti ja äänettömästi)
Ripustimen pikairrotus
Jos kaikki tähän saakka tarkastetut kohdat ovat OK, testaa nostolaite suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)
Tee yksi nostokierros painolla, joka vastaa suurinta turvallista kuormaa (SWL), katso tuotetarrasta arvo kiloina (kg) / paunoina (lbs). Toimilaite ei saa liukua kuormitettuna (aiheuttaen nostovarren laskeutumisen)
Jalkojen säätömekanismi, ulko- ja sisäasento suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)

OK Ei OK

Suorita uusi silmämääräinen tarkastus; tarkasta vauriot, vällys ja vääntymiset edellä kuvatulla tavalla. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava ja testi toistettava, kunnes nostolaite toimii moitteettomasti
Latauslaite on toimintakunnossa
Nollaa määräaikaistarkastus painamalla käsiohjaimen ylös- ja alas-painikkeita 12 sekunnin ajan (nollauksen jälkeen huoltovalo sammuu)

Lisävarusteet:

.....

.....

.....

Tarkastajan tiedot

Nimi:

.....

Päiväys/paikka:

.....

Allekirjoitus:

.....

Hyväksytty ilman vikoja
Seuraava tarkastus
(VVVV / KK): /

Nostolaite on merkitty "Epäkunnossa"-merkinnällä ja lähetetty korjattavaksi

Nostolaitetta ei voi korjata, joten se poistetaan käytöstä

Mikäli määräaikaistarkastuksessa ilmenee vikoja, kulumia tai muita vaurioita, jotka vaarantavat potilaan turvallisuuden, nostolaitetta ei saa käyttää ennen kuin puute on korjattu

Asiasta on ilmoitettu omistajalle




Lakisääteisten vaatimusten takia tämä dokumentti tai sen kopio on arkistoitava osaksi omistajan huoltokirjaa

Muistiinpanot ja havainnot

Jos vikoja ei löydy ja tarkastus on hyväksytty, kiinnitä määräaikaistarkastustarra ja merkitse **seuraavan** tarkastuksen kuukausi ja vuosi. Kun tilaat tarran, käytä tuotenumeroa 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:

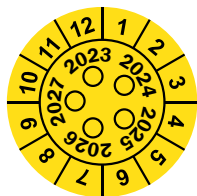

Merkitse tarraan seuraavan määräaikaistarkastuksen kuukausi ja vuosi

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac