




Controlelijst voor periodieke inspectie (NL) Molift Mover 180, 205 en 300


molift[®]
by Etac

PI08207 - 2025-05-01 - Rev. 1.0

Volgens ISO 10535

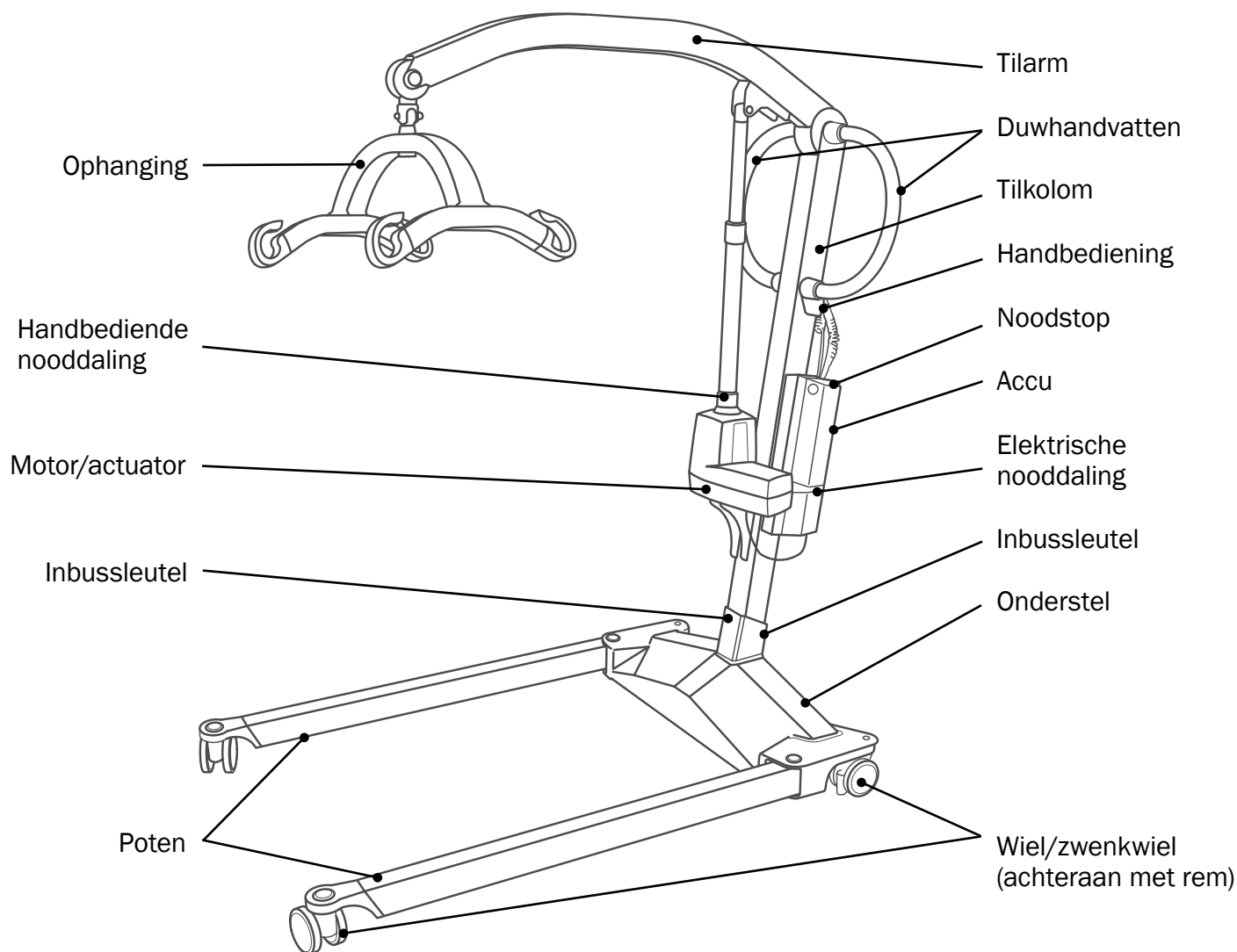

Productlabel, Mover 180

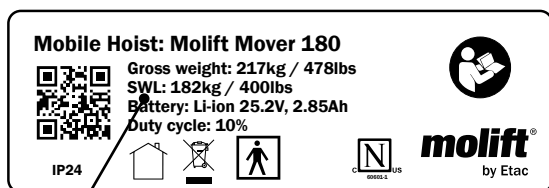

Maximaal gebruikersgewicht (SWL)

ID-label, Mover 180



Serienr.


Artikelnr.

Productiedatum




www.etac.com



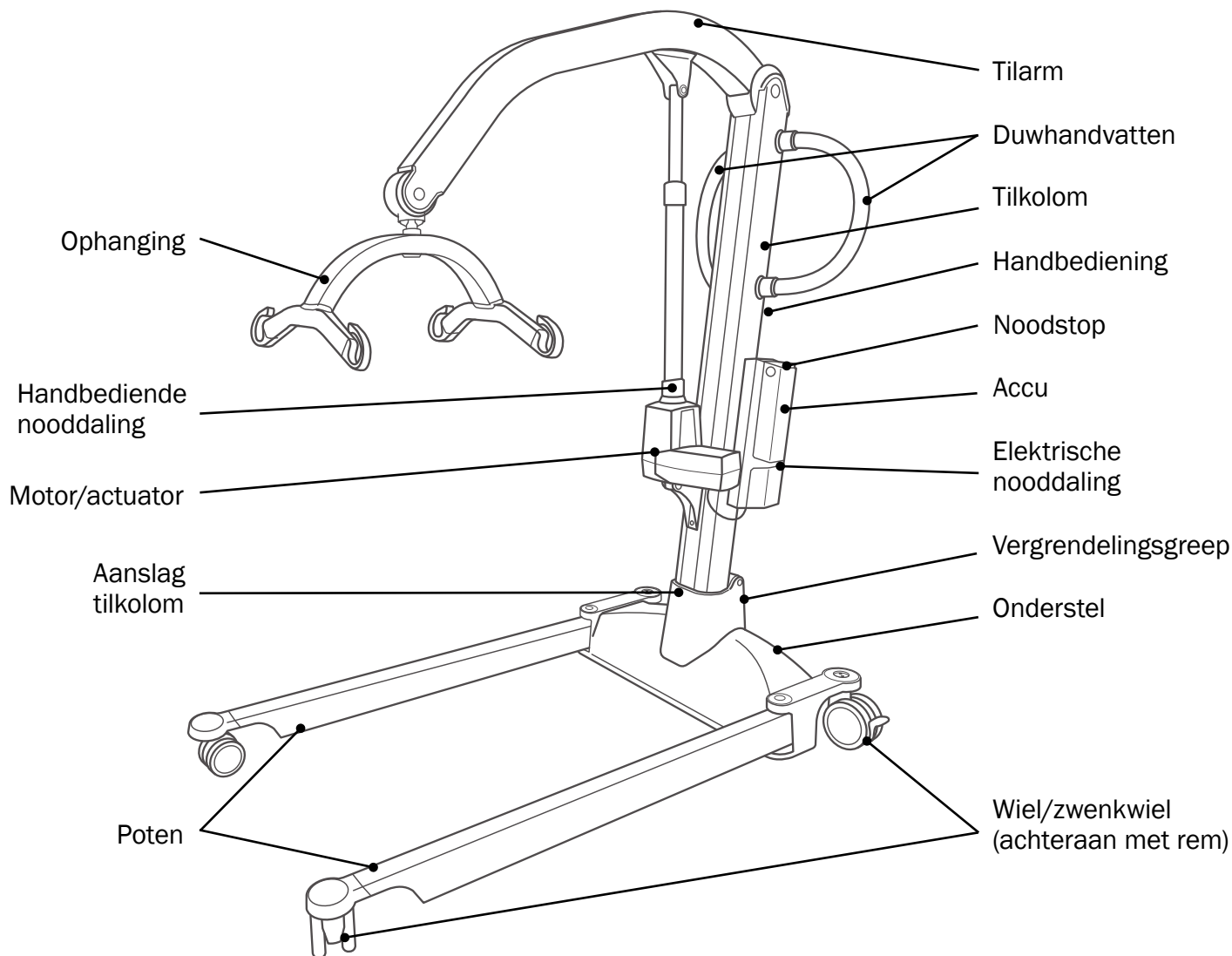

Productlabel, Mover 205

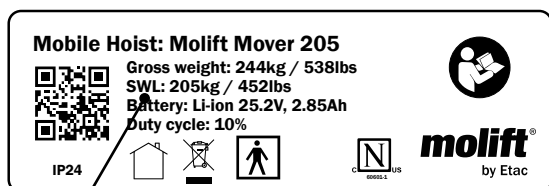

Maximaal gebruikersgewicht (SWL)


ID-label, Mover 205




Serienr.

Artikelnr.

Productiedatum

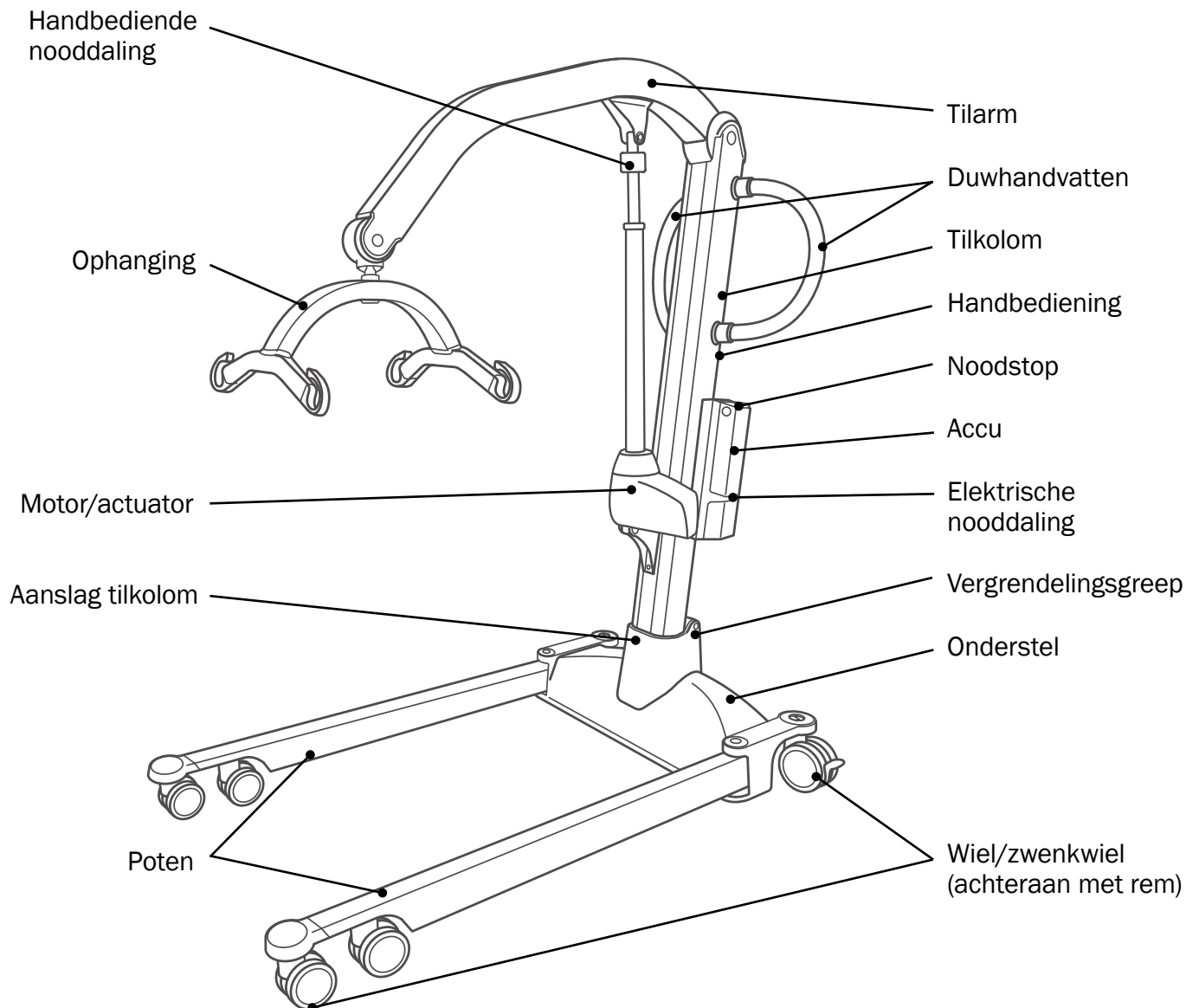

Productlabel, Mover 300

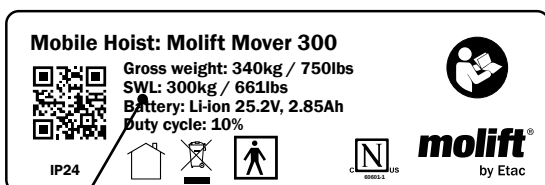

Maximaal gebruikersgewicht (SWL)

ID-label, Mover 300



Serienr.

Artikelnr.

Productiedatum

Een exemplaar van dit document kan worden gedownload van www.etac.com.

Scan de QR-code op het productlabel om naar de productpagina te gaan. De gebruikershandleiding staat in de sectie met documenten.

Artikelnr. (zie ID-label):

.....

Serienr. (zie ID-label):

.....

Productiejaar:

.....

Eigenaar:

.....

Tilbanden moeten afzonderlijk worden geïnspecteerd; dit maakt geen deel uit van deze inspectie.

Geef het model op:

Mover 180
Mover 205
Mover 300

Gebruikssituatie

Thuis
Ziekenhuis
Zorginstelling
Overig



De periodieke inspectie moet worden uitgevoerd door iemand die geschikt en voldoende gekwalificeerd is en goed bekend is met het ontwerp, gebruik en onderhoud van de tillift



In de Molift Service Tool, de software van de tillift, kan de datum van de periodieke inspectie worden ingevoerd, evenals de naam van degene die de inspectie heeft uitgevoerd en eventuele andere informatie. Molift raadt aan om alle observaties en opmerkingen over de tillift in de Molift Service Tool te registreren voor een compleet historisch logboek van de tillift

Onderhoudslampje

Controleer de kleur van het onderhoudslampje:

Status	Onderhoudslampje	Modus
	(Lampje brandt niet)	Onderhoud/periodieke inspectie niet nodig
	Geel	Onderhoud plannen
	Geel (knippert en klinkt tijdens bedrijf)	Onderhoud uitvoeren
	Geel (gaat langzaam aan en uit)	Periodieke inspectie uitvoeren

Visuele inspectie



Visuele inspectie van de lastdragende structuur om te controleren op beschadigingen, scheuren, slijtage of vervorming. Alle controlepunten moeten worden nagelopen om de tillift goed te keuren voor verder gebruik

OK Niet OK

Tilkolom
Tilarm
Poten
Productlabel
Kunststof kappen
Handbediening
Actuator
Wiel/zwenkwiel
Remmen op wiel/zwenkwiel
Oplader
Kabels
Accu
Overige elektronica
Ophanging
Aanpassingsmechanisme voor de poten
Geen corrosie
Lasverbindingen
Gebruikershandleiding is aanwezig/beschikbaar

Functionele inspectie



Test functie en controleer op slijtage en beschadigingen.
Alle controlepunten moeten worden nagelopen om de tillift goed te keuren voor verder gebruik

OK	Niet OK
	Wiel/zwenkwiel
	Remmen wiel/zwenkwiel
	Met poten in binnenste positie (parallel): Controleer of de afstand tussen de poten niet kleiner kan worden wanneer deze met de hand naar elkaar worden geduwd
	Alleen voor Mover 180: De tilkolom is volledig vastgezet met stevig aangedraaide zeskantborgschroeven
	Alleen voor Mover 205 en 300: De tilkolom is volledig vastgezet wanneer de vergrendelhandgreep is toegepast
	Noodstopknop is volledig operationeel en bij indrukken ervan wordt de stroomtoevoer uitgeschakeld. Reset de knop
	Elektrische nooddaling
	Handbediende nooddaling
	Handbediening (knoppen, trekontlasting op kabel voor handbediening, haak en acculampje)
	Koppeling van tiljuk (draaikoppeling beweegt vrij en zonder geluid)
	Snelkoppeling ophanging

OK	Niet OK
	Als alle punten tot nu toe "OK" zijn, moet tillift worden getest met SWL
	Voer één tilcyclus uit met een gewicht dat overeenkomt met SWL (zie productlabel voor waarde in kg/lbs). Actuator mag niet slippen bij belasting (waardoor de tilarm zakt)
	Het aanpassingsmechanisme voor de poten, buitenste en binnenste positie met SWL
	Voer een nieuwe visuele controle uit: controleer op schade, speling en vervormingen zoals hierboven beschreven. Beschadigde onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen en de test moet worden herhaald totdat de tillift correct werkt
	Oplader is operationeel
	Reset de periodieke inspectie door de knoppen omhoog en omlaag op de handbediening 12 seconden ingedrukt te houden (nadat het servicelampje uit is)

Accessoires:

.....

.....

.....

Uitgevoerd door

Volledige naam:

Datum/plaats:

Handtekening:

.....

Goedgekeurd zonder gebreken

Volgende inspectie
(JJJJ/MM): /

Tillift is gemarkeerd met “Buiten werking”
en is opgestuurd voor reparatie

Tillift komt niet in aanmerking voor reparatie
en is buiten gebruik gesteld

Als bij de periodieke inspectie defecten, slijtage
of andere beschadigingen worden geconstateerd
waarmee de veiligheid van de patiënt in gevaar
komt, mag de tillift pas weer worden gebruikt als
de onvolkomenheid is verholpen

De eigenaar is geïnformeerd




Het is wettelijk vereist om dit document of een kopie ervan op te nemen in het servicelogboek van de gebruiker.

Notities en observaties

Bij goedkeuring zonder gebreken, het label voor periodieke inspectie aanbrengen en maand en jaar van **volgende** periodieke inspectie hierop aanduiden. Gebruik bij het bestellen van het label artikelnr. 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:

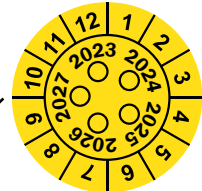

Noteer de maand en het jaar van de volgende periodieke inspectie op het label

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac