




# Kontrolní seznam pravidelných prohlídek (CZ)

## Molift Mover 180, 205 a 300


**molift®**  
by Etac

PI08211 - 2025-05-01 - Rev. 1.0

V souladu s ISO 10535

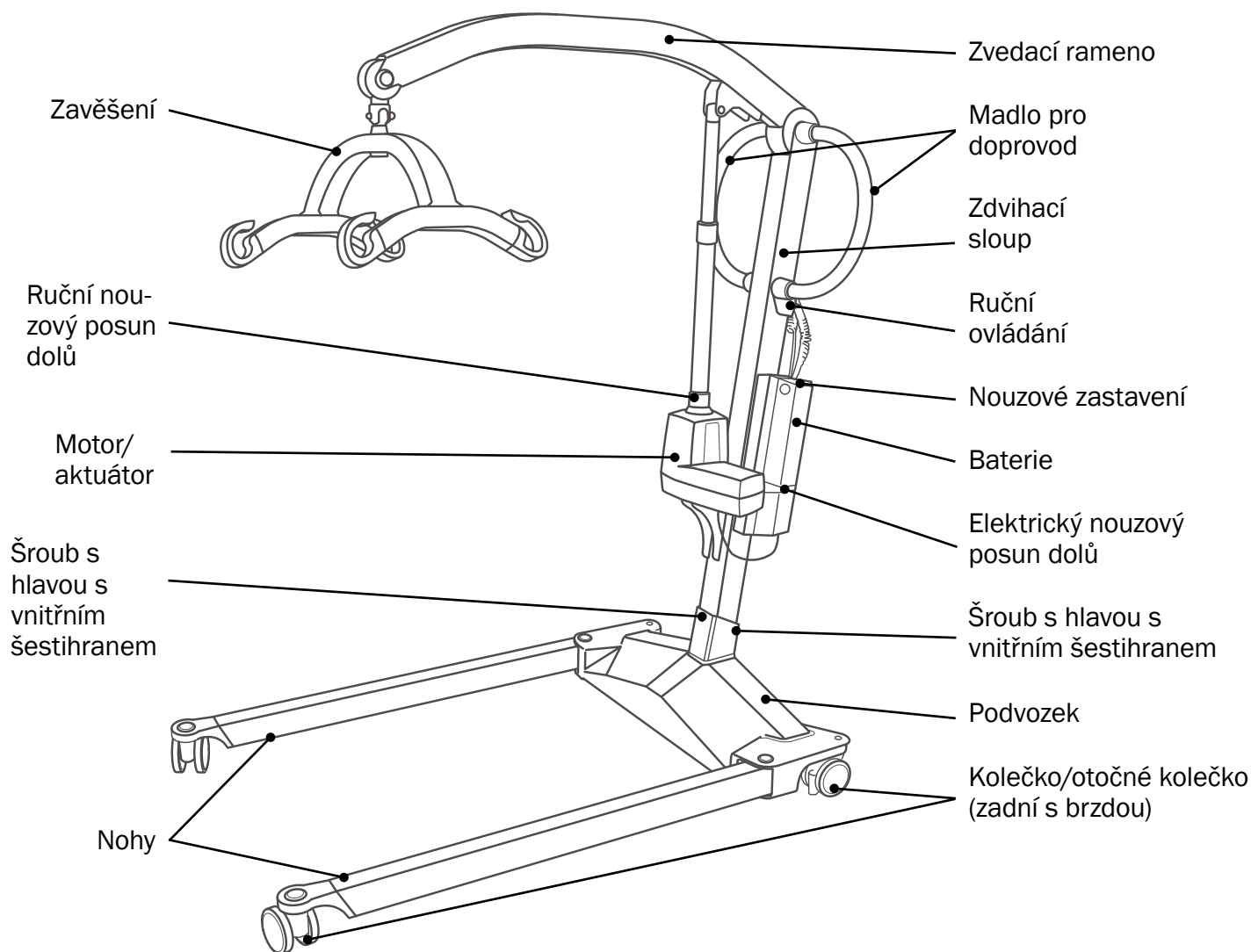

### Výrobní štítek Mover 180

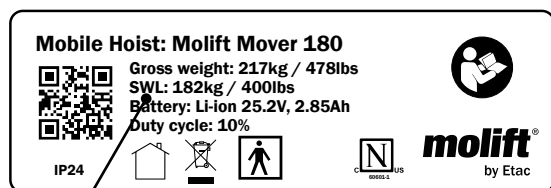

Hodnota SWL

### ID štítek Mover 180



Výrobní číslo


Katalog. č.

Datum výroby




www.etac.com



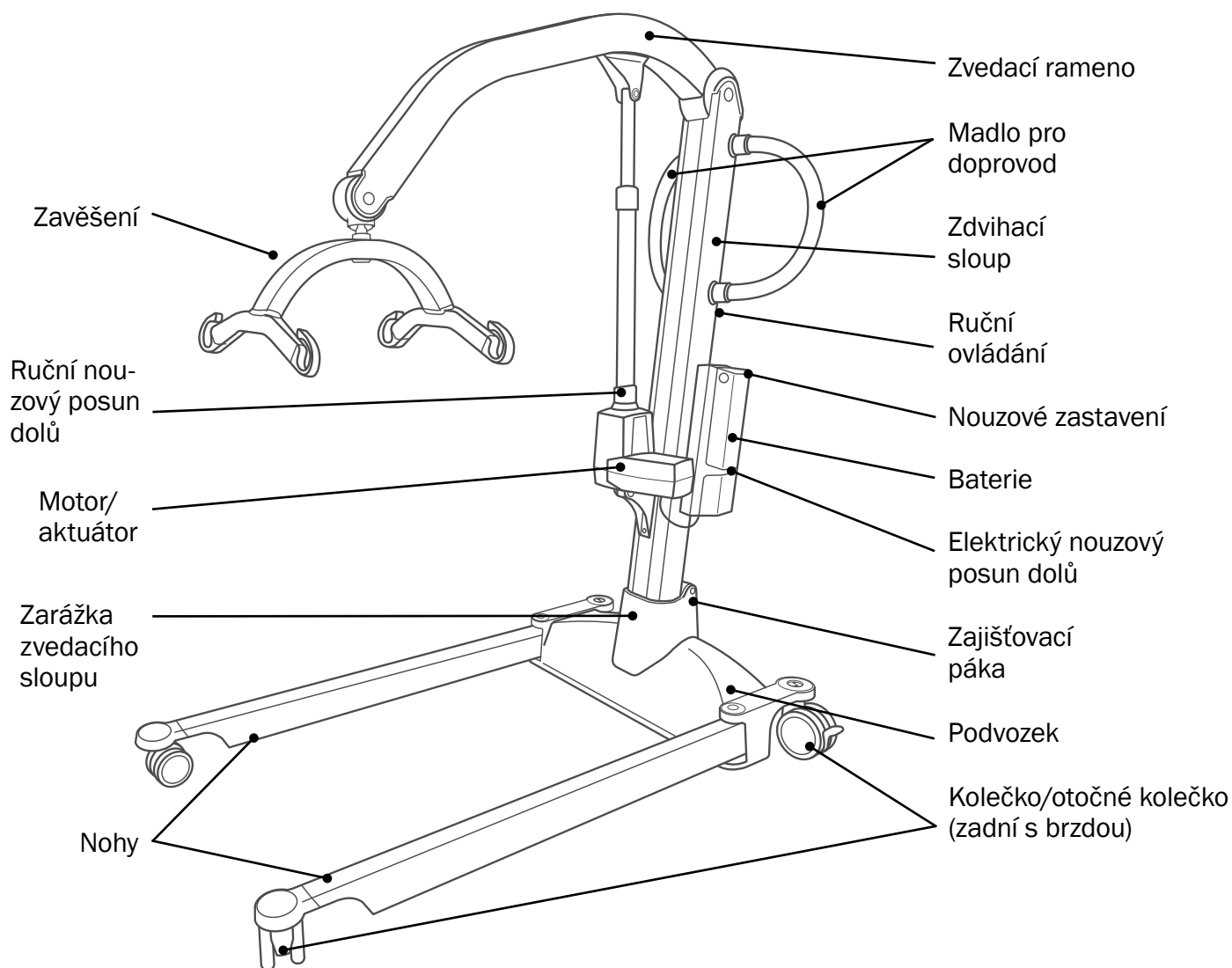

## Výrobní štítek Mover 205

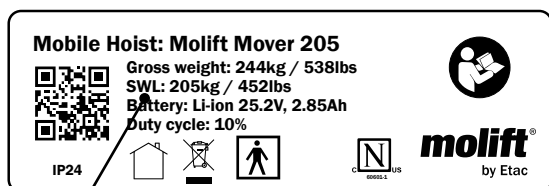

Hodnota SWL


## ID štítek Mover 205




Výrobní číslo

Katalog. č.

Datum výroby

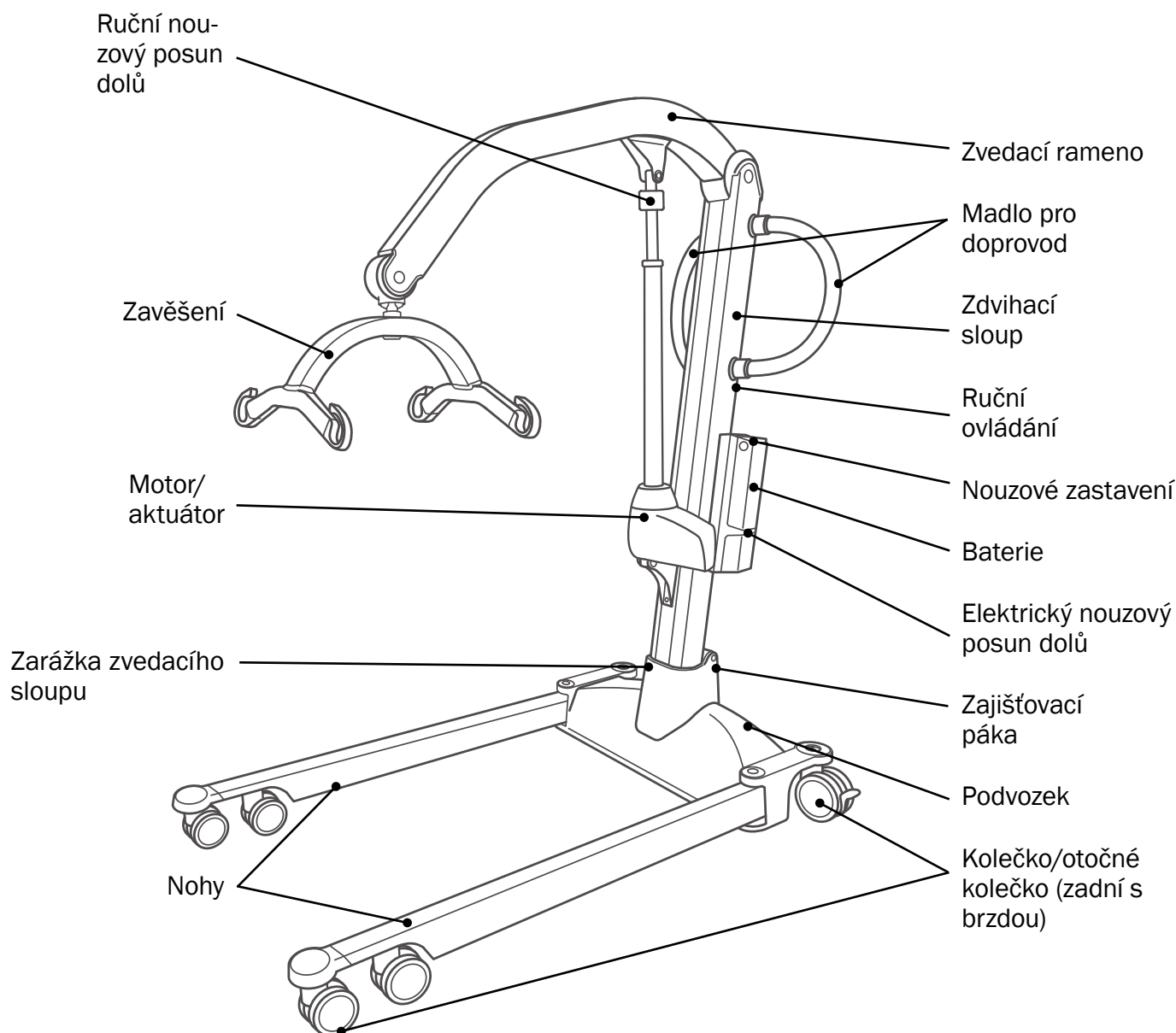

### Výrobní štítek Mover 300

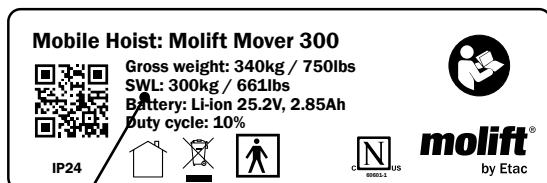

Hodnota SWL

### ID štítek Mover 300



Výrobní číslo

Katalog. č.

Datum výroby

Kopie tohoto dokumentu je ke stažení na adrese [www.etac.com](http://www.etac.com).

Oskenujte QR kód na štítku produktu pro přístup na domovskou stránku produktu. Návod k použití naleznete v sekci dokumentů.

Katalog. č. (viz ID štítek):

.....

Výrobní číslo (viz ID štítek):

.....

Rok výroby:

.....

Vlastník:

.....

Závěsný kurt je nutno kontrolovat samostatně, není zahrnutý do této prohlídky.

Specifikujte model:

Mover 180

Mover 205

Mover 300

## Případy použití

Domov  
Nemocnice  
Pečovatelský dům  
Ostatní



Pravidelnou prohlídku má provádět osoba, která je vhodná, řádně kvalifikovaná a dostatečně obeznámená s konstrukcí, používáním a péčí o zvedák



Softwarový servisní nástroj zvedáku Molift umožňuje zadat datum pravidelné prohlídky a jméno kontrolora spolu s dalšími informacemi. Společnost Molift doporučuje zadat všechna pozorování / poznámky týkající se zvedáku do servisního nástroje Molift pro vytvoření kompletní historie zvedáku

## Servisní kontrolka

Povšimněte si barvy servisní kontrolky:

| Status | Kontrolka údržby                       | Režim                                   |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|        | (nesvítí)                              | Servis/pravidelná kontrola nejsou nutné |
|        | Žlutá                                  | Objednat údržbu                         |
|        | Žlutá (při provozu bliká a zazní zvuk) | Proveďte servis                         |
|        | Žlutá (pomalu se zapne a vypne)        | Proveďte pravidelnou kontrolu           |

## Vizuální prohlídka



Vizuální prohlídka nosné konstrukce, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození, prasklinám, roztřepení nebo deformacím. Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body

V POŘÁDKU      *Není V*  
                         POŘÁDKU

|                                        |
|----------------------------------------|
| Zdvihací sloup                         |
| Zvedací rameno                         |
| Nohy                                   |
| Výrobní štítek                         |
| Plastové kryty                         |
| Ruční ovládání                         |
| Aktuátor                               |
| Kolečko/otočné kolečko                 |
| Brzdy na kolečko/otočné kolečko        |
| Nabíječka                              |
| Kabely                                 |
| Baterie                                |
| Ostatní elektronické jednotky          |
| Zavěšení                               |
| Mechanismus nastavení nohou            |
| Bez koroze                             |
| Svary                                  |
| Návod k použití je přítomný / dostupný |

## Funkční kontrola



Prověřte funkci, zkontrolujte opotřebení a poškození.  
Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body

| V<br>POŘÁDKU | Není V<br>POŘÁDKU                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Kolečko/otočné kolečko                                                                                                     |
|              | Brzdy zadních kol/rejdových kol                                                                                            |
|              | S nohama podvozku ve vnitřní poloze (rovnoběžnými): Zkontrolujte, zda se vzdálenost mezi nohama nelze zmenšit tlakem rukou |
|              | Pouze pro Mover 180: Zvedací sloup je řádně upevněn pojistnými šrouby s šestihrannou hlavou                                |
|              | Pouze pro Mover 205 a 300: Zvedací sloup je po aktivaci pojistné rukojeti řádně upevněn                                    |
|              | Tlačítko nouzového zastavení je plně funkční a při stlačení přerušuje napájení. Resetujte spínač                           |
|              | Elektrický nouzový posun dolů                                                                                              |
|              | Ruční nouzový posun dolů                                                                                                   |
|              | Ruční ovládání (tlačítka, odlehčení tahu na kabelu ručního ovládání, hák a kontrolka baterie)                              |
|              | Spojka zvedacího závěsu (otočný spoj se pohybuje volně a nehlukně)                                                         |
|              | Zavěšení s rychloupínáním                                                                                                  |

| V<br>POŘÁDKU | Není V<br>POŘÁDKU                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Pokud byly všechny body dosud v pořádku, otestujte zvedák na bezpečnostní limit (SWL)                                                                                                                              |
|              | Proveďte jeden zvedací cyklus s hmotností rovnou SWL (hodnota v kg/lbs je uvedena na výrobním štítku). Servopohon nesmí při zatížení prokluzovat (a způsobit spuštění zvedacího ramene)                            |
|              | Mechanismus nastavení nohou, ven a dovnitř s bezpečnostním limitem (SWL)                                                                                                                                           |
|              | Proveďte novou vizuální kontrolu; Poškození, zásahy a deformace, jak jsou popsány výše. Jakékoli poškozené součásti se musí opravit nebo vyměnit a zkoušku je nutné opakovat, dokud zvedák nebude fungovat správně |
|              | Nabíječka je funkční                                                                                                                                                                                               |
|              | Resetujte pravidelnou kontrolu stisknutím tlačítek nahoru a dolů na ručním ovládání na 12 sekund (po resetu zhasne servisní kontrolka)                                                                             |

Příslušenství:

.....

.....

.....

**Provedl**

Jméno a příjmení:

Datum/místo:

Podpis:

Schváleno bez závad

Příští prohlídka  
(RRRR / MM):        /

Zvedák je označen „Mimo provoz“  
a odeslán k opravě

Zvedák není způsobilý k opravě a je vyřazen  
z provozu

Pokud pravidelná prohlídka odhalí závadu,  
opotřebení nebo jiné poškození, které ohrožuje  
bezpečnost pacienta, nesmí být zvedák používán,  
dokud nebude závada odstraněna.

Vlastník je informován



Vzhledem k zákonným požadavkům musí být tento dokument nebo jeho kopie uložena se servisní knížkou majitele

## Poznámky a zjištění

V případě schválení bez závad nalepte kontrolní štítek a vyznačte měsíc a rok **další** pravidelné kontroly. Při objednávání štítku použijte č. položky 1100306

Next periodic inspection

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2023

2024

2025

2026

Inspection performed by: \_\_\_\_\_

Na štítku vyznačte měsíc a rok další pravidelné kontroly

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,  
Hartlebury, Kidderminster,  
Worcestershire, DY10 4JB  
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12  
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne  
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3  
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

***molift***<sup>®</sup>  
by Etac