




Checklista för periodiska kontroller – SV

Molift Smart 150


molift[®]
by Etac

PI09502 - 2025-03-12 - Rev. 1.0

I enlighet med ISO 10535

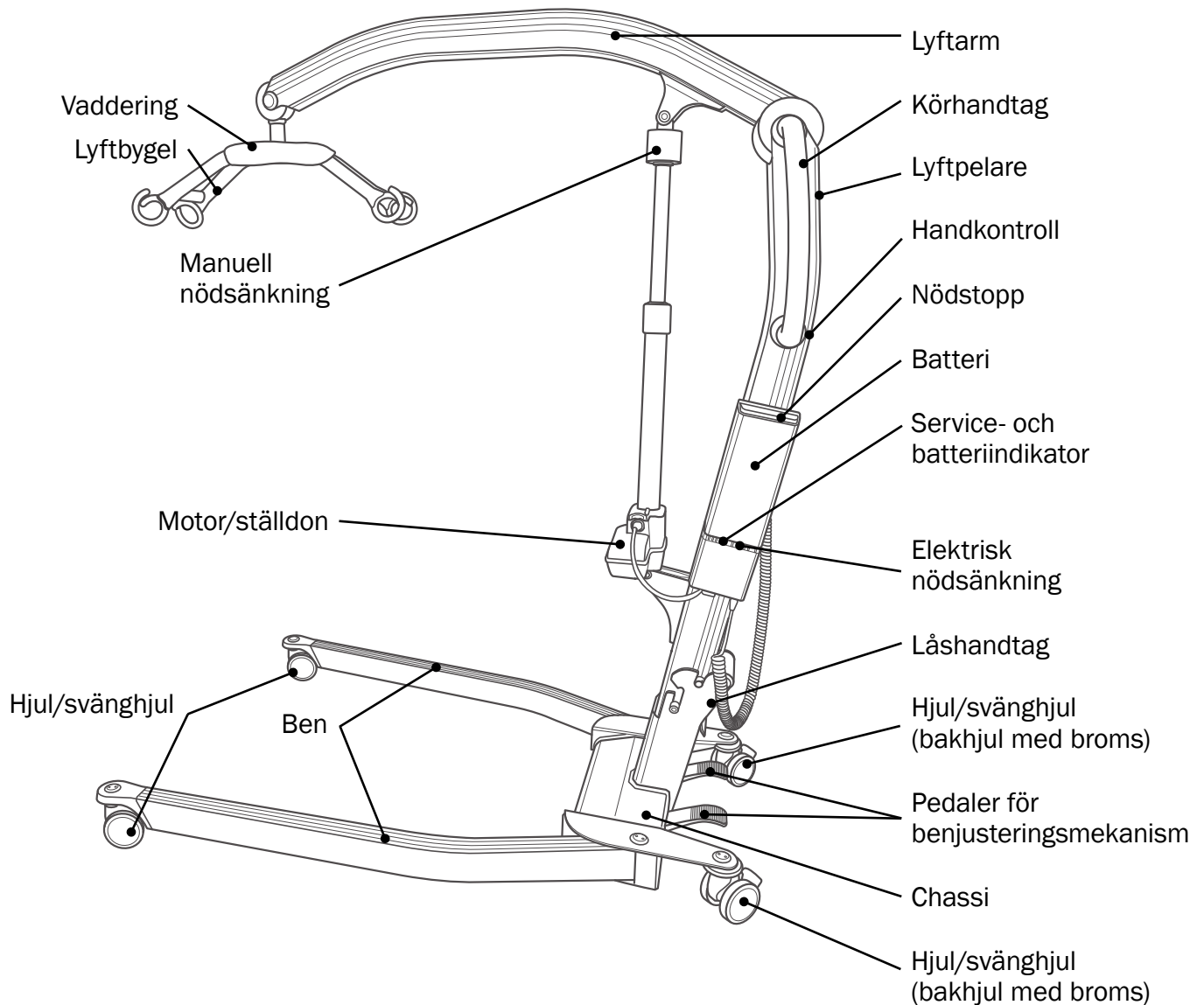

Produktetikett

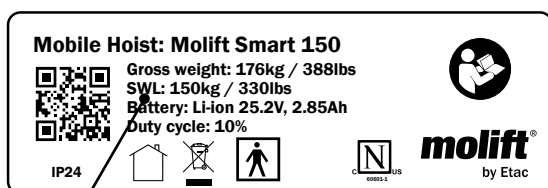

Värde för säker arbetsbelastning

Id-etikett



Serienummer

Artikelnummer

Tillverkningsdatum



www.etac.com



Det går att ladda ner det här dokumentet från www.etac.com.

Scanna QR-koden på produktetiketten för att komma till produktens hemsida. Användarmanualen finns under "Dokument".

Artikelnummer (se ID-etikett):

.....

Serienummer (se ID-etikett):

.....

Tillverkningsår:

.....

Ägare:

.....

Selen ska inspekteras separat och ingår inte i den här kontrollen.

Servicejusindikator

Kontrollera servicejusindikatorns ljus:

Status	Servicejus	Läge
(Lyser inte)		Service/periodiska kontroll krävs ej
Gul		Boka service
Gul (blinkar och ljuder vid drift)		Låt utföra service
Gul (tänds och släcks långsamt)		Utför periodiska kontroll

Användningssituation

Hemma
Sjukhus
Vårdhem
Annan



Den periodiska kontrollen ska utföras av en person som är lämpad, kvalificerad samt har kunskap om hur lyften är utformad, används och sköts.



Med lyftens mjukvara Molift Service Tool är det möjligt att ange datum när den periodiska kontrollen utförs, namnet på kontrollören samt ytterligare information.

Molift rekommenderar att man skriver in alla observationer/kommentarer rörande lyften i Molift Service Tool för att få en komplett historiklogg för lyften.

Visuell undersökning



Visuell undersökning av den bärande strukturen för att säkerställa att det inte finns några skador, sprickor, deformationer eller andra fel. Alla kontrollpunkter ska kontrolleras för att lyften ska godkännas för vidare användning.

OK Inte OK

Lyftpelare
Lyftarm
Ben
Produktetikett
Plastskydd
Handkontroll
Ställdon
Hjul/svänghjul
Bromsar på hjul/svänghjul
Laddare
Kablar
Batteri
Övrig elektronik
Lyftbygel inkl. vaddering
Mekanism för benjustering
Ingen korrosion
Svetsning
Användningsinstruktioner/ användarmanual finns på plats/ är tillgänglig

Functional examination



Test function and inspect for wear and damage.
All checkpoints must be checked to approve hoist for further use

OK Inte OK

Hjul/svänghjul
Bakhjuls-/svänghjulsbromsar
Med ben i inre läge (parallella): Kontrollera att det inte går att minska avståndet mellan benen när de trycks ihop för hand
Lyftpelaren är komplett fixerad när låshandtaget är aktiverat
Nödstoppsknappen fungerar korrekt och bryter strömmen när den trycks ner. Återställ brytaren
Elektrisk nödsänkning
Manuell nödsänkning
Handkontroll (knappar, dragavlastning på handkontrollens kabel, krok samt batteriindikator)
Lyftbygelkoppling (vridleden rör sig fritt och utan ljud)
Om alla punkter hittills är ok ska lyften testas med SWL
Genomför en lyftcykel med vikt som motsvarar säker arbetsbelastning (se produktetiketten för värde i kg/lbs). Ställdonet får inte slira under belastning (vilket får lyftarmen att sänkas)
Mekanism för benjustering, yttre och inre position med säker arbetsbelastning
Kontrollera visuellt igen beträffande skador, spel och deformationer så som beskrivs ovan. Alla skadade delar måste repareras eller bytas ut och testet ska göras om tills lyften arbetar korrekt

OK Inte OK

Laddaren fungerar
Återställ periodiska kontroll genom att trycka på upp- och nedknapparna på handkontrollen i tolv sekunder (efter återställning släcks servicelampan)

Tillbehör:

.....

.....

.....

Kontroll utförd av

För- och efternamn:

.....

Datum/plats:

.....

Underskrift:

.....

Godkänd utan fel.

Nästa kontroll (ÅÅÅÅ/MM)/

Lyften har klassats som "fungerar inte" och skickats för reparation.

Lyften kan inte repareras och har tagits ur drift.

Om den periodiska kontrollen visar på defekter, slitage eller andra skador som kan äventyra patientsäkerheten får lyften inte användas förrän bristen har åtgärdats.

Ägaren har informerats.




Till följd av juridiska krav måste det här dokumentet eller en kopia av det arkiveras tillsammans med ägarens serviceloggbook.

Anteckningar

Om enheten godkändes utan fel ska periodiska kontroll etiketten med markering av år och månad för **nästa** periodiska kontroll sättas fast. När du beställer etikett, använd artikelnummer 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:

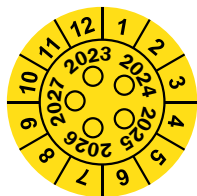

Märk etiketten med månad och år för nästa periodiska kontroll

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac