




Määräaikaistarkastuksen muistilista (FI)

Molift Smart 150


molift[®]
by Etac

PI09505 - 2025-05-01 - Rev. 1.0

Standardin ISO:10535 mukaisesti

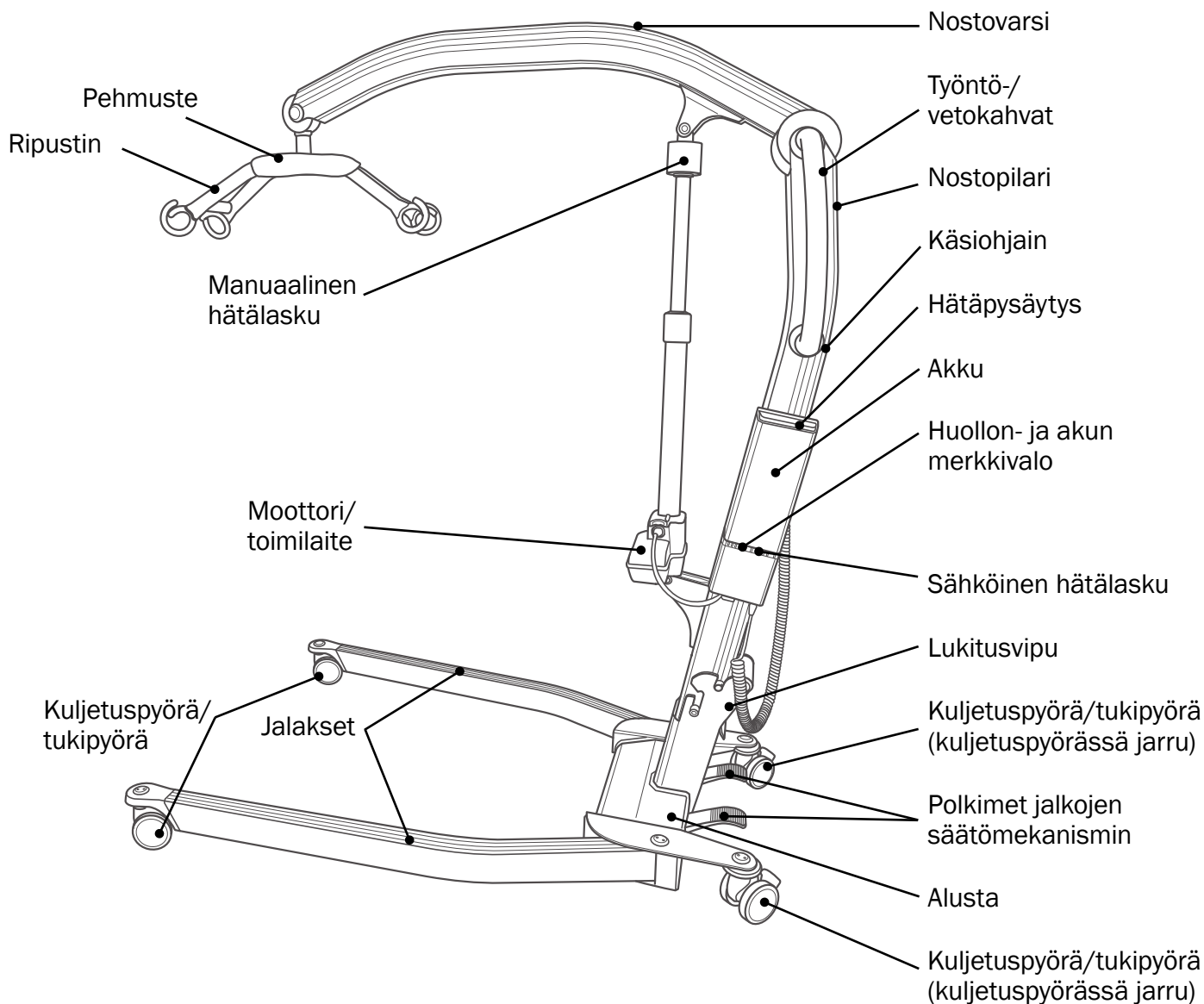

Tuotetarra

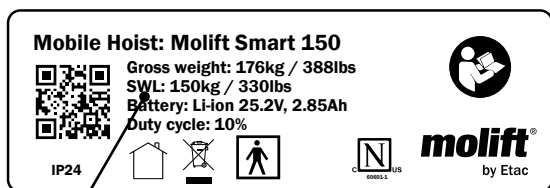

Suurin turvallinen kuorma (SWL)

Tyypikilpi



Sarjanumero

Tuotenumero

Valmistuspäivä



www.etac.com



Tämän dokumentin kopion voi ladata osoitteesta www.etac.com.

Siirry tuotesivulle skannaamalla tuotetarrassa oleva QR-koodi. Käyttöopas löytyy dokumenttien osiosta.

Tuotenumero (katso tyyppikilpi):

.....

Sarjanumero (katso tyyppikilpi):

.....

Valmistuspäivä:

.....

Omistaja:

.....

Nostoliina ei sisälly tähän tarkastukseen, vaan se on tarkastettava erikseen.

Huollon merkkival

Huomioi huollon merkkivalon väri:

Tila	Huollon merkkivalo	Toiminto
(Ei valoa)		Huoltoa/määräaikaistarkastusta ei tarvita
Keltainen		Varaa huolto
Keltainen (vilkkuu ja antaa äänimerkin käytön aikana)		Suorita huolto
Keltainen (syttyy ja sammuu hitaasti)		Suorita määräaikaistarkastus

Käyttökohteet

Koti
Sairaala
Hoitolaitos
Muu



Määräaikaistarkastuksen saa suorittaa tehtävään soveltuva ja pätevä henkilö, joka on perehtynyt huolella laitteen rakenteeseen, käyttöön ja huoltoon



Määräaikaistarkastuksen päivämäärän ja tarkastajan sekä mahdolliset lisätiedot voi syöttää nostolaitteen Molift Service Tool -sovellukseen. Molift suosittelee lisäämään kaikki nostolaitteeseen liittyvät havainnot/huomiot Molift Service Tool -sovellukseen, jotta laitteen historiatiedot pysyvät ajan tasalla

Silmämääräinen tarkastus



Tarkasta kuormittuvat rakenteet silmämääräisesti, ettei niissä ole vaurioita, halkeamia, kulumia ja vääntymisiä. Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuuntoon

OK	Ei OK
	Nostopilari
	Nostovarsi
	Jalakset
	Tuotetarra
	Muovisuojat
	Käsiohjain
	Toimilaite
	Kuljetuspyörä/tukipyörä
	Jarrut kuljetuspyörä/tukipyörä
	Latauslaite
	Johdot
	Akku
	Muu elektroniikka
	Ripustin ja pehmuste
	Jalkojen säätömekanismi
	Korroosiovauriot
	Hitsausseamat
	Käyttöopas on tallessa/saatavilla

Toiminnan tarkastus



Testaa toiminta ja tarkasta kulumien ja vaurioiden varalta.

Kaikki kohdat on tarkastettava, jotta nostolaite voidaan hyväksyä käyttökuuntoon

OK Ei OK

Kuljetuspyörä/tukipyörä

Takapyörien jarrut

Jalakset sisäasennossa (samasuuntaisesti): Tarkasta, ettei jalasten välinen ero pienene, kun niitä työnnetään yhteen käsin

Nostopylväs on täysin lukittu paikalleen, kun lukituskahva on kytkettynä

Hätäpysäytyspainike on täysin toimintakunnossa ja sammuttaa virransyötön painiketta käytettäessä.

Nollaa painikkeen asetukset

Sähköinen hätälasku

Manuaalinen hätälasku

Käsiohjain (painikkeet, käsiohjaimen johdon vedonpoistin, koukku ja akun merkkivalo)

Ripustimen liitäntä (nivel liikkuu vapaasti ja äänettömästi)

Jos kaikki tähän saakka tarkastetut kohdat ovat OK, testaa nostolaite suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)

Tee yksi nostokierros painolla, joka vastaa suurinta turvallista kuormaa (SWL), katso tuotetarrasta arvo kiloina (kg) / paunoina (lbs).

Toimilaite ei saa liukua kuormitettuna (aiheuttaen nostovarren laskeutumisen)

Jalkojen säätömekanismi, ulko- ja sisäasento suurimmalla turvallisella kuormalla (SWL)

Suorita uusi silmämääräinen tarkastus; tarkasta vauriot, vällys ja vääntymiset edellä kuvatulla tavalla. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava ja testi toistettava, kunnes nostolaite toimii moitteettomasti

OK Ei OK

Latauslaite on toimintakunnossa

Nollaa määräaikaistarkastus painamalla käsiohjaimen ylös- ja alas-painikkeita 12 sekunnin ajan (nollauksen jälkeen huoltovalo sammuu)

Lisävarusteet:

.....

.....

.....

Tarkastajan tiedot

Nimi:

Päiväys/paikka:

Allekirjoitus:

.....

Hyväksytty ilman vikoja

Seuraava tarkastus
(VVVV / KK): /

Nostolaite on merkitty "Epäkunnossa"-merkinnällä ja lähetetty korjattavaksi

Nostolaitetta ei voi korjata, joten se poistetaan käytöstä

Mikäli määräaikaistarkastuksessa ilmenee vikoja, kulumia tai muita vaurioita, jotka vaarantavat potilaan turvallisuuden, nostolaitetta ei saa käyttää ennen kuin puute on korjattu.

Asiasta on ilmoitettu omistajalle




Lakisääteisten vaatimusten takia tämä dokumentti tai sen kopio on arkistoitava osaksi omistajan huoltokirjaa.

Muistiinpanot ja havainnot

Jos vikoja ei löydy ja tarkastus on hyväksytty, kiinnitä määräaikaistarkastustarra ja merkitse **seuraavan** tarkastuksen kuukausi ja vuosi. Kun tilaat tarran, käytä tuotenumeroa 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by:

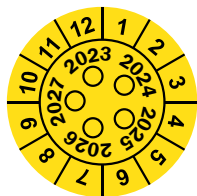

Merkitse tarraan seuraavan määräaikaistarkastuksen kuukausi ja vuosi.

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac