


molift[®]
by Etac

Volgens ISO 10535



ID-label

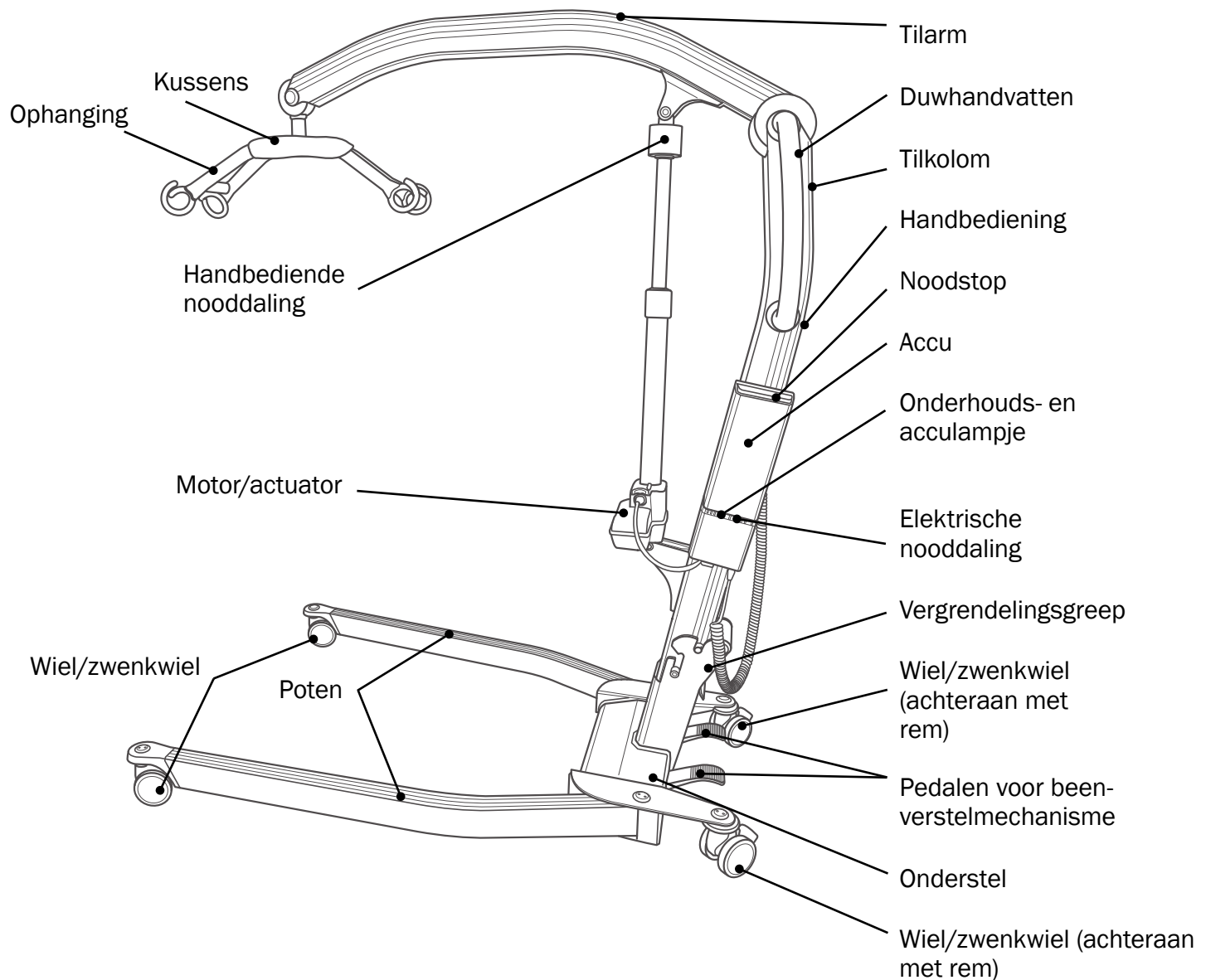

Een exemplaar van dit document kan worden gedownload van www.etac.com.

Scan de QR-code op het productlabel om naar de productpagina te gaan. De gebruikershandleiding staat in de sectie met documenten.

Artikelnr. (zie ID-label):

.....

Serienr. (zie ID-label):

.....

Productiejaar:

.....

Eigenaar:

.....

Tilbanden moeten afzonderlijk worden geïnspecteerd; dit maakt geen deel uit van deze inspectie.

Onderhoudslampje

Controleer de kleur van het onderhoudslampje:

Status	Onderhoudslampje	Modus
	(Lampje brandt niet)	Onderhoud/periodieke inspectie niet nodig
	Geel	Onderhoud plannen
	Geel (knippert en klinkt tijdens bedrijf)	Onderhoud uitvoeren
	Geel (gaat langzaam aan en uit)	Periodieke inspectie uitvoeren

Gebruikssituatie

Thuis
Ziekenhuis
Zorginstelling
Overig



De periodieke inspectie moet worden uitgevoerd door iemand die geschikt en voldoende gekwalificeerd is en goed bekend is met het ontwerp, gebruik en onderhoud van de tillift



In de Molift Service Tool, de software van de tillift, kan de datum van de periodieke inspectie worden ingevoerd, evenals de naam van degene die de inspectie heeft uitgevoerd en eventuele andere informatie.

Molift raadt aan om alle observaties en opmerkingen over de tillift in de Molift Service Tool te registreren voor een compleet historisch logboek van de tillift

Visuele inspectie



Visuele inspectie van de lastdragende structuur om te controleren op beschadigingen, scheuren, slijtage of vervorming. Alle controlepunten moeten worden nagelopen om de tillift goed te keuren voor verder gebruik

OK Niet OK

Tilkolom
Tilarm
Poten
Productlabel
Kunststof kappen
Handbediening
Actuator
Wiel/zwenkwiel
Remmen op wiel/zwenkwiel
Oplader
Kabels
Accu
Overige elektronica
Ophanging, incl. kussens
Aanpassingsmechanisme voor de poten
Geen corrosie
Lasverbindingen
Gebruikershandleiding is aanwezig/beschikbaar

Functionele inspectie



Test functie en controleer op slijtage en beschadigingen.
Alle controlepunten moeten worden nagelopen om de tillift goed te keuren voor verder gebruik

OK	Niet OK
	Wiel/zwenkwiel
	Remmen wiel/zwenkwiel
	Met poten in binnenste positie (parallel): Controleer of de afstand tussen de poten niet kleiner kan worden wanneer deze met de hand naar elkaar worden geduwd
	Tilkolom is volledig gefixeerd bij gebruik van de vergrendelingsgreep
	Noodstopknop is volledig operationeel en bij indrukken ervan wordt de stroomtoevoer uitgeschakeld. Reset de knop
	Elektrische nooddaling
	Handbediende nooddaling
	Handbediening (knoppen, trekantlasting op kabel voor handbediening, haak en acculampje)
	Koppeling van Ophanging (draaikoppeling beweegt vrij en zonder geluid)
	Als alle punten tot nu toe "OK" zijn, moet tillift worden getest met SWL
	Voer één tilcyclus uit met een gewicht dat overeenkomt met SWL (zie productlabel voor waarde in kg/lbs). Actuator mag niet slippen bij belasting (waardoor de tilarm zakt)
	Het aanpassingsmechanisme voor de poten, buitenste en binnenste positie met SWL

OK	Niet OK
	Voer een nieuwe visuele controle uit: controleer op schade, speling en vervormingen zoals hierboven beschreven. Beschadigde onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen en de test moet worden herhaald totdat de tillift correct werkt
	Oplader is operationeel
	Reset de periodieke inspectie door de knoppen omhoog en omlaag op de handbediening 12 seconden ingedrukt te houden (nadat het servicelampje uit is)

Accessoires:

.....

.....

.....

Uitgevoerd door

Volledige naam:

Datum/plaats:

Handtekening:

.....

Goedgekeurd zonder gebreken

Volgende inspectie
(JJJJ/MM): /

Tillift is gemarkeerd met “Buiten werking”
en is opgestuurd voor reparatie

Tillift komt niet in aanmerking voor reparatie
en is buiten gebruik gesteld

Als bij de periodieke inspectie defecten, slijtage
of andere beschadigingen worden geconstateerd
waarmee de veiligheid van de patiënt in gevaar
komt, mag de tillift pas weer worden gebruikt als
de onvolkomenheid is verholpen.

De eigenaar is geïnformeerd



Het is wettelijk vereist om dit document of een kopie ervan op te nemen in het servicelogboek van de gebruiker


Notities en observaties

Bij goedkeuring zonder gebreken, het label voor periodieke inspectie aanbrengen en maand en jaar van **volgende** periodieke inspectie hierop aanduiden. Gebruik bij het bestellen van het label artikelnr. 1100306

Next periodic inspection

0

Inspection performed by: _____

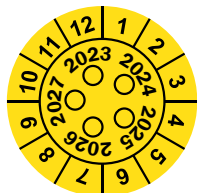

Noteer de maand en het jaar van de volgende periodieke inspectie op het label

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac