

molift[®]
by Etac

In conformità con ISO 10535



Una copia del presente documento è disponibile per il download su www.etac.com.

Per accedere alla pagina iniziale del prodotto, scansionare il codice QR. Il manuale per l'utilizzatore si trova nella sezione dedicata ai documenti.

Articolo n. (vedere l'etichetta identificativa):

N. di serie (vedere l'etichetta identificativa):

Anno di produzione:

Proprietà di:

L'imbracatura non è inclusa nella presente ispezione e deve essere ispezionata separatamente.

Spia dello stato di servizio

Osservare il colore della spia dello stato di servizio:

Stato	Spia dello stato di servizio	Modalità
☐	(Luce assente)	Assistenza/ispezione periodica non necessaria
☐	Giallo	Richiedere assistenza
☐	Giallo (lampeggia e suona durante l'azionamento)	Eseguire intervento di assistenza
☐	Giallo (si accende e si spegne lentamente)	Eseguire ispezione periodica

Ambito d'uso

- ☐ Casa
- ☐ Ospedale
- ☐ Casa di riposo
- ☐ Altro



L'ispezione periodica deve essere affidata a persone opportunamente qualificate e che conoscono bene la progettazione, l'uso e la cura del dispositivo di sollevamento



Il software del sollevatore Molift Service Tool consente di immettere la data dell'ispezione periodica e il nome dell'ispettore, insieme a ulteriori informazioni. Molift raccomanda di annotare tutte le osservazioni e i commenti concernenti il paranco nel Molift Service Tool, per avere un registro storico completo del dispositivo

Verifica visiva



Verifica visiva della struttura che sostiene il carico, per verificare che non vi siano danni, incrinature, segni di logoramento o deformazioni. È necessario verificare tutti i punti di controllo perché sia approvato il futuro utilizzo del paranco

OK	Non OK	
☐	☐	Colonna di sollevamento
☐	☐	Braccio levatore
☐	☐	Piedi
☐	☐	Etichetta prodotto
☐	☐	Coperture di plastica
☐	☐	Pulsantiera
☐	☐	Attuatore
☐	☐	Ruote/ruote orientabili
☐	☐	Freni sulle ruote/ruote orientabili
☐	☐	Caricatore
☐	☐	Cavi
☐	☐	Batteria
☐	☐	Altra elettronica
☐	☐	Barra di sospensione, imbottitura inclusa
☐	☐	Meccanismo di regolazione piedi
☐	☐	Nessuna corrosione
☐	☐	Saldature
☐	☐	Le istruzioni per l'uso/Il manuale per l'utilizzatore sono presenti/disponibili

Verifica funzionale



Provare il funzionamento e verificare se sono presenti segni di usura e danni. È necessario verificare tutti i punti di controllo perché sia approvato il futuro utilizzo del paranco

OK	Non OK	
☐	☐	Ruote/ruote orientabili
☐	☐	Freni delle ruote/ruote orientabili posteriori
☐	☐	Con le gambe in posizione interna (parallele): Verificare che la distanza tra le gambe non diminuisca in caso di spinta a mano
☐	☐	La colonna di sollevamento è completamente ancorata quando la maniglia di bloccaggio è impegnata
☐	☐	Il pulsante di arresto di emergenza funziona correttamente e interrompe l'alimentazione quando attivato. Ripristinare l'interruttore
☐	☐	Discesa elettrica di emergenza
☐	☐	Discesa manuale di emergenza
☐	☐	Pulsantiera (pulsanti, scarico della trazione sul cavo della pulsantiera, gancio e spia della batteria)
☐	☐	Attacco a sgancio rapido (il giunto girevole si muove liberamente e senza rumore)
		Se fin qui tutti i controlli sono "OK", provare il paranco con carico di lavoro sicuro (SWL)
☐	☐	Effettuare un ciclo di sollevamento con un peso pari al SWL (il valore è indicato sull'etichetta del prodotto). L'attuatore non deve slittare quando caricato (causando l'abbassamento del braccio di sollevamento)
☐	☐	Meccanismo di regolazione piedi, posizione verso l'esterno e verso l'interno con SWL

OK	Non OK	
☐	☐	Eseguire un nuovo controllo visivo; danni, gioco e deformazioni come descritto sopra. Eventuali parti danneggiate devono essere riparate o sostituite e il test deve essere ripetuto ancora una volta finché il sollevatore non funziona correttamente
☐	☐	Il caricatore funziona
☐	☐	Ripristinare l'ispezione periodica premendo i pulsanti su e giù sulla pulsantiera per 12 secondi (dopo il ripristino, la spia di assistenza si spegne)

Accessori:

Verifica condotta da

Nome completo:

Data/Luogo:

Firma:

☐ Approvato senza anomalie

Prossima ispezione

(AAAA/MM): /

☐ Il paranco è contrassegnato come
“inagibile” e viene inviato all’assistenza

☐ Il paranco non è idoneo alla riparazione e
viene ritirato dal servizio

Se l'ispezione periodica rivela difetti, usura o
altri danni che compromettono la sicurezza del
paziente, il paranco non deve essere utilizzato fino
alla risoluzione del problema

☐ Il proprietario è stato avvisato




Ai sensi dei requisiti di legge è necessario archiviare questo documento, o una sua copia, insieme al registro di servizio del proprietario

Se approvato senza guasti, applicare l'etichetta di ispezione periodica e indicare il mese e l'anno per l'ispezione periodica **successiva**. Quando si ordina un'etichetta, utilizzare il codice 1100306

Next periodic inspection

Inspection performed by: _____

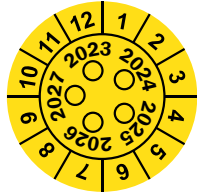

Contrassegnare l'etichetta con il mese e l'anno per l'ispezione periodica successiva

Note e osservazioni

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Promefa SA**

Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac