



***molift***<sup>®</sup>  
by Etac

V souladu s ISO 10535

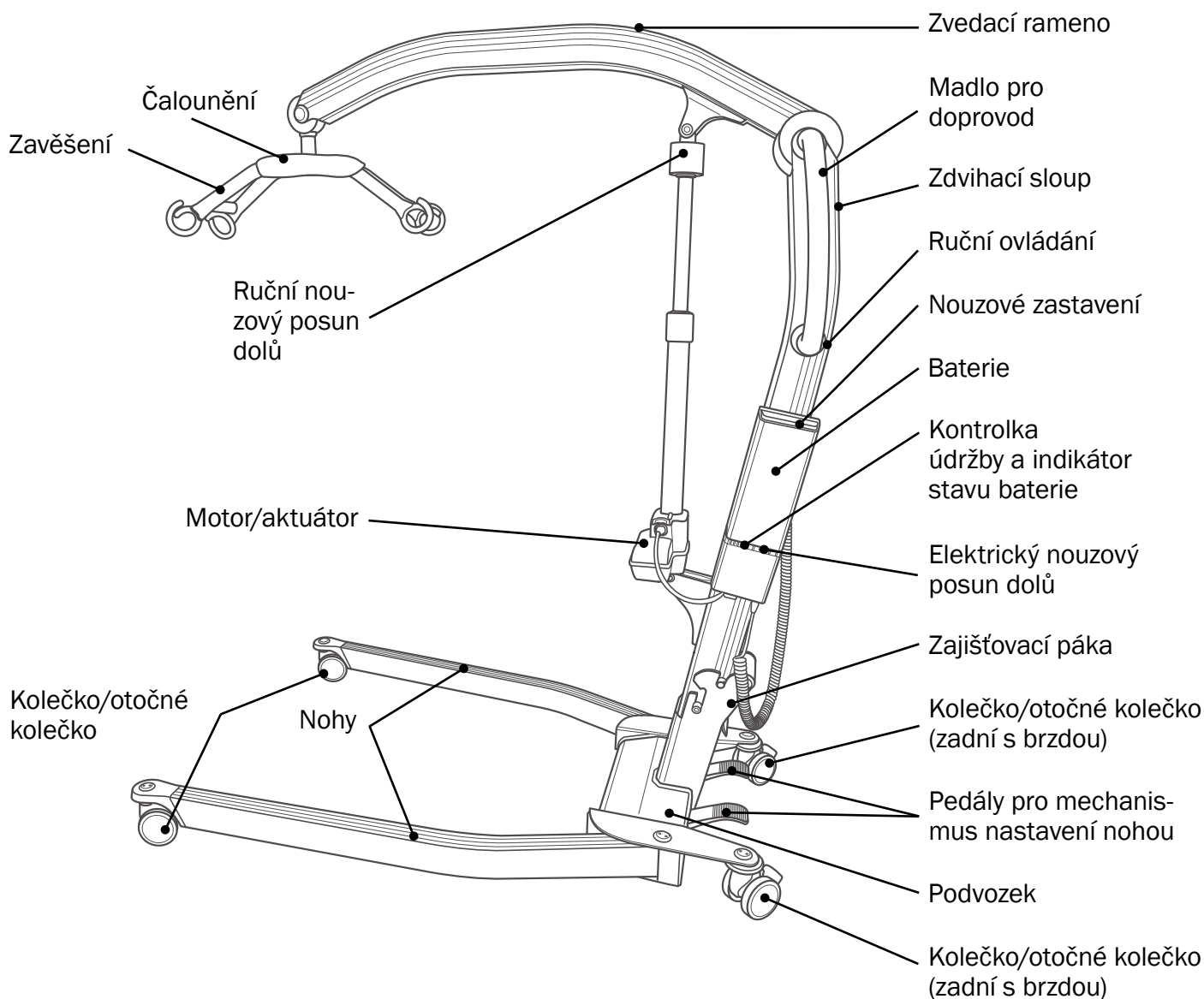

## ID štítek

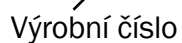

Katalog. č.

Datum výroby



www.etac.com



Kopie tohoto dokumentu je ke stažení na adrese [www.etac.com](http://www.etac.com).

Oskenujte QR kód na štítku produktu pro přístup na domovskou stránku produktu. Návod k použití naleznete v sekci dokumentů.

Katalog. č. (viz ID štítek):

.....

Výrobní číslo (viz ID štítek):

.....

Rok výroby:

.....

Vlastník:

.....

Závěsný kurt je nutno kontrolovat samostatně, není zahrnutý do této prohlídky.

### Servisní kontrolka

Povšimněte si barvy servisní kontrolky:

| Status | Kontrolka údržby                       | Režim                                   |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|        | (nesvítí)                              | Servis/pravidelná kontrola nejsou nutné |
|        | Žlutá                                  | Objednat údržbu                         |
|        | Žlutá (při provozu bliká a zazní zvuk) | Proveďte servis                         |
|        | Žlutá (pomalu se zapne a vypne)        | Proveďte pravidelnou kontrolu           |

### Případy použití

Domov  
Nemocnice  
Pečovatelský dům  
Ostatní



Pravidelnou prohlídku má provádět osoba, která je vhodná, řádně kvalifikovaná a dostatečně obeznámená s konstrukcí, používáním a péčí o zvedák



Softwarový servisní nástroj zvedáku Molift umožňuje zadat datum pravidelné prohlídky a jméno kontrolora spolu s dalšími informacemi. Společnost Molift doporučuje zadat všechna pozorování / poznámky týkající se zvedáku do servisního nástroje Molift pro vytvoření kompletní historie zvedáku

### Vizuální prohlídka



Vizuální prohlídka nosné konstrukce, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození, prasklinám, roztřepení nebo deformacím. Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body

| V<br>POŘÁDKU | Není V<br>POŘÁDKU                      |
|--------------|----------------------------------------|
|              | Zdvihací sloup                         |
|              | Zvedací rameno                         |
|              | Nohy                                   |
|              | Výrobní štítek                         |
|              | Plastové kryty                         |
|              | Ruční ovládání                         |
|              | Aktuátor                               |
|              | Kolečko/otočné kolečko                 |
|              | Brzdy na kolečko/otočné kolečko        |
|              | Nabíječka                              |
|              | Kabely                                 |
|              | Baterie                                |
|              | Ostatní elektronické jednotky          |
|              | Závěs včetně čalouněných vycpávek      |
|              | Mechanismus nastavení nohou            |
|              | Bez koroze                             |
|              | Svary                                  |
|              | Návod k použití je přítomný / dostupný |

## Funkční kontrola



Prověřte funkci, zkontrolujte opotřebení a poškození.  
Pro schválení zvedáku pro další použití musí být zkontrolovány všechny kontrolní body

V      *Není V*  
POŘÁDKU   POŘÁDKU

|  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kolečko/otočné kolečko                                                                                                                                                                                             |
|  | Brzdy zadních kol/rejdrových kol                                                                                                                                                                                   |
|  | S nohama podvozku ve vnitřní poloze (rovnoběžnými): Zkontrolujte, zda se vzdálenost mezi nohama nelze zmenšit tlakem rukou                                                                                         |
|  | Zvedací sloup je zcela zafixován přestavením zajišťovací páky                                                                                                                                                      |
|  | Tlačítko nouzového zastavení je plně funkční a při stlačení přerušuje napájení.<br>Resetujte spínač                                                                                                                |
|  | Elektrický nouzový posun dolů                                                                                                                                                                                      |
|  | Ruční nouzový posun dolů                                                                                                                                                                                           |
|  | Ruční ovládání (tlačítka, odlehčení tahu na kabelu ručního ovládání, hák a kontrolka baterie)                                                                                                                      |
|  | Spojka zvedacího závěsu (otočný spoj se pohybuje volně a nehlukně)                                                                                                                                                 |
|  | Pokud byly všechny body dosud v <i>pořádku</i> , otestujte zvedák na bezpečnostní limit (SWL)                                                                                                                      |
|  | Proveďte jeden zvedací cyklus s hmotností rovnou SWL (hodnota v kg/lbs je uvedena na výrobním štítku). Servopohon nesmí při zatížení prokluzovat (a způsobit spuštění zvedacího ramene).                           |
|  | Mechanismus nastavení nohou, ven a dovnitř s bezpečnostním limitem (SWL)                                                                                                                                           |
|  | Proveďte novou vizuální kontrolu; Poškození, zásahy a deformace, jak jsou popsány výše. Jakékoli poškozené součásti se musí opravit nebo vyměnit a zkoušku je nutné opakovat, dokud zvedák nebude fungovat správně |

V      *Není V*  
POŘÁDKU   POŘÁDKU

Nabíječka je funkční

Resetujte pravidelnou kontrolu stisknutím tlačítek nahoru a dolů na ručním ovládání na 12 sekund (po resetu zhasne servisní kontrolka)

Příslušenství:

.....

.....

.....

## Provedl

Jméno a příjmení:

Datum/místo:

Podpis:

Schváleno bez závad

Příští prohlídka  
(RRRR / MM):      /

Zvedák je označen „Mimo provoz“  
a odeslán k opravě

Zvedák není způsobilý k opravě a je vyřazen  
z provozu

Pokud pravidelná prohlídka odhalí závadu, opotřebení nebo jiné poškození, které ohrožuje bezpečnost pacienta, nesmí být zvedák používán, dokud nebude závada odstraněna.

Vlastník je informován




Vzhledem k zákonným požadavkům musí být tento dokument nebo jeho kopie uložena se servisní knížkou majitele


## Poznámky a zjištění

V případě schválení bez závad nalepte kontrolní štítek a vyznačte měsíc a rok **další** pravidelné kontroly. Při objednávání štítku použijte č. položky 1100306

Next periodic inspection

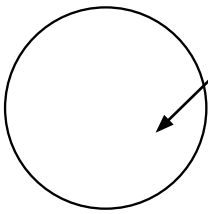

Inspection performed by:

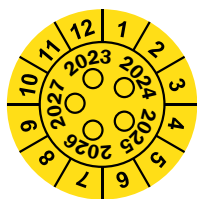

Na štítku vyznačte měsíc a rok další pravidelné kontroly







**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,  
Hartlebury, Kidderminster,  
Worcestershire, DY10 4JB  
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12  
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne  
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3  
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

***molift***<sup>®</sup>  
by Etac