

etac®
Creating Possibilities



etac®

Etac Clean

Sedia doccia/WC manovrabile

Clean - Un'icona pluripremiata

La sedia comoda doccia/WC mobile Clean è uno dei prodotti di maggiore successo di Etac. Introdotta nel 1999, ha definito gli standard di riferimento per questa categoria di ausili, mantenendo ancora oggi una posizione di leadership. Grazie all'elevata igiene, al design funzionale e alla facilità d'uso, è apprezzata sia nelle strutture assistenziali che negli ambienti domestici.

Facile da manovrare

Una delle caratteristiche più apprezzate di Clean è la sua eccezionale manovrabilità. Grazie al design compatto e sottile, può attraversare facilmente le porte e adattarsi anche agli spazi più ridotti. L'ampia maniglia di spinta consente diverse modalità di presa, rendendo la sedia estremamente semplice da manovrare.

Flessibilità senza complessità

Clean combina funzionalità eccellenti e semplicità d'uso, senza compromessi. I braccioli, facilmente rimovibili o regolabili con un semplice clic, facilitano i trasferimenti dell'utente. I freni sono intuitivi e sempre a portata di mano, mentre l'esclusivo poggiaiedi ergonomico può essere ripiegato o riposto sotto la seduta quando non è in uso, garantendo maggiore praticità e comfort.

Molteplici soluzioni per diversi utenti

La famiglia Clean comprende tre modelli e numerose varianti, ciascuna dotata di caratteristiche specifiche per rispondere al meglio alle diverse esigenze degli utilizzatori.



Caratteristiche



Piccola ma confortevole

La sedia si distingue per il design elegante e compatto, pur offrendo all'utente una seduta ampia e confortevole.



Facilita le operazioni di igiene personale

La seduta standard è aperta posteriormente e presenta un'incavo nella parte anteriore per agevolare le operazioni di igiene personale. È inoltre disponibile una versione con apertura anteriore della seduta.



Compatibile con diversi modelli di WC

Grazie alla struttura verticale del telaio, la sedia può essere posizionata vicino alla parete e si adatta perfettamente a diversi modelli di WC, compresi quelli sospesi.



Pedana ergonomica

Una pratica pedana, dalla forma morbida e arrotondata, che offre comfort e un adeguato supporto.



Clean offre una garanzia di 5 anni e una durata prevista di 10 anni.

Sedia doccia/WC manovrabile

	Bianca	Verde acqua
44 cm (17¼"), 4 ruote bloccanti	80229269	80229209
49 cm (19¼"), 4 ruote bloccanti	80229270	80229210
49 cm (19¼"), 2 lockable castors	80229273	80229213
55 cm (21¼"), 4 ruote bloccanti	80229271	80229211
55 cm (21¼"), 2 ruote bloccanti	80229274	80229214
60 cm (23½"), 2 ruote bloccanti incl. heightening spacers	80229275	80229215

Sedia doccia/WC manovrabile
2 per box

	Bianca	Verde acqua
49 cm (19¼"), 4 ruote bloccanti, 2 per box	80209304	80229220
49 cm (19¼"), 2 ruote bloccanti, 2 per box	80229283	80229223
55 cm (21¼"), 4 ruote bloccanti, 2 per box	80229281	80229221
55 cm (21¼"), 2 ruote bloccanti, 2 per box	80229284	80229224

Portata massima

130 kg

Peso

44 cm: 13.5 kg
49 cm: 14.0 kg
55 cm: 14.5 kg
60 cm: 15.0 kg

Materiali

Telaio: Tubolare d'acciaio verniciato a polvere
Seduta / Supporto schienale: Polipropilene
Braccioli: Polipropilene
Poggiapiedi: Polipropilene
Supporti ruote pivotanti: Poliammide
Ruote pivotanti: Poliammide / TPE

Maintenance



Pulizia manuale: Pulire il prodotto con un detergente privo di solventi con un valore di pH compreso tra 6 e 9, oppure con una soluzione disinfettante al 70%.
Lavaggio meccanico: Il prodotto può essere lavato e disinfettato in lavastoviglie industriale/termodisinfettatore a un massimo di 85 °C per 3 minuti.



Clean regolabile in altezza

Grazie all'altezza della seduta regolabile, Si adatta facilmente alle esigenze di ogni utilizzatore. La regolazione dell'altezza facilita i trasferimenti e garantisce la compatibilità con diverse tipologie di WC. È inoltre una soluzione ideale per strutture assistenziali, dove la stessa sedia può essere utilizzata da più persone.

La stessa sedia per diverse altezze

Grazie alla regolazione dell'altezza della seduta, la sedia può essere configurata su misura per soddisfare esigenze differenti. L'altezza può essere facilmente regolata fino a 60 cm senza l'ausilio di strumenti. Inoltre, mantiene tutte le caratteristiche e i vantaggi che rendono la gamma Clean un punto di riferimento per comfort, praticità e funzionalità.

Supporto aggiuntivo per il piede

Per questo modello è disponibile un'ulteriore opzione di supporto per i piedi. Per maggiori informazioni sugli accessori, consultare le pagine 9-11.



Per le esigenze assistenziali di domani

Le previsioni indicano che, con l'invecchiamento della popolazione, un numero maggiore di persone riceverà assistenza presso il proprio domicilio. Questo scenario impone requisiti sempre più elevati agli ausili per il bagno, che dovranno rispondere alle esigenze dell'ambiente domestico.

Grazie al suo design compatto, igienico e maneggevole, Clean può soddisfare le esigenze assistenziali di domani. Scopri di più su www.etac.com

Clean regolabile in altezza	Bianca	Verde acqua
4 ruote bloccanti	80229208	-
4 ruote bloccanti	-	80229203

Peso
14.2 kg

Portata massima
130 kg

Materiali
Telaio: Tubolare d'acciaio verniciato a polvere
Seduta / Supporto schienale: Polipropilene
Braccioli: Polipropilene
Poggiatesta: Polipropilene
Ruote pivotanti: Poliammide / TPE / Tubolare in acciaio inox
Tubi di regolazione altezza ruote: Acciaio inox

Lavaggio



Pulizia manuale: Pulire il prodotto con un detergente privo di solventi con un valore di pH compreso tra 6 e 9, oppure con una soluzione disinfettante al 70%.

Lavaggio meccanico: Il prodotto può essere lavato e disinfettato in lavastoviglie industriale/termoisinfettore a un massimo di 85 °C per 3 minuti.





Clean con ruote da 24"

Per gli utenti più autonomi, è disponibile una versione ad autospinta. Mantiene tutti i vantaggi della gamma Clean, offrendo al contempo maggiore indipendenza di movimento agli utenti in grado di manovrare la sedia in autonomia.

Facile da manovrare

La sedia è facile da manovrare grazie alle ruote da 24 pollici, posizionate in modo da favorire l'autonomia nelle attività quotidiane e garantire il massimo comfort.

Facilita i trasferimenti

L'ampia seduta e lo spazio libero nella parte anteriore delle ruote facilitano i trasferimenti da e verso la sedia. Le leve dei freni sono inoltre posizionate in modo da non ostacolare le operazioni di trasferimento, pur rimanendo sempre facilmente accessibili.



Evoluzione continua

Come la maggior parte dei prodotti Etac, anche Clean viene costantemente migliorata. Durante questo processo, ci siamo sempre assicurati che la classica Clean rimanesse una soluzione moderna e al passo con le esigenze degli utenti. Poiché l'igiene personale è prima di tutto una questione di preferenze individuali. Per questo motivo, la gamma è stata ampliata con nuovi modelli, in grado di rispondere a esigenze sempre più diversificate.

Clean con ruote da 24"	Bianca	Verde acqua
55 cm (21¾) with 24" rear wheels	80229276	-
55 cm (21¾) with 24" rear wheels	-	80229216

Peso
20.0 kg

Portata massima
130 kg

Materiale
Adattatore ruote posteriori: Alluminio
Ruote posteriori: Poliammide, pneumatici pieni
Telaio: Tubolare d'acciaio verniciato a polvere
Seduta / Supporto schienale: Polipropilene
Braccioli: Polipropilene
Poggiapiedi: Polipropilene
Supporti ruote pivotanti: Poliammide
Ruote pivotanti: Poliammide / TPE

Lavaggio



Pulizia manuale: Pulire il prodotto con un detergente privo di solventi con un valore di pH compreso tra 6 e 9, oppure con una soluzione disinfettante al 70%.
Lavaggio meccanico: Il prodotto può essere lavato e disinfettato in lavastoviglie industriale/termodisinfettatore a un massimo di 85 °C per 3 minuti.





Molteplici soluzioni per diversi utenti

Oltre ai modelli principali Clean, sono disponibili varianti progettate per rispondere ancora meglio alle esigenze individuali. Il nostro obiettivo è offrire la più ampia scelta possibile, aiutando un numero sempre maggiore di persone a gestire le proprie routine di igiene.



Clean con apertura anteriore della seduta

La seduta con apertura anteriore favorisce una maggiore autonomia nelle operazioni di igiene personale e può offrire un accesso più agevole anche ai caregiver. È particolarmente indicata quando si utilizza una doccetta manuale.

Disponibile per i modelli Clean e Clean con ruote da 24”.

Clean con schienale morbido

Lo schienale morbido è stato progettato per garantire il massimo comfort agli utenti con schiena sensibile. Si modella seguendo la naturale curvatura della colonna vertebrale, fornendo un sostegno ergonomico e confortevole. La regolazione è semplice e intuitiva grazie alle tre cinghie situate sul retro.

Disponibile sia come variante che come accessorio.



Clean con kit comfort

Il kit Comfort garantisce maggiore morbidezza e sostegno. La seduta, lo schienale e i braccioli imbottiti assicurano un elevato livello di comfort, mentre le superfici termoriflettenti contribuiscono a mantenere una piacevole sensazione di calore.

Inoltre, il suo design avvolgente contribuisce a preservare la privacy e la dignità durante le attività di igiene personale, senza compromettere l’accessibilità del caregiver.

Disponibile sia come variante che come accessorio.

Clean cons chienale morbido		Clean con apertura anteriore della seduta	
	Bianca		Verde acqua
44 cm (17¼”), 4 ruote bloccanti, schienale morbido, attacchi padella	80229286	49 cm (19¼”), 4 ruote bloccanti	80229325
49 cm (19¾”), 4 ruote bloccanti, schienale morbido, attacchi padella	80229287	55 cm (21¾”), 4 ruote bloccanti	80229321
55 cm (21¾”), 4 ruote bloccanti, schienale morbido, attacchi padella	80229288	49 cm (19¼”), 4 ruote bloccanti, 2 per box	80229319
		55 cm (21¾”), 4 ruote bloccanti, 2 per box	80229320
Clean con kit comfort		Clean con ruote da 24” con apertura anteriore della seduta	
			Verde acqua
49 cm (19¼”), 4 ruote bloccanti, imbottitura seduta e cover	80229298	55 cm (21¾”), con ruote posteriori	80229327
55 cm (21¾”), 4 ruote bloccanti, imbottitura seduta e cover	80229299		

Accessori per un'ulteriore personalizzazione

La possibilità di personalizzare i prodotti è fondamentale per promuovere le capacità dell'utente e la sua partecipazione alle attività quotidiane. La gamma di accessori Clean offre un'ampia varietà di opzioni per adattamenti individuali, volti ad aumentare il comfort, il supporto o la funzionalità.



Comfort

L'aggiunta di elementi morbidi incrementa il benessere dell'utente e contribuisce a mantenerne la temperatura corporea. La linea comprende diversi sedili morbidi e imbottiture per schienale e braccioli.

Supporto e Postura

Una corretta postura da seduti è essenziale per valorizzare l'autonomia dell'utente e migliorare la sua percezione di sicurezza. Tra le opzioni disponibili figurano varie cinture, un'asta di sicurezza e supporti laterali.

Funzionalità aggiuntive

Alcuni accessori consentono di estendere la funzionalità della sedia. Sono disponibili, ad esempio, diversi modelli di padelle igieniche con relativi supporti, oltre a un porta sapone con aggancio rapido a scatto.

Accessori



Schienaie tensionabile

80209225


Schienaie regolabile in rete morbida (mesh). Garantisce maggiore comfort agli utenti che necessitano di un sostegno più delicato, adattandosi alla curvatura della colonna vertebrale. Facile da regolare tramite 3 fibbie.



Imbottitura sedile senza foro

80209528

Copriseduta morbida indicata nei casi in cui sia richiesta una superficie di seduta continua. Altezza: 2 cm.

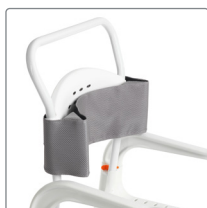

Supporti laterali tronco

80209509

Supporto laterale imbottito per un migliore posizionamento e una sensazione di maggiore contenimento della seduta. Regolabile in larghezza. Compatibile con lo schienale standard.



Imbottitura sedile senza foro

80209247

Copriseduta per la chiusura completa dell'incavo centrale, ideata per ottenere una seduta integra.



Imbottitura morbida per schienale

80209261

Cuscino per schienale studiato per offrire morbidezza e isolamento termico. Realizzato in materiale termoriflettente con superficie antiscivolo. Da utilizzare in combinazione con lo schienale standard.



Imbottitura morbida per seduta

80209260

Sedile morbido a basso spessore con proprietà termoriflettenti e superficie antiscivolo. Larghezza apertura: 17 cm (6¾").

Accessories



Imbottitura seduta Soft Comfort, 2cm

80209517
Sedile morbido per un maggior comfort. Sagomatura delicata con incavo frontale per facilitare l'igiene personale. Larghezza apertura: 18 cm (7").



Imbottitura seduta Soft Comfort, 4cm

Larghezza apertura 15 cm (6"): 80209301
Larghezza apertura 18 cm (7"): 80209227
Sedile morbido per un maggior comfort. Sagomatura delicata con incavo frontale per facilitare l'igiene personale.



Sedile Soft Comfort, apertura anteriore

80209527
Sedile anatomico per garantire la massima morbidezza durante la seduta. Compatibile con Clean con seduta ad apertura frontale. Altezza: 2 cm.



Imbottiture braccioli - Paio

80209226
Offrono un morbido supporto per gli avambracci lasciando libera la superficie d'impugnatura del bracciolo, così da garantire una presa salda durante la fase di risalita in piedi.



Comfort imbottitura completa di schienale e braccioli

80209228
Schienale morbido con imbottiture per braccioli integrate, progettato per offrire livelli superiori di supporto e comfort. Superficie idrorepellente e termoriflettente.




Comfort Kit

80209237
Set Comfort ideato per avvolgere l'utente e massimizzarne la sensazione di benessere. Include sia il Rivestimento Comfort sia il Sedile Comfort Morbido da 4 cm.




Cintura tronco/bacino imbottita

80209524
Cintura morbida per postura e contenimento ottimali. Lunghezza regolabile da 65-130 cm tramite 3 fibbie. Utilizzabile su tutti i modelli Clean e come cintura toracica in combinazione con lo schienale morbido.

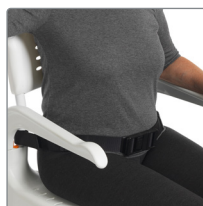

Cintura pelvica

80209440
Fornisce supporto al bacino. Facilmente regolabile alla lunghezza desiderata tramite fibbia in plastica. Si fissa ai tubolari dello schienale mediante cinghie in velcro.

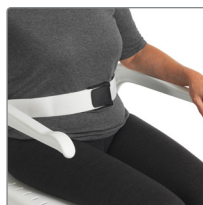


Cintura tronco

80209442
Un supporto frontale per il tronco. Facilmente regolabile in lunghezza, si fissa attorno alle cinghie dello schienale. Si raccomanda l'uso combinato con la cintura pelvica. Compatibile esclusivamente con lo schienale morbido.



Cintura di supporto

80209034
Si fissa sul lato posteriore dello schienale. Da utilizzare sempre in combinazione con la cintura di posizionamento. Compatibile con lo schienale standard.

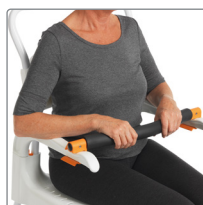

Barra di supporto

80209246
Utilizzabile come appoggio, per inclinarsi in avanti e per aumentare la sensazione di sicurezza dell'utente. Si fissa facilmente ai braccioli.



Porta sapone

80209266
Porta sapone con supporto integrato per la doccia. Utilizzabile anche come supporto per il coperchio della padella o per la carta igienica. Si aggancia con innesto a scatto sul lato della seduta.



Paraspruzzi

80209430
Protezione morbida frontale per evitare fuoriuscite di schizzi. Si applica sulla parte anteriore della seduta ed è facilmente rimovibile. Può essere orientato anche manualmente per un controllo ottimale.



Padella

Padella completa con manico: 80209255
Padella: 80209254 Coperchio: 80209256
Design sagomato per evitare fuoriuscite e facilitare lo svuotamento. Con chiusura automatica al sollevamento. Il supporto per padella va ordinato separatamente.

Accessories



Dispositivo di aggancio per padella

80209257

Compatibile con padelle standard, padelle da letto e le comuni padelle ospedaliere a bordo sottile. Si aggancia agli attacchi sottoseduta forniti di serie.



Attacchi per montaggio ribassato

80209259

Si applica al supporto per padella/secchio. Abbassa il supporto di 6 cm (2½").



Secchio con maniglia e coperchio

80209265

Secchio di tipo tradizionale da utilizzare con il relativo supporto. Coperchio incluso. Il supporto per secchio va ordinato separatamente.



Padella monouso

80209282

Padelle monouso rigide e resistenti. Confezione da 50 pezzi.



Dispositivo di aggancio per secchio

80209258

Compatibile con il Secchio con manico e coperchio e con altri secchi a bordo spesso o a sponda alta. Si aggancia agli attacchi sottoseduta forniti di serie.



Dispositivo di aggancio per padella monouso

80209229

Supporto per padella idoneo all'alloggiamento di padelle monouso.

Accessori supplementari

Compatibili solo con Clean 49 o 55 cm



Adattatore per ruote posteriori

Grigio: 80209262

Bianco: 80209305

Adattatore per la sostituzione delle ruote posteriori standard con ruote da 24". Compatibile con Clean 55 cm.




Kit di rialzo con ruote

Bianco: 80209511

Verde: 80209512

Distanziatori per incrementare l'altezza di seduta di 5 cm. Non compatibili con Clean 24". Venduti in confezioni da 4 pezzi.

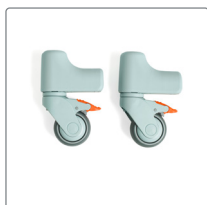

Ruote da 75 mm (3")

Bianche: Ant. - 80209515. Post. - 80209516

Verde: ant. - 80209513. Post. - 80209514

Riducono l'altezza di seduta di 5 cm (2").

Montate di serie su Clean 44 cm. Compatibili con Clean 49 cm. Vendute a paia.

Solo per Clean ad altezza regolabile



Pedane ribaltabili

80209250

Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in altezza e rimovibili. Compatibili con Clean ad altezza regolabile. Venduti a paia.

Per maggiori informazioni

Per la gamma completa e per maggiori dettagli su ciascun accessorio, visita il sito www.etac.com



Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorano la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac



+39 051 2819228



italia.ordini@etac.it



www.etac-it.com

etac[®]
Creating Possibilities