

The logo for etac, featuring a stylized circular icon followed by the word "etac" in a bold, sans-serif font.

Creating Possibilities



R82[®]

R82 Flamingo Curo

Sistema di seduta adattabile e moderno

Aiuta nell'apprendimento dell'uso del vasino

Flamingo Curo è un sistema di seduta versatile progettato per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, si adatta per l'uso in bagno, sotto ladoccia e nella vasca.

Offre cinque opzioni dimontaggio, attraverso tre basi, attacco diretto sul WC o in una vasca. Si adatta perfettamente a varie attività igieniche, offrendo flessibilità sia agli utenti che ai caregivers.



Apprendimento del vasino e crescita

Iniziare l'addestramento all'uso del vasino è una tappa fondamentale nello sviluppo del bambino, richiede un'attenta valutazione delle sue abilità e della capacità di sedersi in modo autonomo. Per il suo sviluppo, sedersi autonomamente sul vasino o sul WC senza supporti è essenziale per iniziare questo processo.

L'età in cui i bambini iniziano l'apprendimento dell'uso del vasino varia notevolmente. Alcuni dei fattori possono essere: il momento in cui il bambino mostra di essere pronto all'istruzione, momento in cui i genitori iniziano l'insegnamento, il sesso e le differenze culturali. L'addestramento all'uso del vasino, in alcuni paesi, può iniziare già dai 6 mesi, in altri tra i 18 e i 36 mesi.

I bambini con esigenze speciali spesso necessitano di supporto posturale quando iniziano ad utilizzare il vasino. Per stabilire routine quotidiane che portino al raggiungimento dell'autonomia, sia diurna che notturna,

è fondamentale un approccio collaborativo e con professionisti in grado di aiutare il bambino, i suoi genitori o i caregiver.

I bambini che necessitano di un supporto posturale per mantenere la posizione seduta durante le funzioni igieniche, per la nostra esperienza spesso hanno anche difficoltà nell'evacuazione o soffrono di costipazione e assumere la posizione accovacciata può rivelarsi utile.

Flamingo Curo offre soluzioni su misura per facilitare le funzioni igieniche e aiutare a migliorare la stabilità posturale. Il sistema di seduta è dotato di uno schienale regolabile in inclinazione di -20° per chiudere l'angolo, un poggipiedi regolabile in altezza per un posizionamento ottimale delle gambe e un comodo tavolino in PU per sostenere la parte superiore del corpo. Inoltre, l'apertura sul retro aiuta il caregiver a fornire il supporto necessario.

Scopri di più sul toilet training



Supporto alla posizione seduto nella routine del vasino

L'apprendimento dell'uso del vasino rappresenta una tappa importante nello sviluppo di un bambino, richiedendo un'attenta valutazione della sua mobilità; i bambini con bisogni speciali spesso necessitano di assistenza e supporto posturale quando iniziano l'apprendimento all'uso del vasino.



Indipendenza e qualità della vita

La partecipazione alla routine quotidiana di igiene personale e lo sviluppo di competenze igieniche migliorano significativamente la capacità di prendersi cura di se stessi, il senso di dignità e la qualità della vita. È fondamentale promuovere l'indipendenza e il comfort assicurandosi che la dignità del bambino sia rispettata e che il supporto dei caregivers sia il più semplice possibile.



Preparazione all'uso del vasino

Il vasino e i sistemi di seduta da bagno possono influenzare positivamente il bambino nelle attività di cura di se stesso, consentendogli di impegnarsi attivamente nelle sue routine quotidiane, promuovendo l'indipendenza, l'autostima e il benessere generale.



The pooping position


Raggiungere una posizione accovacciata può aiutare in caso di stitichezza e l'evacuazione. La postura inclinata in avanti, le ginocchia sollevate e il supporto della parte superiore del corpo sono essenziali per migliorare il comfort e l'efficacia dell'uso del bagno.

Base Potty

La base Potty è un'opzione progettata specificamente per Flamingo Curo misura 1. E' un'alternativa per i bambini con esigenze speciali che stanno imparando a usare il vasino in maniera autonomo.

L'addestramento all'uso del vasino è una tappa fondamentale dello sviluppo, richiede un'attenzione particolare all'autonomia, alla postura e alla crescita del bambino. Mentre i bambini con uno sviluppo tipico possono iniziare l'addestramento già dai sei mesi ai tre anni, a seconda delle differenze culturali, dell'approccio dei genitori e della preparazione individuale, i bambini con esigenze speciali o di sviluppo spesso hanno bisogno di ausili per supportarli in questo processo.

Flamingo Curo con base Potty è un sistema di seduta stabile, regolabile e sicuro, consente ai bambini di svolgere le loro routine quotidiane con maggiore comfort e indipendenza. Progettata per essere utilizzata con la seduta Flamingo Curo misura 1 si completa con una vasta gamma di accessori che consentono un posizionamento personalizzato in base alle esigenze del bambino. Ciò garantisce una postura ottimale, essenziale sia per la sicurezza che per il successo durante l'addestramento del vasino.

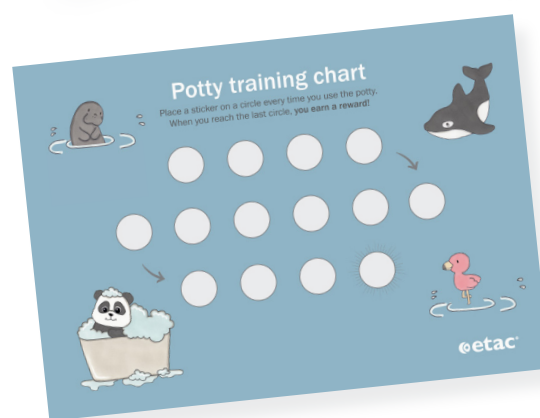

Visita il nostro sito per maggiori informazioni



Misure

Flamingo Curo

Misura 1

	Altezza schienale	37.5-44.5 cm
	Profondità seduta	23.5-29.5 cm
	Larghezza seduta con supporti cont. bacino	18.5-26.5 cm
	Portata massima	35 kg

Flamingo Curo con base Potty

Misura 1

	Distanza poplite tallone	22.0-28.5 cm
	Altezzada da terra	29/31/33 cm



Guarda come si diverte Alma
mentre fa il bagnetto con la sua
mamma



L'ora del bagnetto

L'ora del bagnetto per i bambini con esigenze speciali può essere un'esperienza rilassante ma anche impegnativa, richiede un approccio attento per soddisfare le loro esigenze. È fondamentale creare un ambiente sicuro e confortevole, alcuni bambini potrebbero essere sensibili alla temperatura dell'acqua o ai rumori. Strumenti semplici come doccette manuali o giocattoli preferiti possono rendere il processo meno stressante e più coinvolgente.

Per alcuni bambini un sistema di seduta per le funzioni igieniche o un sollevatore possono migliorare la sicurezza e l'accessibilità, ma soprattutto sono essenziali pazienza ed empatia. Affrontare l'ora del bagnetto con comprensione e soluzioni su misura per soddisfare l'esigenza del bambino permette di creare un momento piacevole di cura, connessione e relax.

I sistemi di seduta per le funzioni igieniche svolgono un ruolo importante nel garantire sicurezza e comfort durante il bagnetto. Flamingo Curo è progettato per fornire un supporto stabile, ridurre lo sforzo fisico del caregiver e promuovere l'indipendenza del bambino.

Flamingo Curo è progettato per seguire le esigenze del bambino ha lo schienale regolabile in inclinazione, per soddisfare esigenze diverse e garantire stabilità. Utilizzando il sistema di seduta nella routine quotidiana il caregiver possono concentrarsi maggiormente sul trasmettere un senso di sicurezza e tranquillità, rendendo l'esperienza più piacevole. Il comfort incoraggia il bambino a partecipare più attivamente alla routine quotidiana.

La tua scelta per la routine quotidiana

Flamingo Curo è un sistema di seduta progettato per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, adatta per l'uso sul WC, in doccia e nella vasca da bagno. Con cinque diverse opzioni di montaggio, questo sistema di seduta si adatta a varie attività igieniche, offrendo flessibilità sia agli utenti che ai caregiver.



Adatto all'uso quotidiano

Flamingo Curo è un prodotto versatile che può essere utilizzato sia sul WC che per fare la doccia o il bagnetto. E' progettato per soddisfare le esigenze del bambino in tutte le situazioni.



Cresce con il bambino

Flamingo Curo ha lo schienale regolabile in altezza e la seduta in profondità e larghezza. Dispone di una vasta gamma di accessori che consentono di adattare il sistema alle esigenze e alla crescita del bambino.



Supporto e comfort

Il sistema di seduta è dotato di inserti in PU dalla forma accuratamente studiata con una leggera curvatura, che offrono un supporto comodo e stabile al bambino durante le sue routine.



Facile da usare per i caregiver

Flamingo Curo è progettato per essere facilmente accessibile e utilizzabile con una sola mano, in modo da rendere semplice l'esecuzione di tutte le operazioni igieniche, consentendoti di interagire con il bambino.



Guarda le opzioni di
seduta di Flamingo Curo





Leggi di più su Alma e
come si diverte a fare
il bagnetto.



Un dispositivo - diverse opzioni di scelta

Flamingo Curo, base Compact




Flamingo Curo, base High-low



Flamingo Curo, base Potty



Flamingo Curo, kit ventose per vasca

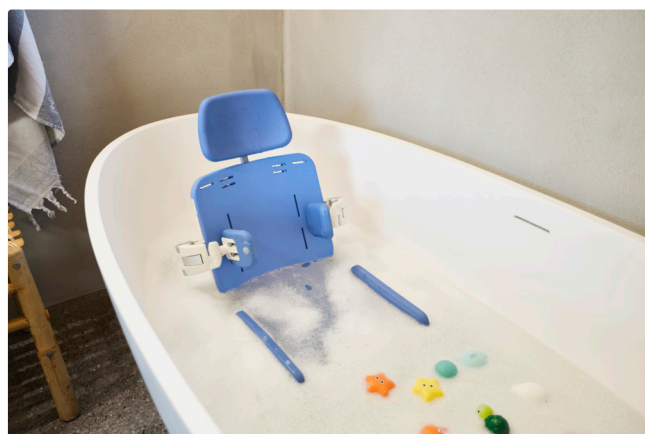

Flamgo Curo, kit per fissaggio al WC



Flamingo Curo con padella



Addestramento all'uso del vasino con Andreas



Andreas è un ragazzo allegro, energico e curioso, a cui è stata diagnosticata una paralisi cerebrale e una lisencefalia. La lisencefalia è una malattia rara caratterizzata dall'assenza delle normali circonvoluzioni (pieghe) nel cervello, che rende la superficie cerebrale liscia e spesso causa ritardi nello sviluppo e disturbi motori. Dal punto di vista funzionale, Andreas è in grado di stare seduto in modo indipendente, con un buon controllo posturale. Dimostra una buona forza e controllo motorio nell'arto superiore destro, ma ha un controllo volontario limitato sul lato sinistro. Usa attivamente il braccio e la mano destra, in particolare quando gioca con le sue macchinine. Non è in grado di stare in piedi o camminare senza sostegno, ma può esplorare l'ambiente circostante spostandosi da seduto. Andreas è anche in grado di comunicare utilizzando parole monosillabiche.

Una delle attività preferite di Andreas è fare il bagno con il fratello maggiore: un momento gioioso pieno di risate e spruzzi. Oggi Andreas usa un sistema di seduta fissato alla vasca. Tuttavia, questa soluzione non soddisfa più le esigenze in continua evoluzione né di Andreas né della sua famiglia. Sua madre, Ditte, desidera che Andreas continui a godersi il momento del bagno con suo fratello, ma vuole anche che impari a essere più indipendente quando fa la doccia e va in bagno.

Andreas frequenta una scuola per bambini con bisogni speciali, dove utilizza il suo R82 Meerkat per stare in piedi. Quando Andreas non è a scuola, ama ascoltare musica, giocare con le sue macchinine e andare a fare un giro sulla cargo bike di famiglia.



Una soluzione incentrata sull'indipendenza, la stabilità e la partecipazione

Durante la conversazione con Ditte, è emerso che l'obiettivo della famiglia è sempre quello di contribuire alla qualità della vita di Andreas e di favorirne il più possibile lo sviluppo, l'indipendenza e il coinvolgimento. Gli ausili sono parte integrante della loro vita quotidiana e il prossimo passo è aiutare Andreas ad imparare ad andare in bagno e a fare la doccia. Pertanto, Flamingo Curo è un'ottima scelta.

All'inizio Andreas era un po' titubante riguardo al nuovo sistema di seduta. Ditte ha parlato con Andreas del Flamingo Curo e delle attività che avrebbe iniziato a praticare. Una volta montato il tavolino Andreas poteva guardare il suo programma preferito sull'iPad e sembrava più a suo agio. Inoltre, regolando l'inclinazione e il basculamento, Ditte è stata in grado di rassicurare Andreas che ha iniziato a sentire un senso di sicurezza. Una volta pronto, Andreas ha iniziato l'addestramento all'uso del vasino.

Grazie al suo buon controllo posturale, alla flessibilità delle pelotte toracali swing-away per Andreas è possibile sedersi sia con che senza supporto posturale. Imparare nuove attività può essere faticoso e Andreas ha iniziato a mostrare una leggera riduzione della stabilità del tronco sul lato sinistro. In questo caso, le pelotte toracali swing-away forniscono il sostegno necessario, consentendogli di concentrarsi solo sull'attività e non sul mantenimento del controllo posturale.

Guarda Andreas e sua
mamma durante l'uso del
vasetto



Caratteristiche principali

Flamingo Curo è un sistema di seduta per l'igiene e il bagno progettata per rispondere ad ogni necessità. La possibilità di utilizzare diverse basi o altre opzioni di montaggio, insieme alla vasta gamma di accessori, la rende la scelta perfetta per il tuo bambino.

Poggiatesta

È disponibile un'ampia gamma di poggiatesta, inclusa una nuova versione con imbottitura curva per fornire supporto in diverse situazioni.

Pelotte fisse o swing-away

Puoi scegliere pelotte toracali swing-away o fisse in base al controllo del tronco del bambino e alle sue capacità. Le pelotte swing-away facilitano i trasferimenti.

Braccioli

Aggiungono un supporto posturale per il bambino. Grazie allo sgancio rapido possono essere rimossi facilmente per agevolare i trasferimenti laterali.

Contenimento bacino

Forniscono supporto posturale aiutando a mantenere la posizione dell'anca e della parte anteriore della gamba.

Basi

Flamingo Curo può essere montato su diverse basi per renderlo facilmente adattabile nelle attività igieniche.

Paraspruzzi


Con doppia funzione: fornisce supporto e aiuta a posizionare correttamente le gambe.

Poggiagambe

Sostiene la parte inferiore delle gambe e previene lo scivolamento dei piedi quando il sistema di seduta è basculato.

Pedana

Regolabile in altezza, aiuta a mantenere la una posizione adeguata, confortevole e sicura per le funzioni igieniche. Ribaltabile e facile da rimuovere grazie allo sgancio rapido, facilita il trasferimento.

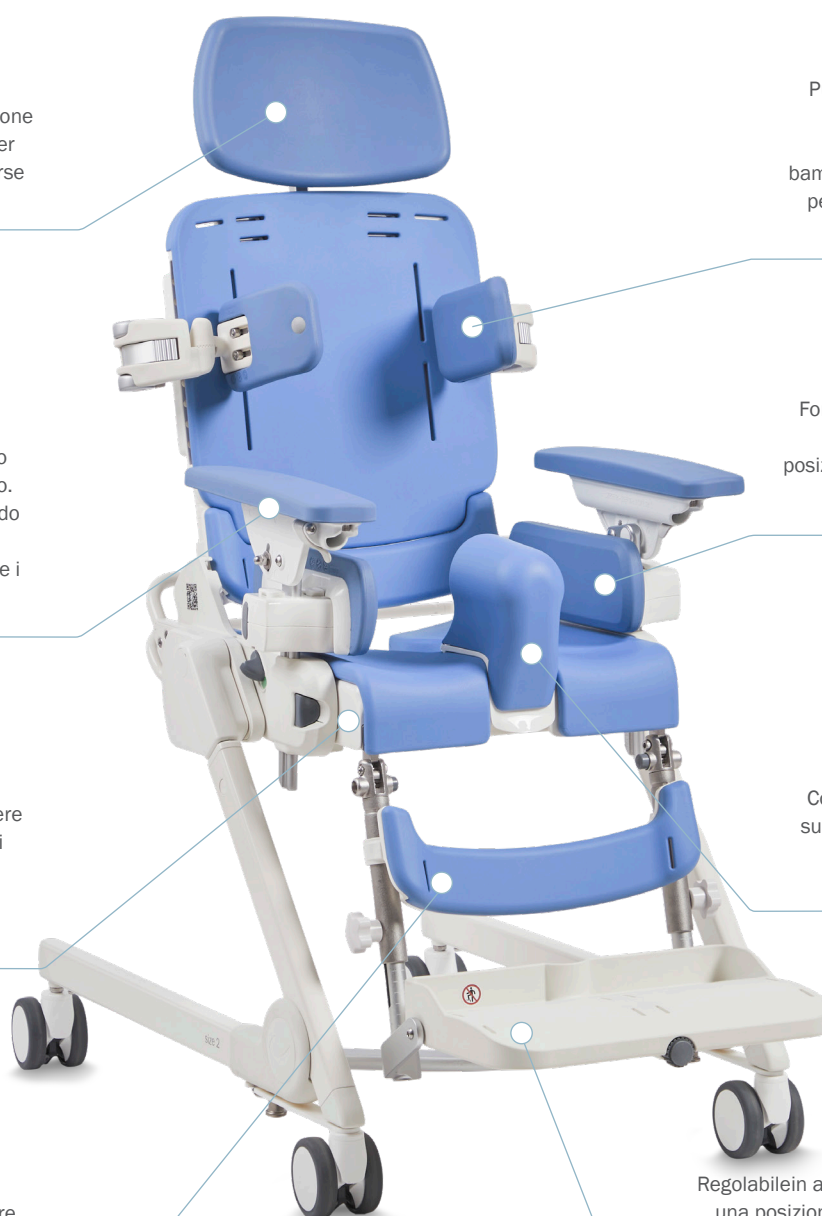

Scopri di più su
Flamingo Curo





Misure

Flamingo Curo		Misura 1	Misura 2	Misura 3
	Reclinazione schienale	$- (20^{\circ}) - (30^{\circ})$	$- (20^{\circ}) - (30^{\circ})$	$- (20^{\circ}) - (30^{\circ})$
	Altezza schienale	37,5 - 44,5 cm	40,5 - 48,5 cm	45 - 55 cm
	Altezza schienale tra pelotte laterali	14 - 24 cm	17,5 - 27,5 cm	22 - 32 cm
	Larghezza schienale	30 cm	33,5 cm	39 cm
	Pofondità seduta	23,5 - 29,5 cm	29,5 - 35,5 cm	33,5 - 41,5 cm
	Larghezza anteriore seduta	26,5 cm	30 cm	35,5 cm
	Lrghezzaseduta con supporti cont. bacino	18,5 - 26,5 cm	22 - 30 cm	27,5 - 35,5 cm
	Distanza poplite tallone	25 - 28,5 cm	26 - 34,5 cm	30 - 40 cm
	Portata massima	35 kg	55 kg	70 kg

Flamingo Curo base Compact		Misura 1	Misura 2	Misura 3
	Altezza da terra	48 - 58 cm	48 - 58 cm	48 - 58 cm
	Angolo di inclinazione seduta	$- (10^{\circ}) - (30^{\circ})$	$- (10^{\circ}) - (30^{\circ})$	$- (10^{\circ}) - (30^{\circ})$

Flamingo Curo base High-low		Size 1	Size 2	Size 3
	Altezza da terra	53 - 74 cm	53 - 74 cm	53 - 74 cm
	Angolo di inclinazione seduta	$- (5^{\circ}) - (20^{\circ})$	$- (5^{\circ}) - (20^{\circ})$	$- (5^{\circ}) - (20^{\circ})$

Accessori



Flamingo base Compact

882011, 882012, 882013
882021, 882022, 882023



Flamingo base High-low

882031, 882032, 882033
882041, 882042, 882043



Base Potty

882050



Poggiatesta

Guarda gli accessori online



Imbottitura schienale
882075, 882076, 882077



**Suporti laterali schienale
con imbottitura**
882081, 882082, 882083



Imbottitura seduta
882071, 882072, 882073



Pelotte toracali fisse
882090, 882091, 882092



Pelotte tricali Swing-away
882095, 882096, 882097




Braccioli
882113, 882114



Contenimeni laterali
882111, 882112



Copertura foro seduta
882121, 882122, 882123

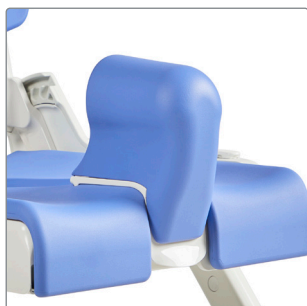

Paraspruzzi
882145, 882147



Supporto polpacci
882135, 882136, 882137



**Pedana con sgancio
rapido**
882151, 882152, 882153



Tavolino
882141, 882142

Per altri accessori visita il nostro sito



Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti,

ETAC SRL

+39 051 2819228
italia.ordini@etac.com
www.etac-it.com

etac®
Creating Possibilities