

etac®

Creating Possibilities



R82®

R82 Heron

Sistema di seduta da bagno dal design semplice e accattivante



Heron

Heron è un sistema di seduta per le funzioni igieniche. Con il suo design semplice e la sua modularità, è in grado di svolgere numerose funzioni, soddisfacendo le esigenze sia dell'utente che del caregiver.

Heron è un sistema di seduta ergonomico, in grado di rispondere alle diverse esigenze di posizionamento. La seduta può essere basculata e lo schienale reclinato. Il punto di rotazione tra schienale e seduta coincide con l'articolazione del bacino, in modo da garantire il corretto posizionamento.



Così è tutto più facile

Heron è disponibile in misura unica. Lo schienale stretto garantisce libertà di movimento ed è predisposto per il montaggio di pelotte fisse o swing-away o di supporti laterali per le spalle. Le imbottiture per schienale e seduta forniscono maggior comfort e sostegno.

Può essere corredato di braccioli swing-away, utili per fornire sostegno durante le funzioni igieniche e facili da rimuovere per semplificare i trasferimenti.

Heron è disponibile sia in versione elettrica che manuale. Entrambe le versioni consentono la reclinazione dello schienale, il basculamento e la regolazione in altezza della seduta. La versione elettrica agevola il caregiver e l'utente nella gestione di queste funzioni.



[1] Heron con pistone idraulico. [2] Maniglia di regolazione per il basculamento. [3] Maniglia di regolazione per la reclinazione. [4] Pedale per la regolazione pneumatica dell'altezza della seduta. [5] Heron con pistone idraulico. [6]+[7] Braccioli swing-away.

Heron con base elettrica



[1] Heron elettrico, caricabatterie e cavo (EU). [2] Maniglia di regolazione per la reclinazione. [3] Telecomando per la regolazione dell'altezza e del basculamento della seduta. [4] Heron elettrico con braccioli swing-away. [5] Cavi elettrici numerati. [6] Heron, versione elettrica. [7] Motore elettrico fissato al telaio.

Posizionamento ottimale

Heron è adatto a teenager e giovani adulti. Lo schienale è regolabile in altezza ma, grazie agli accessori disponibili, è possibile regolare anche la profondità e la larghezza della seduta.




L'altezza dello schienale può essere regolata in modo da adattarsi alle diverse esigenze. Per farlo, è necessario svitare 4 viti, posizionare lo schienale e riavvitarle (range di regolazione: 7 cm).

La larghezza della seduta è di 55 cm. L'utilizzo dei supporti bacino permette di ridurre la larghezza della seduta da 35 a 49 cm e allo stesso tempo di fornire supporto al bacino e alle cosce.

La profondità della seduta è di 45 cm, ma può essere ridotta di 5 cm, grazie all'utilizzo del kit di riduzione della profondità della seduta. Il kit è costituito da due blocchi che, posizionati dietro lo schienale, lo spingono in avanti, riducendo la profondità della seduta.



Durante la progettazione di Heron è stato utilizzato un mapping pressorio per ridurre i punti di pressione e aumentare il comfort. L'utilizzo delle imbottiture garantisce maggior comodità.

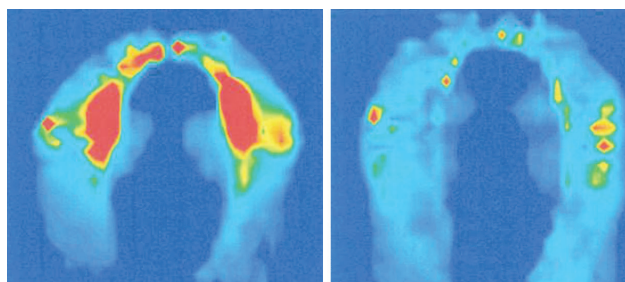

Regolazioni semplici e veloci

Regolazione altezza seduta



Heron con pistone idraulico: l'altezza minima della seduta da terra è di 51 cm; la massima è di 78 cm.
Heron elettrico: l'altezza minima della seduta da terra è di 56 cm; la massima è di 78 cm.

Basculamento



La seduta può essere basculata di 30° (da -5° a +25°).

Reclinazione schienale



Lo schienale può essere reclinato di 30° (da 90° a 120°).



Condizioni di lavoro ottimali

Uno dei punti di forza di Heron è la regolazione, idraulica o elettrica, dell'altezza e del basculamento della seduta, che consente al caregiver di svolgere le operazioni di igiene in una corretta posizione.

Spesso, a domicilio, risulta complesso installare un binario a soffitto o utilizzare un sollevatore mobile all'interno di spazi ristretti come quelli del bagno. Con Heron, è sufficiente posizionare l'utente sul sistema di seduta, per poi spostarlo ovunque sia necessario. La possibilità di regolare l'altezza della seduta permette a Heron di trovare la posizione più ergonomica in qualsiasi attività, per esempio quando si usa il WC, quando si usa il lavandino o quando si fa la doccia.

Grazie alla sua versatilità, Heron è in grado di soddisfare qualsiasi necessità durante lo svolgimento delle attività igieniche, riducendo così il numero di trasferimenti necessari.

Per facilitare ulteriormente il trasferimento dell'utente su Heron, consigliamo di utilizzare i sollevatori Molift.



Leggi di più su Etac-Molift,
sollevatori e imbragature



Lavaggio e pulizia

Il motore elettrico, la batteria e il telecomando sono impermeabili, e possono essere utilizzati in qualsiasi attività di igiene. Prima di sottoporre Heron alla sanificazione in autoclavi per dispositivi medici, è necessario rimuovere tutti gli accessori, i cavi, il motore elettrico, la batteria e il telecomando.



Heron può essere
igienizzato a 85 °C in
autoclavi progettate per
la sanificazione dei
dispositivi medici*



* I cavi, il motore elettrico, la batteria e il telecomando devono essere rimossi prima della sanificazione.

Accessori

E' disponibile una vasta gamma di accessori che permette a Heron di soddisfare le esigenze di utente e caregiver, garantendo il corretto posizionamento e il giusto comfort.

Gli accessori come le pelotte toracali, i supporti laterali per spalle e il poggiatesta forniscono supporto e sostegno alla parte superiore del tronco.

Tutti gli accessori sono semplici da montare e facili da regolare.

Aggiungi a Heron tutti gli accessori necessari per creare la configurazione che più si adatta alle tue esigenze!



Elenco accessori:

- Poggiatesta
- Pelotte toracali
- Supporti laterali per schienale
- Supporti bacino
- Braccioli
- Tavolino
- Paraspruzzi
- Padella
- Kit riduzione profondità seduta (-5 cm)
- Pedana sdoppiata
- Supporto polpacci
- Fermatalloni imbottitura per supporto pedana
- Cinture e bretellaggi



Poggiatesta

Consulta la sezione "Accessori" sul sito



Pelotte toracali, swing-away

Consulta la sezione "Accessori" sul sito



Pelotte toracali fisse

880508-09



Supporti laterali per schienale con imbottiture

880507-04/880508-01



Supporti bacino

880508-02



Braccioli/Tavolino

880508-03/880508-04



Paraspruzzi

880508-05




Padella

880130

Kit riduzione extra supporti bacino

880508-02LB

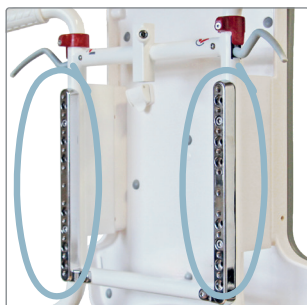

Kit riduzione profondità seduta (-5 cm)

880508-06



Pedana sdoppiata, angolo 90°, con supporto polpacci



Pedana sdoppiata, lunga o corta

880506-03/880506-01




Pedana sdoppiata, angolo 70°

880506-02



Fermatalloni

880509-02

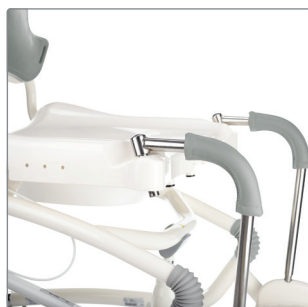

Imbottitura per supporto pedana


880506-12

Per altri accessori - visita il nostro sito


Guida alle misure

Poche semplici misure per capire se Heron è giusto per te


Confronta queste semplici misure per capire se Heron è il sistema di seduta adatto a te. Per prendere le misure in modo appropriato, assicurati che l'utente sia sdraiato su una superficie piana e stabile, con le articolazioni di anca, ginocchio e caviglia flesse a 90°.

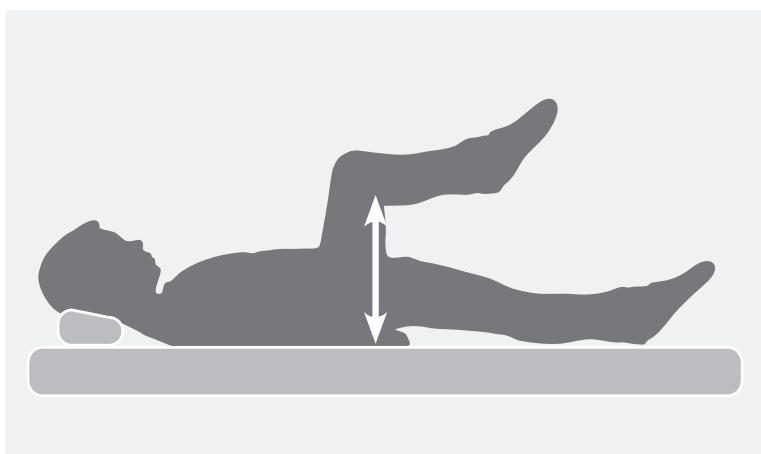

Profondità seduta

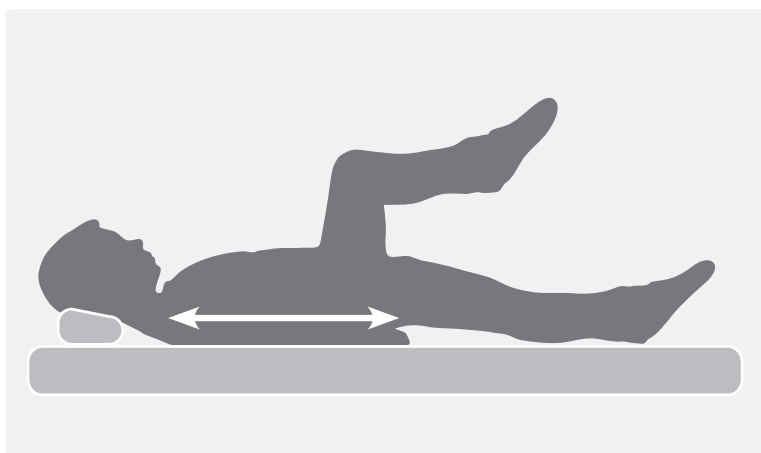


Altezza schienale

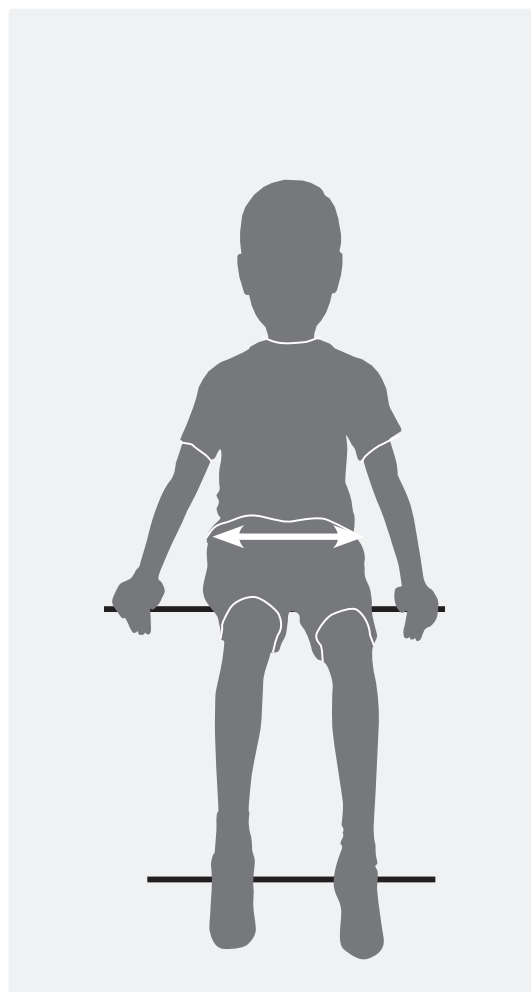

Larghezza bacino

Dimensioni

Heron è adatto a teenager e giovani adulti. Lo schienale è regolabile in altezza ed è possibile, grazie agli accessori disponibili, regolare la profondità e la larghezza della seduta.

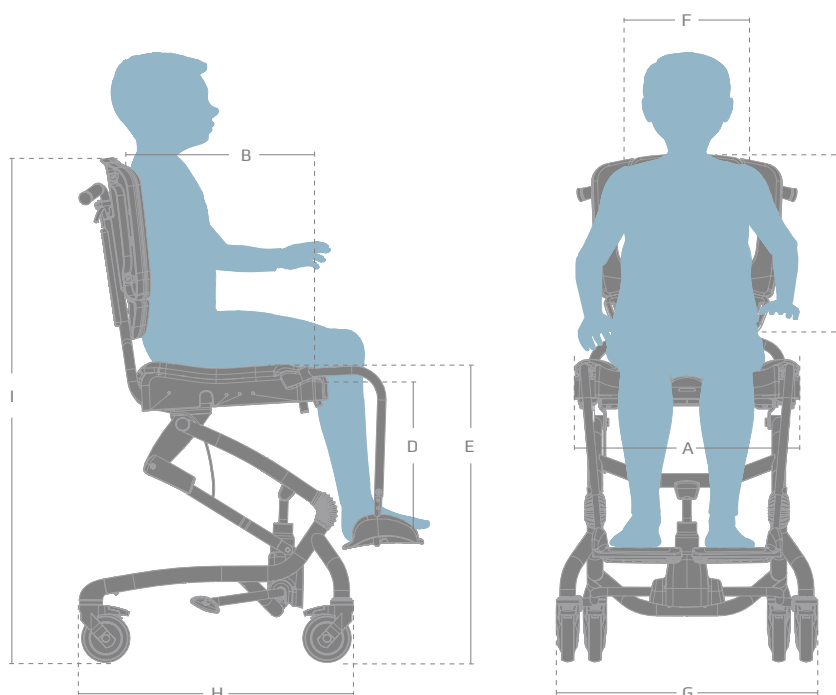

	Heron con pistone idraulico	Heron con base elettrica
Larghezza seduta (A)	550 mm	550 mm
Larghezza seduta tra supporti bacino	350 - 490 mm	350 - 490 mm
Profondità seduta (B)	450 mm	450 mm
Profondità seduta con kit di riduzione	400 mm	400 mm
Altezza schienale (C)	555 - 625 mm	555 - 625 mm
Distanza poplite-tallone (D)	400 - 560 mm	400 - 560 mm
Altezza seduta da terra (E)	510 - 780 mm	560 - 780 mm
Larghezza schienale, spalle (F)	290 mm	290 mm
Larghezza massima telaio (G)	670 mm	670 mm
Lunghezza massima telaio (H)	710 mm	710 mm
Altezza totale (I)	1080 - 1350 mm	1130 - 1350 mm
Basculamento	-5° -> 25°	-5° -> 25°
Reclinazione schienale	90° -> 120°	90° -> 120°
Peso	28 kg	31 kg
Portata massima	100 kg	130 kg



"Hayla ha battuto il record del mondo"



Hayla Silva Søndergaard

Queste sono state le parole di Herman Jensen, un allevatore di visoni di Støvring, orgoglioso di aver appena visto Hayla Silva Søndergaard, sua figlia di 21 anni, battere il record degli 800 metri di ben due secondi.

"Purtroppo, il record non è ufficiale, poiché oggi il sistema di cronometraggio elettronico non era attivo", spiega. Ciò nonostante Hayla è felicissima, e appena si è ripresa, dopo un paio di minuti, ha insistito che Herman chiamasse immediatamente sua madre per comunicarle la bella notizia.

A causa di un fenomeno di ipossia verificatosi alla sua nascita, Hayla Silva Søndergaard soffre di spasticità, con spasmi costanti in tutto il corpo e capacità di linguaggio limitata. Per comunicare Hayla utilizza un dispositivo che può controllare usando gli occhi.

Attraverso questo dispositivo, Hayla riesce ad interagire con gli altri ed è solo un esempio di come la sua qualità di vita sia migliorata in modo significativo da quando ha iniziato RaceRunning.

Quando ha iniziato a praticare RaceRunning, Hayla era seduta sulla sua carrozzina con una cintura intorno alla vita che non le lasciava abbastanza libertà per controllare il dispositivo vocale.

"Il RaceRunning mi ha permesso di diminuire gli spasmi e di migliorare il controllo del mio corpo", spiega.

Hayla si allena tre volte a settimana, sia sulla pista di atletica che sulle strade vicino alla fattoria di Støvring, dove corre soprattutto durante i fine settimana quando va a trovare suo padre.

Abbiamo incontrato Hayla all'Odder Højskole, in una mattina come tante. Questa giovane ragazza si stava preparando per un altro giorno di attività, iniziando con le lezioni in classe per poi proseguire con le attività sportive negli spazi della scuola.



Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

ETAC SRL

+39 051 2819228
italia.ordini@etac.com
www.etac-it.com

etac[®]
Creating Possibilities