

etac®

Creating Possibilities



R82®

x:panda shape

Progettato per soddisfare le esigenze di ogni bambino

Progettato per soddisfare ogni esigenza

Il sistema di seduta x:panda shape permette ad ogni bambino di mantenere la migliore posizione seduta per vivere a pieno ogni momento della giornata. E' progettato per adattarsi alla crescita, la seduta può essere regolata in larghezza e profondità e lo schienale in larghezza e altezza. Quando il bambino è seduto correttamente migliora la sua capacità di interagire in maniera autonoma con l'ambiente circostante.



Schienale dinamico

x:panda shape ha un nuovo schienale dinamico, unico nel suo genere, che permette di modificare la resistenza per adattarla alle necessità quotidiane del bambino o alla sua crescita.


E' stato progettato concentrando l'attenzione sullo snodo tra schienale e seduta con l'obiettivo di creare un sistema di seduta che si muovesse in armonia con il corpo. Lo schienale dinamico permette al bambino di muoversi e di tornare alla posizione di iniziale, regolando il giusto grado di resistenza.



Costruito per crescere

La modularità di tutto il sistema di seduta permette di adattare su ogni bambino il supporto per le gambe, lo schienale, la larghezza e la profondità di seduta per permettergli di crescere con il bambino.

x:panda shape é un sistema modulare e offre un sostegno su misura per soddisfare ogni esigenza. Può adattarsi alle situazioni più complesse e può essere utilizzato anche come una seduta semplice, riesce quindi ad adattarsi ad ogni necessità.

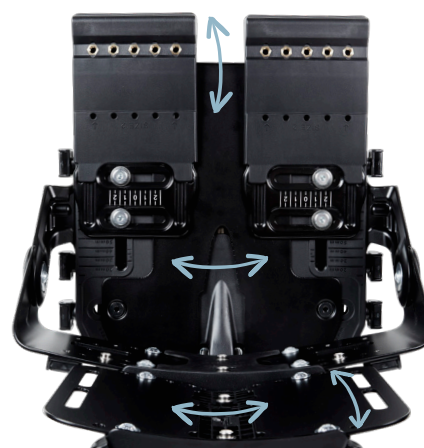

Sistema di seduta Infant, Simple e Advanced


La forma del piano della seduta è il punto di partenza per costruire il tuo sistema di seduta Infant, Simple o Advanced. E' progettato per cambiare forma e crescere con il bambino.



Forma anatomica della seduta

I cunei sul piano della seduta creano un avvallamento ischiatico, migliora così la posizione e aumentano i punti di appoggio sulle tuberosità ischiatiche. I cunei aumentano la superficie di contatto tra l'utente e il cuscino, migliorando la stabilità di bacino e garantendo

un buon posizionamento si evita che il bacino scivoli in avanti. I cunei sono regolabili in lunghezza per adattarsi alla crescita del bambino. Sono disponibili solo per la seduta advanced.

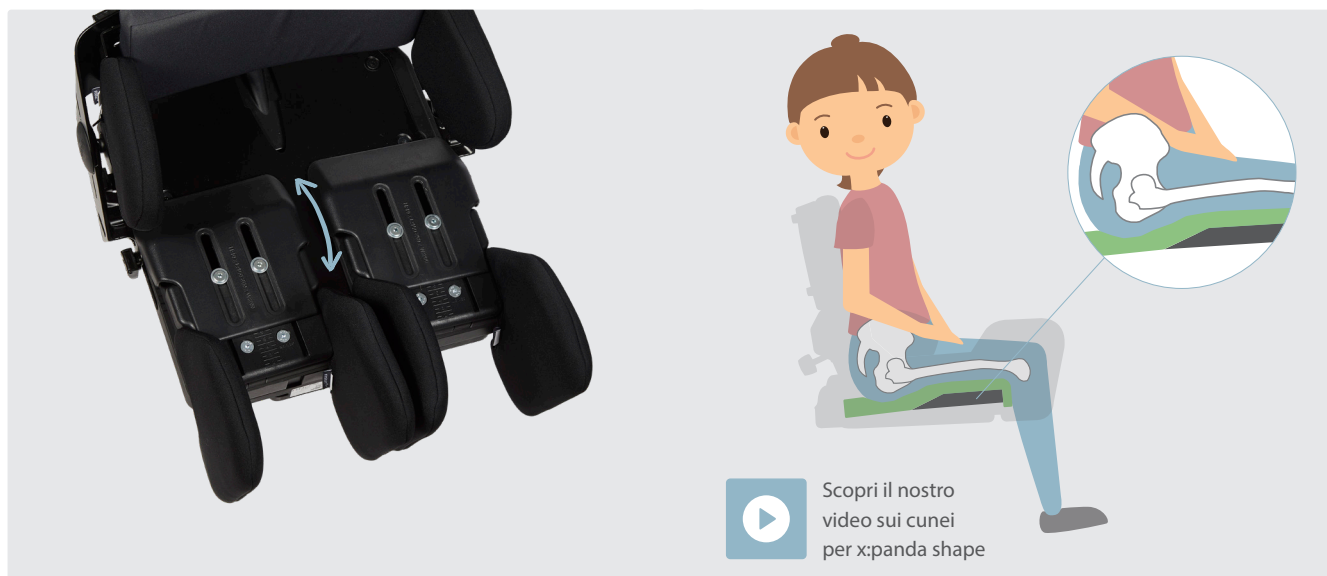

Intervento precoce

Il sistema di seduta Infant offre l'opportunità di intervenire precocemente per facilitare la partecipazione del bambino attraverso l'interazione con l'ambiente circostante, i genitori e i care-givers.

Questo sistema di seduta è stato progettato per garantire un supporto sicuro e avvolgente anche con i bambini più piccoli attraverso numerosi accessori.

x:panda shape può essere utilizzato per supportare il bambino nello sviluppo delle proprie abilità cognitive e motorie.




Scopri di più
sull'intervento precoce




Strati di comfort

I cuscini sono composti da due strati di schiuma, uno all'interno del cuscino e uno aggiuntivo integrato all'interno della cover. Questo permette di migliorare la distribuzione dei punti di pressione e migliorare il comfort per l'utente.

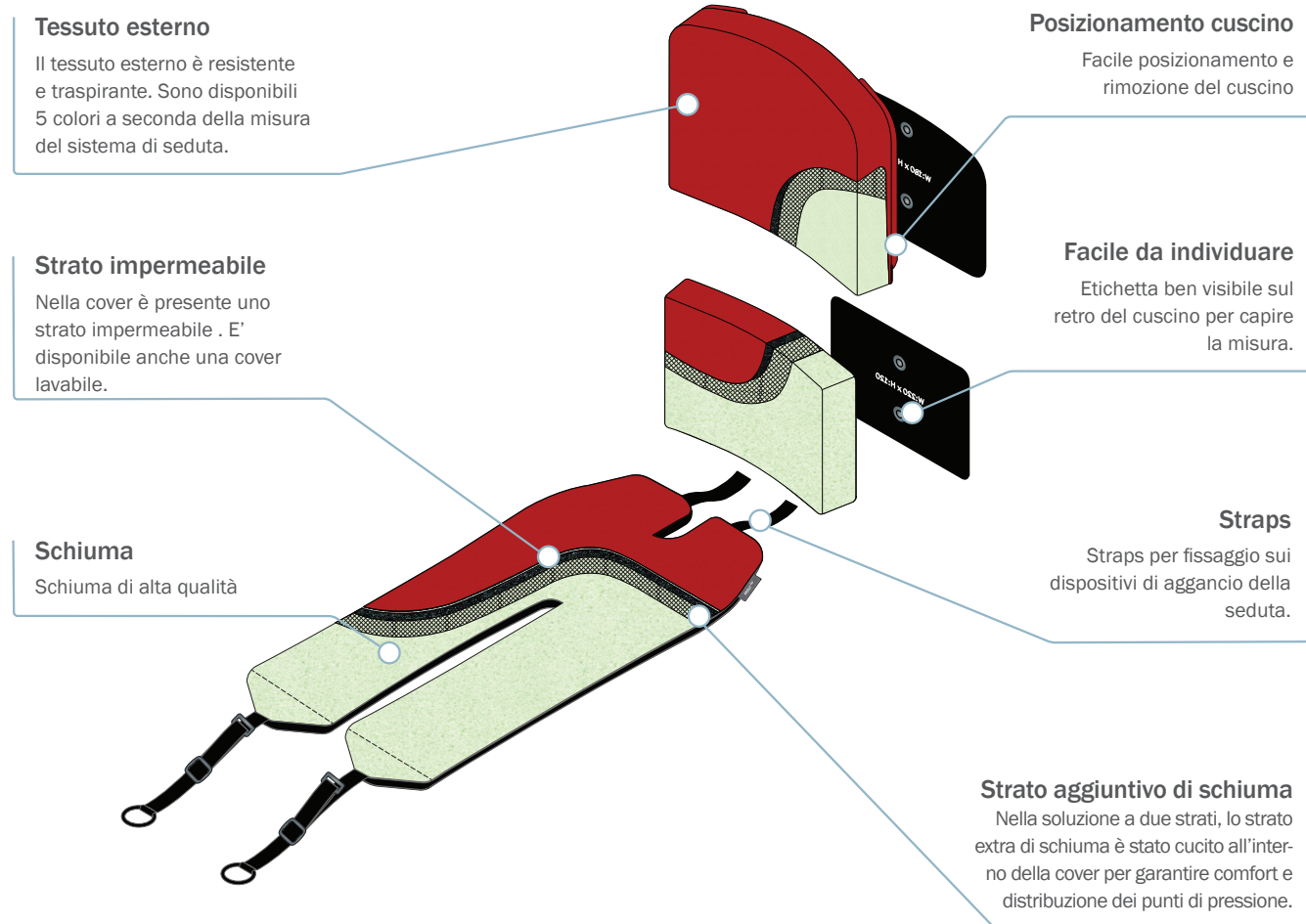


Colori imbottiture schienale e seduta

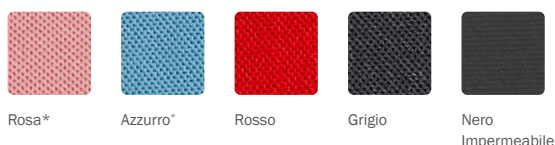

*Disponibile solo per sistema di seduta infant

Colori imbottiture accessori

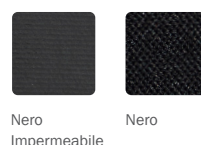

Caratteristiche principali

Una buona postura seduta facilita l'abilità del bambino di interagire con l'ambiente circostante permettendogli di muovere gli arti superiori e la testa. Per questo è stato progettato con diverse caratteristiche e funzionalità per favorire la migliore posizione seduta che varia a seconda delle singole necessità di ogni bimbo.

Poggiatesta

Un'ampia selezione di poggiatesta compreso il nuovo poggiatesta 3D con comoda imbottitura curva.

Pelotte fisse o swing-away-

Puoi scegliere pelotte toracali swing away o fisse in base al controllo del tronco del bambino e alla sua capacità di muovere le braccia.

Imbottiture e covers

Imbottiture confortevoli con fodere resistenti.

Cunei regolabili

I cunei aumentano la superficie di contatto dell'utente sul cuscino garantendo una stabilità di bacino e un controllo ottimale della posizione seduta.

Basi

L'x:panda shape è compatibile con basi da esterno ed interno.

Pettorine e cinture

Le varie asole di fissaggio sullo schienale e sulla seduta permettono di montare pettorine e cinture.

Braccioli

Il sistema di estrazione rapida consente di rimuovere e inserire il bracciolo all'occorrenza. I riferimenti visivi aiutano a riposizionare il bracciolo alla stessa altezza di quando è stato rimosso. Possono essere aggiunte covers ai braccioli.

Contenimenti bacino

Creano una superficie di supporto che previene movimenti laterali sulla seduta e riducono la tendenza del bacino a disallinearsi. Possono essere regolati mentre l'utente è seduto.

Adduttori e abduttori di ginocchio

Forniscono stabilità agli arti inferiori e limitano l'adduzione sostenendo il segmento inferiore della coscia, il ginocchio interno e il segmento superiore della gamba.

Pedane

Sono disponibili diverse tipologie di pedane per essere adattate all'utilizzo su basi da interno ed esterno.



Vai a vedere i video
Xpanda shape nella
nostra playlist




Riferimenti visivi

Il sistema di seduta x:panda shape può soddisfare le esigenze di postura più complesse, garantendo al bambino una posizione di seduta sicura e ottimale. Per rendere più facile ed immediato il riconoscimento di alcune regolazioni da parte dei genitori, caregivers e specialisti x:panda shape è stato progettato con riferimenti visivi interni ed esterni al sistema di seduta.




Superficie esterna schienale

Questi riferimenti visivi aiutano a capire dove è possibile regolare l'altezza del poggiatesta, la reclinazione e l'altezza dello schienale.

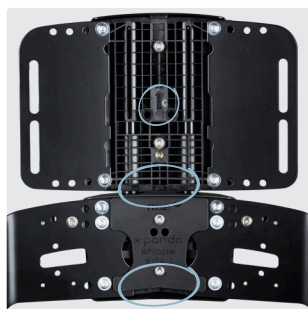

Superficie interna schienale

Questi riferimenti visivi aiutano a capire la misura dello schienale, da qui puoi regolare la parte bassa e alta dello schienale.

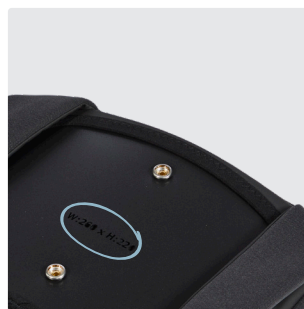

Dimensioni del cuscino

I riferimenti visivi sul retro del cuscino aiutano a capire la misura del cuscino, da qui vedi anche la misura dello schienale e del sistema di seduta.



Sistema di bloccaggio per trasporto

E' facile capire quando il sistema dinamico è bloccato oppure no. Il meccanismo di blocco del sistema dinamico è obbligatorio su un prodotto omologato per il trasporto.




Superficie seduta

Facile identificazione della profondità e larghezza di seduta.



Piani seduta advanced

Riferimenti visivi sul piano seduta Advance permettono di individuare la regolazione in profondità dei cunei, la posizione degli adduttori e abduttori.

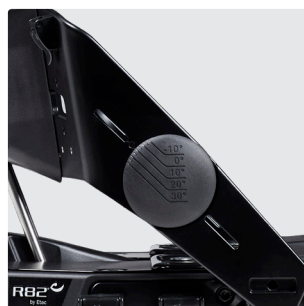

Reclinazione schienale

E' facile capire l'angolo di reclinazione dello schienale.



Resistenza dello schienale dinamico

E' possibile aumentare o diminuire la resistenza dello schienale dinamico.

Pulizia e manutenzione

La pulizia e la manutenzione di x:panda shape è semplice e veloce permette ai genitori e ai caregivers di risparmiare tempo da dedicare ad altre attività. Le fodere possono essere facilmente rimosse per lavarle in lavatrice.



Scopri il nostro manuale di pulizia per l'x:panda shape

Misure

		Infant	1	2	3
	Larghezza seduta	220 mm	220/260/300 mm	280/320/360/400 mm	380/420/460/500 mm
	Profondità seduta	120-160 mm	160-320 mm	240-420 mm	350-550 mm
	Altezza schienale	270-360 mm	280-370/320-420/ 360-470mm	340-440/380-490/ 430-560 mm	420-530/470-600/ 540-690 mm
	Portata massima	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Portata massima omologata per il trasporto	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Reclinazione schienale	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°
	Larghezza schienale, segmento superiore	190 mm	180/220/260 /300/340 mm	180/220/260 /300/340/380 mm	220/260/300 /340/380/420 mm
	Larghezza totale	240 mm	300/400/500 mm	350/460/560/660 mm	600/700/740/780 mm
	Peso totale	6 kg	6,5 kg	11 kg	14 kg

è misurato con entrambi gli arti inferiori in massima abduzione. Misura 1 e 3 sono basate sul sistema di seduta Advanced. Ulteriori dati dimensionali sono disponibili sul nostro sito.

Ulteriori dati dimensionali sono disponibili sul nostro sito

Una gamma di stabili basi per rispondere ad ogni esigenza

Nel sistema di seduta x:panda shape puoi creare una base stabile attraverso il bacino, le cosce e i piedi, questo ti permette di garantire maggiore equilibrio al tronco, alle spalle ed al capo. Potrai incrementare i movimenti del capo, degli arti superiori e delle mani. Il sistema si adatta

ad esigenze complesse e offre al bambino un posizione seduta sicura e ottimale. Inoltre le regolazioni sono intuitive e facili da effettuare. A seconda della misura può essere montato su basi come la Multi Frame, Combi Frame o altre come mostrano le immagini.




High-low:xo da interno e esterno



Base Stingray




Combi Frame:x, Multi Frame:x e Multi Frame

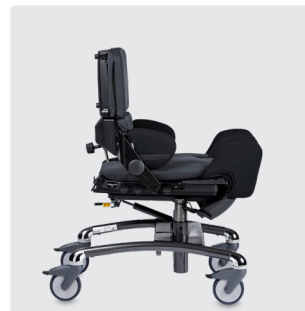

Strong Base

Accessori

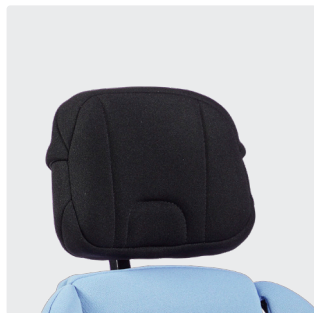

Poggiatesta
Vedi sezione accessori




Pelotte per sistema seduta infant (incluse imbottiture)
905028-xx



Maniglione di spinta da montare sullo schienale
90507x



Cappottina parasole
87401x0
Ricordati di ordinare le staffe di montaggio

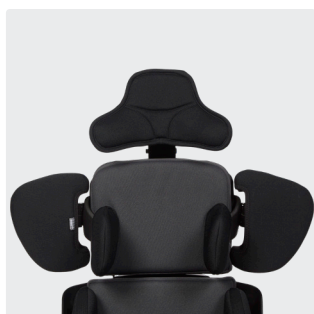


Contenimenti regolabili o fissi per braccio
9050xx-xx




Pelotte fisse o swing away
Vedi sezione accessori



Supporto per telecomando montato sullo schienale
905030/905030-x

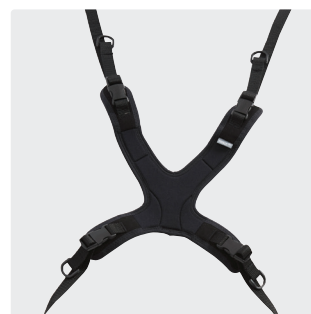


Pettorine e cinture
Vedi sezione accessori

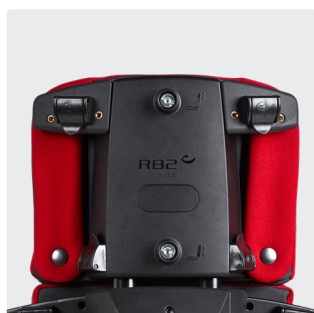

Dispositivi di aggancio per bretellaggio, standard
905068



Dispositivi di aggancio per bretellaggio, alti
8910260
Richiede 905068

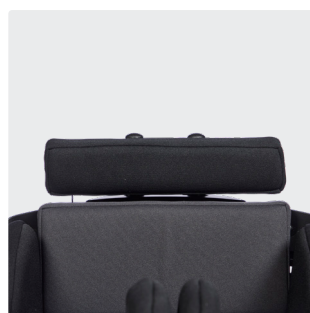


Therapy kit con imbottitura e cover
905059/90301x-xx



Schienale dinamico regolabile in inclinazione
90515x



Tavolino morbido per sistema seduta infant
905066-70

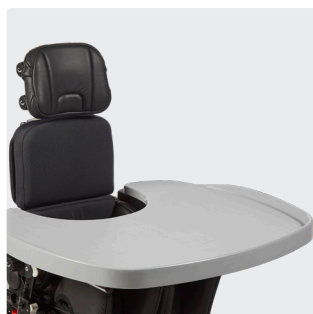


Tavolino
Vedi sezione accessori



Barra di appoggio anteriore per tavolino
8910750



Barra gioco per tavolino
8910740

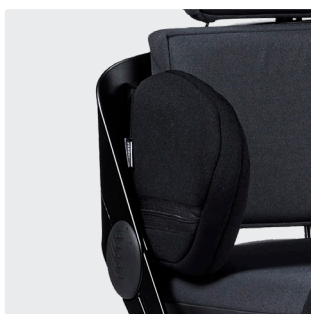

Supporti bacino montati sullo schienale
90504x-xx




Supporti bacino
90504x-xx



Adduttori e abduttori di ginocchio
9050xx-xx




Cuneo
9050xx-xx

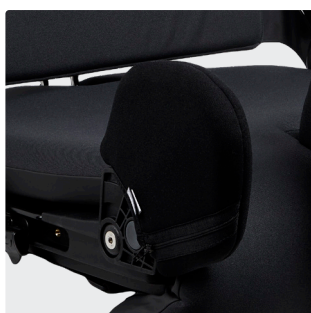

Abduttore di ginocchio ribaltabile
90501x-xx
Per misura 2 e 3 su sistema di seduta advanced



Cunei seduta
90505x

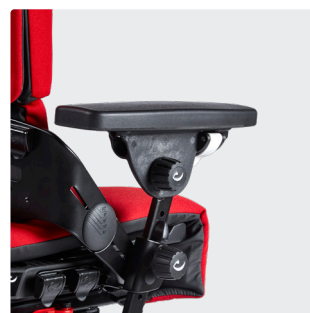

Braccioli e kit di regolazione quotidiana
891061x-xx/90501x-xx/8910615-11



Staffa di supporto per comunicare
905033-x

Per ulteriori accessori visita il nostro sito web



Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti,
visita il nostro sito web

ETAC SRL



+39 051 2819228



italia.ordini@etac.com



www.etac-it.com

 **etac**®
Creating Possibilities