


Etac manuelle kørestole

Rekonditioneringsanvisning



75281R 2023-12-22

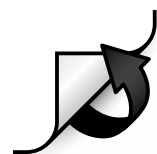

Genanvendelse

Etacs kørestole kan genanvendes i hele deres levetid.

For aktuel levetid henvises til manualen til den pågældende kørestol på www.etac.com.

Vask

- Rengør chassiset med et ikke-slibende rengøringsmiddel med en pH-værdi på 5-9 eller med 70 % desinfektionssprit, Skyl og tør af.
- Rengør hjulene for hår og snavs m.m.
- Kørestolens chassis og fastmonterede betræk samt tilbehør uden tekstilbetræk kan maskinvaskes eller vaskes i et vaskekabinet ved 65 °C i op til 10 minutter. Aftagelige tekstiler, f.eks. rygovertæk, samt tilbehør med tekstilbetræk vaskes iht. særskilt anvisning.
- Ved vask i et vaskekabinet:
 - Krydsfoldede kørestole foldes sammen og skal stå på alle fire hjul.
 - Fastrammestole skal stå på alle fire hjul med rygstellet slået op.
 - Benstøtten afmonteres (kan dog vaskes sammen med stolen).
 - Batteripakke og aktuator (Etac Prio Eltilt) afmonteres.
- Skyl ikke med en højtryksrenser direkte på lejer (fig. 1).
- Skyl ikke med en højtryksrenser på betræk fra nært hold.
- Skyl ikke med en højtryksrenser på elektriske komponenter (Etac Prio Eltilt).
- Elektriske komponenter (Etac Prio Eltilt) kan rengøres med børste og vand. Maks. temp. 20 °C. De indvendige kabler skal være tilsluttet. Træk aktuatoren tilbage til den inderste position for at undgå, at stempelstangen affedtes. Stærke opløsningsmidler, basiske eller alkaliske væsker må ikke anvendes.
- Fjern påklistede mærkater og sedler. Vær opmærksom på, at Etacs mærkninger ikke må fjernes.
- Tekstiler vaskes iht. særskilt mærkning. Skum vaskes iht. mærkningen på skummet. Hvis der ikke er nogen mærkning, skal det ikke vaskes, men udskiftes ved behov.

Tørring

- Kørestolens chassis og fastmonterede betræk samt tilbehør uden tekstilbetræk kan tørres i et vaskekabinet ved:
 1. 70° C i op til 10 min.
 2. 80° C i op til 2 min.
 3. 85° C i op 30 sek.
- Tekstiler, som ikke må tørretumbles, kan tørres i tørreskab ved 50° i op til 10 min.
- Kørestolen skal stå på alle fire hjul i udklappet position under tørring (fig. 2). Etac Prio tippes bagover (fig. 3).

Kontrollér for ødelagte og slidte dele

Dele, som er skæve, har revner, rustskader eller deformationer skal udskiftes.

Dele, som er slidte og har nedsat funktion, bør udskiftes.

Mindre lakskader kan udbedres med reparationsmaling.

Etac anbefaler udelukkende brug af originaldele. Etacs originaldele er testet sammen med produktet med henblik på tilsigtet anvendelse og iht. de foreskrevne testmetoder.

Kontrollér zoner med høj belastning ekstra grundigt.

- Ryglænsbetræk (fig. 4).
- Krydsdel på kørestole med krydsramme (fig. 5).

Kontrol og justering af funktioner

Kontrollér og juster, at nedenstående fungerer i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.

Alle justeringer og indstillinger skal foretages iht. kørestolens manual. Her findes bl.a. et fejlsøgningsskema, som kan være en hjælp ved identifikation af eventuelle fejl og afhjælpning. Den seneste dokumentation findes på www.etac.com.

Kontrollér:

- at sammenklapning og tiltfunktioner såsom krydssammenklapning eller sædevinkel/rygvinkel fungerer ubesværet. På Etac Prio kontrolleres gas/låse-cylinderen for ryg- og sædevinkel. Låsning og udløsningsfunktion skal fungere, kan indstilles vha. justeringsniplen.
- benstøtter: Eventuel låsefunktion skal låse korrekt. Kontrollér også benstøtternes sammenklappelighed og svingbarhed.
- drivhjul: Lufttryk i dæk, og at Quick release-låsen låser korrekt.
- styrehjul: Skal dreje uhindret rundt, uden at lejerne hakker (fig. 6).
- forgaffel: Skal dreje uhindret rundt, uden at lejerne hakker (fig. 7).
- at kørehåndtagsbetrækket sidder fast (fig. 8).
- låsefunktionen i kørehåndtagenes ophæng, og at beslaget er intakt og uden revner (fig. 9).
- brugerbremse/hjælperbremse: Bremsefunktion og låsefunktion.
- tipsikring: Højde, låsefunktion, klapfunktion/drejefunktion, slid/skarpe kanter.
- at kørestolen kører lige. Hvis kørestolen trækker skævt, justeres højde og vinkel på styrehjulets beslag, og hjullejer og lufttryk kontrolleres. På Xact kan styrehjulets beslag ikke justeres. Hvis stolen trækker skævt, kontrolleres styrehjulets lejer samt lufttryk.
- at drivringe og egerbeskyttelse ikke har grater eller skarpe kanter.
- at skruer og møtrikker er strammet ordentligt. På kørestole med gas/låse-cylinder skal disses ophæng også kontrolleres.
- Sørg for, at brugermanual og alle Etacs etiketter medfølger ved ordinerings til ny bruger.
- Vær opmærksom på, at produktets levetid er begrænset (se manual). Dette er især vigtigt ved ordinerings til en bruger, som må forventes at skulle anvende produktet i længere tid.

Anvisning for bortskaffelse af udtjente kørestole

Etac anbefaler, at udtjente kørestole bortskaffes efter aftale med kommunen og/eller en lokal genvindingsvirksomhed. De kan stille egnede beholdere til rådighed med henblik på bortskaffelse af de materialer, som kørestolene indeholder. Ved fragmentering bør man fjerne brændbare materialer, f.eks. polstringer, inden man afleverer hele produktet til fragmenteringsanlægget.

