




User manual

Cross 5/Cross 5XL

etac[®]
Creating Possibilities

75195 - 2025-03-27 - Version 29

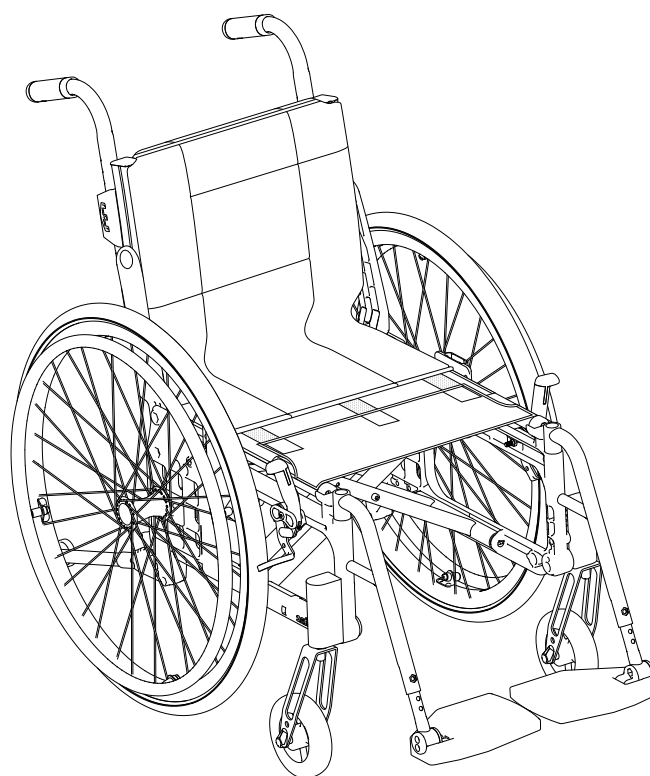

Etac Cross 5
Etac Cross 5XL

nl



www.etac.com

MD



Contents

1. Algemeen – inleiding	3	6. Instellingen rugleuning 3A	
2. Beschrijving	4	De hoek van de rugleuning afstellen	33
3. De mogelijkheden van de stoel	5-8	De hoogte van de rugleuning en de lumbaalhoek afstellen	34
4. Accessoires	8-11	De zitdiepte afstellen met behulp van de lumbaalhoek	35
5. Instellingen		De zittingverlenger monteren.....	35
Zithoogte voor	12	De hoogte van de rugleuning en de lumbaalhoek afstellen (twee excentrische assen).....	36
De zithoogte voor met de voorvorkhouder afstellen	12	De zitdiepte afstellen met behulp van de lumbaalhoek (twee excentrische assen).....	37
De zithoogte voor afstellen door de positie van het zwenkwiel te wijzigen.....	12	7. Instellingen rugleuning 2	38
De zithoogte voor afstellen door het zwenkwiel/de voorvork te wijzigen.....	13-14	8. Instellingen rugleuning 2B	39
Tabel voor zithoogte voor.....	13-14	9. Opnieuw afstellen	
De voorvork monteren	15	Rem, afstellen	40
De hoek van de voorvorkhouder instellen.....	15	Het remblok afstellen	41
Zithoogte achter	16	Beensteun, met traploos verstelbare hoek	41
De zithoogte achter afstellen door de positie of grootte van het achterwiel te wijzigen.....	16-17	Amputatiesteun	42
Tabel voor zithoogte achter.....	18	Antikiepvoorziening	42
Trommelrem	19	De wielvlucht wijzigen	43
Gebruikershandleiding	20-31	Het middelpunt afstellen.....	43
Symbolen en waarschuwingen	21	Grijphoepels	44
Transport in voertuigen	22	De afstand van de grijphoepel afstellen.....	44
Hantering	23-24	Achterwielen met snelontgrendelingsknop.....	44
Instellingen zitcomfort	25-26	10. Accessoires – afstellen, hantering	
Rijtechniek, manoeuvreren	27-30	Zitkussen en contourinleg	45
Onderhoud en schema voor het oplossen van problemen ..	31	Armsteun, afneembaar, in hoogte instelbaar	45
5. Instellingen (vervolg)		Armsteun, opklapbaar, in hoogte verstelbaar	46
Zithoek	32	Positioneringsband.....	46
Zitdiepte	32	Hoofdsteun.....	47
Zitcomfort.....	32	Attachment for chest harness	48
6. Instellingen rugleuning 3A		11. Technische gegevens	49-50
De hoek van de rugleuning afstellen	33	12. Service en onderhoud	
De hoogte van de rugleuning en de lumbaalhoek afstellen	34	Bekleding.....	51
De zitdiepte afstellen met behulp van de lumbaalhoek	35	Achterwiel/zwenkwiel, voorvorkhouder	51
De zittingverlenger monteren.....	35	Remmen	51
De hoogte van de rugleuning en de lumbaalhoek afstellen (twee excentrische assen).....	36	Het frame reinigen.....	51
De zitdiepte afstellen met behulp van de lumbaalhoek (twee excentrische assen).....	37	Diversen.....	51
7. Instellingen rugleuning 2	38	13. Testen en garanties	52
8. Instellingen rugleuning 2B	39		
9. Opnieuw afstellen			
Rem, afstellen	40		
Het remblok afstellen	41		
Beensteun, met traploos verstelbare hoek	41		
Amputatiesteun	42		
Antikiepvoorziening	42		
De wielvlucht wijzigen	43		
Het middelpunt afstellen.....	43		
Grijphoepels	44		
De afstand van de grijphoepel afstellen.....	44		
Achterwielen met snelontgrendelingsknop.....	44		
10. Accessoires – afstellen, hantering			
Zitkussen en contourinleg	45		
Armsteun, afneembaar, in hoogte instelbaar	45		
Armsteun, opklapbaar, in hoogte verstelbaar	46		
Positioneringsband.....	46		
Hoofdsteun.....	47		
Attachment for chest harness	48		
11. Technische gegevens	49-50		
12. Service en onderhoud			
Bekleding.....	51		
Achterwiel/zwenkwiel, voorvorkhouder	51		
Remmen	51		
Het frame reinigen.....	51		
Diversen.....	51		
13. Testen en garanties	52		

1. Algemeen

Hartelijk dank dat u voor een product van Etac hebt gekozen. Om schade tijdens montage, hantering en gebruik te voorkomen, is het belangrijk om deze handleiding te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. U vindt deze handleiding ook op www.etac.com. U kunt uw taal selecteren via de links 'International' en 'Local websites'. Hier vindt u ook andere productdocumentatie, zoals informatie voor voorschrijvers, een keuzehulp en revisie-instructies.

In deze handleiding is de gebruiker de persoon met beperking voor wie het hulpmiddel bedoeld is. De assistent is de persoon die de gebruiker ondersteunt.

Informatie over hoe slechtzienden de handleiding kunnen gebruiken, vindt u in onze voorverkoopgids op www.etac.com.



Om schade of letsel tijdens hantering en gebruik te voorkomen, moet deze handleiding altijd bij het hulpmiddel worden gevoegd.

Beschrijving hulpmiddel

Cross 5 en Cross 5XL (hierna ook 'het hulpmiddel' of 'het product' genoemd) zijn handbewogen rolstoelen met dwarsgevouwen frames. Ze zijn aanpasbaar en configureerbaar via individuele instellingen, opties en accessoires.

Beoogd doel

Cross 5 en Cross 5XL zijn hulpmiddelen die bedoeld zijn om een fysieke beperking als gevolg van een ongeluk of een handicap te verlichten of te compenseren. Het hulpmiddel is ontworpen voor mobiliteit. Het hulpmiddel is ontworpen voor hand- en/of voetaandrijving en/of om door een begeleider te worden geduwd en gestuurd.

Beoogde gebruikersgroep

De gebruikersgroep voor het hulpmiddel is gebaseerd op het functionele vermogen van het individu en niet op een specifieke diagnose, gezondheidstoestand of leeftijd. Het hulpmiddel is bedoeld voor personen met een lengte van 146 cm of meer, of een gewicht van 40 kg of meer. Secundaire gebruikers van het hulpmiddel zijn zorgverleners die hulp bieden en artsen/technici die het hulpmiddel opstellen.

Beoogde omgeving

Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik binnen en buiten op een vlakke ondergrond en toegankelijk terrein. Niet blootstellen aan zout water. Het hulpmiddel heeft bevestigingspunten voor vervoer in motorvoertuigen.

Beoogde toepassing

Het product is bedoeld voor kort- en langdurig gebruik. Het product is bedoeld voor gebruik met een zitkussen. Het product komt in aanmerking voor reconditionering en hergebruik. Volg de instructies in de "Reconditioneringshandleiding, Etac handmatige rolstoelen" op www.etac.com

Verwachte levensduur

De verwachte levensduur van het hulpmiddel is 10 jaar. Preventief onderhoud wordt aanbevolen. Gebrek aan onderhoud kan de verwachte levensduur van het hulpmiddel verkorten. Zie www.etac.com voor volledige informatie over de verwachte levensduur.

Indicaties

De indicatie voor gebruik is een handicap, inclusief maar niet beperkt tot een verminderd mobiliteitsvermogen.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen

Waarschuwingen die een risico-element voor een specifieke actie of instelling van het hulpmiddel beschrijven, zijn te vinden in het betreffende hoofdstuk.



Dit hulpmiddel kan zodanig worden aangepast dat het niet meer veilig is! Aanpassingen mogen alleen worden uitgevoerd door een persoon die verstand heeft van het gebruik van het hulpmiddel.

Conformiteitsverklaring

Het hulpmiddel voldoet aan de MDR (EU) 2017/745.

Het hulpmiddel is getest en voldoet aan EN 12183 (waaronder brandtesten volgens ISO 8191-2) en ISO 7176-19.

Informatie vóór aankoop

Informatie vóór aankoop vindt u op www.etac.com.

Ongewenst voorval

Mocht er een ongewenst voorval plaatsvinden met het gebruik van het hulpmiddel, dan moet u dat tijdig melden aan de leverancier en aan de bevoegde autoriteit in uw land. De leverancier zal die informatie doorsturen naar de fabrikant.

Afstemming op de gebruiker

Handelingen buiten de instructies en instellingen in de handleiding maken de CE-markering volgens de MDR 2017/745 en de garantie ongeldig.

Combinaties

Combinaties tussen hulpmiddelen van Etac en hulpmiddelen van andere leveranciers worden gepresenteerd in de combinatielijst op www.etac.com.

Diversen

Etac verbetert de eigen producten regelmatig. Daarom behouden wij ons het recht voor om de producten zonder kennisgeving vooraf aan te passen. De afmetingen in de tekeningen of ander materiaal dienen alleen als referentie.

We zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten of onvolledige informatie.

Gereedschap



Inbussleutel 3,
4, 5, 6 mm



Ringsleutel 8, 10,
13, 24 mm




Dopsleutel 19
mm



Schroevendraaier
Ph 2

Midden in deze handleiding vindt u een uitneembaar deel met gebruikersinformatie.

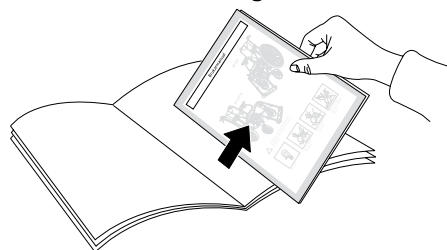


Uitleg van de lijst met punten

- Geldt model
- ✱ Standaard voor dit model

Cross 5 XL

Cross 5

2. Beschrijving

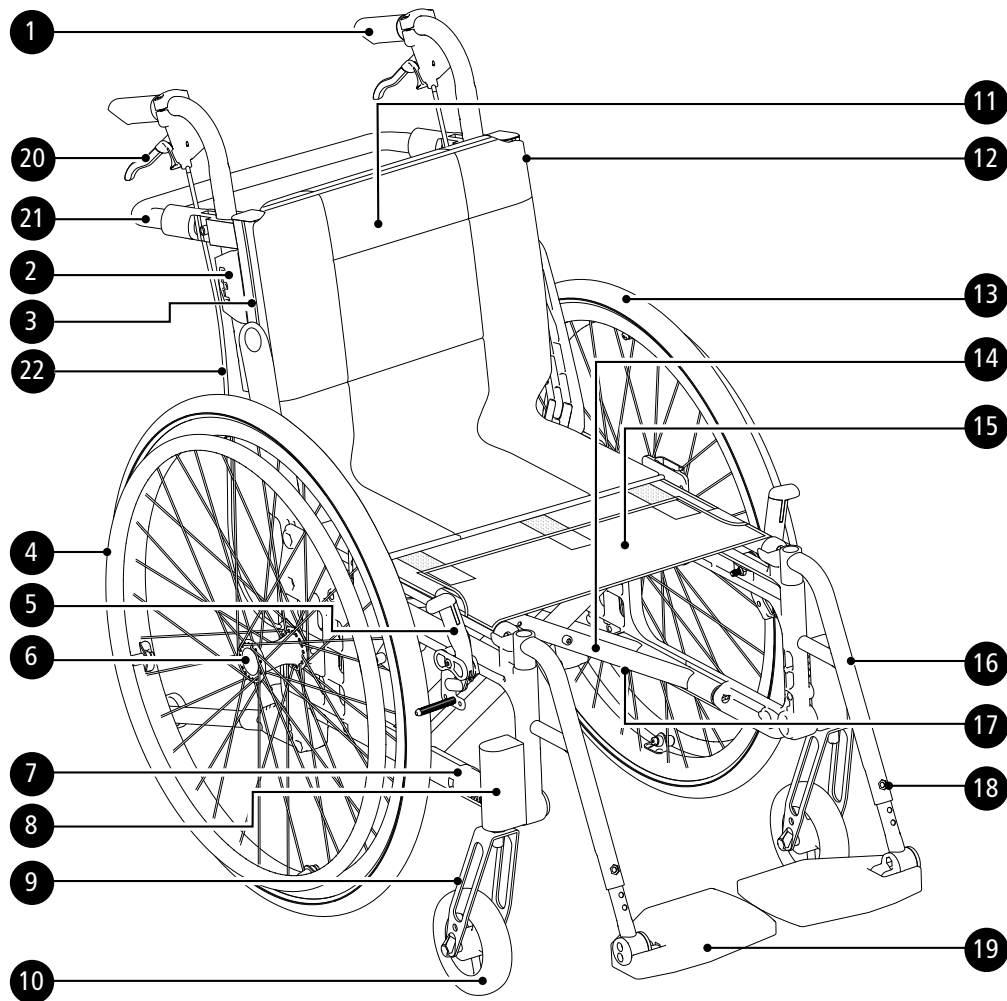





1. Duwhandvatten
2. Vergrendelknop, duwhandvatten
3. Rugleuningrail
4. Grijphoepel
5. Rem voor de gebruiker
6. Naaf met snelkoppeling
7. Zijframe
8. Voorvorkhouder
9. Voorvork
10. Zwenkwiel
11. Rughoes
12. Rugbekleding
13. Achterwiel
14. Kruisframe

15. Zitbekleding
16. Beensteun
17. Serienummer*
18. Vergrendelknop, voetsteun
19. Voetsteun
20. Remhendel, trommelrem
21. Rugfixatiebeugel
22. Remkabel, trommelrem









*De productiedatum van het product kan worden afgelezen van de barcode op het product. Onder de barcode wordt tussen haakjes het getal 11 weergegeven. De cijfercombinatie na deze haakjes is de productiedatum.

3. De mogelijkheden van de stoel










In het deel 'De mogelijkheden van de stoel' ziet u alle aanpassingen die mogelijk zijn voor de rolstoel. Er kunnen zich in de diverse markten verschillen voordoen, bijvoorbeeld bij modellen met rugleuning. Ga voor meer informatie naar www.etac.com of neem contact op met onze klantenservice. Er zijn ook zogenoemde 'vreemde combinaties' beschikbaar, zoals achterwielen en zwenkwielen. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

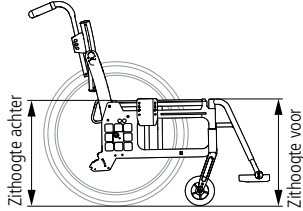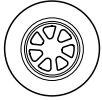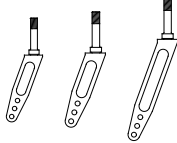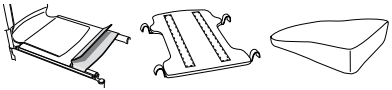				Cross 5	Cross 5 XL
Zithoogte		Voor	34-56.5 cm	●	●
		Achter	34-53 cm	●	●
Zithoek		Max. voorwaartse hoek: voorzijde 2 cm lager dan achterzijde (3°) Max. achterwaartse hoek: voorzijde 6 cm hoger dan achterzijde (9°)		●	●
Zwenkwiel		4" massief (max. gewicht gebruiker 100 kg) 45 of 57 mm naafbreedte		●	●
		5" massief (met Cross 5 XL max gewicht gebruiker 135 kg) 45 of 57 mm naafbreedte		●	●
		6" semipneumatisch 45 of 57 mm naafbreedte		●	●
		6,5" massief		●	●
		7" massief		●	●
		8" semipneumatisch 8" semipneumatisch 57 mm naafbreedte of 200x38 45 (massief)		●	●
Voorvork		Extra kort (3 alternatieve posities voor het wiel) staal, voor 57 mm naafbreedte		●	●
		Kort (3 alternatieve posities voor het wiel). Dikte van 3 of 4 mm staal, voor 57 mm naafbreedte		●	●
		Middellang (3 alternatieve posities voor het wiel). Dikte van 3 of 4 mm staal, voor 57 mm naafbreedte		●	●
		Lang staal, voor 57 mm naafbreedte		●	●
		XS, aluminium, voor 45 mm naafbreedte		●	●
		S, staal, voor 45 mm naafbreedte		●	●
		M, staal, voor 45 mm naafbreedte		●	●
Achterwiel		20" (C5 of C6)		●	●
		22" (C5 of C6)		●	●
		24" (C5 of C6)		●	●
		24" Carbon (niet in combinatie met trommelremmen).		●	
		25"Maxx			
		26" C5		●	●
Grijphoepels		Aluminium		●	●
		Roestvrij staal		●	●
		Met plastic coating		●	●
		Celrubber (niet in combinatie met trommelremmen). (niet voor C6 of Maxx)		●	●
		Titanium (niet in combinatie met trommelremmen). (niet voor C6 of Maxx)		●	
Wielvlucht		2°		●	●
		0°		●	●
Zitting		Zwarte stof		●	●
		Harde zitting		●	●
		ECS: Een vast systeem van zitting/rugleuning met anatomisch gevormde kussens, afneembaar		●	●




3. De mogelijkheden van de stoel

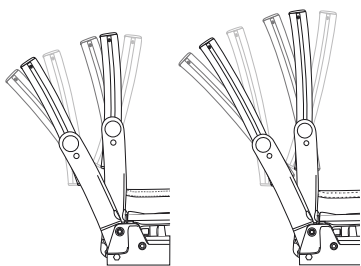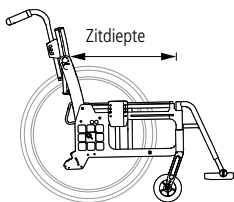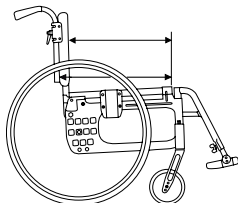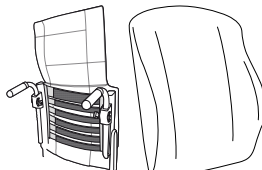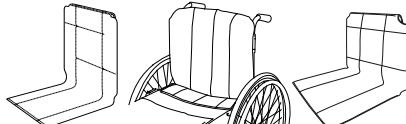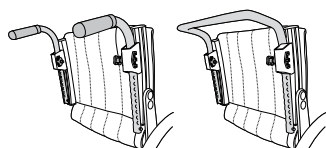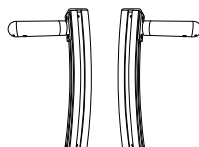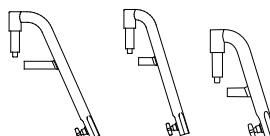Rugleuning 3A (een excentrische ring) / Rugleuning 3A hoog (een excentrische ring)			3A	3A hoog	●	●
		Hoogte	32-45 cm	38-51 cm		
		Hoek van de rugleuning	-5° - +20°	-5° - +20°		
		-16° - +16°				
Zitdiepte		Kort frame 36-42 cm (triangulaire 36-49 cm)			●	●
		Lang frame 42-48 cm (triangulaire 42-55 cm)			●	●
Rugleuning 2		Hoogte 30-45 cm Hoek -5° - +15°	Standaard Wijder		●	
Zitdiepte Rugleuning 2		Kort frame 36-42 cm. Lang frame 42-48 cm. Functioneel: Kort frame 42-48 cm. Lang frame 48-54 cm.			●	
Rugbekleding		Verstelbare bekleding			●	●
Rughoes		Standaard			●	●
		Comfort			●	●
		Tidy, waterafstotend en af te nemen met natte doek			●	●
Duwhandvat- ten/duwbeugel		In hoogte verstelbaar in stappen van 2 cm. Afneembaar.	Duwhandvatten Duwbeugel		●	●
Vaste duwhandvatten		Rechts/links, past op rugleuning 3A			●	●
Vaste rugsteun met vaste duwhandvatten, 2B		Hoogte, lage rugleuning 35-40 Hoogte, hoge rugleuning 42,5-47.5 Hoek -5° - +15°			●	
Beensteunen, afneembaar wegklapbaar		Normale kniehoek			●	●
		Smalle hoek (alleen in combinatie met zwenkwiel van 5")			●	●
		Smalle hoek, kort			●	

3. De mogelijkheden van de stoel

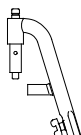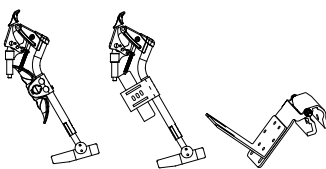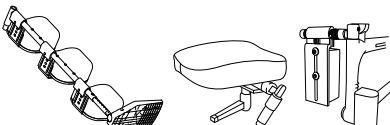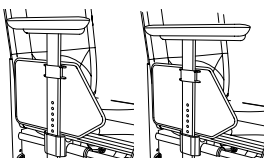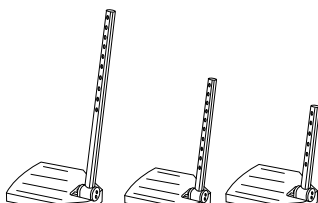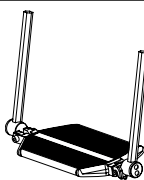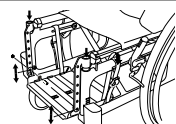
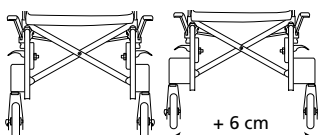
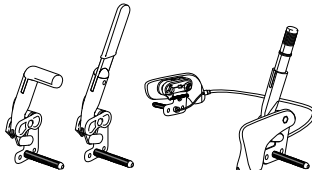
			Cross 5	Cross 5 XL
Beensteunen vergrendelbaar,		Normale kniehoek	●	●
		Smalle hoek	●	
		Smalle hoek, kort	●	
Beensteunen Hoek verstelbaar		Verstelbare hoek met opklapbare kuitsteun vanaf zitbreedte 40 cm	●	●
		Verstelbare hoek met kussensteun en opklapbare gepolsterde kuitsteun	●	●
		Verstelbare hoek met opklapbare kussensteun en kuitsteun	●	●
Beensteunen overig		Gipsbeensteun		
		Amputatiesteun		
		Amputatiegewicht		
Armsteun		Kort 25 cm		
		Lang 35 cm		
Voetsteun		Std Max lengte: 51 cm. Min. lengte: 33 cm.	●	●
		Verlengde bevestigingsbuis +10 cm		
		Kortere bevestigingsbuis -8 cm		
		Eendelige voetsteun	●	●
		Eendelige voetsteun compleet voor zitbreedte 35-37,5 cm, verstelbare hoek, instelbare hoogte en diepte	●	
Voorvork houder		Laag verbreed	●	●
		Standaard Standard H100 of H142 (voor vork met 45 mm naafbreedte)	●	●
		verbreed 6 cm H100	●	●
Remmen		Gehoekte remhendel	●	●
		Verlengde remhendel	●	●
		Rem met eenhandige bediening (standaard of gehoekte remhendel)	●	●

3. De mogelijkheden van de stoel








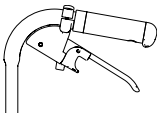
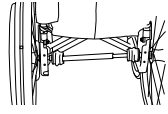
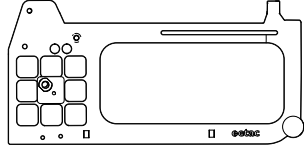
			Cross 5	Cross 5 XL
Trommelrem		Remhandgreep 100 mm grip	●	●
Eenhandige bediening		Voor rechts of links. Telescopische as, eenvoudig te verwijderen bij inklappen (niet in combinatie met trommelremmen).	●	●
Framekleur	01 = Zwart 92 = Wit 93 = Donkerblauw		●	●
Zijframe actief		Zonder bevestiging anti-kiep Kleur: Zwart 01, wit 92	●	

4. Accessoires












Bij de accessoires die door Etac worden geleverd, zitten altijd montage-instructies.
Er staan ook instructies op onze website, www.etac.com
Instelbaar = afstellen met gereedschap. Verstelbaar = afstellen zonder gereedschap.

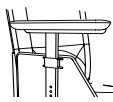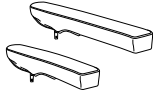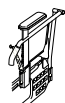			Cross 5	Cross 5 XL
Armsteun	In hoogte verstelbaar, 25 cm lang, massieve bovenkant, zwart		●	●
Armsteun	In hoogte verstelbaar, 38 cm lang, massieve bovenkant, zwart		●	●
	Opvouwbaar kaart 26 cm		●	●
	Opvouwbaar kaart 36 cm		●	●
Armsteunhoes	afneembaar, 25 of 38 cm lang gepolsterd of gel, donkergrijs pluche of zwart Hygiene		●	●
Armsteunkussen Hemi	wegklapbaar voor montage op lange armsteunen		●	●
Armsteun-vergrendelset	Een vergrendelde armsteun is niet afneembaar, maar de hoogte ervan kan vrij worden ingesteld.		●	●
Armsteun opklapbaar	in hoogte verstelbaar of vaste hoogte (niet met telescopische antikiep — gebruik antikiep voor Cross 5 Active, item nr 25177).		●	●
Zijbescherming	zwart		●	●
Vullingskussen	Vermindert de breedte tussen de middenarmsteunen			






4. Accessoires

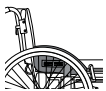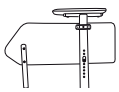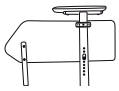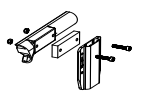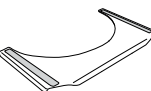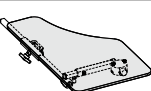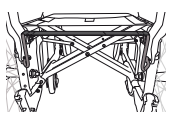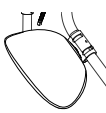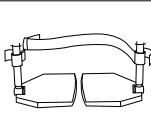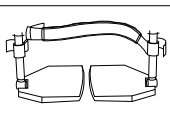			Cross 5	Cross 5 XL
Spatbord	rechts en links		●	●
Dijsteun			●	●
Dijsteun	Met zacht kussen		●	●
Verbreidingsset	voor verbreding van grijphoepels, rem en armsteunen, 5 mm aan beide zijden		●	●
Blad	transparant, past op lange armsteun		●	●
Hemi-blad	transparant, breedte 35-50 cm. Kan op korte of lange armsteunen worden gemonteerd.		●	
Antislipvoorziening	voor het Hemi-blad		●	
Blad Hemi/Communicatie	opklapbaar rechts/links		●	●
Zittingverlenger	Voor gebruik met rugleuning met drie hoeken		●	●
Zitkussen	donkergrijs pluche en zwart velours, 56 cm, maat afgestemd op ingestelde zitdiepte, wasbaar		●	●
Zitkussen Tidy	Waterafstotend en af te nemen met natte doek		●	●
Contourinleg	voor het kussen, zorgt dat de voorkant van de zitting vlak ligt		●	●
Hoes voor kuitsteun	voor model 3 met in hoek verstelbare beensteun, zwart Hygiene		●	●
Kuitband	afneembaar, zwart nylon, in lengte verstelbaar		●	●
Vulling	voor kuitband		●	●
Kuitsteun	Pluche. Te monteren/af te stellen met velcro		●	●

4. Accessoires

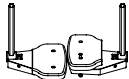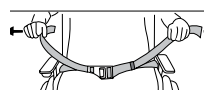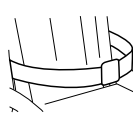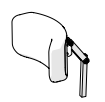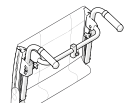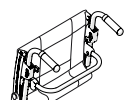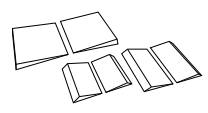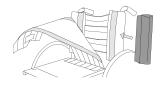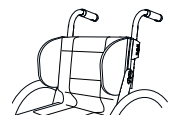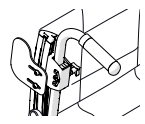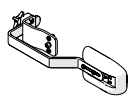			Cross 5	Cross 5 XL
Hielbeschermers	zwart nylon, in lengte verstelbaar		●	●
Voetsteun, polstering	Voor voetsteun 13 cm diep		●	●
	Voor vaste voetsteun met verstelbare hoek		●	●
Verlengde voetsteun	past op de bestaande voetsteun, vanaf zitbreedte 40-55 cm		●	●
Positioneringsband	tweedelig, met klikvergrendeling, bevestigingspunten op het rolstoelframe		●	●
Veiligheidsgordel	met klikvergrendeling		●	●
Hoofdsteen	Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek.		●	●
	Met zijsteun. Verstelbaar in hoogte, diepte en hoek. Hygiënische bekleding		●	●
Hoofdsteenhouder	Voor Crossrug 3A, model 4		●	●
Hoofdsteenhouder	Te monteren op de duwbeugel		●	●
Rugfixatiebeugel	Crossrug 3A. Met klikvergrendeling		●	✳
Rugfixatiebeugel	Crossrug 2. Met klikvergrendeling		●	●
Ruginleg	Drie verschillende maten, te bevestigen met klittenband. Biedt steun en vorm. De inlegdelen kunnen ook met andere accessoires worden gecombineerd en op de gewenste maat worden geknipt. Inlegdelen kunnen ook worden samengevoegd.		●	●
Ruginleg	lengte 15 en 30 cm, bevestigd met klittenband		●	●
Zijkussen	Biedt zachte zijdelingse steun. Te gebruiken als de rompsteun te star is. (Te combineren met armsteunen en zo nodig met zijpaneel)		●	●
Zijpaneel	Recht of afgerond. Te combineren met contourinleg of zijkussen. Zorgt voor een duidelijke begrenzing en houdt de contourinleg of het zijkussen op zijn plaats.		●	●
Rompsteun	Afneembaar en verstelbaar		●	●

4. Accessoires

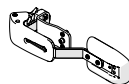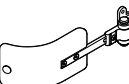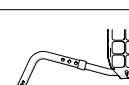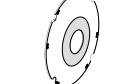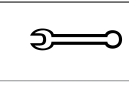			Cross 5	Cross 5 XL
Rompsteun	Opklapbaar en afneembaar. Verstelbaar		●	●
Rompsteun	Crossrug 3A, PUR of Hygiene		●	●
Rompsteun	Crossrug 3A, opklapbaar, middelgroot of groot kussen		●	●
Antikiepvorziening	telescopisch, inklapbaar, in hoogte instelbaar, verstelbare lengte en hoek (niet met opklapbare armsteun).		●	●
Antikiepvorziening	Voor Etac Cross 5 Active zithoogte 37-55 cm		●	
Antikiepvorziening aluminium	Voor de Etac Cross 5 Active zithoogte 34-37 cm		●	●
Stokhouder	tweedelig, met een elastisch deel dat rond de stok wordt bevestigd		●	●
Infuusstandaard	Beugel en standaard		●	●
Spaakbeschermer	met grijze of gele opdruk		●	●
Tetra-adapter met snelkoppeling	voor mensen met verminderde handfunctie		●	●
Gereedschapset			●	●
Zuurstofhouder	Max. draagvermogen 5 kg		●	●
Combinaties	Aandrijving		●	●
	Aandrijving		●	●
	Zitkussen		●	●
	Banden en harnassen		●	●

5. Instellingen


Cross 5

Cross 5 XL

Zithoogte voor

De zithoogte voor kan als volgt worden afgesteld:

- Met de voorvorkhouder, verstelbaar in hoogte en hoek.
- Door de positie van het zwenkwiel te wijzigen.
- Door de voorvork te wijzigen.
- Door het zwenkwiel te wijzigen

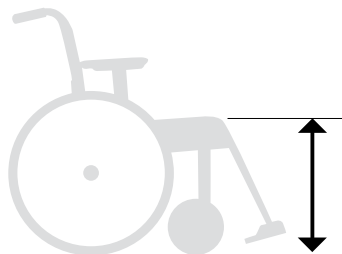

Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.


De zithoogte voor met de voorvorkhouder afstellen

Draai de schroeven (A en B) los. Stel de gewenste hoogte in. Meet hiervoor vanaf de vloer tot de zittingbekleding. Draai de schroeven aan één voorvorkhouder vast. Gebruik de positiemarkeringen als referentie om de hoogte aan de andere kant af te stellen. Draai de andere houder vast. Controleer of de houders haaks staan en stel waar nodig af. (Zie

hoofdstuk 'De hoek van de voorvorkhouder instellen'.) Stel de hoogte van de voorvorkhouders nauwkeurig af zodat beide wielen gelijk staan met de vloer.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.



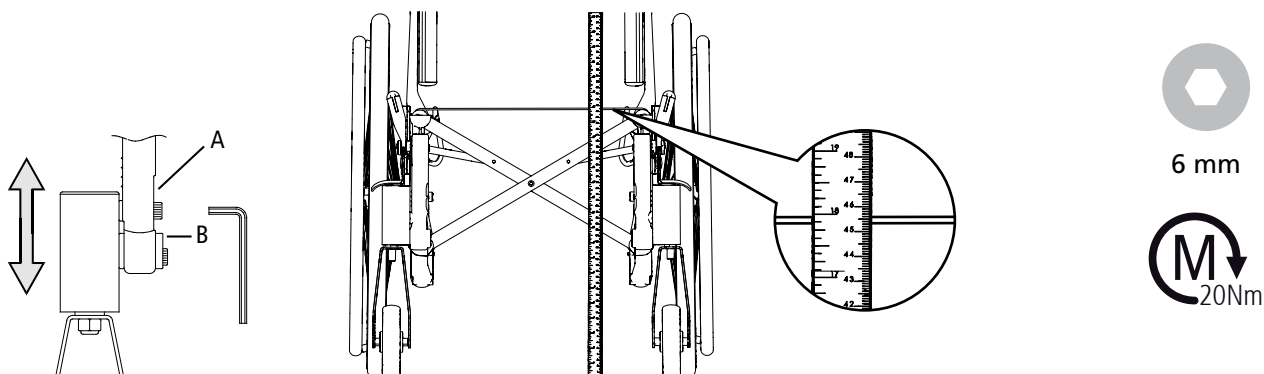


De zithoogte voor afstellen door de positie van het zwenkwiel te wijzigen

Zie ook het deel 'Tabel voor zithoogte voor'.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

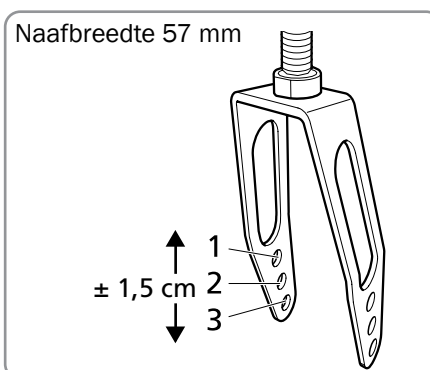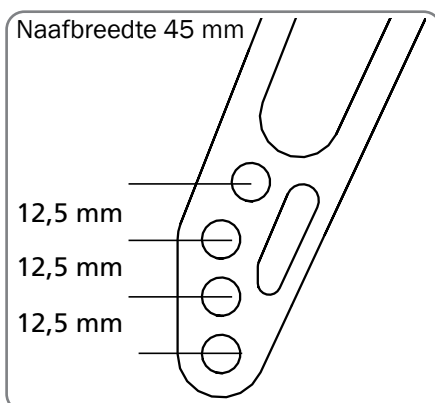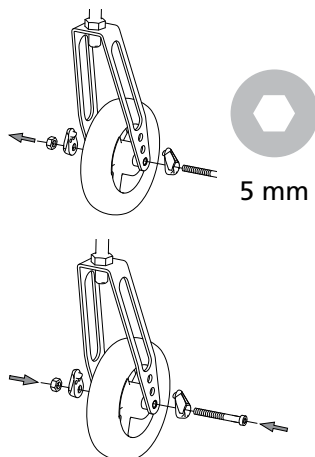

5. Instellingen

De zithoogte voor afstellen door het zwenkwiel/de voorvork te wijzigen

Zie de delen 'De zithoogte voor afstellen door de positie van het zwenkwiel te wijzigen' en 'Tabel voor zithoogte voor'.



5 mm




19 mm



Kantelgevaar. Als de anti-kiem wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiem om kantelen te voorkomen.

Tabel voor zithoogte voor

Tabel voorste zithoogte 57 mm zwenkwielnaaf

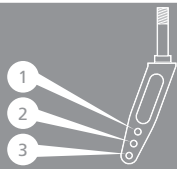													
Positie zwenkwiel													
	Zwenkwiel	Vork extra kort (staal)			Vork kort (staal)			Vork Medium (staal)			Vork lang (staal)		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Voorvorkbevestiging	4" *		340-380	355-395									
	5" ***	335-365	350-385	365-400	360-400	375-415	390-430						
Standaard/verbrede voorvorkbevestiging	5" ***				375-415	390-430	405-445	430-460	450-480	460-490			
	6"					400-440	415-455	450-470	460-490	470-500			
	6½"					410-450	425-465	460-480	470-490	480-510	505-525	515-535	525-555
	7"								475-495	485-515			530-560
	8" **								480-510	490-520		525-545	535-565

* Max. gewicht gebruiker 100 kg

Voor de juiste instelling van de voorvorkhouder: max. achterwaartse inclinatie voorzijde 6 cm hoger dan achterzijde (9°), max. voorwaartse inclinatie voorzijde 2 cm lager dan achterzijde (3°).

** Mogelijk in asgatposities 4 t/m 6 met 3° wig en standaard beensteunen. Controleer of het wiel en de vork vrij kunnen draaien zonder de rolstoel of de gebruiker te raken. Gebruik voor zwenkwiel 8x2" vork Transit (geeft zithoogte 47-51 cm).

*** Met Cross 5 XL max gewicht gebruiker 135 kg.

5. Instellingen

De zithoogte voor afstellen door het zwenkwiel/de voorvork te wijzigen

Zie de delen 'De zithoogte voor afstellen door de positie van het zwenkwiel te wijzigen' en 'Tabel voor zithoogte voor'.



5 mm






19 mm



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●

Tabel voorste zithoogte 45 mm zwenkwielnaaf

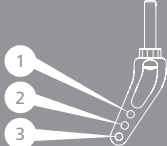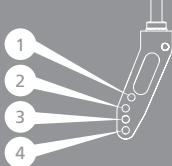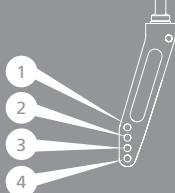													
		Positie zwenkwiel											
		Vork XS (alu)			Vork S (staal)				Vork M (staal)				
		Zwenkwielen	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4
Laag verbreed	4" *	340-360	343-383	355-395									
	5" ***				345-385								
H100	5" ***				360-400	373-413	385-425	398-438	410-450	423-463	435-475	448-488	
	6"					385-425	398-438	410-450	423-463	435-475	448-488	460-500	
	8" **							435-475	448-488	460-500	473-513	485-525	
H142	8"									500-540	513-553	525-565	

Max. gewicht van de gebruiker 100 kg.

Voor de juiste afstelling van de voorvorkbevestiging: Max. achterwaartse kanteling 6 cm hoger voor dan achter (9°), max. voorwaartse kanteling 2 cm lager voor dan achter (3°).

Er kunnen meer combinaties mogelijk zijn dan hierboven vermeld.

** Werkt in balans 4-6 met 3° achterwaartse hoek en standaard beensteun. Zorg ervoor dat de vork/zwenkwielen vrij kunnen draaien zonder tegen de rolstoel of de gebruiker te stoten.


*** Met Cross 5 XL max gewicht gebruiker 135 kg.

5. Instellingen

Cross 5
Cross 5 XL

De voorvork monteren

- Trek de afdekdop (A) eraf en schroef de borgmoer (B) los. Trek de voorvork naar buiten en plaats de afgeschuinde ring (C) en het lager op de nieuwe vork.
- Monteer de ringen en lagers in de voorvorkhouder, zoals afgebeeld. De sluitring (C) wordt gemonteerd met de afgeschuinde kant naar de voorvork toe. Sluitring (D) bovenop onder de borgmoer.
- Draai de borgmoer vast totdat deze niet meer kan draaien. Draai hem dan 1/2-1 slag los. De veerring heeft dan de juiste spanning. Dit verkleint de kans dat het zwenkwiel gaat "wiebelen".
- Monteer de afdekdop.

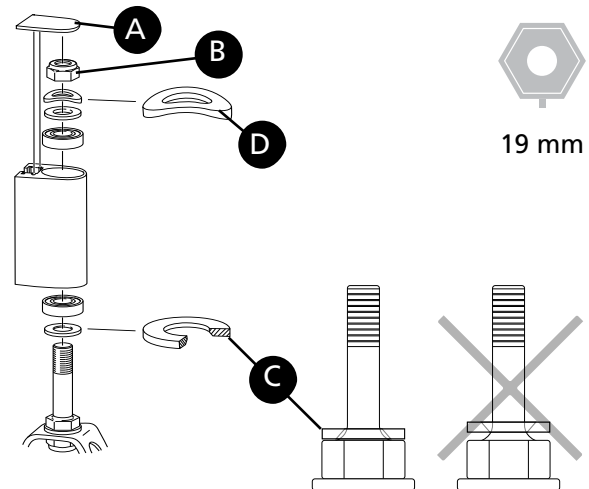

De hoek van de voorvorkhouder instellen

De juiste hoekinstelling is belangrijk voor de wendbaarheid van de rolstoel.

Schroef de onderste bevestigingsschroef (A) ongeveer 2 slagen los, zodat de as (C) vrij in de huls beweegt.

Steek de inbusleutel in het gat (B) en draai de inbusleutel totdat de houder 90° ten opzichte van de vloer staat. Start altijd vanuit een positie waarbij het wiel in voorwaartse richting kan draaien (D). Houd de




as op zijn plaats terwijl u de onderste bevestigingsschroef vastdraait.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.



Kijk terwijl u de hoek instelt naar iets verticaals, bijvoorbeeld een deurpost of tafelpoot.

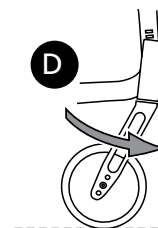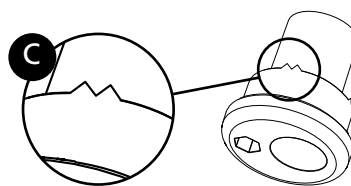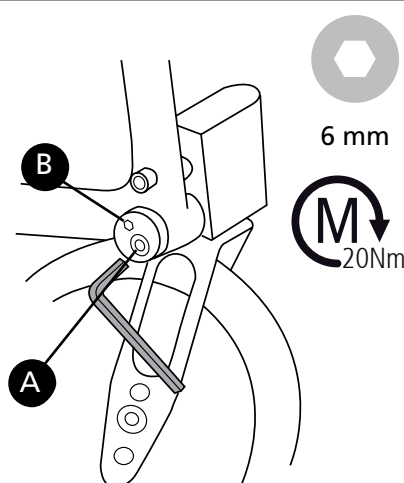


5. Instellingen

Zithoogte achter

De zithoogte achter kan als volgt worden afgesteld:

- Door de positie van het achterwiel te wijzigen in het frame.
- Door de positie van het achterwiel te wijzigen in de ring voor de wielvlucht.
- Door het achterwiel te wijzigen.

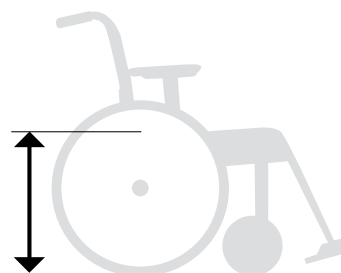






Kantelgevaar: Controleer altijd de instelling van de antikiepvorziening.

De zithoogte achter afstellen door de positie of grootte van het achterwiel te wijzigen

1. Verwijder het achterwiel.
2. Draai de moer los.
3. Monteer deze in de gewenste positie (zie de tabel in het deel 'Tabel voor zithoogte achter').



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

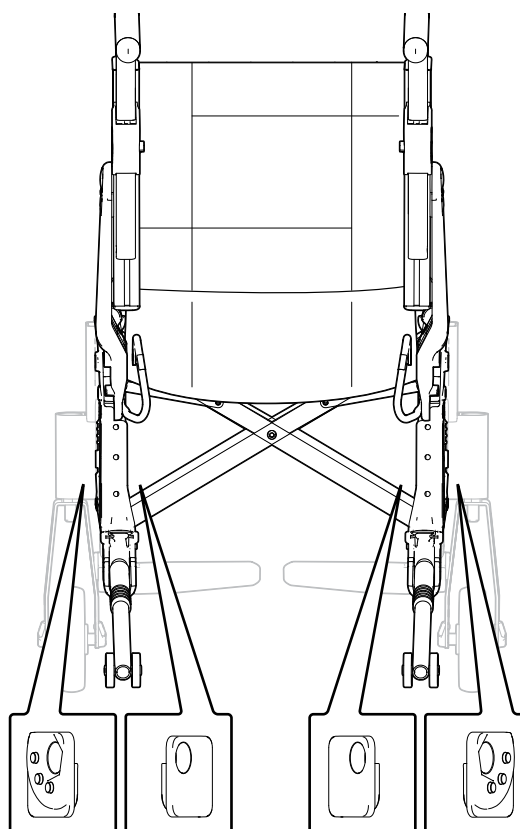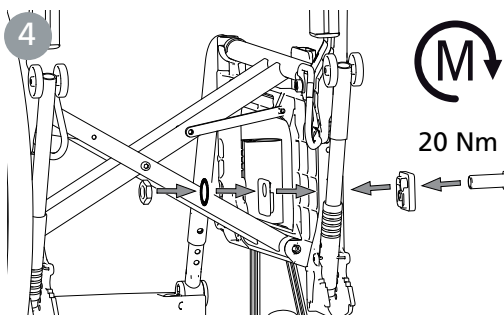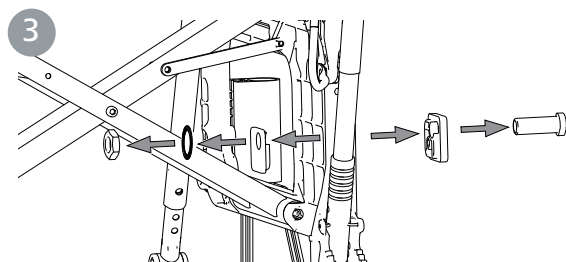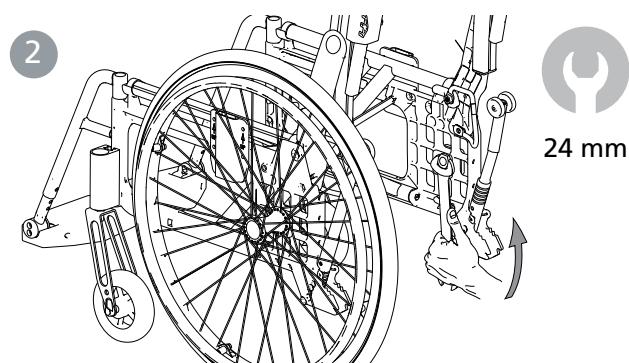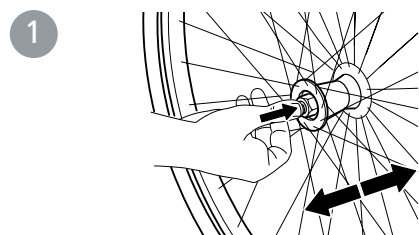


5. Instellingen





Cross 5
Cross 5 XL




Let er tijdens de montage van de achterwielen op dat de knop van de snelkoppeling correct naar buiten springt. Test dit door te draaien aan het wiel. Risico op letsel.

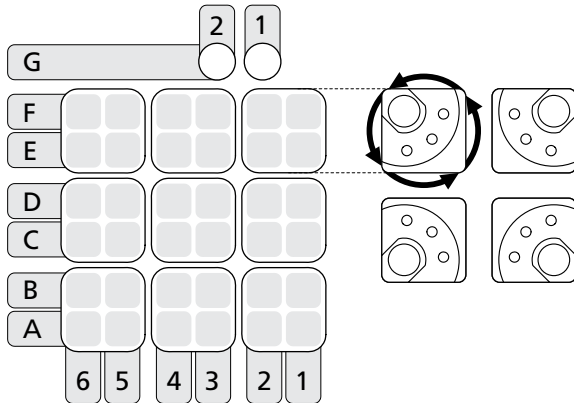

Monteer in pos. G1 & G2

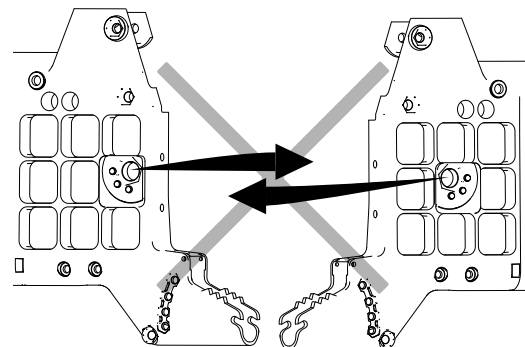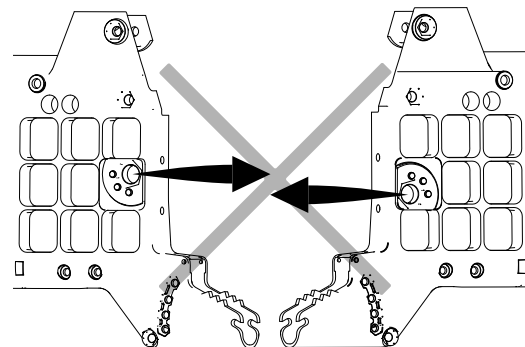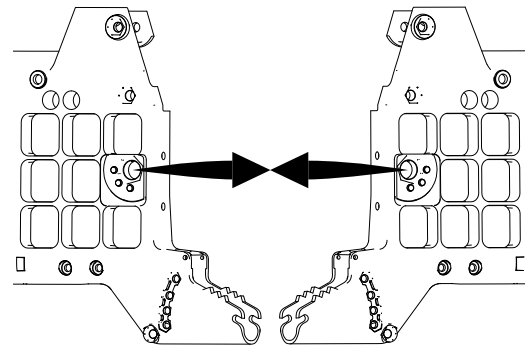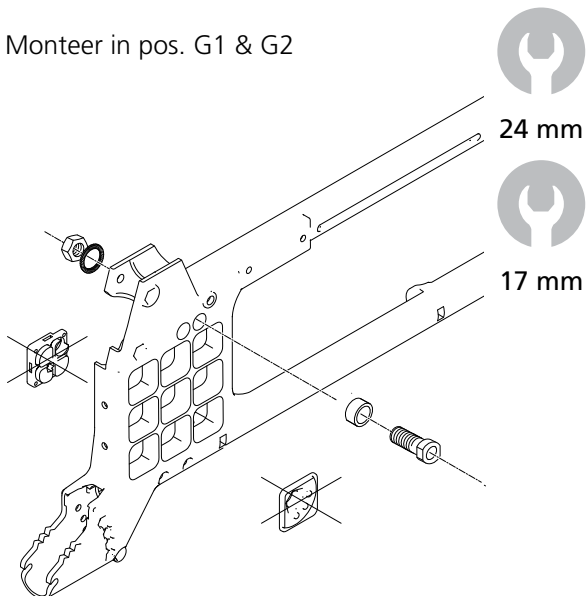



Vluchthoek 0°

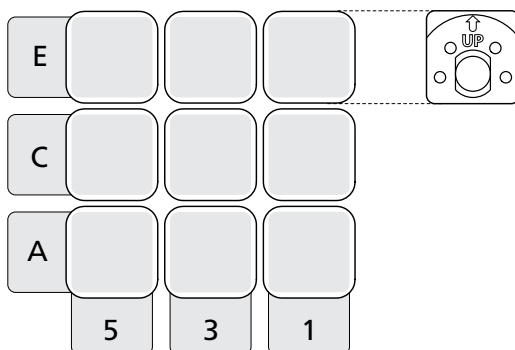

5. Instellingen


Tabel voor zithoogte achter

Positie achterwiel, hoogte

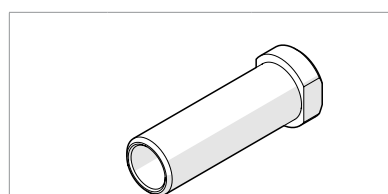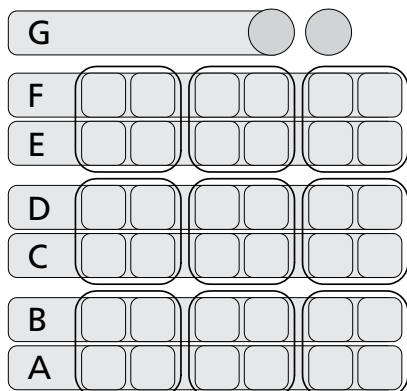


Naaf C5

	Wiel	Zithoogte	Afstand
Position A	20"	46	4.5
	22"	48.5	7.0
	24"	51	9.5
	26"	53,5	12
Position B	20"	44	6.5
	22"	46.5	9.0
	24"	49	11.5
	26"	51,5	14
Position C	20"	42	8.5
	22"	44.5	11.0
	24"	47	13.5
	26"	49,5	16
Position D	20"	40	10.5
	22"	42.5	13
	24"	45	15.5
	26"	47,5	18
Position E	20"	38	12.5
	22"	40.5	15
	24"	43	17.5
	26"	45,5	20
Position F	20"	36	14.5
	22"	38.5	17
	24"	41	19.5
	26"	43,5	22
Position G	20"	34	16.5
	22"	36.5	19
	24"	39	21.5
	26"	41,5	24

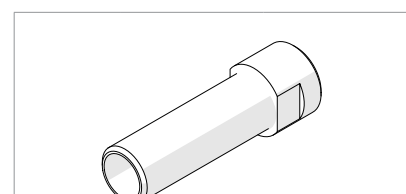


Naaf C6

	Wiel	Zithoogte	Afstand
Position A	20"	46	4.5
	22"	48.5	7.0
	24"	51	9.5
	25"	52,5	11
	25" Maxx	50,5	13
Position B	20"	44	6.5
	22"	46.5	9.0
	24"	49	11.5
	25" Maxx	50,5	13
	25" Maxx	50,5	13
Position C	20"	42	8.5
	22"	44.5	11.0
	24"	47	13.5
	25" Maxx	48,5	15
	25" Maxx	48,5	15
Position D	20"	40	10.5
	22"	42.5	13
	24"	45	15.5
	25" Maxx	46,5	17
	25" Maxx	46,5	17
Position E	20"	38	12.5
	22"	40.5	15
	24"	43	17.5
	25" Maxx	44,5	19
	25" Maxx	44,5	19
Position F	20"	36	14.5
	22"	38.5	17
	24"	41	19.5
	25" Maxx	42,5	21
	25" Maxx	42,5	21
Position G	20"	34	16.5
	22"	36.5	19
	24"	39	21.5
	25" Maxx	40,5	23
	25" Maxx	40,5	23

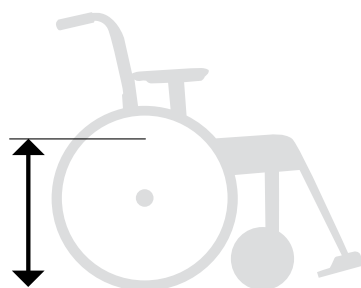

Zithoogte, achter

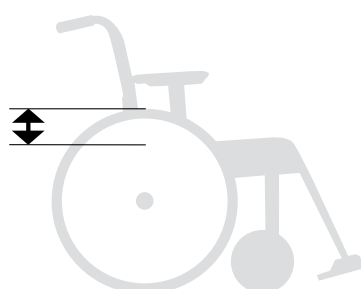


Afstand wiel-zitting

5. Instellingen





Cross 5
Cross 5 XL

Trommelrem

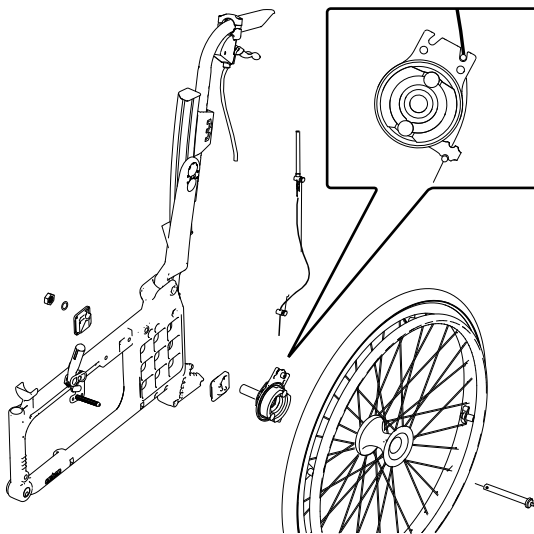


1 2
G1 G2 G

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A
1	2	3	4	5	6	

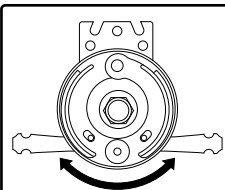
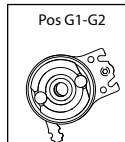
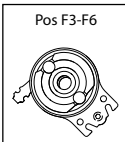
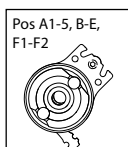


De remarm is omkeerbaar.

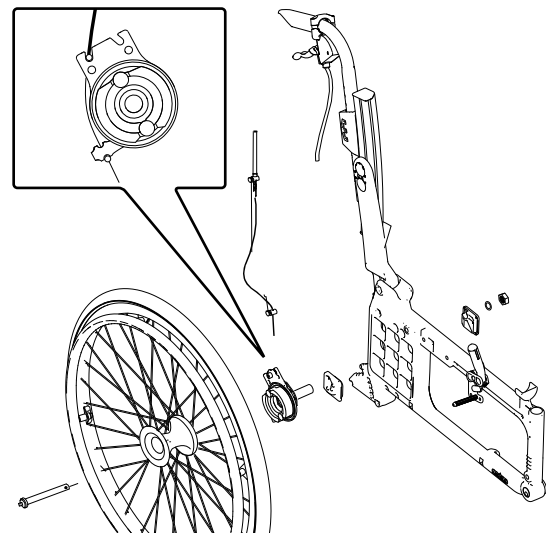


2 1
G G2 G1


F	F6	F5	F4	F3	F2	F1
E	E6	E5	E4	E3	E2	E1
D	D6	D5	D4	D3	D2	D1
C	C6	C5	C4	C3	C2	C1
B	B6	B5	B4	B3	B2	B1
A	A6	A5	A4	A3	A2	A1
6	5	4	3	2	1	

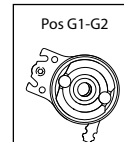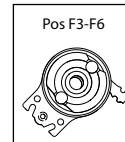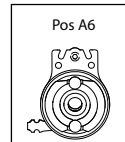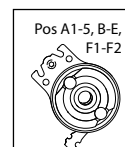

Montagepos. G1 en G2

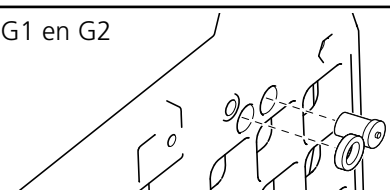

Stel de remmen af door de moer (A) los te draaien. Draai de schroef (B) los of vast voor de juiste werking van de remmen. Draai de moer (A) vast. Deze afstelling moet worden uitgevoerd als de remmen niet goed werken.

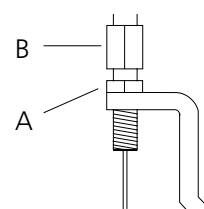



8 mm

Gebruikershandleiding

75195.28 2025-03-27



Dit deel van de handleiding (gebruikers-handleiding) moet worden verwijderd en altijd bij de rolstoel worden bewaard, omdat er belangrijke informatie voor de gebruiker in staat.

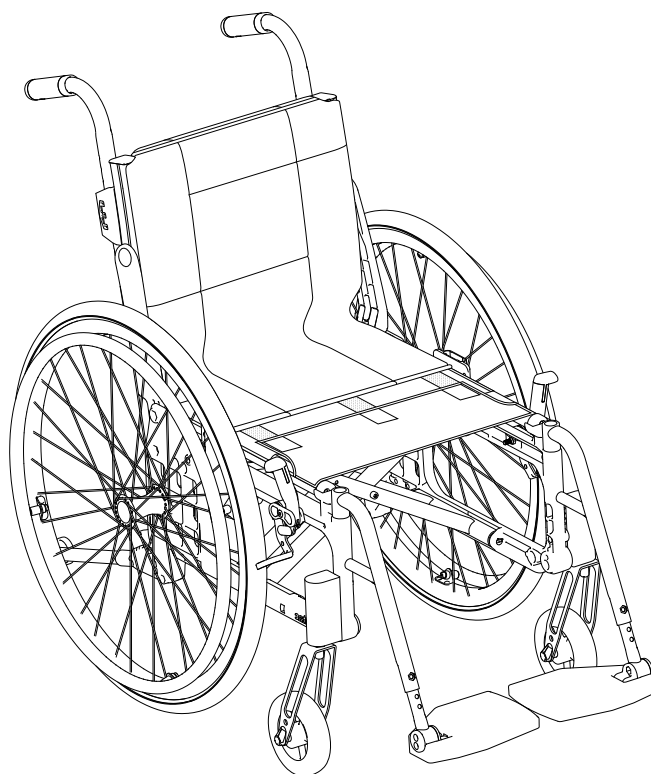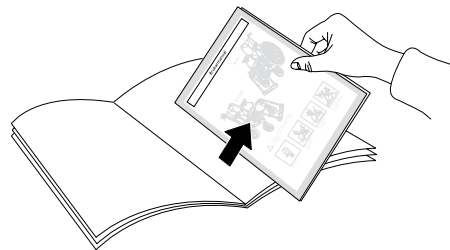

Etac Cross 5
Etac Cross 5 XL

Gebruikershandleiding

Symbolen en waarschuwingen

Symbolen

Deze symbolen vindt u in de handleiding.



Waarschuwing, voorzorgsmaatregel of beperking



Handig advies en tips



Te recycelen materiaal



Klik op het pictogram of scan de QR-code voor een video



Toont optie **1** van de twee opties



Toont optie **2** van de twee opties



Toont optie **1** van de drie opties



Toont optie **2** van de drie opties



Toont optie **3** van de drie opties

Symbolen

Deze symbolen worden op het hulpmiddel weergegeven.



Kantelgevaar. Als de anti-kiép wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiép om kantelen te voorkomen.



Verwijderbaar deel, hier niet aan optillen!




Verankeren. Vastzetpunten voor het klamsysteem voor vervoer in motorvoertuigen.



Het product voldoet aan de eisen van ISO 7176-19.

Productlabel

Productinformatie

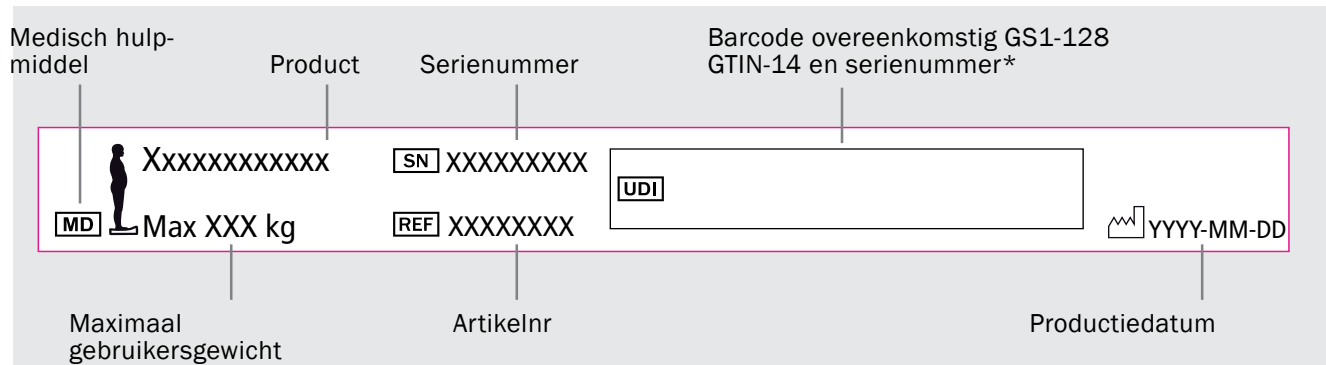

*De productiedatum van het hulpmiddel kan worden afgelezen van de barcode op het product. Onder de barcode wordt tussen haakjes het getal 11 weergegeven. De cijfercombinatie na deze haakjes is de productiedatum.

Breedte en lengte



CE-markering



Fabrikant

Gebruikershandleiding

Transport in voertuigen


De rolstoelen van Etac zijn getest volgens ISO 7176-19 (zie 'Testen en garantie' in deze handleiding).

Etac raadt de volgende volgorde aan:

- 1) De gebruiker gaat in het voertuig zitten en gebruikt de driepuntsgordel van het voertuig tijdens het rijden. De rolstoel wordt in de bagageruimte of veilig op de achterbank geplaatst, zodanig dat de rolstoel niet kan omvallen of weggrollen.



- Waar mogelijk moet de rolstoel in de bagageruimte worden geplaatst.
- Als de rolstoel op de achterbank wordt geplaatst, zorg dan dat de rolstoel niet kan omvallen of weggrollen. Zet de rolstoel waar mogelijk vast met de veiligheidsgordel van het voertuig.

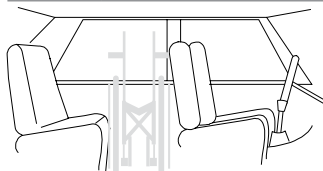


- 2) De rolstoel wordt naar voren gericht in het voertuig bevestigd, zoals beschreven in deze handleiding, en de gebruiker gebruikt een aparte driepuntsgordel, die in het voertuig is bevestigd. Dit is de manier waarop de rolstoel is getest en goedgekeurd.






Dit is de manier waarop de rolstoel wordt getest en goedgekeurd volgens ISO 7176-19:

- Spaninrichting UNWIN_WWR/ATF/K/R volgens ISO 10542
- Driepuntsgordel 907523, Klippan Safety AB.
- Parkeerrem geactiveerd
- Kantelbeveiliging geactiveerd
- Hoofdsteunbeugel 3A en hoofdsteun. (Cross 5/5XL)
- Dwarsstang (Cross 5XL)
- Achterwielen met glijringen.

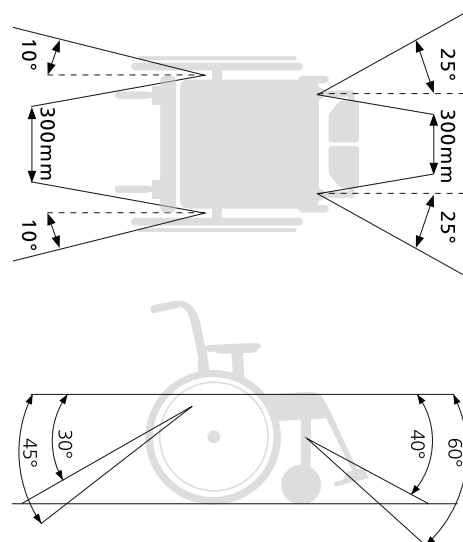

Bevestiging

- De bevestigingspunten achterin moeten worden gebruikt.
- De bevestigingsvoorziening mag niet door de wielen worden getrokken of om de buizen van de rugleuning heen worden bevestigd.
- Accessoires die er zonder gereedschap afgehaald kunnen worden (niet armsteunen, beensteunen en positioneringsaccessoires), moeten verwijderd of vastgezet worden.
- Als de hoofdsteun op een andere manier is gemonteerd dan met hoofdsteunbeugel 3A, moet een dwarsstang worden gebruikt.
- Cross 5XL moet een dwarsstang hebben, ongeacht hoe de hoofdsteun is gemonteerd.

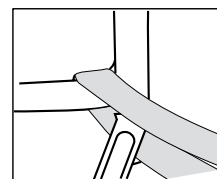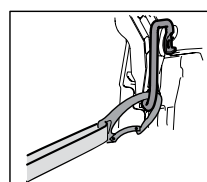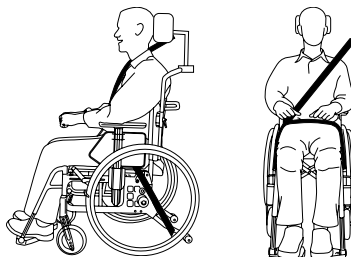

- 3) Volgens richtlijn 2001/85/EG, bijlage VII, punt 3.8.3., zijn er speciaal gemarkeerde rolstoellocaties in voertuigen waarvoor transport is toegestaan met de rolstoel tegen de rijrichting in geplaatst. Als deze vervoersmethode wordt gebruikt, moet de gebruiker/verzorger tijdens het rijden goed opletten, zijn voorbereid op plotselinge bewegingen en in staat zijn tijdens de volledige reis een veilige zitpositie aan te houden. De handicap van de gebruiker mag niet zodanig zijn dat hij/zij niet in staat is de handgrepen in het voertuig vast te houden bij wijzigingen in snelheid of rijrichting.



- Parkeerrem geactiveerd.
- Kantelbeveiliging geactiveerd.
- Hoofdsteun.
- De positioneringsband moet worden gebruikt.
- Accessoires die er zonder gereedschap afgehaald kunnen worden, moeten verwijderd of vastgezet worden.

Gebruikershandleiding

Hantering




Uitklappen

- Druk één kant van het zitframe met uw vlakke hand omlaag.
- Zet de voetsteunen omlaag.




Houd de zittingbuis niet vast tijdens het uitklappen. Risico op letsel.

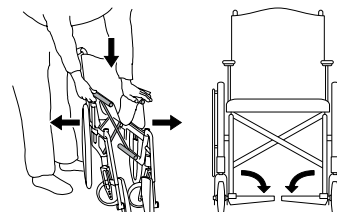

Inklappen


- Als er een duwbeugel en/of rugfixatiebeugel is gemonteerd, moet(en) deze worden verwijderd.
- Klap de voetsteunen omhoog.
- Til de zitting omhoog.

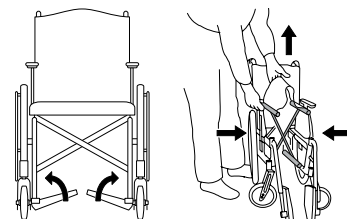

Achterwiel met snelkoppeling




Let er tijdens de montage van de achterwielen op dat de knop van de snelkoppeling correct naar buiten springt. Test dit door te draaien aan het wiel. Risico op letsel.

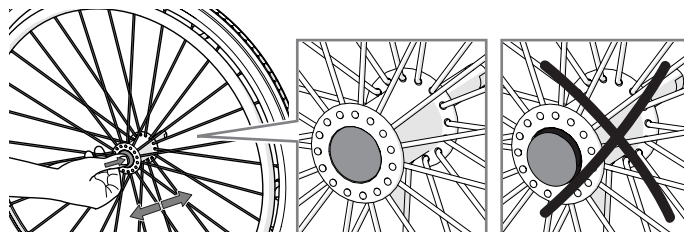


Antikiepvoorziening


- De antikiepvoorzieningen kunnen omhoog worden geklapt.

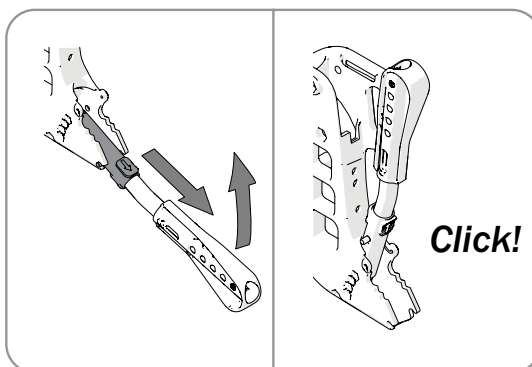

- Zorg dat de vergrendelingsfunctie goed werkt als u de antikiepvoorziening activeert.

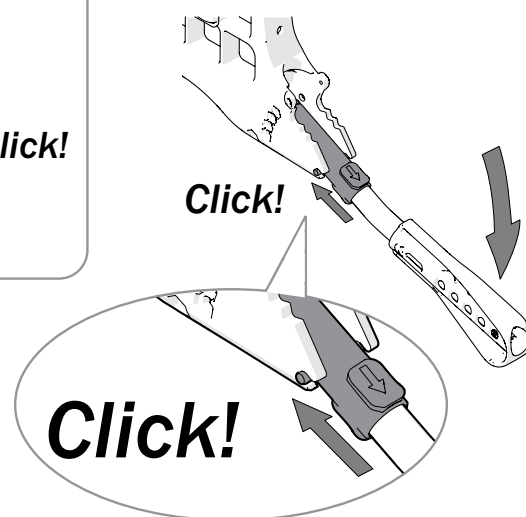

- Als er afstellingen aan de rolstoel zijn uitgevoerd, moet u altijd controleren of de antikiepvoorzieningen goed werken.
Als u de rolstoel moet aanpassen, neem dan contact op met uw leverancier of het centrum voor technische hulpmiddelen.

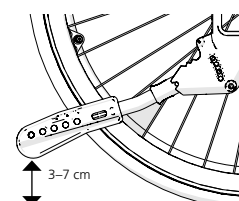

Gebruikershandleiding


Beensteun

De beensteunen kunnen waar nodig worden verwijderd/opzij worden geklapt. Vergrendelbare beensteunen door op de rode knop (A) te drukken.

U bevestigt de vergrendelbare beensteunen door op de rode knop (A) te drukken, de beensteun op zijn plaats te zetten en de knop los te laten. De beensteun is nu vergrendeld (B).



Controleer vóór het tillen of de blokkeerbare beensteunen zijn vergrendeld. Risico op letsel.

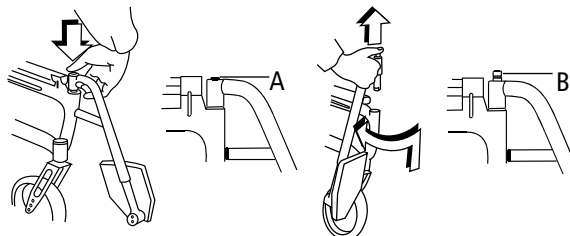

Duwhandvatten/duwbeugel, in hoogte verstelbaar


Draai de knoppen los/klap de borghendel omhoog. Stel de gewenste hoogte in. Zorg dat de duwhandvatten in de juiste stand zijn vergrendeld en draai de knoppen vast/de borghendel omlaag drukken.



Zorg ervoor dat de knoppen/vergrendelingshendels goed zijn vastgedraaid/vergrendeld en dat de veiligheidsknoppen onder de beugels zijn uitgesprongen.





De duwbeugel moet worden verwijderd voordat de rolstoel kan worden ingeklapt.

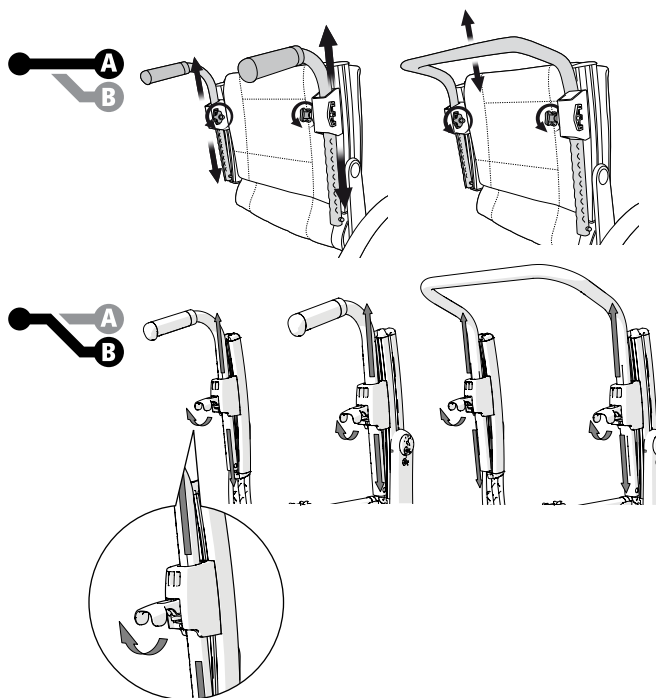


Rugleuning 2

Draai de knop (A) los en druk op de kunststof sluitring. Daarna zoals hierboven.

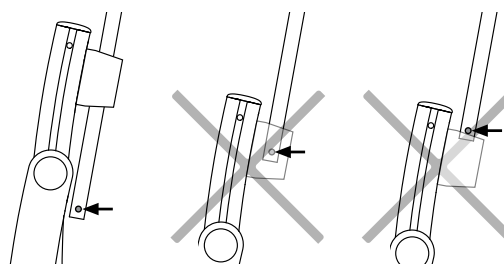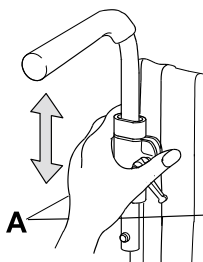


Cross trommelrem (servicerem)

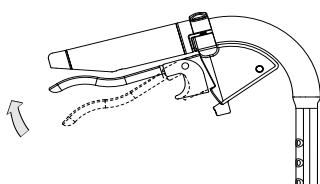

- Rem terwijl de rolstoel beweegt door de remhendel omhoog te trekken.

Cross trommelrem (parkeerrem)

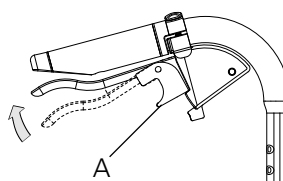

- Schakel de parkeerrem in door de remhendel omhoog te trekken en knop A in te drukken.
- Schakel de rem uit door de hendel omhoog te trekken.

Gebruikershandleiding

Zitcomfort

Zitcomfort

Goed zitcomfort is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van elk individu. De volgende algemene richtlijnen geven aan waar u rekening mee moet houden bij het instellen.

Kies een zitkussen zeer zorgvuldig. Naast comfort heeft het ook invloed op de stabiliteit en dus de bewegingsvrij-


heid. Zitkussens hebben verschillende eigenschappen in drukverdeling.

De instelling van de rugleuning is een combinatie van hoek, hoogte en vorm. Daarom moeten de hoek en

hoogte van de rugleuning mogelijk worden aangepast als de rughoes wordt afgesteld.


Rughoes

- Haal alle banden op de achterzijde los, maar zorg dat het klittenband aan elkaar blijft kleven.
- Plaats de rughoes zodanig dat deze over de bovenste rand van de rails van de rugleuning komt en een vouw tussen de zitting en de rugleuning vormt, zodat de gebruiker goed op de zitting kan zitten.

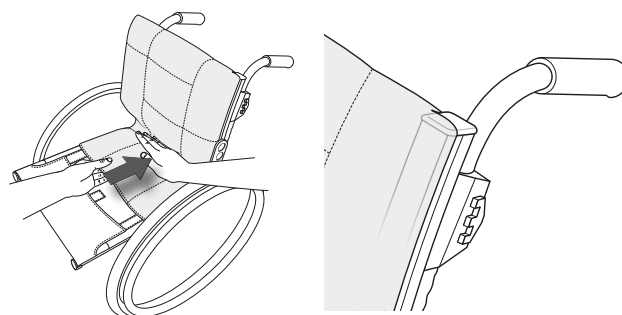

Zitkussen

- Zorg dat de zitdiepte juist is ingesteld.
- Plaats het kussen zo ver mogelijk naar achteren op de zitting zodat de afgeronde hoeken tussen de rails van de rugleuning komen.
- Meet een geschikte lengte van het zitkussen af en snijd het volgens de meegeleverde instructies.
- Het zitkussen krijgt meer contouren als u een contourinleg in het vak van de kussenhoek onder het zitkussen plaatst.

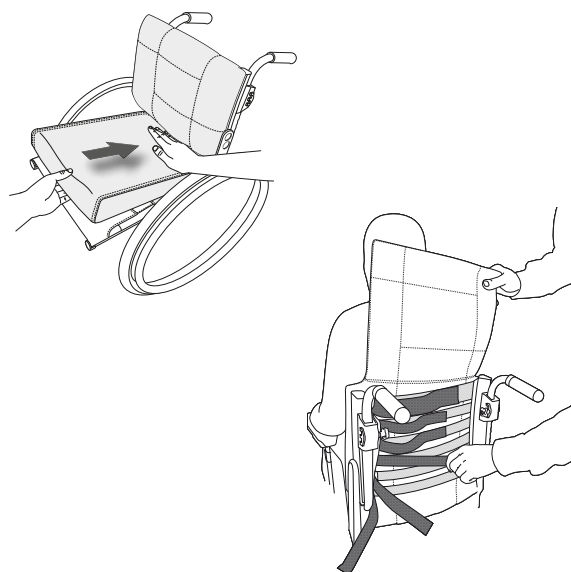

Rugbekleding

De bekleding van de rugleuning kan worden afgesteld terwijl de gebruiker in de rolstoel zit.

- Zorg dat de gebruiker zo ver mogelijk naar achteren op de zitting zit.
- Ondersteun het bekken door de band vlak onder de lendenen vast te maken.
- Stel daarna de bovenste band af zodat de gebruiker ondersteuning van het bovenlichaam krijgt en in balans zit.
- De andere banden worden afgesteld om ruimte voor de achterkant van de gebruiker te creëren en volgen de natuurlijke kromming van het lichaam.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.



Span de bovenste banden niet te strak aan omdat het kruisframe dan mogelijk niet kan worden uitgeklaapt; de buizen van het zitframe liggen dan niet vlak in de zijframes.

Hoek van de rugleuning

De hoek van de rugleuning moet misschien worden afgesteld als de vorm van de bekleding van de rugleuning wordt aangepast.

Neem contact op met uw leverancier of centrum voor technische hulpmiddelen.


Gebruikershandleiding

Instellingen

Voetsteunen


Stel de hoogte af totdat u zeker weet dat uw voeten worden ondersteund en uw dijen op het kussen rusten.

Bij gebruik buiten moeten de voetsteunen 4-5 cm boven de grond worden gezet.

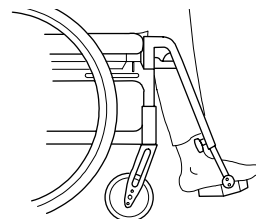

De hoek afstellen


Stel de hoek van de voetensteunen zodanig af dat de enkels een hoek van 90° maken.

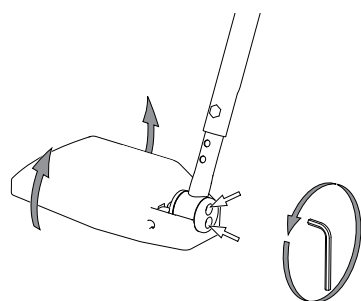

5 mm


De hoogte afstellen

Draai de knop los en trek de schroef naar buiten. Stel de hoogte in. Monteer de schroef en knop, en draai ze stevig vast.

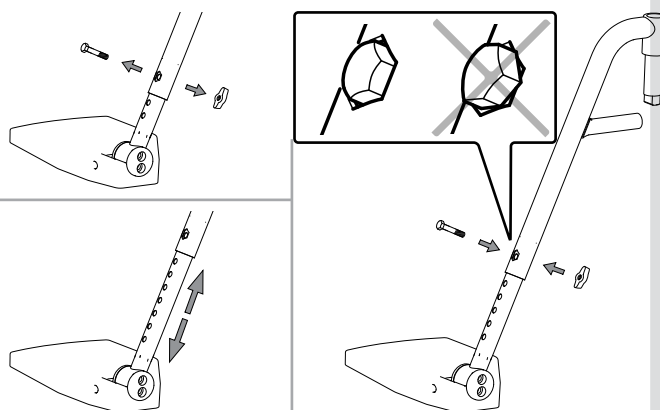


Aanpassen diepte voetplaten

Pas de diepte van de voetplaten aan door de rechter en de linker voetplaat om te wisselen. Vergeet niet de hoek aan te passen.

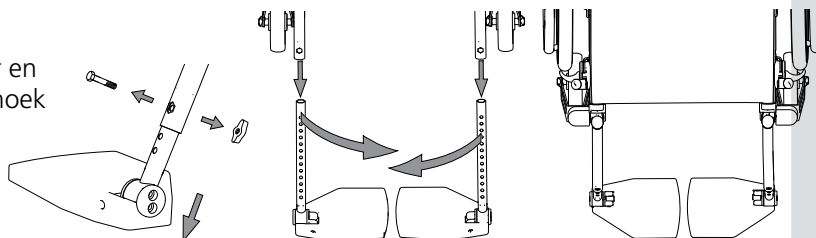


Kuit-/hakband

- Stel de lengte zo af dat het middelste deel van uw voeten op de voetsteunen rust.

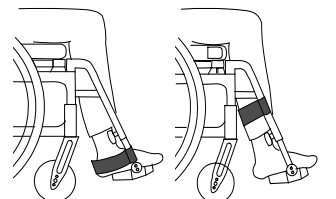

Armsteun (afstellen)

- Draai de schroef aan de binnenzijde van de armsteunplaat los.
- Stel de gewenste hoogte in en draai de schroef vast.
- De hoge positie van de armsteunen ondersteunt en verlicht de druk op de rug beter dan een lagere positie.

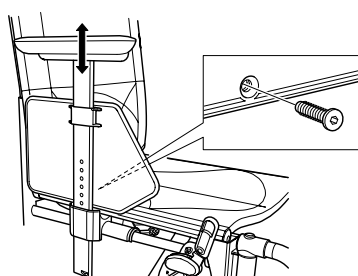

3 mm


Gebruikershandleiding

Rijtechniek, manoeuvreren



Parkeren

Draai de zwenkwielen naar voren en schakel de remmen in.

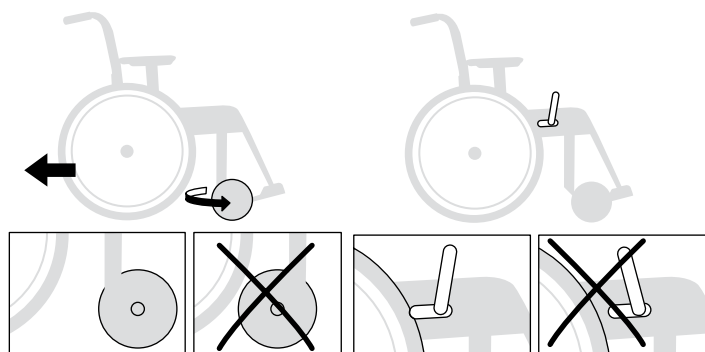


In/uit de rolstoel stappen


Draai de zwenkwielen naar voren, schakel de remmen in, klap de voetsteunen omhoog en draai de beensteunen naar één kant.




Niet op de voetplaten staan.
Risico op letsel.

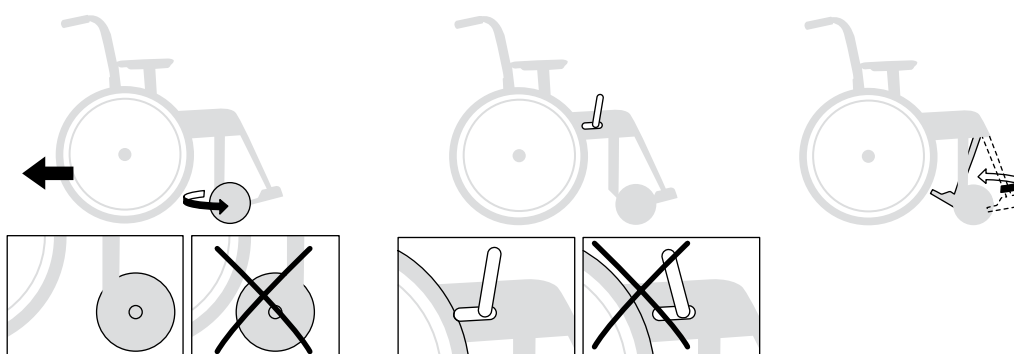


Zijdelings

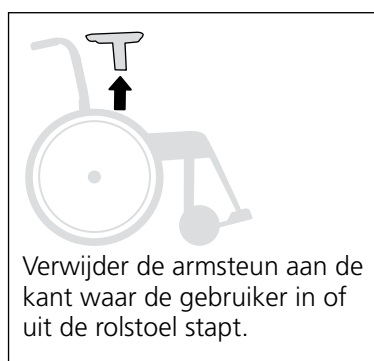

Vanaf de voorkant

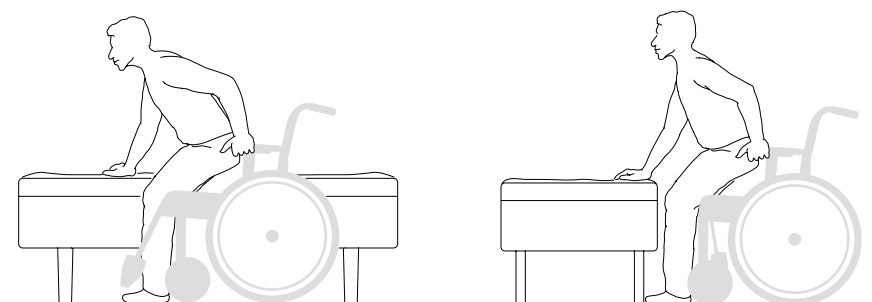

De rolstoel optillen

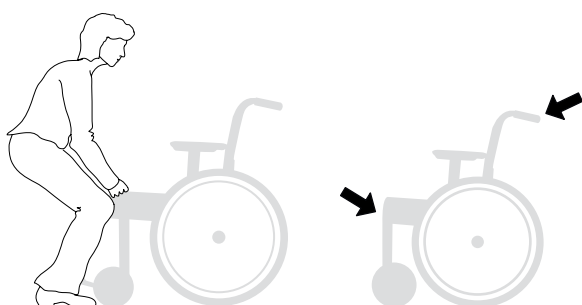

Til de rolstoel op aan de duwbeugels en het voorste bovenste deel van het frame of aan de blokkeerbare beensteunen. Verwijder de niet-vergrendelbare beensteunen (vast, verhoogd, amputatie) of zwenk ze onder de zitting.

Voordat u aan de duwbeugels optilt, moet u ervoor zorgen dat de knoppen/vergrendelingshendels goed zijn vastgedraaid/vergrendeld en dat de veiligheidsknoppen onder de beugels zijn uitgeklapt.



Controleer vóór het tillen of de blokkeerbare beensteunen zijn vergrendeld. Risico op letsel.

Gebruikershandleiding


! In de volgende afbeeldingen staan principes voor duwtechnieken en hoe u obstakels zoals opstapjes en stoepen met de rolstoel kunt nemen.

! Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.




Gebruiker, omhoog voorwaarts

Deze techniek wordt alleen aanbevolen voor ervaren rolstoelgebruikers.
– Zorg dat de antiekiepvoorzieningen niet zijn ingeschakeld.

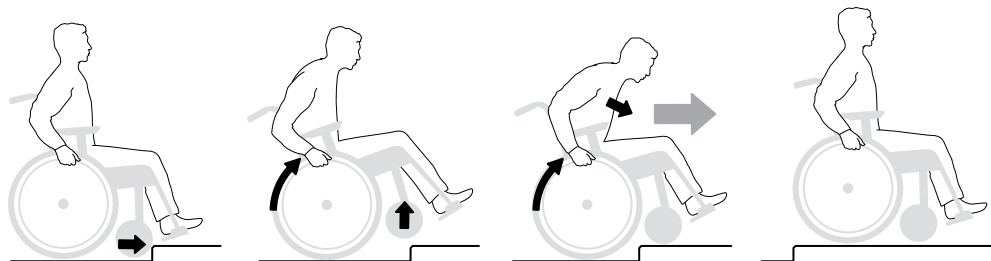


Gebruiker, omhoog achterwaarts

Deze techniek werkt alleen bij een lage stoeprand/drempel ten opzichte van de ingestelde hoogte van de voetsteunen.
– Zorg dat de antiekiepvoorzieningen niet zijn ingeschakeld.

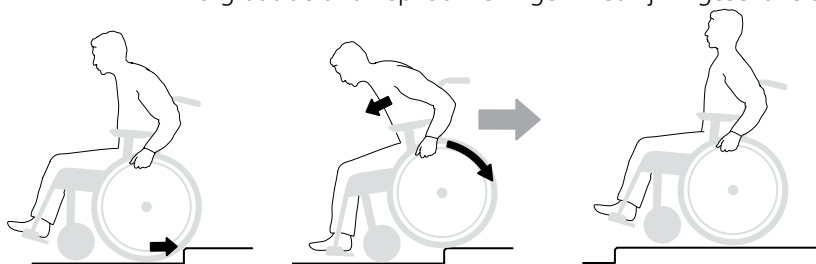


Gebruiker, omlaag voorwaarts

Deze techniek wordt alleen aanbevolen voor ervaren rolstoelgebruikers.
– Zorg dat de antiekiepvoorzieningen niet zijn ingeschakeld.

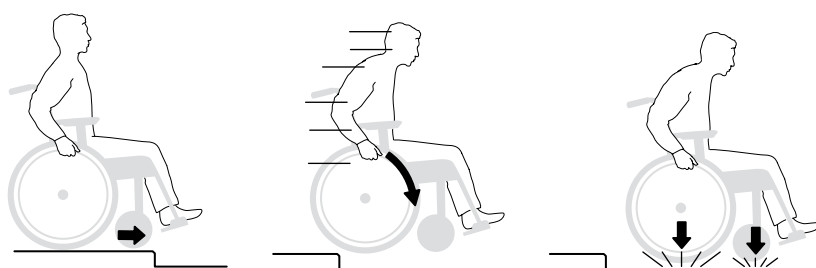

Gebruiker, omlaag achterwaarts

Deze techniek wordt alleen aanbevolen voor ervaren rolstoelgebruikers.
– Zorg dat de antiekiepvoorzieningen niet zijn ingeschakeld.

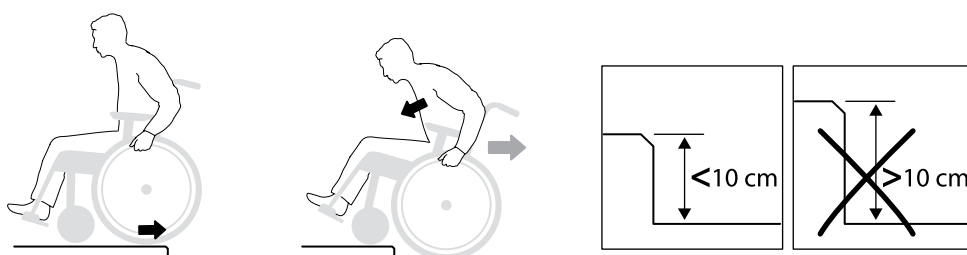

Gebruikershandleiding




Verzorger, omhoog voorwaarts

– Zorg dat de antiekiepvorzieningen niet zijn ingeschakeld.




Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

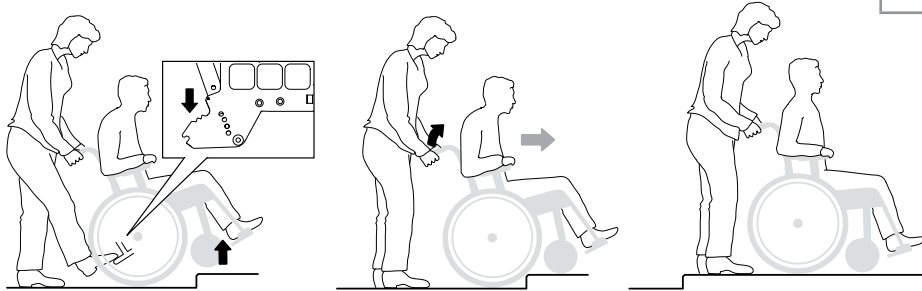


Verzorger, omhoog achterwaarts

– Zorg dat de antiekiepvorzieningen niet zijn ingeschakeld.

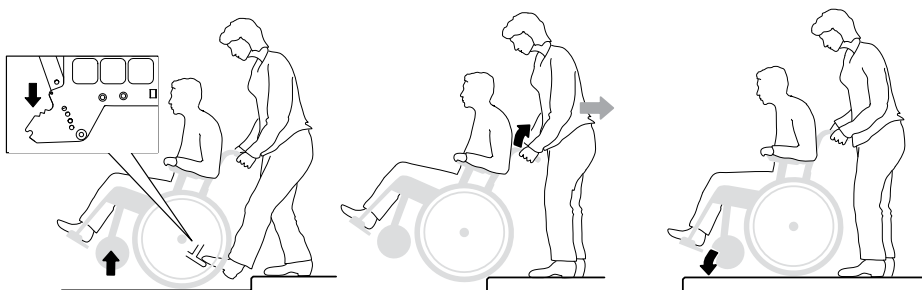


Verzorger, omlaag voorwaarts

– Zorg dat de antiekiepvorzieningen niet zijn ingeschakeld.

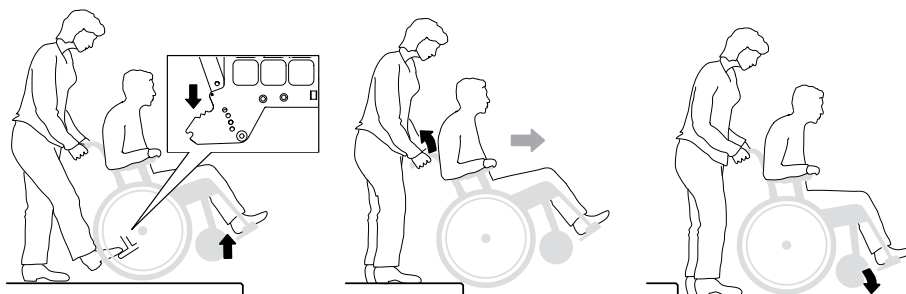

Verzorger, omlaag achterwaarts

– Zorg dat de antiekiepvorzieningen niet zijn ingeschakeld.

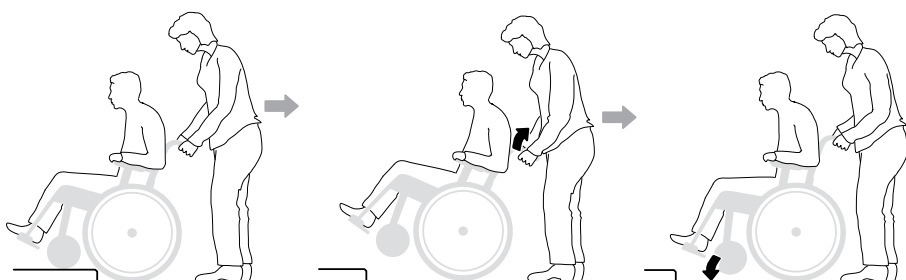

Gebruikershandleiding




Trap, omhoog

– Zorg dat de antiekiepvoorzieningen niet zijn ingeschakeld. Ga nooit met de rolstoel op een roltrap, ook niet als er een verzorger bij u is. Zorg dat de in hoogte verstelbare duwhandvatten zijn vastgezet.

We raden altijd aan om deze verplaatsing met twee verzorgers uit te voeren. Eén van deze verzorgers loopt aan de achterzijde en houdt het duwhandvat vast, de ander loopt voor en houdt het frame vast (of de beensteunen als deze vergrendelbaar zijn).



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

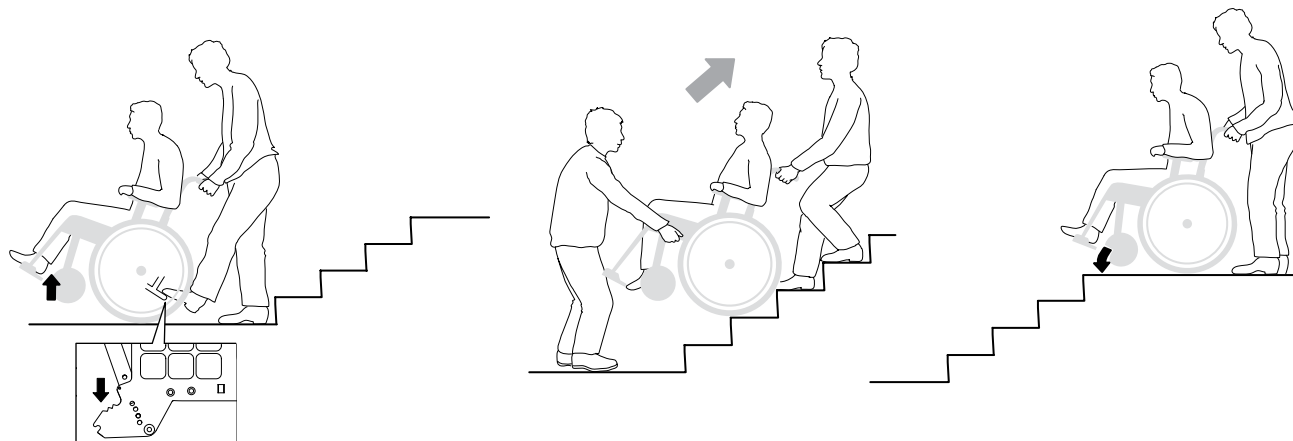

Trap, omlaag

– Zorg dat de antiekiepvoorzieningen niet zijn ingeschakeld. Ga nooit met de rolstoel op een roltrap, ook niet als er een verzorger bij u is. Zorg dat de in hoogte verstelbare duwhandvatten stevig zijn vastgezet.

We raden altijd aan om deze verplaatsing met twee verzorgers uit te voeren. Eén van deze verzorgers loopt aan de achterzijde en houdt het duwhandvat vast, de ander loopt voor en houdt het frame vast (of de beensteunen als deze vergrendelbaar zijn).




Heuvel omhoog/omlaag

Regel uw snelheid met de grijphoepels, niet met de remmen!

Draai de rolstoel niet halverwege een helling om. Rijd altijd zo recht mogelijk omhoog/omlaag. Als u niet zeker bent, vraag dan om hulp.


Omhoog

Leun naar voren om uw middelpunt te corrigeren.

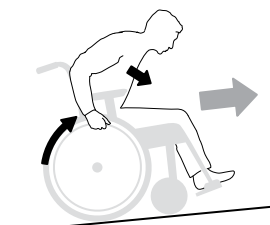

Omlaag

Leun naar achteren om uw middelpunt te corrigeren.

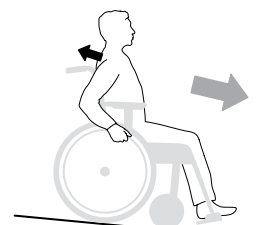

Gebruikershandleiding

Onderhoud

Achterwielen: Reinig assen met snelkoppelingen waar nodig.

Bandenspanning: Controleer de bandenspanning (één keer per maand).

Zwenkwielen: Reinig de assen van de zwenkwielen waar nodig.

Onderstel: Reinig het onderstel met een niet-schurend reinigingsmiddel, met een pH-waarde van 5 tot 9, of

met een oplossing van 70% ontsmettingsmiddel. Daarna afspoelen en drogen.

Bekleding: Wassen, zie de labels op elk onderdeel.

Smeer waar nodig bewegende delen/koppelingen met fietsolie of vergelijkbaar.

Neem bij problemen contact op met uw leverancier of centrum voor technische hulpmiddelen.

Schema voor het oplossen van problemen

De rolstoel trekt scheef	• Pomp de banden op • Controleer de hoek van de voorvorkhouders en stel ze af • Controleer of de voorvorkhouders op dezelfde hoogte zijn ingesteld • Het gewicht van de gebruiker is niet gelijkmatig in de rolstoel verdeeld • Er is aan één kant meer kracht nodig dan aan de andere kant om de rolstoel voort te duwen
De rolstoel duwt zwaar	• Pomp de banden op • De achterwielbevestigingen zijn verkeerd gemonteerd • Verwijder haren en vuil van de assen van de zwenkwielen • Te veel gewicht op de zwenkwielen. Stel het middelpunt af
De rolstoel duwt zwaar bij het draaien	• Pomp de banden op • Controleer of de voorvorkhouders niet te stevig zijn vastgedraaid • Controleer de hoek van de voorvorkhouders en stel ze af • Verwijder vuil van de assen van de zwenkwielen • Te veel gewicht op de zwenkwielen. Stel het middelpunt af
Remmen werken niet goed	• Pomp de banden op • Stel de afstand tussen rem en band af
Achterwielen zitten "los"	• Stel de lengte van de steekas af
Achterwielen lastig te verwijderen/terug te plaatsen	• Reinig en smeer de snelkoppeling met fietsolie of vergelijkbaar • Stel de lengte van de steekas af
De zwenkwielen "wiebelen"	• De voorvorken zijn niet stevig genoeg vastgedraaid • Controleer de hoogte en de hoek van de voorvorkhouders en stel ze af • Te veel gewicht op de zwenkwielen. Stel het middelpunt af
De rolstoel is moeilijk in/uit te klappen	• De bekleding is te strak gespannen • Reinig en smeer het kruisframe onder de zitting
De rolstoel voelt "raar"	• Pomp de banden op • Controleer of de schroeven, moeren en bouten goed zijn vastgedraaid

Etac
Box 203, 334 24 Anderstorp, Sweden
Tel +46 371 58 73 00
Fax +46 371 58 73 90
www.etac.com

5. Instellingen

Zithoek

De zithoek hangt af van het verschil tussen de zithoogtes voor en achter



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

Als de zithoek is gewijzigd:

- Stel de hoek van de voorvorkhouder af.
- Controleer de hoek van de rugleuning

Zitdiepte

De zitdiepte kan worden versteld door de bekleding aan de voorzijde van de zitting omhoog te tillen en deze naar voren of naar achteren te schuiven.

Bij de Crossrug 3A met drie hoeken kan de zitdiepte nog verder worden afgesteld met behulp van de lumbaalhoek (zie het deel '*De zitdiepte afstellen met behulp van de lumbaalhoek, rugleuning Triangulaire*').



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

Zitcomfort

Als de zithoogte, zithoek, zitdiepte en rugleuninghoek zijn afgesteld, moet u het zitcomfort optimaliseren. Zie het deel *‘Instellingen zitcomfort’* in de gebruikershandleiding.



6. Instellingen rugleuning 3A

Cross 5

Cross 5 XL

De hoek van de rugsteun afstellen




1. Draai de moer los.

2. Stel de hoek van de rugleuning af. Gebruik de positiemarkeringen om dezelfde hoek van de rugsteunen rechts en links te krijgen.

3. Draai de moer vast



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

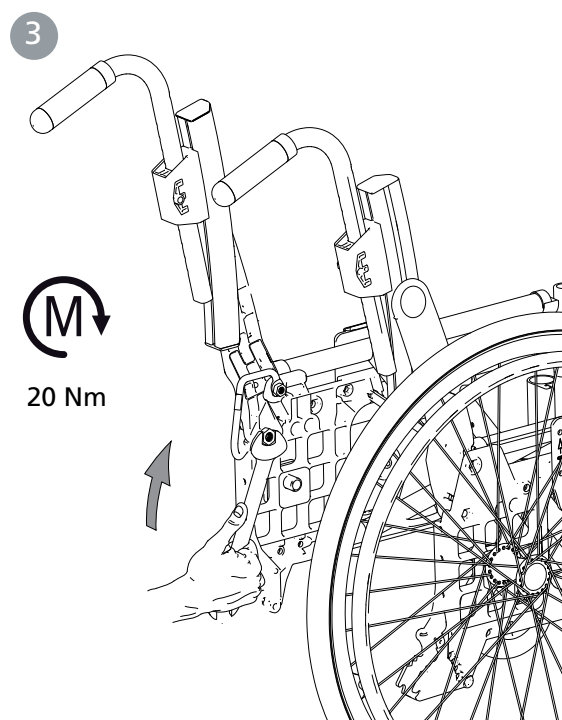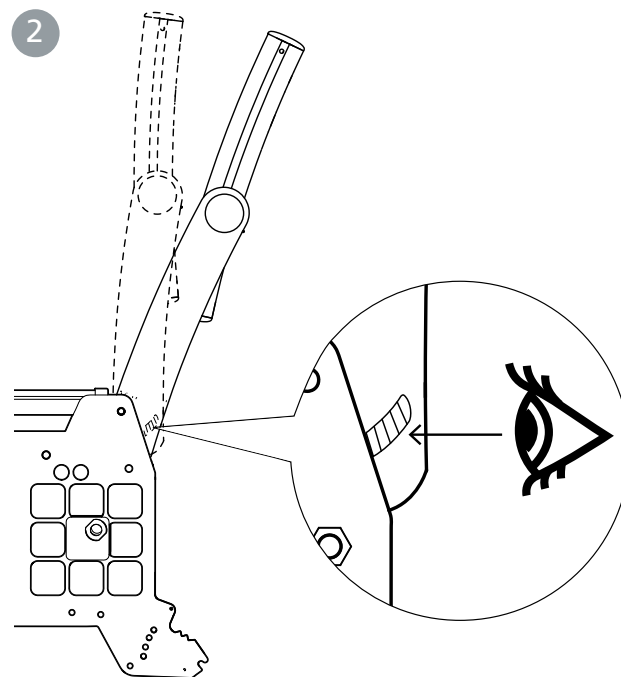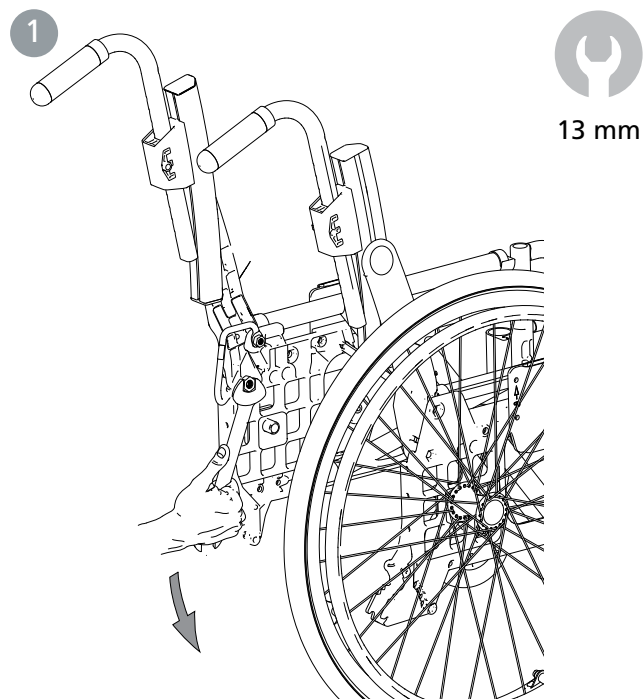

6. Instellingen rugleuning 3A

Cross 5


Cross 5 XL

De hoogte van de rugleuning en de lumbaalhoek afstellen

1. Draai de stelschroeven (A) maximaal 1 slag los.
2. Stel de hoogte van de rugsteun af met behulp van de schaalverdeling en markering op de onderste rugtang. Draai de stelschroeven maximaal 1/2 slag vast.
3. Steek de inbussleutel in de stelschroef van de excentrische as en draai de schroef 1/2 slag los. Beweeg de inbussleutel in de richting van de sleutelgreep van de excentrische as en stel de gewenste lumbaalhoek in.
4. Draai de stelschroeven vast met 6 Nm.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

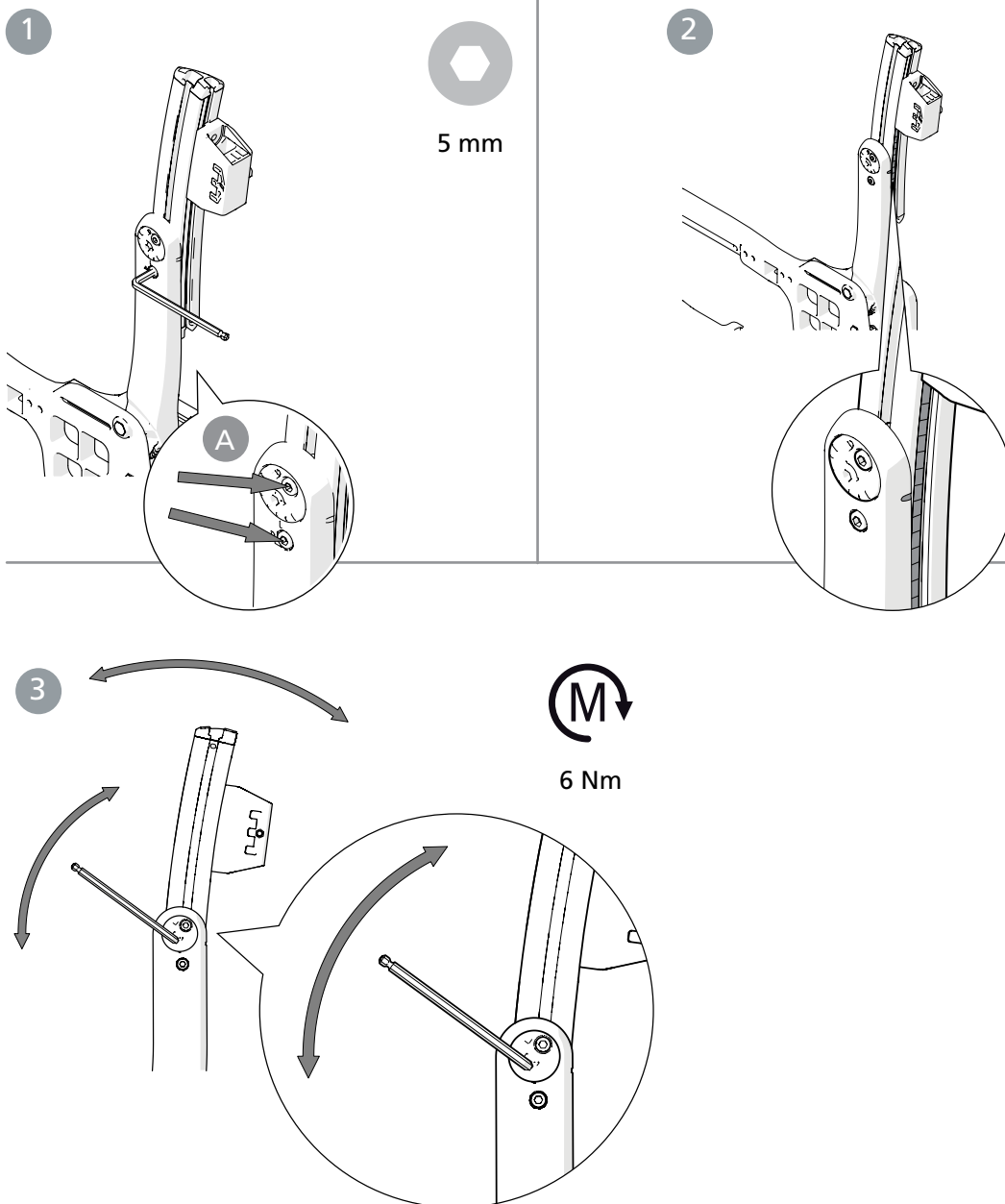

6. Instellingen rugleuning 3A

De zitdiepte afstellen met behulp van de lumbaalhoek



Extra zitdiepte kan worden verkregen door eerst de hoek van de rugsteun (heup) te openen en vervolgens de lumbaalhoek.

1. Stel de hoek van de rugleuning af (zie ook *afbeelding 1-3 op pagina 32*).
2. Stel de lumbaalhoek met behulp van de excentrische asse af in de vereiste hoek van de rugleuning, zoals aangegeven bij *punt 4-5 op pagina 34*.

3. Monteer zo nodig een zittingverlenger (accessoire).





Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

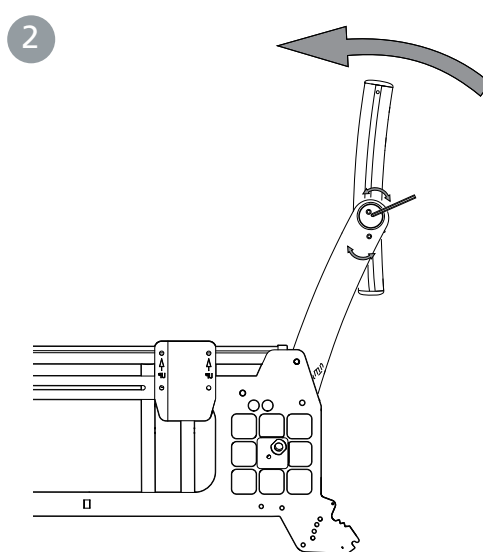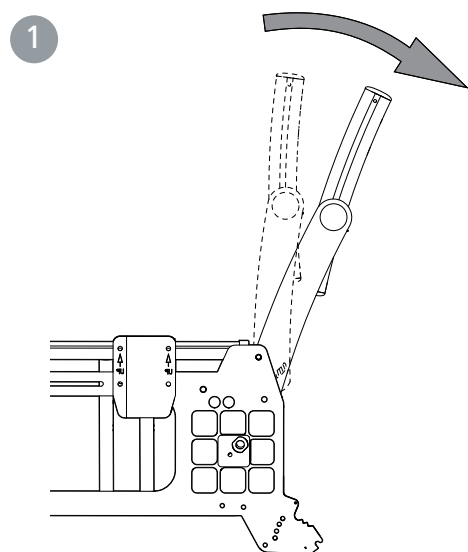

5 mm

De zittingverlenger monteren

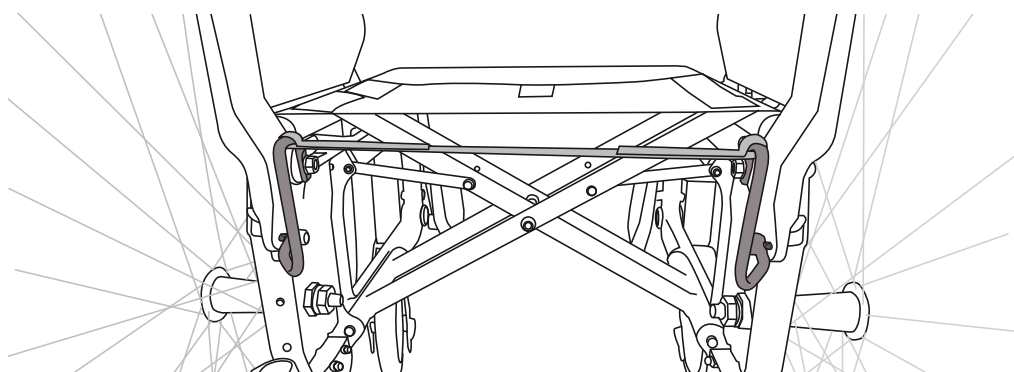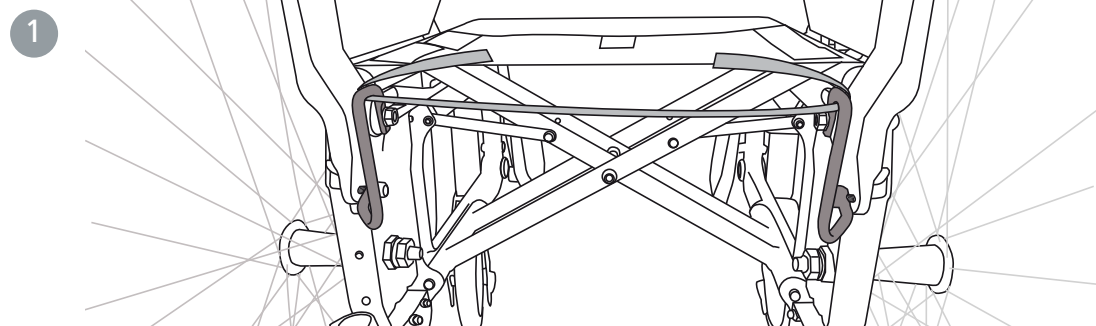

6. Instellingen rugleuning 3A

Cross 5

Cross 5 XL

De hoogte van de rugleuning en de lumbaalhoek afstellen (twee excentrische assen)


1. Draai de stelschroeven (A) maximaal 1 slag los.
2. Stel de hoogte van de rugsteun af met behulp van de schaalverdeling en markering op de onderste rugstang. Draai de stelschroeven maximaal 1/2 slag vast.
3. Steek de inbussleutel in de stelschroef van de relevante excentrische as (bij voorkeur de bovenste) en draai de schroef 1/2 slag los. Beweeg de inbussleutel in de richting van de sleutelgreep van de excentrische as en stel de gewenste lumbaalhoek in.
4. Draai de stelschroeven vast met 6 Nm.



We raden aan om bij het aanpassen van de lumbaalhoek te beginnen met de bovenste excentrische as. Als er een grotere hoek moet worden afgesteld, stel dan de onderste excentrische as ook af.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

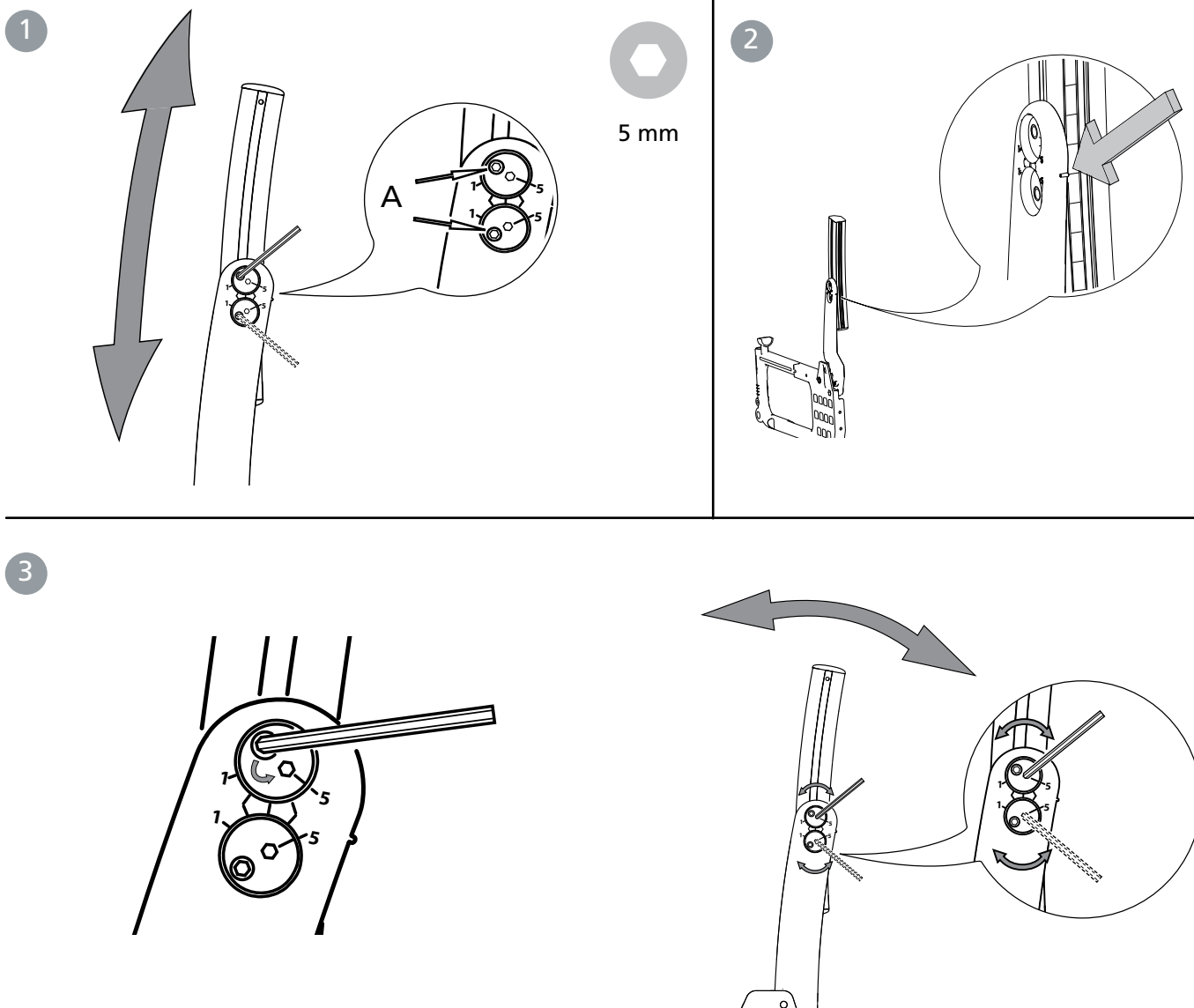

6. Instellingen rugleuning 3A

De zitdiepte afstellen met behulp van de lumbaalhoek (twee excentrische assen)



Extra zitdiepte kan worden verkregen door eerst de hoek van de rugsteun (heup) te openen en vervolgens de lumbaalhoek.

1. Stel de hoek van de rugleuning af (zie ook *afbeelding 1-3 op pagina 32*).
2. Stel de lumbaalhoek met behulp van de excentrische assen af in de vereiste hoek van de rugleuning, zoals aangegeven bij *punt 4-5 op pagina 34*.

3. Monteer zo nodig een zittingverlenger (accessoire).



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

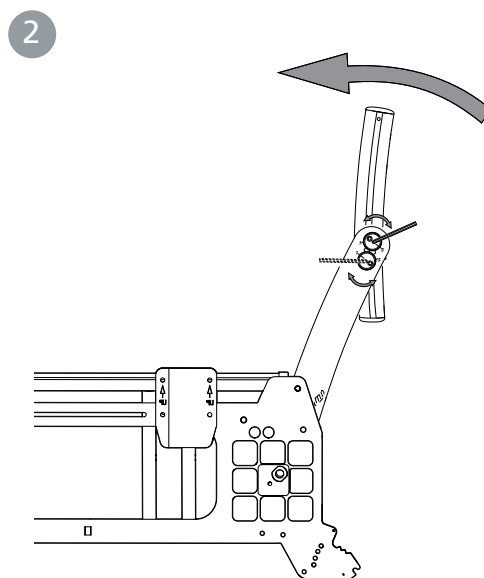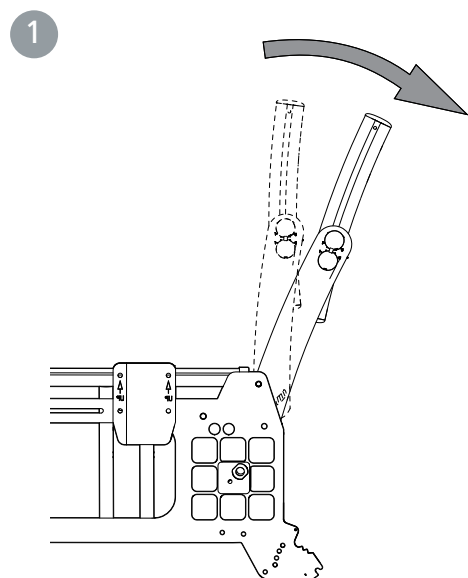

5 mm

Cross 5


Cross 5 XL



7. Instellingen rugleuning 2

Hoogte van de rugleuning

De hoogte van de rugleuning is traploos instelbaar (Zie "De mogelijkheden van de stoel"). Draai de schroeven (A) 2-3 slagen los om de hoogte van de rugleuning in te stellen. Verzeker u ervan dat beide zijden op dezelfde hoogte staan door dit met de meetlat (B) op de achterzijde van de rugleuningbuis te controleren. Draai de schroeven stevig vast.

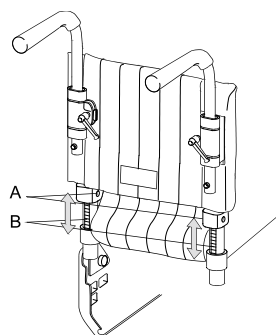

5 mm




Kantelgevaar. Als de anti-kiem wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiem om kantelen te voorkomen.

Hoek van de rugleuning

De hoek van de rugleuning is traploos instelbaar (Zie "De mogelijkheden van de stoel"). De hoek kan worden ingesteld met behulp van de moer aan de binnenzijde van de achterwielbevestigingen.

- Draai de moer op een van de rugleuningbuizen los, stel de juiste hoek in en draai de moer weer stevig vast.
- Herhaal de procedure aan de andere zijde.

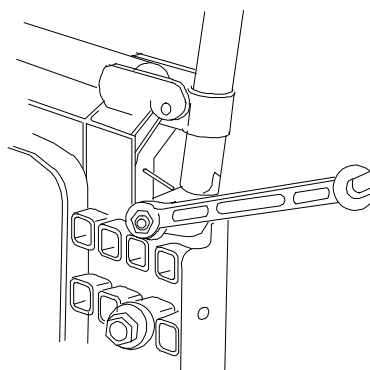

Controleer of de hoek aan beide zijden hetzelfde is door de afstand tussen de rugleuningbuis en de armsteunplaat te vergelijken..




Kantelgevaar. Als de anti-kiem wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiem om kantelen te voorkomen.

Rugbekleding

De vorm van de rugbekleding is geheel verstelbaar met behulp van de vijf spanbanden en de rughoes.

- Zorg dat er bij de hoes ruim voldoende ruimte tussen de zitting en de rugleuning is, zodat de rug ook echt tegen de rugleuning steunt.
- Haal alle banden los en zorg dat de gebruiker zo ver mogelijk naar achteren op de zitting zit.
- Span de banden zodanig aan dat ze de contouren van de rug van de gebruiker volgen en voldoende ondersteuning bij de lendenen bieden.

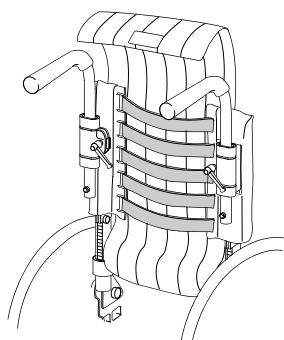

Span de bovenste banden niet te strak aan omdat het kruisframe dan mogelijk niet kan worden uitgeklaapt; de buizen van het zitframe liggen dan niet vlak in de zijframes.



Kantelgevaar. Als de anti-kiem wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiem om kantelen te voorkomen.

Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●



8. Instellingen rugleuning 2B

Hoogte van de rugleuning

De hoogte van de rugleuning is instelbaar (Zie "*De mogelijkheden van de stoel*"). Draai de schroeven los om de hoogte van de rugleuning in te stellen. Draai de schroeven vast.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

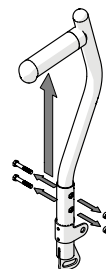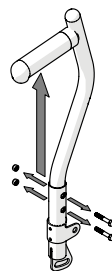

5 mm

Hoek van de rugleuning

De hoek van de rugleuning is traploos instelbaar (Zie "*De mogelijkheden van de stoel*"). De hoek kan worden ingesteld met behulp van de moer aan de binnenzijde van de achterwielbevestigingen.


- Draai de moer op een van de rugleuningbuizen los, stel de juiste hoek in en draai de moer weer stevig vast.
- Herhaal de procedure aan de andere zijde.



Controleer of de hoek aan beide zijden hetzelfde is door de afstand tussen de rugleuningbuis en de armsteunplaat te vergelijken..



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

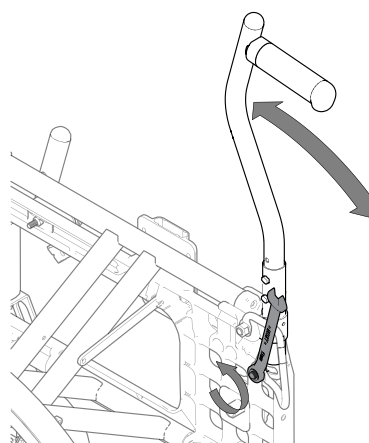

Rugbekleding

De vorm van de rugbekleding is geheel verstelbaar met behulp van de vijf spanbanden en de rughoes.

- Zorg dat er bij de hoes ruim voldoende ruimte tussen de zitting en de rugleuning is, zodat de rug ook echt tegen de rugleuning steunt.
- Haal alle banden los en zorg dat de gebruiker zo ver mogelijk naar achteren op de zitting zit.
- Span de banden zodanig aan dat ze de contouren van de rug van de gebruiker volgen en voldoende ondersteuning bij de lendenen bieden.



Span de bovenste banden niet te strak aan omdat het kruisframe dan mogelijk niet kan worden uitgekapt; de buizen van het zitframe liggen dan niet vlak in de zijframes.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

9. Opnieuw afstellen

Cross 5

Cross 5 XL

Rem, afstellen


De remmen zijn traploos instelbaar.

1. Draai de schroef een paar slagen los.
2. Stel de rem af in de juiste positie.
3. Het remblok moet op een afstand van 15-20 mm tot de band staan als de rem niet is ingeschakeld.
4. Zorg dat de rem recht in de groef zit en draai de schroef vast. Test de remmen.

5. Zorg dat de moer aan de binnenzijde wordt geblokkeerd.




Het remeffect hangt af van de luchtdruk in de banden. De remmen zijn parkeerremmen en mogen niet tijdens gebruik worden ingeschakeld.

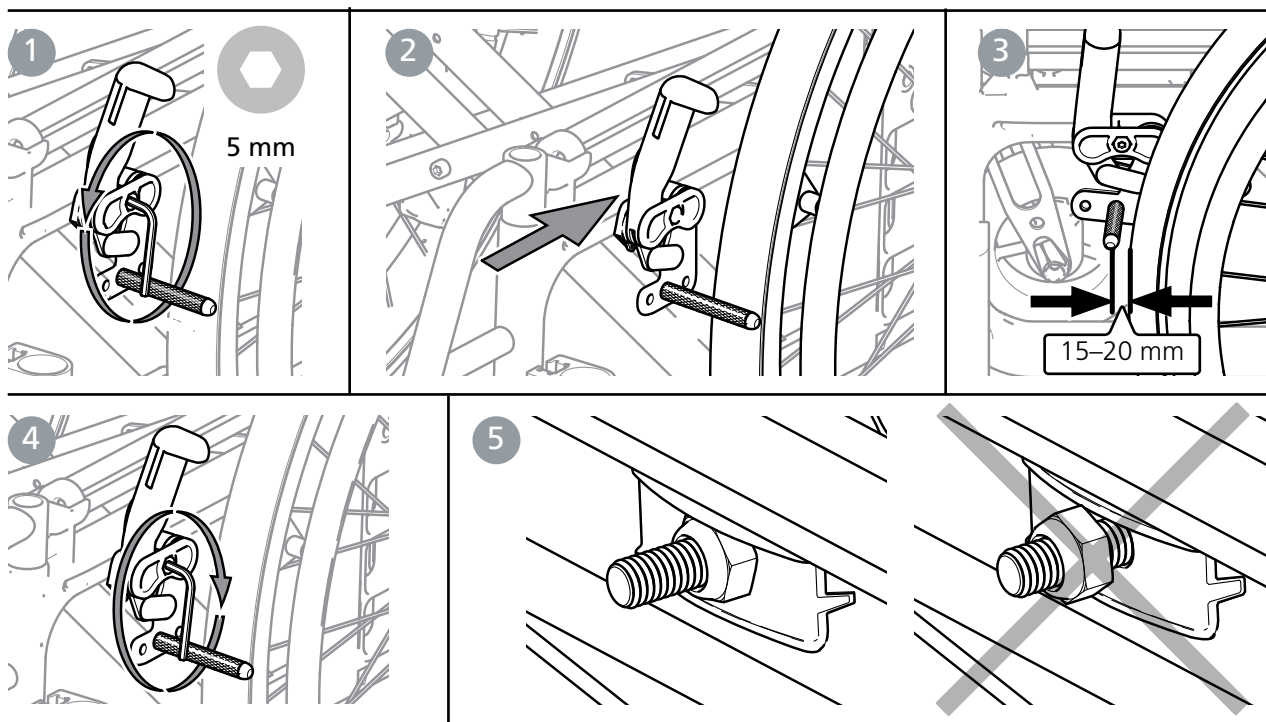


Als het achterwiel in een van de voorwaartse instellingen is gezet, bestaat de kans dat een ingeschakelde rem wordt vrijgegeven wanneer een beensteun opzij wordt geklapt. Voorkom dit door de remhendel zodanig af te stellen dat deze in een "neutrale" stand staat. In dat geval wordt de rem pas vrijgegeven wanneer de hendel dicht tegen het achterwiel aan wordt geduwd.

1. Draai de schroef aan de binnenzijde van de remhendel los.
2. Verwijder de ovale plaat, draai deze 180° (de pen aan de binnenkant van de plaat moet in het bovenste gat steken).
3. Draai deze weer vast.

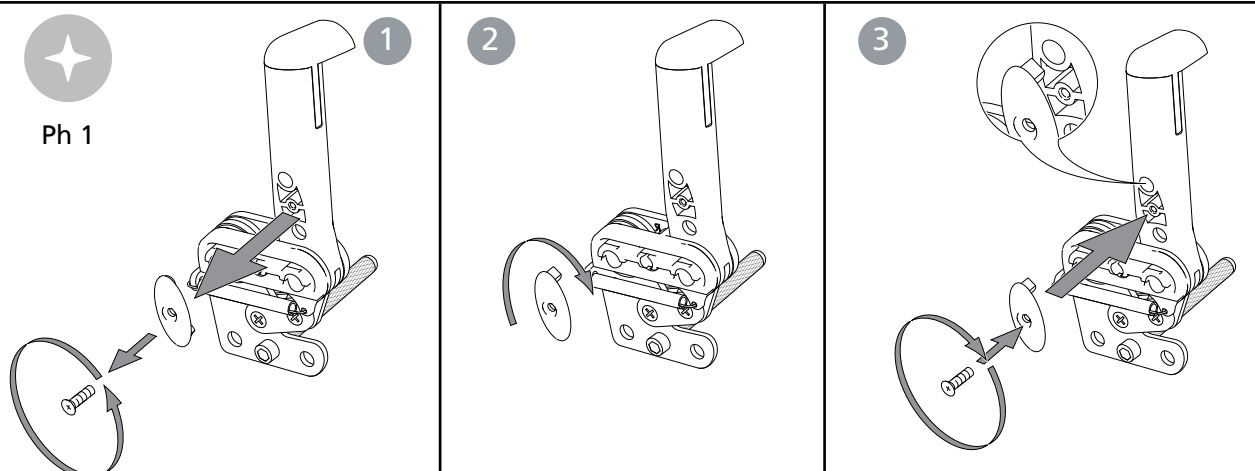


9. Opnieuw afstellen

Het remblok afstellen

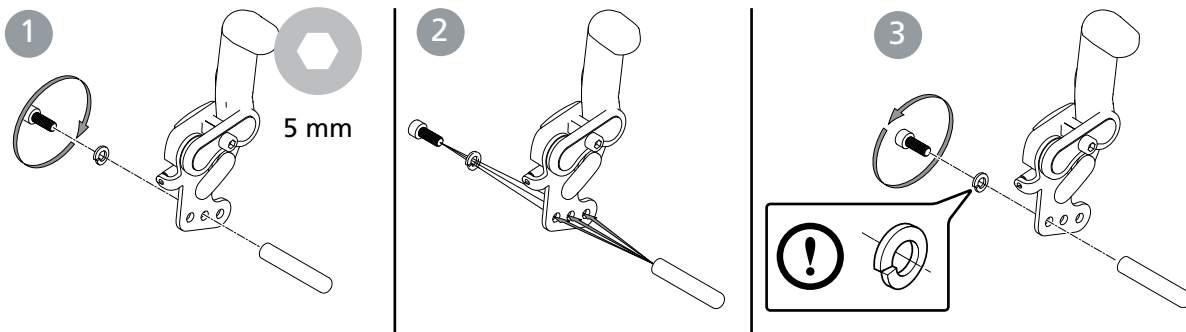

Beensteun, met traploos verstelbare hoek

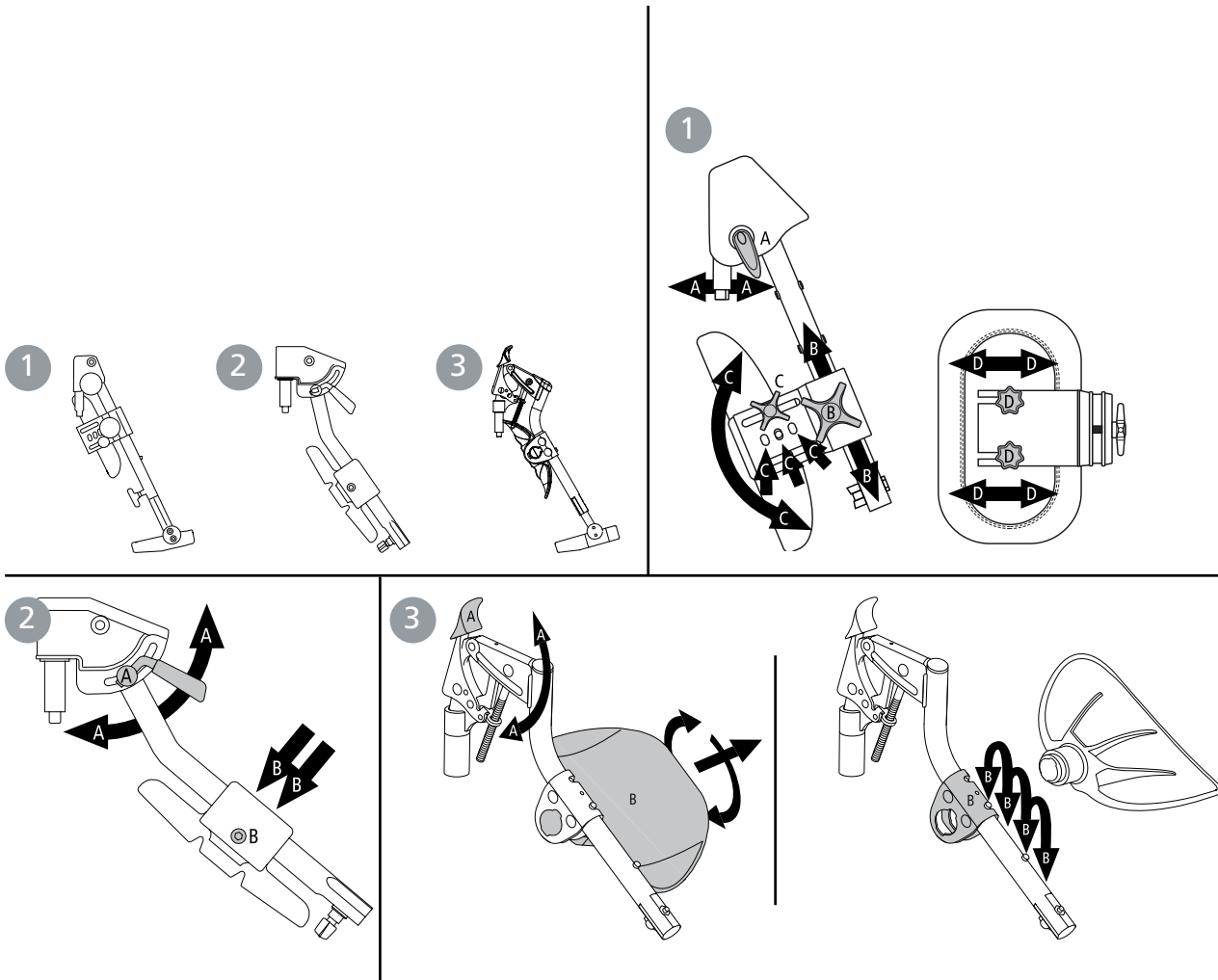


Cross 5
Cross 5 XL



9. Opnieuw afstellen

Amputatiesteun

Ga nooit op de amputatiesteun zitten of staan.

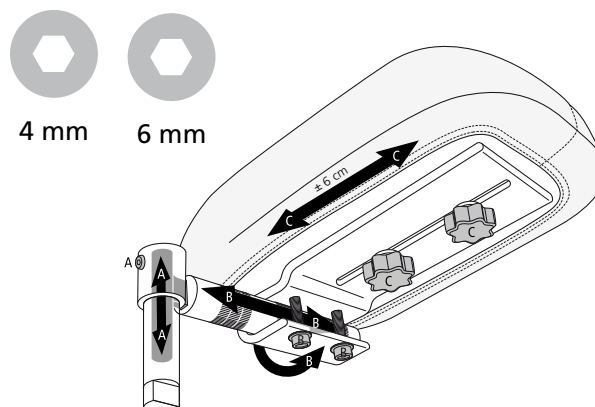


Antikiepvoorziening





De antikiepvoorzieningen zijn in hoogte, hoek en lengte verstelbaar.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.

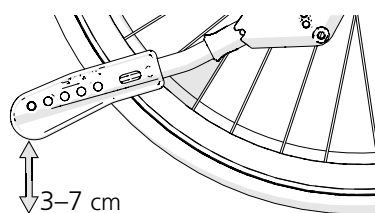

5 mm

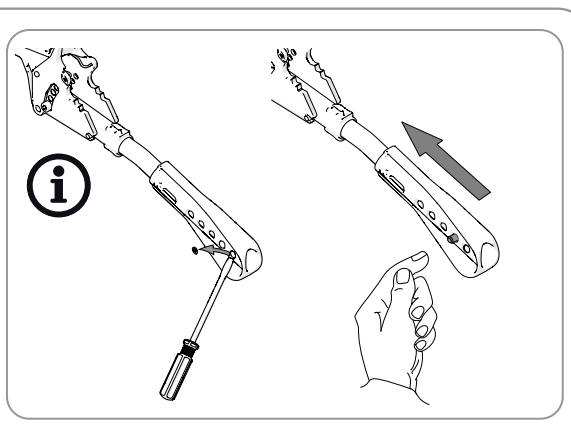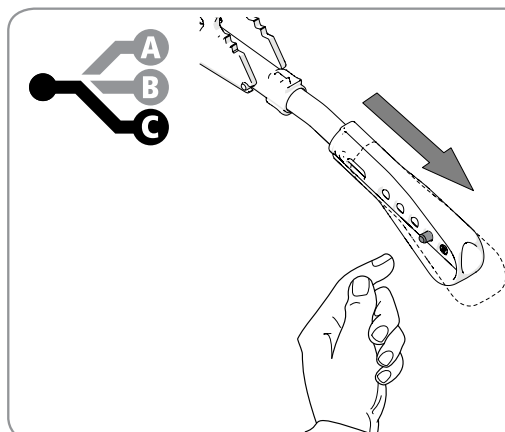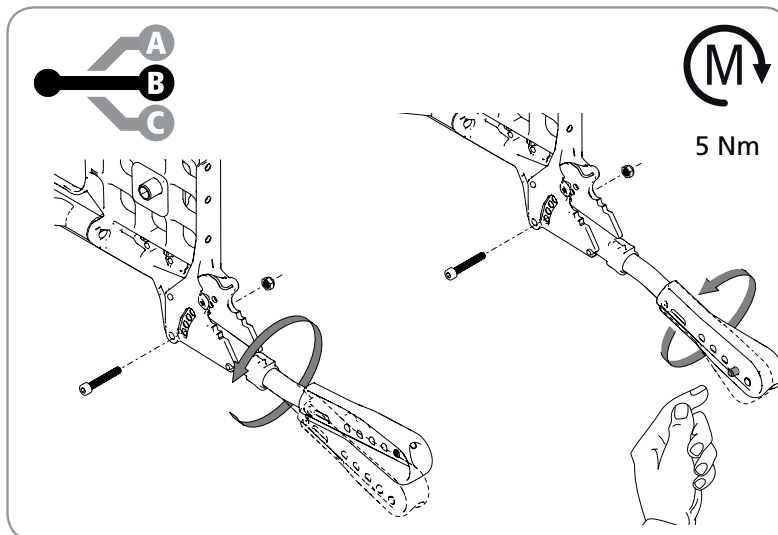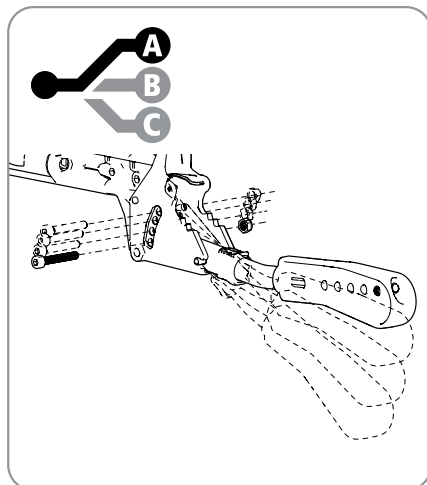


9. Opnieuw afstellen

De wielvlucht wijzigen

U kunt de wielvlucht wijzigen door de sluitringen tussen de huls en de moer aan te passen. Zie het deel "De zithoogte achter afstellen door de positie of grootte van het achterwiel te wijzigen".



Let er tijdens de montage van de achterwielen op dat de knop van de snelkoppeling correct naar buiten springt. Test dit door te draaien aan het wiel. Risico op letsel.

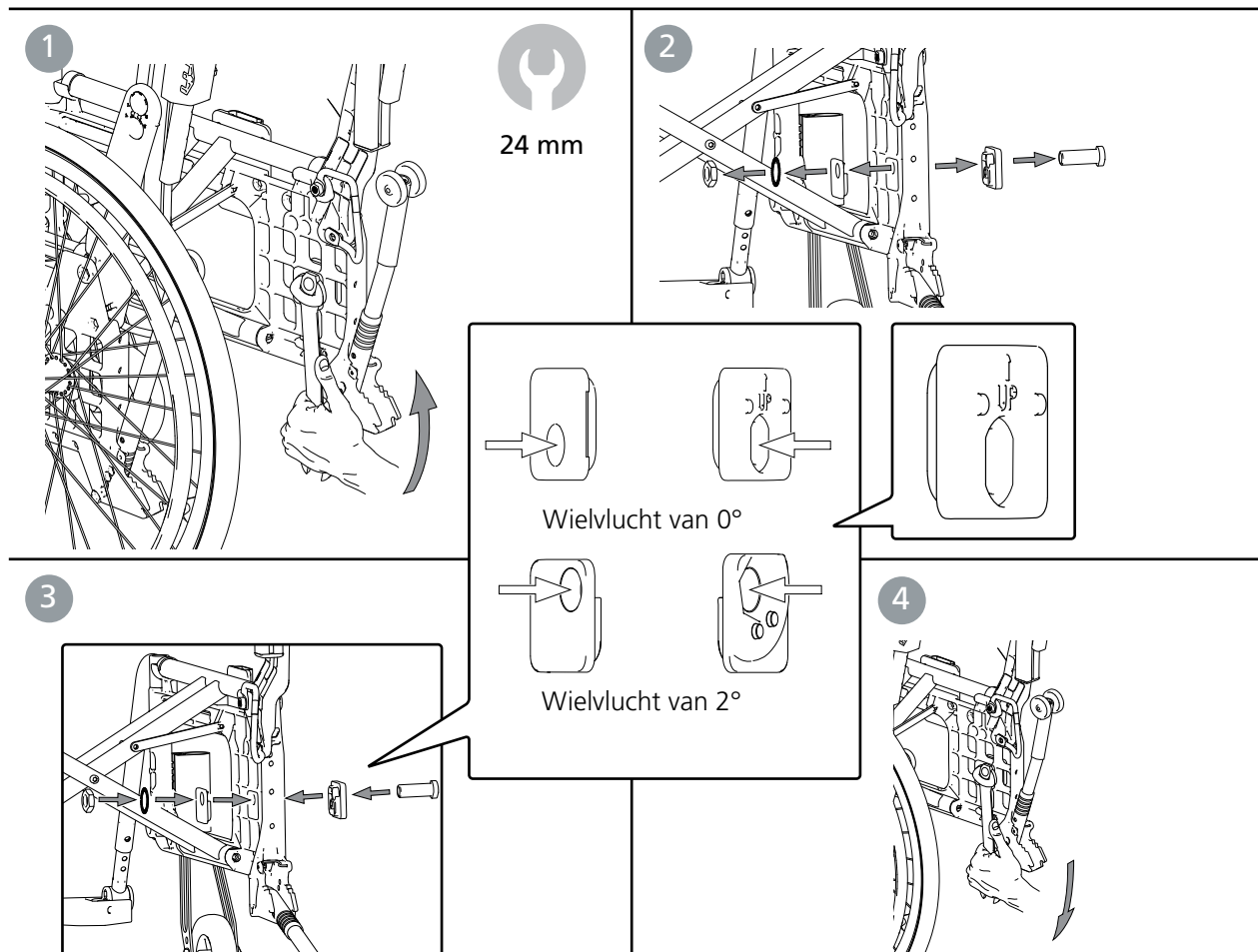

Het middelpunt afstellen

Het middelpunt kan worden aangepast door de positie van de achterwielen te wijzigen.

- Beweeg de steekas/achterwielen naar voren/naar achteren.



24 mm

Als de positie van de achterwielen naar voren wordt verplaatst, wordt de rolstoel veel wendbaarder, maar neemt de kans op achterover kantelen toe. Zie het deel "De zithoogte achter afstellen door de positie of grootte van het achterwiel te wijzigen".

De remmen moeten ook worden afgesteld; zie 'Rem, afstellen'.



Het middelpunt wordt ook gewijzigd als de zithoek en/of de hoek van de rugleuning wordt gewijzigd.



Kantelgevaar. Als de anti-kiep wordt uitgeschakeld, bestaat er een hoger risico op letsel. Activeer de anti-kiep om kantelen te voorkomen.



Let er tijdens de montage van de achterwielen op dat de knop van de snelkoppeling correct naar buiten springt. Test dit door te draaien aan het wiel. Risico op letsel.

9. Opnieuw afstellen

Cross 5

Cross 5 XL

Grijphoepels

Het materiaal van de aandrijfhoepels en de afstand tussen het achterwiel en de aandrijfhoepel hebben een invloed op de grip van de gebruiker.




Als er een kans bestaat dat de vingers van de gebruiker in de spaken bekneld raken, raden wij het gebruik van spaakbeschermers aan.

De afstand van de grijphoepel afstellen

Grijphoepels van aluminium, roestvrij materiaal of celrubber, of grijphoepels met een kunststof coating voor achterwielen van 24", 22" en 20".

De afstand tussen het wiel en de grijphoepel kan worden afgesteld door de twee afstandshouders te verplaatsen of te vervangen.

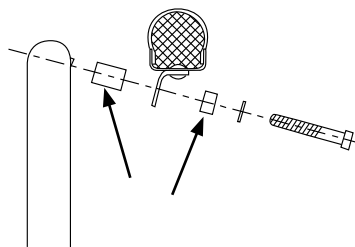



4 mm

Achterwielen met snelontgrendelingsknop

De afstand tussen de naafhuls en de borgkogels kan worden aangepast met behulp van de moer aan de buitenkant van de naaf. De afstand tussen de naafhuls en de borgkogels moet 0,2 tot 1,2 mm bedragen.



Controleer bij het in elkaar zetten van de rolstoel altijd of de snelontgrendelingsknop in de naaf goed naar buiten steekt. Test dit door aan het wiel te trekken.

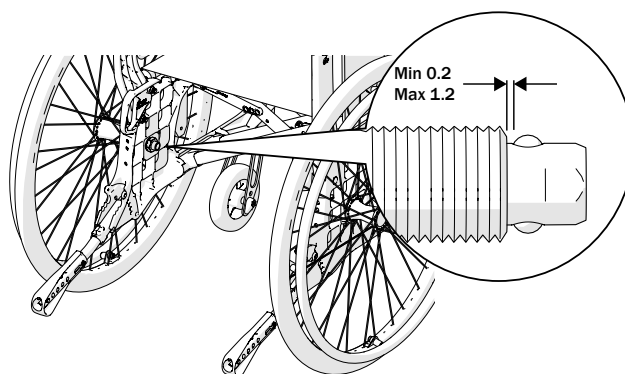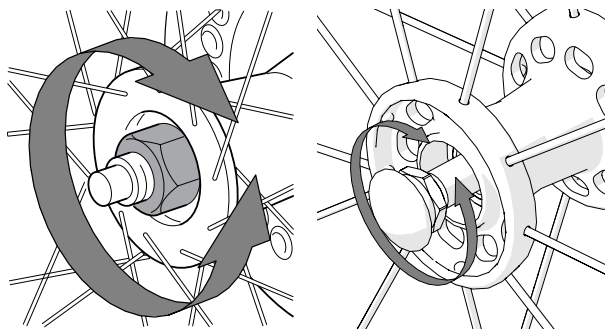

10. Accessoires – afstellen, hantering


Bij de accessoires die door Etac worden geleverd, zitten altijd montage-instructies. De instructies staan ook op onze website: www.etac.com.

Zitkussen en contourinleg

Het kussen is aan de voor- of achterrand op de juiste diepte gesneden. Zorg er bij het meten van de lengte voor dat het kussen goed tussen de achterste buizen is geplaatst, met de afgeronde hoeken aan de achterzijde.

Het kussen is een standaardmodel en niet geschikt voor gebruikers met doorzitplekken.

Een contourinleg is een handig accessoire voor het zitkussen. Deze zorgt ervoor dat de voorrand van de zitting vlak ligt, voor nog meer zitcomfort. Plaats de contourinleg in het binnenvak van de kussenhoes, onder het kussen. De pijl op de contourinleg moet zich aan de bovenzijde bevinden en naar voren wijzen.

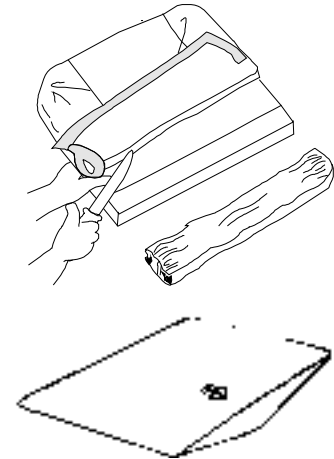

Armsteun, afneembaar, in hoogte instelbaar


De armsteunbevestiging kan op 2 verschillende hoogtes worden gemonteerd. In positie 1 kan de hoogte van de armsteun tussen 18 en 26 cm worden ingesteld en in positie 2 (standaard) tussen 24 en 31 cm, in stappen van 1 cm.



10 mm 5 mm

De vergrendelnok dient zowel om de hoogte van de armsteun in te stellen als om de zijbescherming vast te zetten:

- Draai de schroef los waarmee de vergrendelnok is bevestigd.
- Schuif de bescherming omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte.

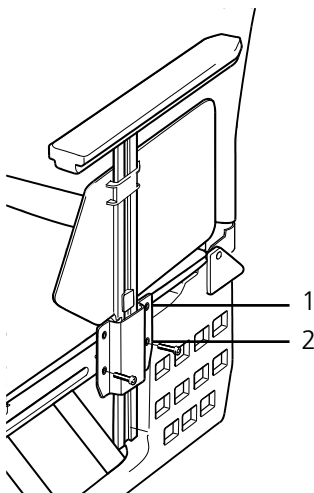

- Bevestig de nok weer op de zijbescherming.
- Eventueel kan de rechterarmsteun op de linkerzijde worden gemonteerd en andersom.



3 mm

Gebruik de armsteunen nooit om de rolstoel op te tillen.



Met 24" lagedruk- of massieve banden in pos. C1 bedekt de zijbescherming van de armsteun de voorste rand van het achterwiel niet.

10. Accessoires – afstellen, hantering

Cross 5

Cross 5 XL

Armsteun, opklapbaar, in hoogte verstelbaar

De opklapbare armsteun is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: in hoogte verstelbaar en met vaste hoogte. De armsteun is op het rolstoelframe gemonteerd en kan omhoog/naar achteren worden geklapt door de rode hendel (A) in te drukken. Monteer de armsteun volgens de meegeleverde montage-instructies.

De hoogte van de armsteun kan tussen 22 en 30 cm worden ingesteld, in stappen van 1 cm.


- Druk de rode hendel opzij en draai de schroeven los waarmee de armsteunbeugel op het frame is bevestigd.
 - Schuif de armsteun omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte.
 - Draai de schroeven weer vast.
- Gebruik de armsteunen nooit om de rolstoel op te tillen.



Deze armsteunen kunnen niet worden gecombineerd met de stokhouder of met 24", 22" of 20" achterwielen in positie C.



Zie de informatie onder Toebehoren voor beperkingen van de kantelbeveiliging.

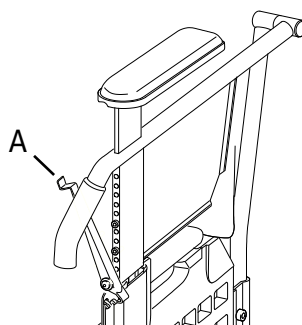

3 mm

Positioneringsband



De positioneringsband bestaat uit twee delen, is in lengte verstelbaar en is voorzien van een klikvergrendeling. Deze wordt gemonteerd in de gaten vlak voor de rugleuningverbinding, boven de wielbevestigingen.

Bij de band worden montage-instructies geleverd. De band mag uitsluitend worden gebruikt voor positionering in de rolstoel. Hij mag niet worden




gebruikt als vervanging van de veiligheidsgordel in een voertuig.



Zorg dat de gebruiker niet op de zitting naar voren schuift, omdat de band in dat geval de bloedsomloop naar de heupen/taile kan belemmeren.

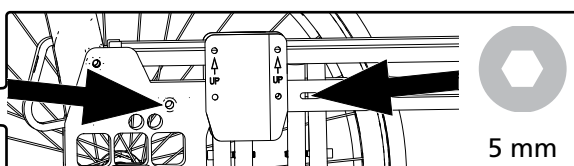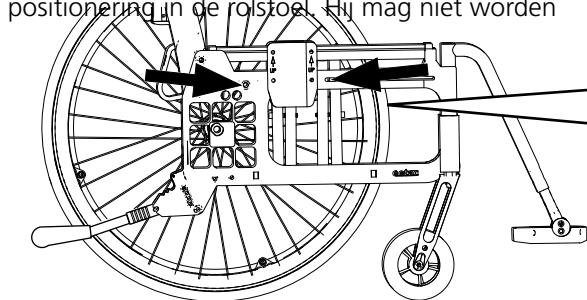

5 mm

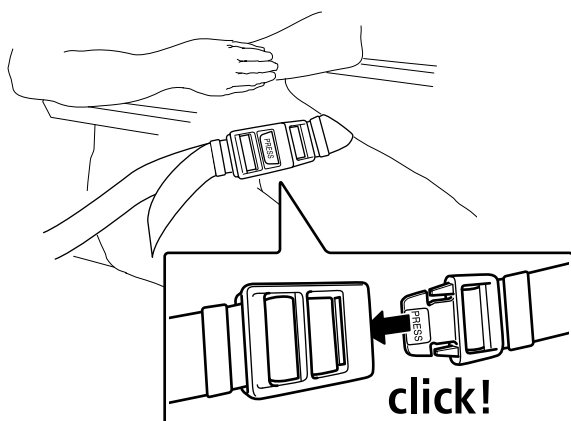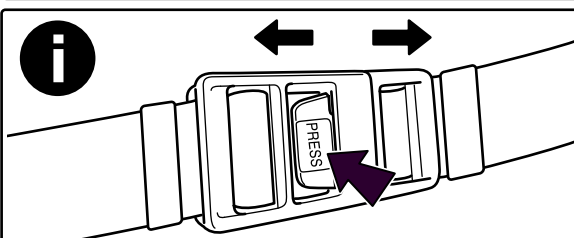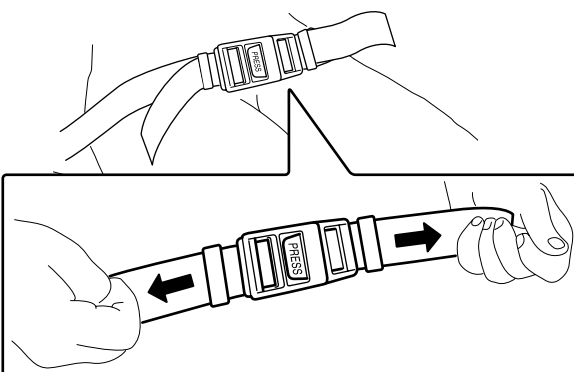

10. Accessoires – afstellen, hantering

Cross 5
Cross 5 XL

Hoofdsteun


De hoofdsteun wordt op de duwbeugel gemonteerd (accessoire) of op een aparte hoofdsteunhouder. De hoofdsteun is in hoogte, diepte en hoek verstelbaar en is afneembaar.



Zorg dat de gebruiker goed en stevig zit voordat de hoofdsteun wordt afgesteld.



Het zwaartepunt kan veranderen wanneer de gebruiker tegen de hoofdsteun leunt.

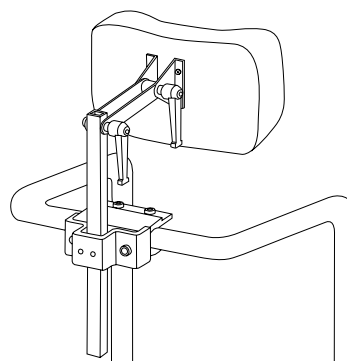


Hoofdsteunhouder

De hoofdsteunhouder is bedoeld om er de hoofdsteun op te monteren.



Gebruik de hoofdsteunhouder niet om de rolstoel op te tillen. Risico op letsel.


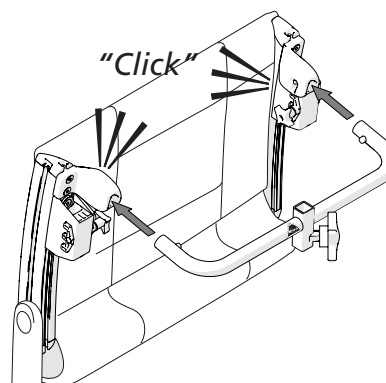


Rugfixatiebeugel

De dwarsstang wordt toegepast als de rugschaal versterkt moet worden.



Til de rolstoel niet op aan de dwarsstang. Risico op letsel.

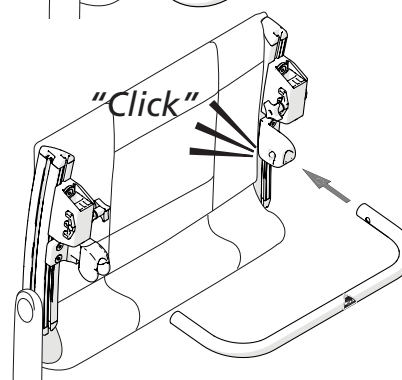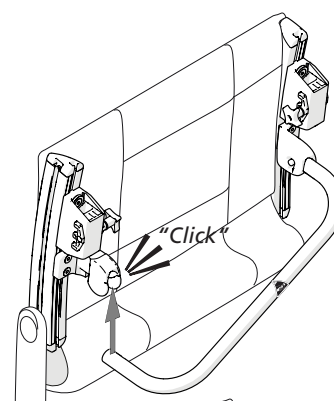


10. Accessoires – afstellen, hantering

Attachment for chest harness

Cross 5



Cross 5 XL

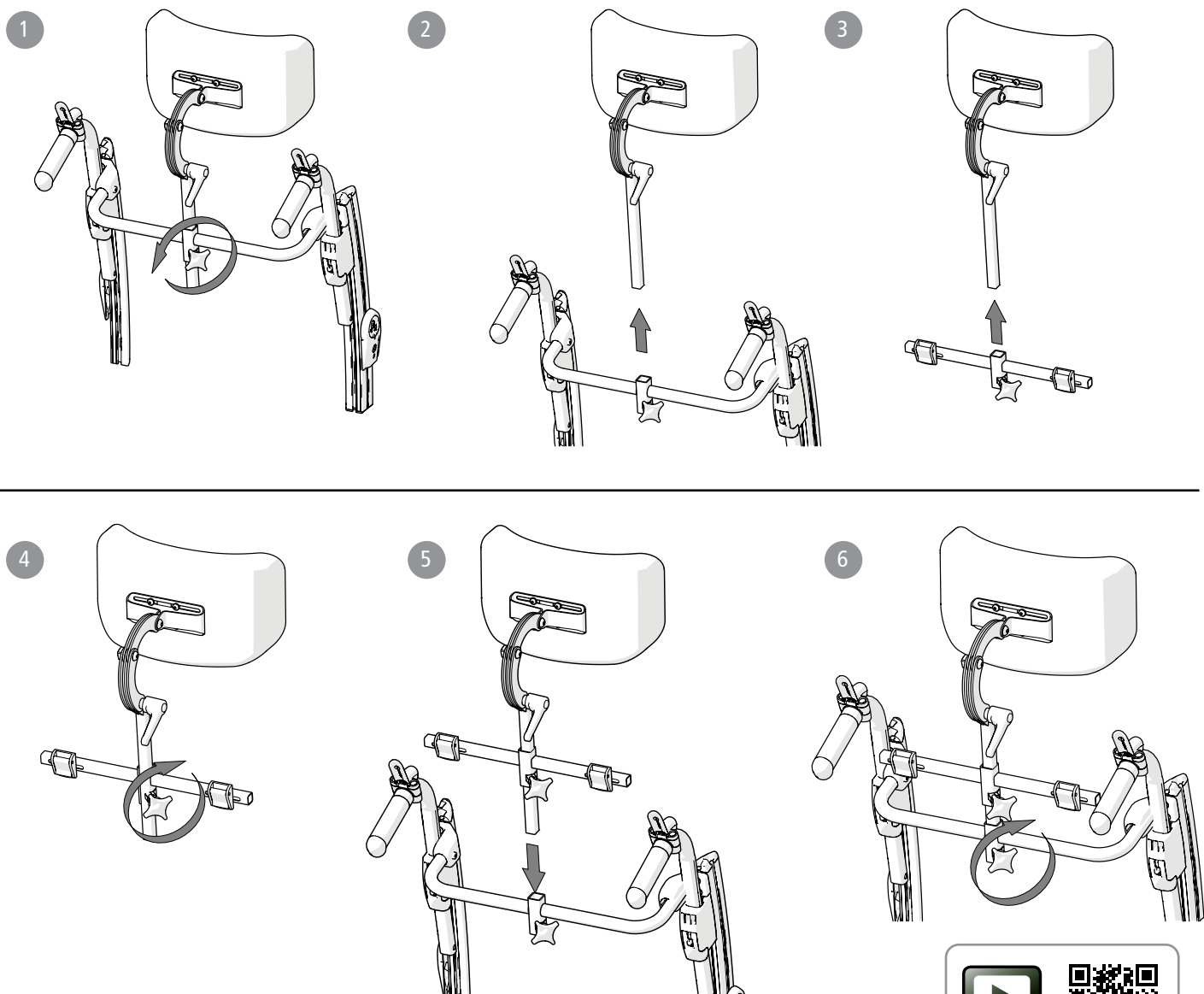

Attachment points for chest harness



De voorste rompsteun mag alleen worden gebruikt in combinatie met een positioneringsgordel.

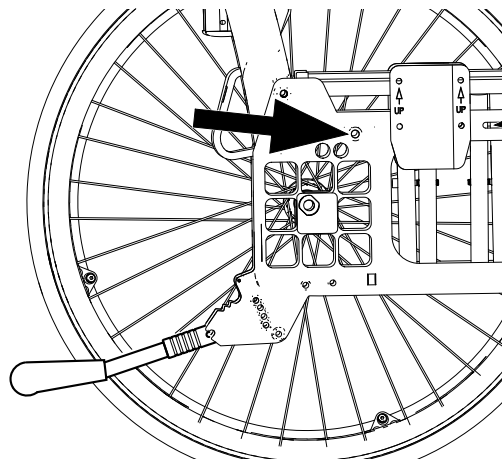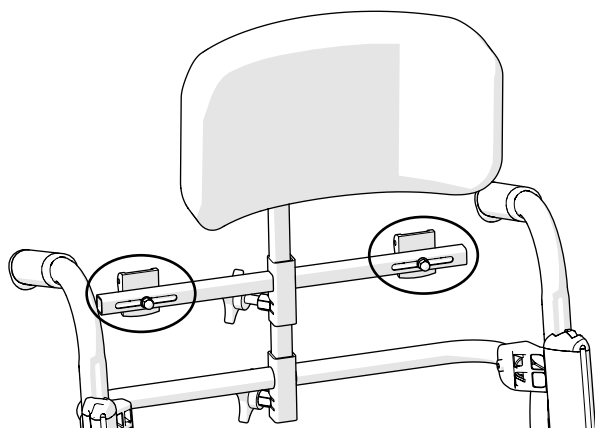

11. Technische gegevens

	Type rolstoel	Art. nr. Cross 5	Totale breedte	Zitdiepte vanaf de rugleuningbuis**	Gewicht met achterwiel***	Max gewicht gebruiker
Cross 5	35 cm kort	13123001	56,0 cm	36-42 cm	15,0 kg	135 kg
	35 cm lang	13123002	56,0	42-48	15,2 kg	135 kg
	37,5 cm kort	13123003	58,5	36-42	15,1 kg	135 kg
	37,5 cm lang	13123004	58,5	42-48	15,3 kg	135 kg
	40 cm kort	13123005	61,0	36-42	15,2 kg	135 kg
	40 cm lang	13123006	61,0	42-48	15,4 kg	135 kg
	42,5 cm kort	13123007	63,5	36-42	15,3 kg	135 kg
	42,5 cm lang	13123008	63,5	42-48	15,5 kg	135 kg
	45 cm kort	13123009	66,0	36-42	15,5 kg	135 kg
	45 cm lang	13123010	66,0	42-48	15,7 kg	135 kg
	47,5 cm kort	13123011	68,5	36-42	15,6 kg	135 kg
	47,5 cm lang	13123012	68,5	42-48	15,8 kg	135 kg
	50 cm kort	13123013	71,0	36-42	15,7 kg	135 kg
	50 cm lang	13123014	71,0	42-48	15,9 kg	135 kg
Cross 5 XL	47,5 cm kort	13123111	68,5 cm	36-42 cm	15,9 kg	160 kg
	47,5 cm lang	13123112	68,5	42-48	16,1 kg	160 kg
	50 cm kort	13123113	71,0	36-42	16,0 kg	160 kg
	50 cm lang	13123114	71,0	42-48	16,2 kg	160 kg
	52,5 cm kort	13123115	73,5	36-42	16,1 kg	160 kg
	52,5 cm lang	13123116	73,5	42-48	16,3 kg	160 kg
	55 cm kort	13123117	76,0	36-42	16,3 kg	160 kg
	55 cm lang	13123118	76,0	42-48	16,5 kg	160 kg
	57,5 cm kort	13123119	78,5	36-42	16,4 kg	160 kg
	57,5 cm lang	13123120	78,5	42-48	16,6 kg	160 kg
	60 cm kort	13123121	81,0	36-42	16,5 kg	160 kg
	60 cm lang	13123122	81,0	42-48	16,7 kg	160 kg

Zithoogte achter	Zithoogte voor	Hoogte rugleuning*	Transportbreedte	Totale hoogte	Totale lengte	Lengte beensteun	Lengte indien ingeklapt	Instelhoek beensteun	Maat achterwiel
34-53 cm	34-56,5 cm	32-45 cm	32 cm	74-128 cm	102-122 cm	26-64 cm	76-92 cm	108°-114°	46,5-48,5 cm

* Geldt voor crossrug 3A. Voor crossrug 3A hoog geldt 38-51 cm.







** Met triangulaire rugleuning + max. 7 cm

*** Met massieve banden en roestvrijstalen grijphoepels, +1,3 kg

Cross 5	De vermelde gewichten en afmetingen gelden voor een rolstoel met 24" achterwielen voorzien van naven met snelkoppeling, hogedrukband, aluminium grijphoepels, beensteunen, voetsteunen, remmen, armsteunen, 6 1/2" zwenkwielen met middellange vorken. De aangegeven maten en gewichten kunnen $\pm 2\%$ afwijken.
Cross 5 XL	De vermelde gewichten en afmetingen gelden voor een rolstoel met 24" achterwielen voorzien van naven met snelkoppeling, massieve banden, roestvrij stalen grijphoepels, rugfixatiebeugel, beensteunen, voetsteunen, hakband, remmen, armsteunbevestiging, 6 1/2" zwenkwielen met middellange vorken. De aangegeven maten en gewichten kunnen $\pm 2\%$ afwijken.

Max. kantel- hoek zijdelings	Max. kantel- hoek omlaag	Max. kantel- hoek rem	Band							
				Hoge druk 22"	Hoge druk 24"	Massief 22"	Massief 24"	Massief (mas- sieve binnen- band) 22"	Massief (mas- sieve binnen- band) 24"	Hoge druk 24" (carbon wiel)
>20°	>20°	7°	PSI/Bar	110/7.5	110/7.5	-	-	-	-	110/7.6
				550 mm	590 mm	550 mm	600 mm	550 mm	590 mm	592
				25 mm	25 mm	32 mm	32 mm	25 mm	25 mm	23 mm

11. Technische gegevens

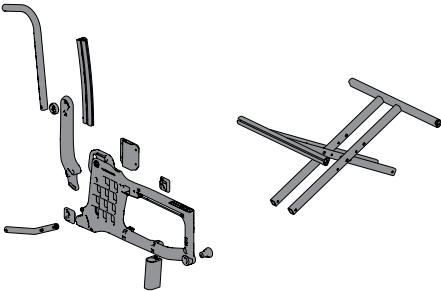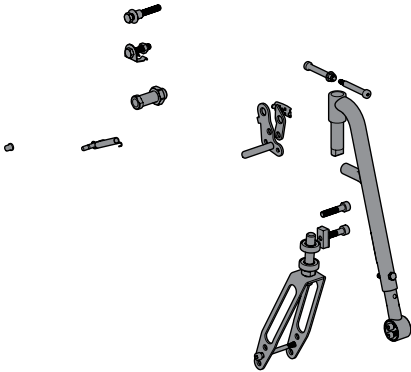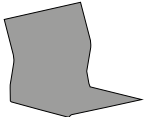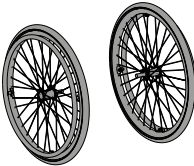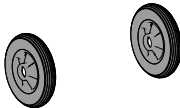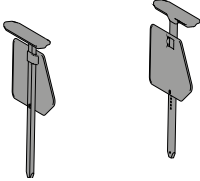		
		
ALU	Fe*	PES
		
Fe/CF/ALU	PP/TPR	ALU/PA/PE/PU

Wanneer het hulpmiddel het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kan het door Etac worden gereviseerd voor een nieuwe levenscyclus. Ga voor meer informatie naar www.etac.com of neem contact op met uw plaatselijke dealer.

*Voorvork is verkrijgbaar in zowel stalen als aluminium uitvoering. Zie mogelijkheden van de stoel

12. Service en onderhoud

Bekleding

De bekleding is gemaakt van tweelagig polyester. De bekleding van de zitting is in de lengte op het zitframe bevestigd en kan eenvoudig van het frame worden verwijderd door de einddoppen los te draaien.

De bekleding van de rugleuning kan worden verwijderd

door de schroeven van de bevestigingen van de duw-handvatten los te draaien en de bekleding vervolgens omhoog te trekken.

Was de bekleding van de zitting en rugleuning volgens de wasinstructies op het product.

Achterwiel/zwenkwiel, voorvorkhouder

Band/binnenband:

Controleer de bandenspanning (zie zijkant van band) minstens één keer per maand en controleer daarbij ook het loopvlak.

Spaken:

Als een of meer spaken loszitten, kan het wiel gaan wiebelen. Ga naar een fietsenwinkel of een centrum voor technische hulpmiddelen als de spaken moeten worden afgesteld

Wielassen:

Verwijder waar nodig haren en vuil van de wielassen.

Kogellagers: Onderhoudsvrij.

Grijphoepel: Moet vrij zijn van krassen

Voorvorkhouders:

Voor de beste gebruiksomstandigheden moeten de houders onder een hoek van 90° worden gemonteerd. Controleer ook of de voorvorkhouders goed zijn vastgedraaid. Zie het deel '*De voorvork monteren*'.

Remmen

Het remeffect hangt af van de luchtdruk in de banden. Vastgekoekt vuil kan een negatief effect

op het remmechanisme hebben. Controleer de werking van de remmen één keer per maand. Zie het punt '*Rem, afstellen*' als u afstellingen moet uitvoeren.

Het frame reinigen

Het is belangrijk dat de rolstoel schoon wordt gehouden, zowel voor uw eigen comfort als voor de levensduur van de rolstoel. De rolstoel is voorzien van afvoeropeningen, die ervoor zorgen dat de rolstoel eenvoudig kan worden gereinigd en gedroogd.

Reinig het frame met een niet-schurend reinigingsmiddel met een pH-waarde van 5 tot 9 of met een oplossing van 70% ontsmettingsmiddel. Daarna afspoelen en drogen.

Bijwerkverf

Voor kleine krasjes en lakbeschadigingen is lak verkrijgbaar in alle framekleuren van de Cross rolstoelen.

Diversen

Als u een defect aan uw rolstoel constateert, moet u contact opnemen met uw leverancier of centrum voor technische hulpmiddelen.

Als uw rolstoel moet worden gereviseerd of gerepareerd, dan mogen er alleen originele onderdelen van Etac of onderdelen van dezelfde kwaliteit, zoals gespecificeerd in de Cross-schema's, worden gebruikt. Etac aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt

door het gebruik van niet-originele onderdelen. Smeer bewegende delen/koppelingen waar nodig met fietsolie of vergelijkbaar.

13. Testen en garanties

CE-markering, tests:

Dit product voldoet aan de vereisten van de Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Het product is getest en voldoet aan de eisen van EN 12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen.

Er bestaan ook combinatieovereenkomsten – zie www.etac.com.

De rolstoelen van Etac zijn getest volgens ISO 7176-19. Ze hebben botsproeven ondergaan bij het Technical Research Institute in Zweden. Deze tests zijn uitgevoerd met bevestigingsvoorziening UNWIN_WWR/ATF/K/R en een driepuntsgordel 907523, Klippan Safety AB.

Levensduur:

De verwachte levensduur van het hoofdproduct is minimaal vijf jaar. Het hoofdproduct bestaat uit de zit- en rugschaal. De overige onderdelen/accessoires worden behandeld in overeenstemming met de handleiding en revisiehandleiding. De werkelijke levensduur kan variëren afhankelijk van hoe vaak en hoe intensief het product wordt gebruikt, maar bedraagt maximaal 10 jaar. Alle informatie over de levensduur van het product vindt u op www.etac.com.

Methoden voor oppervlaktebehandeling:

Gelakte oppervlakken = polyester poedercoating of ED-coating
Niet-gelakte aluminium onderdelen = geanodiseerde coating
Niet-gelakte stalen oppervlakken = gegalvaniseerd

Garantie:

5 jaar garantie tegen materiaal- en fabricagefouten. Ga naar www.etac.com voor de voorwaarden.

Opslag:

Bewaar het product binnenshuis op een droge plaats bij een temperatuur boven 5 °C. Als het product langere tijd (langer dan vier maanden) is opgeslagen, moet de werking ervan vóór gebruik worden gecontroleerd door een deskundige.

Speciale aanpassingen:

omvatten alles wat buiten de instructies en instellingen in deze handleiding valt. Rolstoelen die speciaal door klanten zijn aangepast, komen niet in aanmerking voor de CE-markering van Etac. De garantie van Etac is dan niet meer van toepassing. Als u twijfelt over de geldigheid van bepaalde afstellingen, neem dan contact op met Etac voor advies.

Als een rolstoel wordt gecombineerd met een ander product dat niet door Etac is geproduceerd, behouden geen van de producten hun CE-markering, tenzij er combinatieovereenkomsten gelden. Neem contact op met Etac voor actuele informatie.



Moet worden gerecycled volgens de nationale voorschriften.



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222



Promefa AG

Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach, CH
+41 44 872 97 79



Etac Supply Center AB

Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp



+46 371 58 73 00



info@etac.com



www.etac.com



75195

etac[®]

Creating Possibilities